


Flex:tracker

Flex:tracker steg-för-steg guide


Detta dokument utgör huvuddragen för att använda Flex:tracker i programvaran Unitron TrueFit™

1. Tilldela hörapparater


1. Anslut dina hörapparater som vanligt i programvaran Unitron TrueFit.

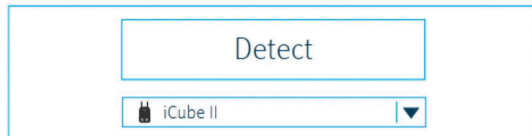


2. När programvaran Unitron TrueFit söker efter hörapparater kontrollerar programvaran om det är Flex:trial™-apparater. Du kommer att bli tillfrågad om du vill lägga till Flex:trial-apparaterna i Flex:tracker.

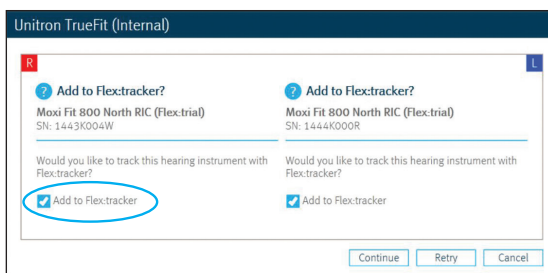


3. När sessionen är sparad, kommer du att bli tillfrågad om du vill tilldela Flex:trial-apparaterna till den aktuella brukaren.

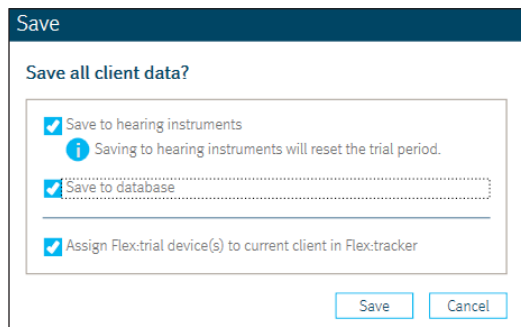


4. Programvaran Unitron TrueFit kommer att be dig välja ett återbesöksdatum om du inte valt bort det under preferenser.

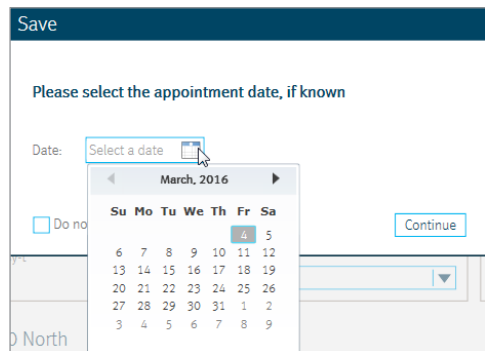

5. Logga in i Flex:tracker.

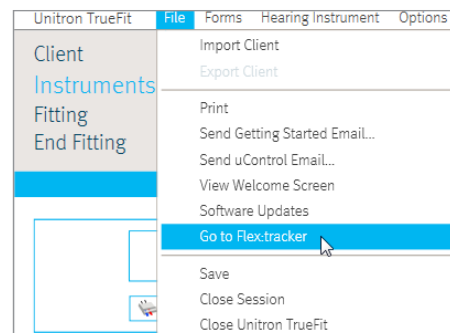

6. När Flex:trial-apparaterna är aktiverade kommer statusen att ändras till Tilldelade i statusfältet.

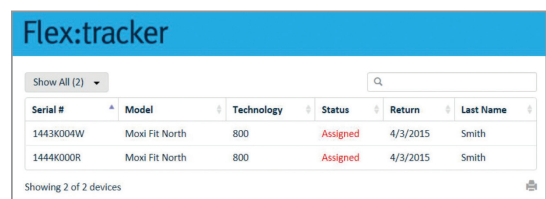

7. Information om hörapparaterna finns till höger i Statusfältet, om du vill ändra status tryck på **Redigera**-knappen.

Device Details

Return Edit

Serial #: 1443K004W
Model: Moxi Fit North
Technology Level: 800
Status: Assigned

Key Dates
Assignment date: 3/6/2015
Trial end date: 4/3/2015
Appointment date: -

Client Information
Patient ID: 5
First Name: John
Last Name: Smith
Phone: 333-333-3333

Comments

8. I rutan **Tilldelningsinformation** kan du ändra information om apparatens status och lägga till egna kommentarer.

Edit Assignment Details

Device Information
Serial #: 1443K004W
Model: Moxi Fit North
Technology Level: 800
Status: Assigned

Client Information
Patient ID: 5
First Name: John
Last Name: Smith
Phone: 333-333-3333

Key Dates
Assignment date: 3/6/2015
Trial end date: 4/3/2015
Appointment date:

Save Cancel

2. Returnera Flex:trial-apparater

1. Logga in i Flex:tracker. Du kan nå Flex:tracker webbsidan genom att gå via verktygsfältet.

Unitron TrueFit File Forms Hearing Instrument Options

Client Instruments Fitting End Fitting

Import Client
Export Client
Print
Send Getting Started Email...
Send uControl Email...
View Welcome Screen
Software Updates
Go to Flex:tracker
Save
Close Session

2. Titta i Statusfältet och välj den apparat som skall lämnas tillbaka. Du kan också använda sökfältet och finna brukaren via efternamnet.

Serial #	Model	Technology	Status	Return	Last Name
1443K004W	Moxi Fit North	800	Assigned	4/3/2015	Smith
1444K000R	Moxi Fit North	800	Assigned	4/3/2015	Smith

Showing 2 of 2 devices

3. Välj Flex:Trial-apparat som skall lämnas tillbaka och tryck på **Retur**-knappen.

Device Details

Return Edit

Serial #: 1443K004W
Model: Moxi Fit North
Technology Level: 800
Status: Assigned

4. Bekräfta returen.

Device Return Confirmation

Are you sure you want to return this device?

Model: Moxi Fit North 800
Serial #: 1443K004W

Return Cancel

3. Reservera Flex:trial-apparater med Flex:tracker

1. För att reservera en Flex:trial-apparat med Flex:tracker. Först, välj en tillgänglig Flex:trial-apparat.

Serial #	Model	Technology	Status	Return	Last Name
1443K004W	Moxi Fit North	800	Available	-	-
1444K000R	Moxi Fit North	800	Available	-	-

Showing 2 of 2 devices

2. Tryck in **Reservera**-knappen för den apparaten.

Device Details

Reserve Delete

Serial #: 1444K000R
Model: Moxi Fit North
Technology Level: 800
Status: Available

3. Fyll i information angående reservationen.

Reserve Device

Device Information
Serial #: 1443K004W
Model: Moxi Fit North
Technology Level: 800

Client Information
First Name: Susan
Last Name: Brown
Phone: 222-222-222


Reservation Details
Reservation Date: 3/6/2015
Clinician Name: Mike Jones

comments here

Save Cancel


4. Avbryt reservation med Flex:tracker

1. För att avbryta en reservation för en Flex:trial-apparat med Flex:tracker, välj först den reserverade apparaten.

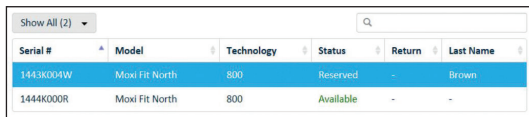

Serial #	Model	Technology	Status	Return	Last Name
1443K004W	Moxi Fit North	800	Reserved	-	Brown
1444K000R	Moxi Fit North	800	Available	-	-

2. Tryck på **Avbryt Reservation** för den apparaten.

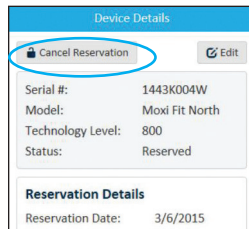

Device Details


Cancel Reservation Edit

Serial #: 1443K004W
Model: Moxi Fit North
Technology Level: 800
Status: Reserved

Reservation Details
Reservation Date: 3/6/2015

5. Så fungerar programvaran Unitron TrueFit med reserverade Flex:trial apparater

1. När man anpassar en Flex:Trial-apparat som har reserverats i Flex:Tracker, kommer Unitron TrueFit att uppmärksamma dig på att apparaten har reserverats och ge dig valmöjligheten att fortsätta eller avbryta (för att ge dig möjligheten att välja en annan apparat som inte är reserverad).

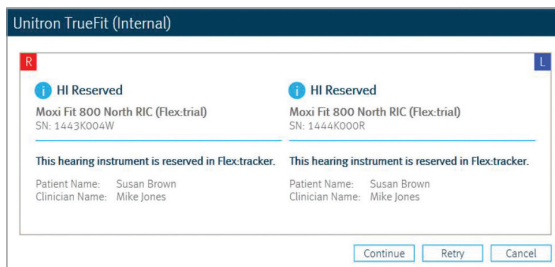

Unitron TrueFit (Internal)

HI Reserved
Moxi Fit 800 North RIC (Flex:trial)
SN: 1443K004W
This hearing instrument is reserved in Flex:tracker.
Patient Name: Susan Brown
Clinician Name: Mike Jones

HI Reserved
Moxi Fit 800 North RIC (Flex:trial)
SN: 1444K000R
This hearing instrument is reserved in Flex:tracker.
Patient Name: Susan Brown
Clinician Name: Mike Jones

Continue Retry Cancel

6. Ta bort en Flex:trial-apparat från Flex:tracker

1. För att ta bort en Flex:trial-apparat från Flex:tracker, välj den apparat som skall tas bort och tryck på **Ta Bort**.




Device Details

Reserve **Delete**

Serial #: 1443K004W
Model: Moxi Fit North
Technology Level: 800
Status: Available

2. Bekräfta borttagning.

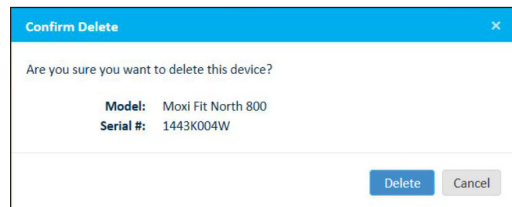

Confirm Delete

Are you sure you want to delete this device?

Model: Moxi Fit North 800
Serial #: 1443K004W

Delete Cancel

Mer information om Flex:tracker eller programvaran Unitron TrueFit finner du under Hjälpmenyn i Unitron TrueFit.