

# Flex:tracker

## Flex:tracker steg-för-steg guide


Detta dokument utgör huvuddragen för att använda Flex:tracker i programvaran Unitron TrueFit™

### 1. Tilldela hörapparater

1. Anslut dina hörapparater som vanligt i programvaran Unitron TrueFit.




2. När programvaran Unitron TrueFit söker efter hörapparater kontrollerar programvaran om det är Flex:trial™-apparater. Du kommer att bli tillfrågad om du vill lägga till Flex:trial-apparaterna i Flex:tracker.

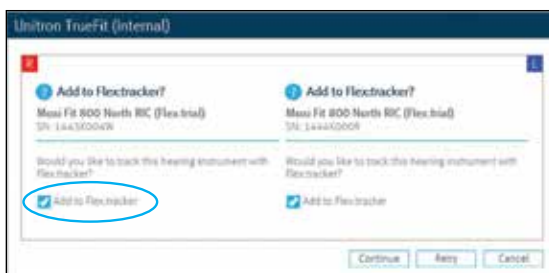

3. När sessionen är sparad, kommer du att bli tillfrågad om du vill tilldela Flex:trial-apparaterna till den aktuella brukaren.



4. Programvaran Unitron TrueFit kommer att be dig välja ett återbesöksdatum om du inte valt bort det under preferenser.

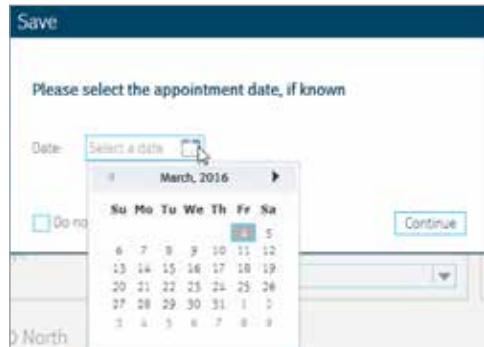

5. Logga in i Flex:tracker.



För att logga in i Flex:tracker utan TrueFit:

Öppna en browser

Ange <https://www.unitronflextracker.com/>

Logga in med samma uppgifter som används i TrueFit. Första gången du besöker sidan för Flex:tracker kommer du bli ombedd att ange en region.

6. När Flex:trial-apparaterna är aktiverade kommer statusen att ändras till **Tilldelade** i statusfältet.

| Serial #  | Model          | Technology | Status   | Return   | Last Name |
|-----------|----------------|------------|----------|----------|-----------|
| 1443K004W | Modi Fit North | 800        | Assigned | 4/3/2015 | Smith     |
| 1443K000R | Modi Fit North | 800        | Assigned | 4/3/2015 | Smith     |

Showing 2 of 2 devices

7. Information om hörapparaterna finns till höger i Statusfältet, om du vill ändra status tryck på **Redigera**-knappen.

**Device Details**

**Return** **Edit**

Serial #: 1443K004W  
 Model: Modi Fit North  
 Technology Level: 800  
 Status: Assigned

**Key Dates**  
 Assignment date: 3/9/2015  
 Trial end date: 4/3/2015  
 Appointment date: --

**Client Information**  
 Patient ID: 5  
 First Name: John  
 Last Name: Smith  
 Phone: 333-333-3333

**Comments**

8. I rutan **Tilldelningsinformation** kan du ändra information om apparatens status och lägga till egna kommentarer.

**Edit Assignment Details**

**Device Information**  
 Serial #: 1443K004W  
 Model: Modi Fit North  
 Technology Level: 800  
 Status: Assigned

**Client Information**  
 Patient ID: 5  
 First Name: John  
 Last Name: Smith  
 Phone: 333-333-3333

**Key Dates**  
 Assignment date: 3/9/2015  
 Trial end date: 4/3/2015  
 Appointment date: --

**Comments**

**Save** **Cancel**

## 2. Returnera Flex:trial-apparater

1. Logga in i Flex:tracker. Du kan nå Flex:tracker webbsidan genom att gå via verktygsfältet.

Unitron TrueFit **File** Forms Hearing Instrument Options

Client  
 Instruments  
 Fitting  
 End Fitting

Import Client  
 Export Client  
 Print  
 Send Getting Started Email...  
 Send uControl Email...  
 View Welcome Screen  
 Software Updates  
**Go to Flex:tracker**  
 Save  
 Close Session

2. Titta i Statusfältet och välj den apparat som skall lämnas tillbaka. Du kan också använda sökfältet och finna brukaren via efternamnet.

| Serial #  | Model          | Technology | Status   | Return   | Last Name |
|-----------|----------------|------------|----------|----------|-----------|
| 1443K004W | Modi Fit North | 800        | Assigned | 4/3/2015 | Smith     |
| 1443K000R | Modi Fit North | 800        | Assigned | 4/3/2015 | Smith     |

Showing 2 of 2 devices

3. Välj Flex:Trial-apparat som skall lämnas tillbaka och tryck på **Retur**-knappen.

**Device Details**

**Return** **Edit**

Serial #: 1443K004W  
 Model: Modi Fit North  
 Technology Level: 800  
 Status: Assigned

4. Bekräfta returen.

**Device Return Confirmation**

Are you sure you want to return this device?

Model: Modi Fit North 800  
 Serial #: 1443K004W

**Return** **Cancel**

## 3. Reservera Flex:trial-apparater med Flex:tracker

1. För att reservera en Flex:trial-apparat med Flex:tracker. Först, välj en tillgänglig Flex:trial-apparat.

| Serial #  | Model          | Technology | Status    | Return | Last Name |
|-----------|----------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 1443K004W | Modi Fit North | 800        | Available | --     | --        |
| 1443K000R | Modi Fit North | 800        | Available | --     | --        |

Showing 2 of 2 devices

2. Tryck in **Reservera**-knappen för den apparaten.

**Device Details**

**Reserve** **Delete**

Serial #: 1443K000R  
 Model: Modi Fit North  
 Technology Level: 800  
 Status: Available

3. Fyll i information angående reservationen.

**Reserve Device**

**Device Information**  
 Serial #: 1443K004W  
 Model: Modi Fit North  
 Technology Level: 800

**Client Information**  
 First Name: Susan  
 Last Name: Brown  
 Phone: 333-333-4323

**Reservation Details**  
 Reservation Date: 3/9/2015  
 Client Name: John Jones

**Comments**

**Save** **Cancel**


## 4. Avbryt reservation med Flex:tracker

1. För att avbryta en reservation för en Flex:trial-apparat med Flex:tracker, välj först den reserverade apparaten.




| Serial #  | Model          | Technology | Status    | Return | Last Name |
|-----------|----------------|------------|-----------|--------|-----------|
| 1443K004W | Moxi Fit North | 800        | Reserved  | —      | Brink     |
| 1444K000R | Moxi Fit North | 800        | Available | —      | —         |

2. Tryck på [Avbryt Reservation](#) för den apparaten.

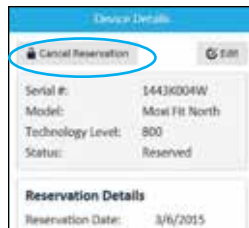

## 5. Så fungerar programvaran Unitron TrueFit med reserverade Flex:trial apparater

1. När man anpassar en Flex:Trial-apparat som har reserverats i Flex:Tracker, kommer Unitron TrueFit att uppmärksamma dig på att apparaten har reserverats och ge dig valmöjligheten att fortsätta eller avbryta (för att ge dig möjligheten att välja en annan apparat som inte är reserverad).

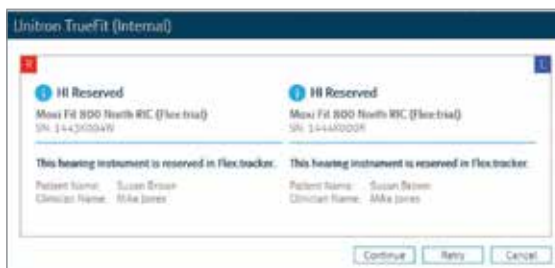


## 6. Ta bort en Flex:trial-apparat från Flex:tracker

1. För att ta bort en Flex:trial-apparat från Flex:tracker, välj den apparat som skall tas bort och tryck på [Ta Bort](#).



2. Bekräfta borttagning.

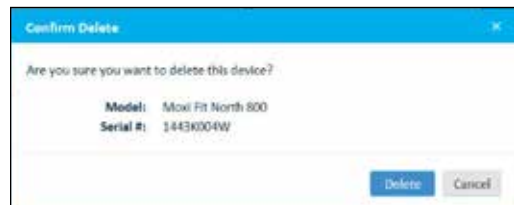

Mer information om Flex:tracker eller programvaran Unitron TrueFit finner du under Hjälpmenyn i Unitron TrueFit.