


Unitron Remote Plus app

Uživatelská příručka – Aplikace Remote Plus 5.3



Přehled o aplikaci	3	Karta Životní styl	10
Začínáme	3	Poslechová prostředí.....	10
Informace o kompatibilitě	3	Průměrná doba nošení.....	10
Přihlášení	4	Počítadlo kroků.....	10
Potvrzení prohlášení o ochraně osobních		Aktivní minuty.....	10
údajů v aplikaci.....	4	Karta Zařízení	11
Párování se sluchadlem/sluchadly.....	4	Ovládání poklepáním.....	11
Aktivace služby přehledů	4	Automatické spuštění	12
Výběr režimu aplikace.....	4	Adaptivní Bluetooth®	12
Karta Domů – Pokročilý režim	5	Vzdálené nastavení.....	12
Úprava hlasitosti sluchadla.....	5	Najít moje zařízení	13
Rozdělení/spojení hlasitosti	5	Správa připojení.....	13
Nastavení komfortu a zřetelnosti	5	Moje zařízení	13
Změna programů	5	Karta Podpora	14
Volitelné programy v aplikaci	6	Karta Více	15
Nastavení programu	7	Režim aplikace.....	15
Maskér tinitu	7	Nastavení funkcí Insights.....	15
Ekvalizace.....	7	Centrum pro oznámení.....	15
Nastavení zvuku.....	7	Vzhled.....	15
Nastavení funkce Ekvalizér.....	7	Analytické nástroje.....	15
Přizpůsobení programu	7	Režim Demo.....	15
Karta Domů – Klasický režim	8	Právní informace.....	15
Úprava hlasitosti sluchadla.....	8	Informace o shodě s platnými předpisy	16
Rozdělení ovládání hlasitosti	8	Prohlášení o shodě.....	16
Nastavení komfortu a zřetelnosti	8	Vysvětlivky k použitým symbolům	16
Změna programů	8	Důležité bezpečnostní informace.....	17
Hodnocení	9		

Přehled o aplikaci

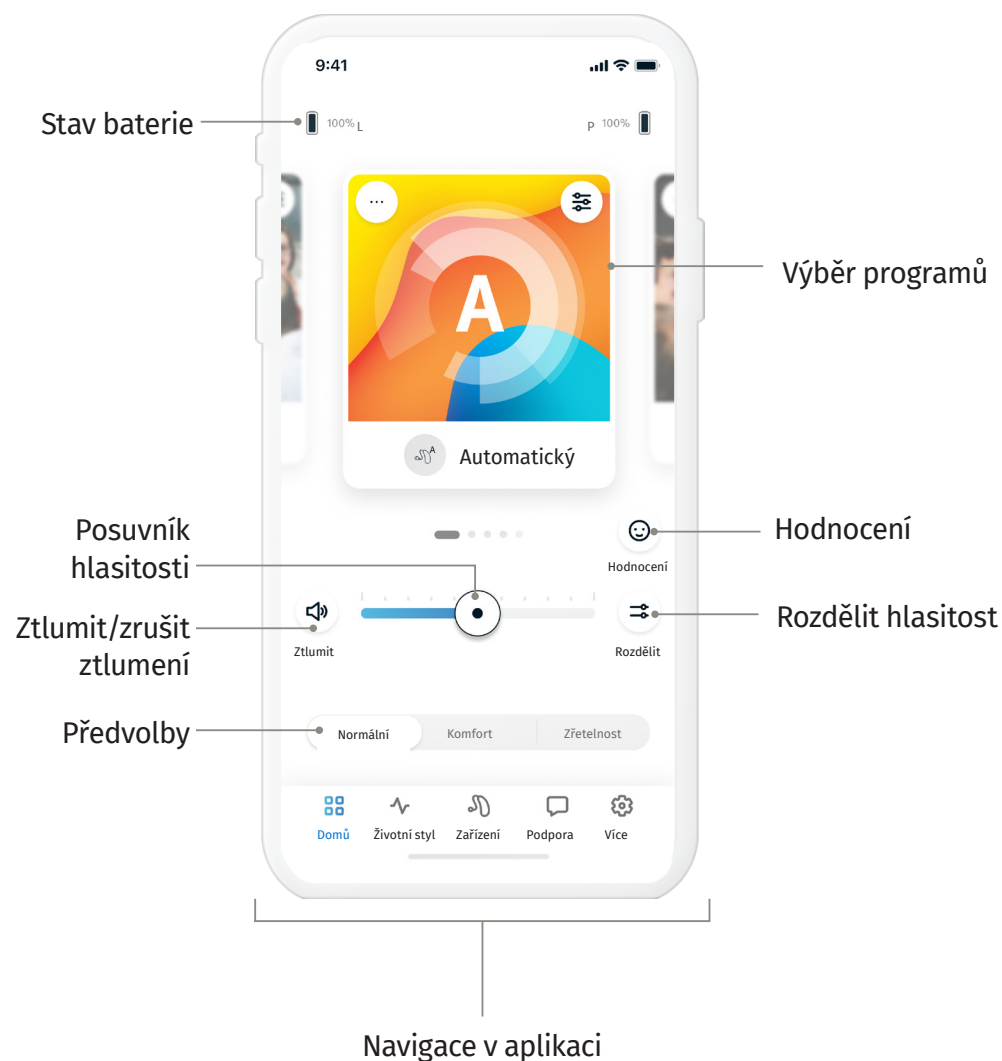

Začínáme

Aplikace Unitron Remote Plus byla vytvořena společností Sonova, jednou z největších společností na světě, která se věnuje řešením ztráty sluchu. Přečtěte si důkladně pokyny pro uživatele, abyste byli schopni využít všechny možnosti, které aplikace nabízí.

- ❗ Tato uživatelská příručka popisuje funkce aplikace a způsob, jakým je může uživatel ovládat. Než začnete aplikaci používat, přečtěte si tuto uživatelskou příručku.
- ❗ Pro používání aplikace není třeba žádné další zaškolení.


Tato uživatelská příručka je určena pro použití s aplikací Unitron Remote Plus verze 5.3 a pozdější dílčí verze aplikace. Potřebujete-li uživatelskou příručku pro předchozí verze aplikace, obraťte se prosím na svého místního obchodního zástupce nebo se podívejte na internetovou stránku www.unitron.com.

Informace o kompatibilitě

- ⚠ Aplikace Unitron Remote Plus je určena pro použití se sluchadly Unitron s funkcí bezdrátové konektivity Bluetooth®. Aplikaci Unitron Remote Plus lze používat na zařízeních vybavených funkcí Bluetooth® Low-Energy (BT-LE), která jsou kompatibilní se systémem iOS verze 15 nebo novější. Aplikaci Unitron Remote Plus lze používat na zařízeních s operačním systémem Android s certifikací Google Mobile Services (GMS) s podporou technologie Bluetooth® 4.2 a operačním systémem Android verze 8.0 nebo novější.
- ❗ Některé telefony jsou vybaveny zvuky dotyku nebo tóny klávesnice, které by mohly být streamovány do sluchadla/sluchadel. Aby k tomu nedošlo, přejděte do nastavení telefonu, vyberte položku pro nastavení zvuků a zkontrolujte, že všechny zvuky dotyku a tóny klávesnice byly deaktivovány.
- ❗ Funkce dostupné v aplikaci Unitron Remote Plus se mohou lišit v závislosti na připojených sluchadlech. Ne všechny funkce jsou dostupné pro všechna sluchadla.

Značka slova a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými společností Bluetooth® SIG, Inc.

Apple, logo Apple, iPhone a iOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je ochranná známka služeb Apple Inc. Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

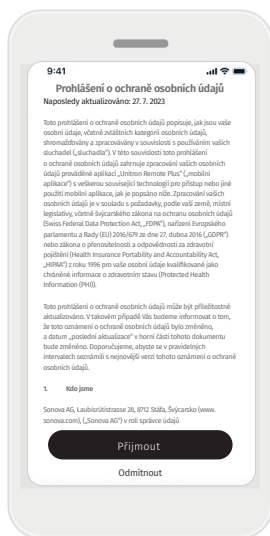

Potvrzení Prohlášení o ochraně osobních údajů v aplikaci


Abyste mohli aplikaci Unitron Remote Plus používat, musíte souhlasit s Prohlášením o ochraně osobních údajů a analýzou anonymizovaných dat o používání získaných z aplikace.



Spárování se sluchadlem/ sluchadly


Detekce vašeho sluchadla / vašich sluchadel. Pokud vaše sluchadlo má / vaše sluchadla mají dvířka příhrádky na baterii, restartujte sluchadla otevřením a zavřením dvířek příhrádky na baterii. Pokud vaše sluchadlo nemá / sluchadla nemají dvířka příhrádky na baterii, nejprve každé sluchadlo vypněte stisknutím spodní části tlačítka, dokud se barva kontrolky LED nezmění na červenou (4 sekundy). Poté každé sluchadlo zapněte stisknutím téhož tlačítka, dokud se barva kontrolky LED nezmění na zelenou (2 sekundy).

Zvolte „Zobrazit režim Demo“ pro vyzkoušení aplikace bez připojení k vašim sluchadlům. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto režimu není k dispozici žádná funkce dálkového ovládní.

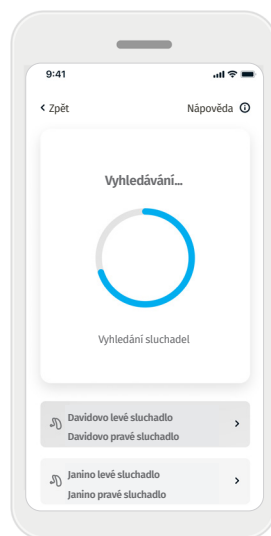


Vyberte vaše sluchadlo/ sluchadla

Pokud aplikace detekuje více než jednu sadu zařízení, stiskněte tlačítko na svém sluchadle a příslušné zařízení bude v aplikaci zvýrazněno.

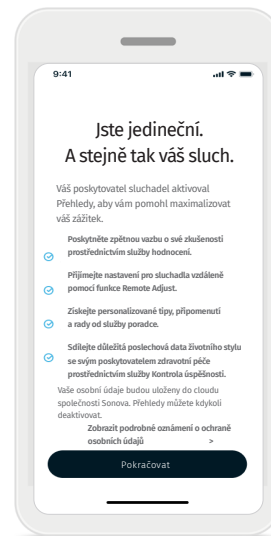


Aktivace služby Přehledy

Službu Přehledy povoluje váš poskytovatel sluchadel a umožňuje používat službu Přehledy, včetně služeb Vzdálené nastavení a Poradce. Doporučuje se povolit oznámení a přístup k určování polohy. Tyto funkce lze kdykoli povolit nebo zakázat na kartě **Více** v části nastavení služby Přehledy.

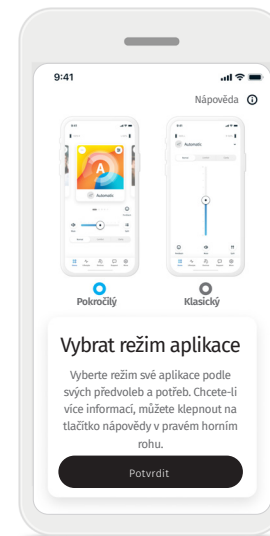


Výběr režimu aplikace


Aplikace nabízí dva režimy pro obrazovku Domů: Pokročilý režim a Klasický režim. Pokročilý režim je ideální pro ty, kteří chtějí získat přístup k pokročilým funkcím a možnostem úpravy. Klasický režim je ideální pro ty, kteří chtějí získat přístup k základním funkcím a možnostem. Tento režim se doporučuje pro ty, kteří preferují jednodušší zážitek. Tyto režimy můžete v aplikaci kdykoliv změnit na kartě **Více** v položce Režim aplikace.

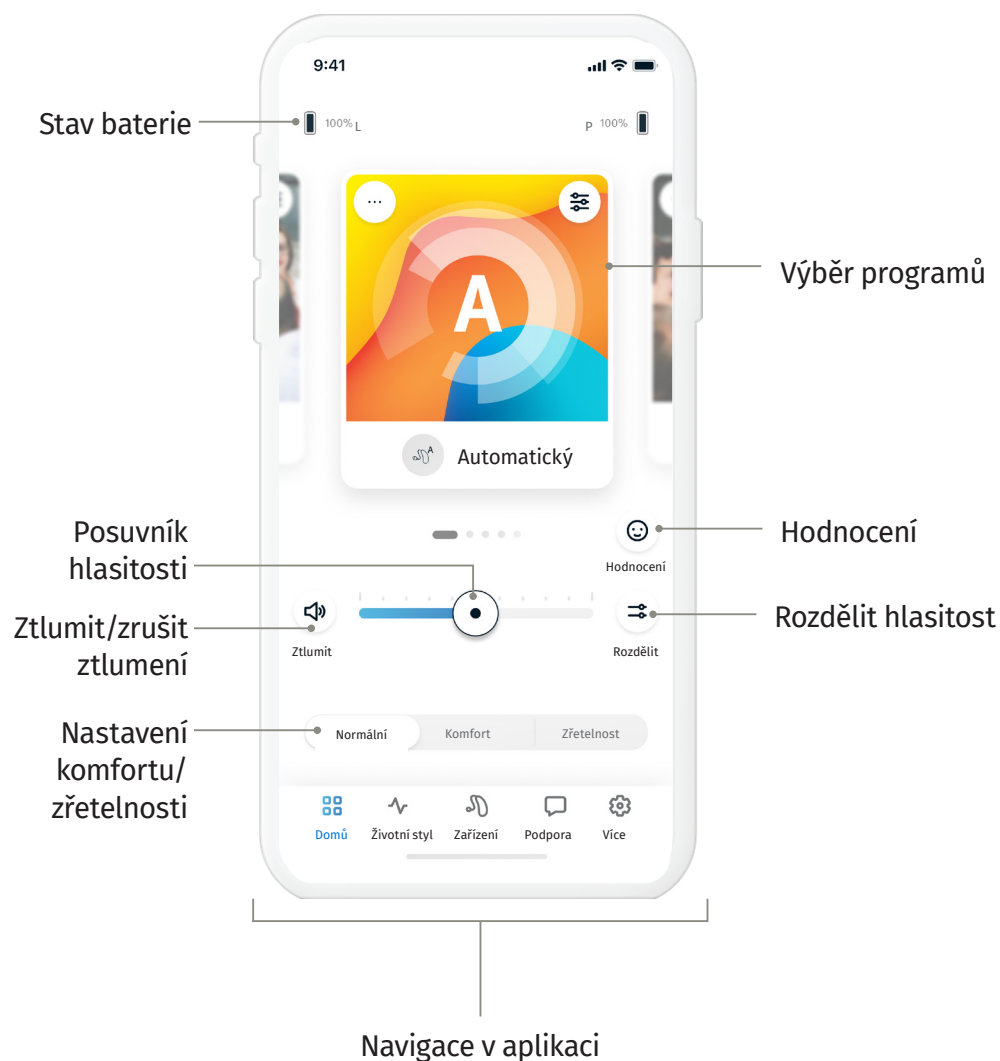

Úprava hlasitosti sluchadla

Posunutím posuvníku hlasitosti doprava nebo doleva zvýšíte nebo snížíte hlasitost sluchadla na obou uších. Stisknutím tlačítka () **Ztlumit** na levé straně posuvníku ztlumíte nebo zrušíte ztlumení sluchadel.

Rozdělit hlasitost

Stisknutím tlačítka () **Rozdělit hlasitost** budete ovládat hlasitost na každém sluchadle samostatně.

Spojit hlasitost

Stisknutím tlačítka () **Spojit hlasitost** sloučíte posuvníky hlasitosti.

Nastavení komfortu a zřetelnosti*

V automatickém programu si můžete vybrat z možností **Normální**, **Komfort** nebo **Zřetelnost**. **Zřetelnost** je k dispozici pro zvýraznění řeči, zatímco **Komfort** se používá pro zmírnění hluku za účelem celkového komfortu poslechu. Možnosti **Zřetelnost** a **Komfort** se vzájemně vylučují, a nemohou být v zapnutém stavu současně. **Normální** je výchozí nastavení.


Změna programů

Přejetím prstem doleva nebo doprava na výběru programů uvidíte všechny dostupné programy. Když přestanete přejíždět prstem, bude vybraný program (např. restaurace) použit ve vašem sluchadle / vašich sluchadlech.


*Tato funkce není podporována u všech modelů sluchadel.

Volitelné programy v aplikaci


Vyberte si ze seznamu předem definovaných programů a personalizujte svá sluchadla podle konkrétní situace. Dostupné volitelné programy v aplikaci se liší podle úrovně technologie vašich sluchadel.

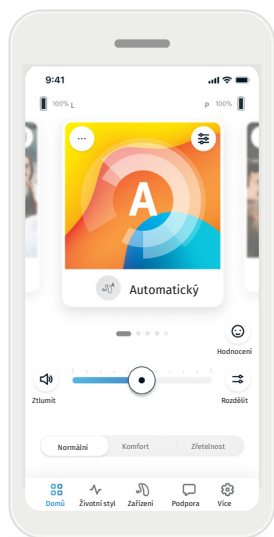


1. Přejděte na kartu **Domů**.

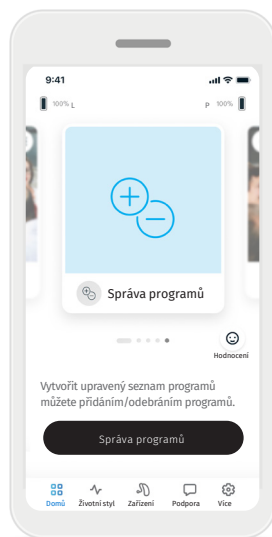

2. Přejedte prstem doleva nebo doprava, dokud nevidíte obrázek/ikonu Správa programů. Klikněte na tlačítko **Správa programů**.

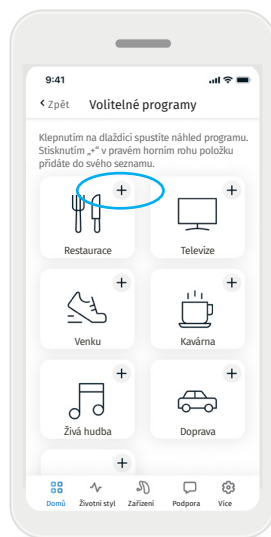


3. Pro rychlé přidání volitelného programu klikněte na **tlačítko plus (+)**.

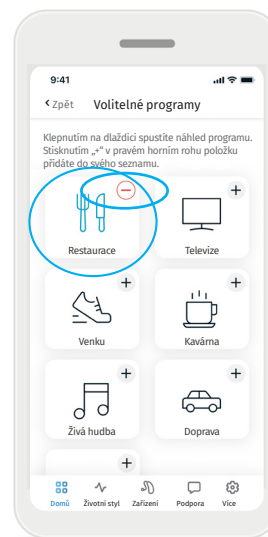

4. Kliknutím na tlačítko **(-) odeberete** volitelný program ze seznamu programů.


5. Kliknutím na **dlaždicí programu** zobrazíte náhled programu.

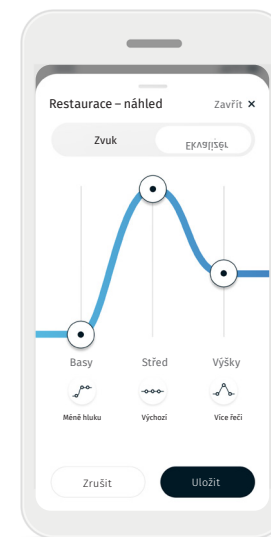

6. Kliknutím na **dlaždicí programu** se přesunete na obrazovku náhledu programu. Bude zobrazena obrazovka náhledu programu. Změňte nastavení a kliknutím na možnost **Uložit** přidejte volitelný program do seznamu programů.

Nastavení programu

Další úpravy mohou být dostupné podle aktuálně zvoleného programu, konfigurace vašeho sluchadla a připojených zdrojů zvuku.

Chcete-li pokročilejší nastavení, můžete přejít k dalším nastavením přímo na své domovské obrazovce klepnutím na tlačítko () [pokročilé funkce](#) v pravém horním rohu dlaždice vašeho programu.

Maskér tinitu

Pokud váš poskytovatel sluchadel aktivoval maskér tinitu, budete mít možnost upravit hlasitost maskovacího šumu.

Ekvalizace

Pokud používáte externí streamovací zařízení (např. TV Connector, hudbu), můžete upravit zaměření tak, abyste slyšeli lépe streamovaný signál nebo abyste lépe slyšeli okolní prostředí.

Nastavení zvuku

Můžete upravit ovládací prvek [Zaměření mikrofonu](#), aby se zaměřil více na zvuky přicházející zředu nebo na poslech všude kolem vás.

Ovládací prvek [Zvýraznění řeči](#) vám umožňuje zvýraznit nebo potlačit řeč na požadovanou úroveň komfortu.

Ovládací prvek [Snížení hluku](#) umožňuje zvýšení nebo snížení hladiny hluku na požadovanou úroveň komfortu.

Nastavení funkce Ekvalizér


Zde můžete změnit nastavení funkce [Ekvalizér](#).

Přizpůsobení programu

Aplikace Remote Plus vám umožňuje změnit název programů, takže můžete personalizovat, co pro vás který program znamená.

Můžete změnit název programu pro libovolný program včetně volitelných programů. Chcete-li změnit název programu:

1. Klepněte na (...) [nastavení programu](#) v levém horním rohu obrázku programu (nebo ikony).
2. Zobrazí se obrazovka nastavení programu.
3. Klepněte na [Změnit název programu](#).
4. Zadejte svůj preferovaný název programu do textového pole a klikněte na [Potvrdit](#).

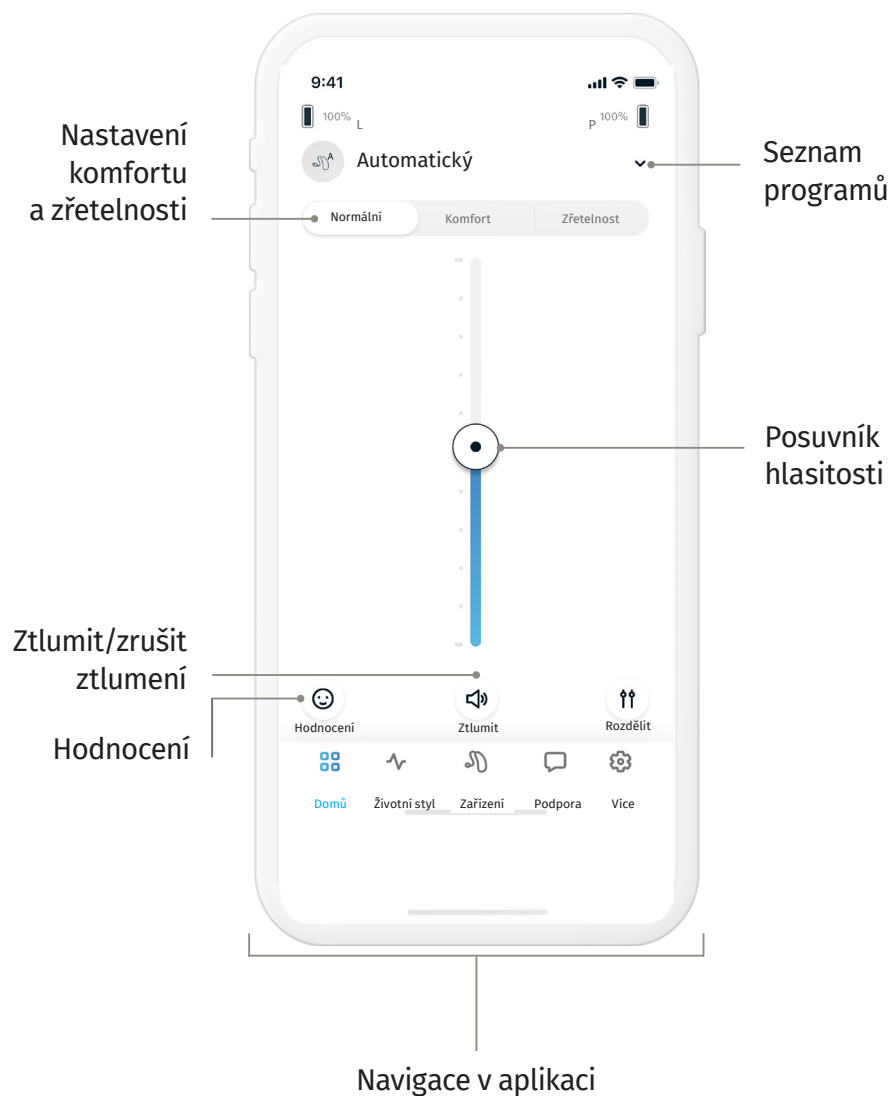


Úprava hlasitosti sluchadla

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti sluchadla na obou stranách posuňte posuvníkem nahoru nebo dolů.

Stiskněte tlačítko () **Ztlumit** pod posuvníkem, chcete-li ztlumit nebo zrušit ztlumení sluchadel.

Rozdělit hlasitost

Stisknutím tlačítka () **Rozdělit hlasitost** budete ovládat hlasitost na každém sluchadle samostatně.

Pro změnu hlasitosti použijte posuvníky hlasitosti. Stisknutím tlačítka () **Spojit hlasitost** sloučíte posuvníky hlasitosti.

Nastavení komfortu a zřetelnosti*

V programu Automatický si můžete vybrat z možností **Zřetelnost**, **Komfort** nebo **Normální**. **Zřetelnost** je k dispozici pro zvýraznění řeči, zatímco **Komfort** se používá pro potlačení hluku za účelem celkového komfortu poslechu. Možnosti **Zřetelnost** a **Komfort** se vzájemně vylučují, a nemohou být v zapnutém stavu současně. **Normální** je výchozí nastavení.

Změna programů

Klepnutím na **šipku** vedle aktuálního programu zobrazíte všechny dostupné programy. Vyberte požadovaný program (např. TV Connector).

*Tato funkce není podporována u všech modelů sluchadel.

Hodnocení

Když je služba přehledů aktivována a služba hodnocení povolena, můžete se svým poskytovatelem sluchadel sdílet zpětnou vazbu o svých zkušenostech s poslechem.

Když je tato funkce povolena, zobrazí se ikona smajlíka na pravé straně domovské obrazovky v [pokročilém](#) režimu nebo v dolní části domovské obrazovky v [klasickém](#) režimu.

1. Klikněte na ikonu (😊) hodnocení.
2. Vyberte kladné hodnocení, jste-li spokojeni, nebo záporné, jste-li nespokojeni.
3. Vyberte situaci, která co nejlépe odpovídá té, v níž se právě nacházíte. Pokud zadáváte negativní hodnocení, vyberte důvod ze seznamu možností.
4. Zobrazte si svou zpětnou vazbu a zadejte další komentáře (volitelně). Klepnutím na tlačítko [Odeslat](#) odešlete zpětnou vazbu.

Karta Životní styl

⚠ Informace obsažené v této části slouží pouze pro vzdělávací a informační účely. Informace zobrazené v části Životní styl byste neměli používat jako náhradu, ani nejsou míněny jako náhrada odborné lékařské rady. Máte-li jakékoli otázky týkající se vašeho zdraví nebo před zahájením programu cvičení, měli byste je vždy konzultovat se svým lékařem nebo jiným zdravotníkem.

Karta **Životní styl** vám zobrazí obrazovku s posuvníkem, kde jsou zobrazeny údaje o vašem životním stylu, jak je zaznamenala vaše sluchadla. Můžete si zobrazit dobu nošení vašeho sluchadla, informace o vašem poslechovém prostředí i další údaje o fyzické aktivitě.

- **Poslechová prostředí**
Tato část poskytuje přehled doby, kterou jste strávili v různých prostředích, která byla detekována vaším sluchadlem / vašimi sluchadly.
- **Průměrná doba nošení**
Jedná se o průměrnou dobu, po kterou jste nosili sluchadlo/sluchadla každý den.
- **Počítadlo kroků**
Počítadlo kroků* zobrazuje počet kroků, které jste ušli za den podle měření akcelerometru ve vašem sluchadle / vašich sluchadlech.
- **Aktivní minuty**
Aktivní minuty představují počet minut, které jste během dne strávili fyzickou aktivitou, např. chůzí, během nebo jakoukoli podobnou fyzickou středně náročnou až náročnou činností, s nasazeným sluchadlem / nasazenými sluchadly.

*Tato funkce není podporována u všech modelů sluchadel.

Karta Zařízení

Karta Zařízení je místo, kde můžete upravit nastavení svého sluchadla / svých sluchadel.

Ovládání poklepáním

Pokud jsou vaše sluchadla vybavena ovládáním poklepem, můžete si přizpůsobit jejich reakci na dvojitý poklep a nastavit citlivost poklepu takto:

- **Streamování**
Přijetí/ukončení hovoru nebo streamování – aktivuje/deaktivuje schopnost přijmout/ukončit hovor nebo připojit se ke streamovacímu zařízení (např. TV Connector) dvojitým poklepáním. Ovládání poklepáním pro připojení ke streamovacímu zařízení můžete používat, pouze pokud poskytovatel sluchadel nastavil vaše sluchadla pro manuální připojení.
- **Vlastní akce**
(nastaveno zvlášť pro levé a pravé sluchadlo):
 - Pozastavení/opětovné spuštění médií – dvojité poklepání spustí médium při streamování.
 - Hlasový asistent – dvojité poklepání aktivuje hlasového asistenta na vašem chytrém telefonu.
 - Vypnout – dvojité poklepání nepovede k provedení akce.
- **Citlivost poklepání**
(nastaveno zvlášť pro levé a pravé sluchadlo):
 - Jemné – nejcitlivější.
 - Běžné – výchozí nastavení citlivosti.
 - Razantní – nejméně citlivé.

Karta Zařízení

Automatické spuštění


Můžete si vybrat, zda se vaše sluchadlo bude / vaše sluchadla budou zapínat automaticky, když je vyjmete z nabíječky.

Adaptivní Bluetooth®

Máte-li problémy s kvalitou zvuku během hovoru, deaktivace této funkce může vaše zkušenosti zlepšit.

Vzdálené nastavení

Pokud je služba přehledů aktivována, budete moci dostávat push oznámení, která obsahují úpravu nastavení vašich sluchadel odesílané vaším poskytovatelem sluchadel.

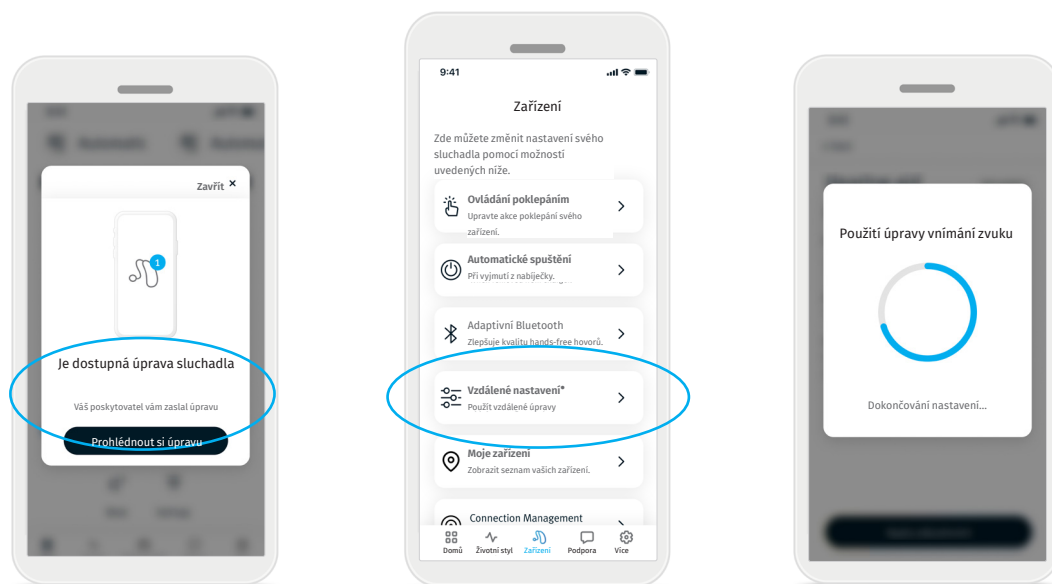

1. Přijměte personalizovanou zprávu od svého poskytovatele sluchadel. Kliknutím na **Prohlédnout si úpravu** získáte přístup k úpravě.

2. Nebo otevřete aplikaci Remote Plus a přejděte do části **Zařízení > Vzdálené nastavení**.

3. Vyberte úpravu, klikněte na **Použití úpravu** a použijte změny podle pokynů.

4. Nyní probíhá použití úpravy u vašich sluchadel. Pokud upřednostňujete jiné nastavení, můžete vybrat dostupnou úpravu a použít ji u svých sluchadel.

Karta Zařízení

Najít moje zařízení*

Funkce nalezení mého zařízení vám pomůže najít vaše sluchadla tím, že zobrazí poslední známé místo, kde byla sluchadla připojena. Jakmile se přiblížíte ke svým sluchadlům, aplikace vám na základě intenzity signálu poskytne vodítko a pomůže vám určit jejich polohu.

Správa připojení*

Funkce zachování připojení udržuje nepřetržité spojení mezi aplikací a sluchadly, takže se nemusíte znovu připojovat ke svým sluchadlům pokaždé, když aplikaci otevřete. Funkce zachování připojení také zlepšuje přesnost funkce pro nalezení zařízení. Funkce je ve výchozím nastavení aktivována, ale lze ji kdykoli deaktivovat. Funkce zachování připojení může mít nepatrný vliv na denní výdrž baterie sluchadla.

Moje zařízení


Pokud máte problémy s připojením k aplikaci, můžete si vybrat [Zapomenout zařízení](#) a zkusit je znovu spárovat. Pokud chcete připojit k aplikaci jiný pár sluchadel, nejprve musíte zapomenout aktuálně připojené sluchadlo / připojená sluchadla. Poté můžete spárovat nová zařízení.

POZNÁMKA: Zapomenutí zařízení odebere spojení mezi vaším sluchadlem / vašimi sluchadly a aplikací.

* Tato funkce není podporována u všech modelů sluchadel.

Karta Podpora

Na kartě **Podpora** můžete najít informace o svých sluchadlech.

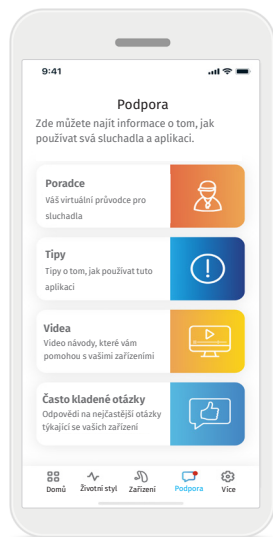

- Přístup ke zprávám Poradce
- Najít tipy pro používání aplikace Remote Plus
- Sledovat videa s návodem, která vám pomohou používat vaše zařízení
- Procházet často kladené otázky, kde jsou odpovědi na nejčastější otázky týkající se vašich zařízení

Karta Více

Karta **Více** je místo, kde můžete najít další nastavení aplikace a právní informace související s aplikací.

Režim aplikace

Přepínání mezi dvěma režimy aplikace na obrazovce **Domů**: režimem Pokročilý a režimem Klasický. **Pokročilý** režim je ideální pro uživatele, kteří chtějí získat přístup k pokročilým funkcím a možnostem úpravy. **Klasický** režim je ideální pro uživatele, kteří chtějí získat přístup k základním funkcím a možnostem. Tento režim se doporučuje uživatelům, kteří preferují jednodušší zážitek.

Nastavení funkce Přehledy

Ve výchozím nastavení jsou aktivovány všechny funkce služby Přehledy. Jednotlivé funkce můžete povolit nebo zakázat, případně službu Přehledy zcela deaktivovat. Deaktivace odstraní všechna data služby přehledů dříve nahraná do cloudu společnosti Sonova a deaktivuje všechny funkce služby přehledů, včetně zpráv poradce a vzdálených úprav.

Centrum pro oznámení

Pro aktivaci nebo deaktivaci upozornění služby Poradce. Zprávy od Poradce budou i nadále přístupné na kartě Podpora, i když jsou oznámení deaktivována.

Vzhled

- **Obrázky programu**
Stiskněte přepínač pro výběr mezi obrázky nebo ikonami programů aplikace.
Vyberte obrázky, pokud preferujete dynamičtější a barevnější pohled na obrázky programu.
Vyberte ikony, pokud preferujete méně barevný pohled na ikony programu.
- **Přizpůsobit vzhled telefonu**
Automaticky se přizpůsobí nastavení světlého nebo tmavého režimu telefonu. Deaktivace této funkce vám umožní vybrat režim manuálně.

Analytické nástroje

Aktivujte nebo deaktivujte sdílení dat o používání. Poskytnutím dat o používání nám umožníte učit se a zlepšovat produkty a služby. Vaše osobní údaje nejsou určeny k prodeji. Je to součást našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Režim Demo

Pro zapnutí nebo vypnutí režimu Demo. Režim Demo vám umožňuje vyzkoušet aplikaci bez připojení ke sluchadlům.

Právní informace

Přístup k právním a regulatorním informacím, které souvisejí s aplikací.

Informace o shodě s platnými předpisy

Prohlášení o shodě

Společnost Sonova AG tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje požadavky nařízení o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745.

Uživatelská příručka ve všech příslušných jazycích v elektronické podobě je dostupná prostřednictvím internetové stránky www.unitron.com/appguide.

Alternativně lze uživatelskou příručku otevřít přímo z aplikace tak, že přejdete do sekce „Více“, vyberete „O aplikaci“ a poté klepnutím na odkaz ve spodní části přejdete k Nápovědě a podpoře v okně externího prohlížeče. Odtud můžete přejít do části Podpora / Uživatelské příručky a posunout se dolů do sekce aplikace.

Popis symbolů



Označením CE společnost Sonova AG potvrzuje, že tento produkt splňuje požadavky nařízení o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745. Čísla za označením CE odpovídají kódu certifikovaných institucí, s nimiž bylo konzultováno v souladu s požadavky nařízení uvedeného výše.



Označuje výrobce zdravotnického prostředku, jak je definováno v nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.



Označuje, že zařízení je zdravotnickým prostředkem.



Označuje zplnomocněného zástupce v Evropském společenství. Zástupce pro ES je také dovozce do Evropské unie.



Označuje katalogové číslo výrobce, podle kterého lze určit zdravotnický prostředek.



Tento symbol označuje, že je důležité, aby si uživatel přečetl a zohlednil příslušné informace uvedené v této uživatelské příručce.



Označení, že je k dispozici návod k použití v elektronické podobě.



Tento symbol znamená, že je důležité, aby se uživatel řídil relevantními upozorněními uvedenými v této uživatelské příručce.



Důležité informace pro manipulaci a bezpečnost výrobku.



Slovní ochranná známka Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a veškeré použití těchto známek je v rámci licence společnosti Sonova AG. Jiné ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.



Symbol autorských práv.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím aplikace si přečtěte příslušné bezpečnostní informace na následujících stránkách.

Určený účel použití

Určeným použitím aplikace je výběr, úprava a uložení stávajících funkcí sluchadla, přístup k informacím o stavu a komunikace mezi koncovým uživatelem a poskytovatelem sluchadel bezdrátovým izualizovaným způsobem.

Určená populace pacientů

Určenou populací pacientů pro toto řešení jsou koncoví uživatelé (laici) s jednostrannou nebo oboustrannou, mírnou až těžkou ztrátou sluchu, kteří nosí kompatibilní sluchadlo a vyhovuje jim možnost ovládat svá sluchadla pomocí svého chytrého telefonu. Aplikace je určena pro uživatele, kteří dovršili věk 17 let. Softwarová funkce pro tinitus je určena pro pacienty s chronickým tinitem, kteří dovršili věk 18 let.

Určený uživatel

Určený uživatel je osoba se ztrátou sluchu, která používá kompatibilní zařízení.

Indikace

Vezměte prosím na vědomí, že indikace nejsou odvozeny od aplikace, ale od kompatibilních sluchadel. Obecné klinické indikace pro použití sluchadel a softwarové funkce pro tinitus:

- Přítomnost ztráty sluchu
 - Jednostranná nebo oboustranná.
 - Převodní, percepční nebo smíšená.
 - Mírná až hluboká.
- Přítomnost chronického tinnitu (platí pouze pro zařízení se softwarovou funkcí pro tinitus)

Kontraindikace

Vezměte prosím na vědomí, že kontraindikace nejsou odvozeny od aplikace, ale od kompatibilních sluchadel. Obecné klinické kontraindikace pro použití sluchadel, nabíječky a funkce Ekvalizace tinitu jsou:

- Ztráta sluchu není v rozsahu nastavení sluchadla (např. zesílení, frekvenční odezva).
- Akutní tinitus.
- Deformita ucha (např. uzavřený zvukovod, chybějící ušní boltec).
- Neurální porucha sluchu (retrokochleární patologie, např. chybějící nebo nefunkční sluchový nerv).

Primární kritéria pro odeslání pacienta k vyšetření či léčbě u lékaře nebo jiného specialisty jsou tato:

- Viditelná vrozená nebo traumatická deformita ucha.
- Aktivní drenáž z ucha v předchozích 90 dnech.
- Náhlá nebo rychle progredující ztráta sluchu v jednom nebo obou uších během předchozích 90 dnů.
- Akutní nebo chronické závratě.
- Audiometrický rozdíl vedení vzduch-kost roven nebo větší než 15 dB při frekvenci 500 Hz, 1 000 Hz a 2 000 Hz.
- Viditelné nahromadění významného množství ušního mazu nebo cizí těleso ve zvukovodu.
- Bolest nebo nepříjemné pocity v uchu.
- Abnormální vzhled ušního bubínku a zvukovodu, například:
 - Zánět vnějšího zvukovodu.

- Perforovaný ušní bubínek.
- Jiné abnormality, které podle názoru poskytovatele sluchadel představují zdravotní problém.

Poskytovatel sluchadel může rozhodnout, že odeslání pacienta není vhodné nebo není v nejlepším zájmu pacienta v těchto případech:

- Je-li dostatečně prokázáno, že specializovaný lékař stav důkladně vyšetřil a byla poskytnuta veškerá možná léčba.
- Stav se od předchozího vyšetření a/nebo léčby významně nezhoršil ani nezměnil.
- Jestliže se pacient informovaně a kompetentně rozhodl nevyhledat radu lékaře, je přípustné přistoupit k doporučení vhodných poslechových systémů s přihlédnutím k následujícímu:
 - Doporučení nesmí mít žádné nežádoucí účinky na zdravotní stav či celkový pocit pohody pacienta.
 - Ze záznamů vyplývá, že vše bylo zváženo v nejlepším zájmu pacienta.

Pokud to vyžadují zákonné předpisy, pacient podepsal prohlášení potvrzující, že nesouhlasí s odesláním k jinému specialistovi a že se jedná o informované rozhodnutí.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím aplikace si přečtěte příslušné bezpečnostní informace na následujících stránkách.

Klinický přínos

Aplikace sama o sobě neposkytuje přímý klinický přínos koncovému uživateli, ale jiné přínosy, které souvisejí především s používáním. Klinické přínosy jsou poskytovány pouze sluchadly. Aplikace poskytuje následující přínosy určeným uživatelům:

- Poskytnutí možnosti upravit a uložit nastavení sluchadla podle individuálních potřeb v omezeném rozsahu definovaném počátečním nastavením, např. přizpůsobením specifickým potřebám. Tento přístup by mohl pomoci zvýšit komfort poslechu a spokojenost se sluchadly v konkrétních poslechových situacích (např. snížením hlasitosti v hlučných poslechových prostředích).

Vedlejší účinky

Veďte prosím na vědomí, že vedlejší účinky nejsou odvozeny od aplikace, ale od kompatibilních sluchadel. Fyzické vedlejší účinky sluchadel jako např. tinitus, závratě, tvorba ušního mazu, příliš vysoký tlak, pocení nebo vlhká kůže, puchýře, svědění a/ nebo vyrážka, pocit ucpanosti nebo plnosti zvukovodu a jejich následky jako bolesti hlavy a/nebo bolest v uších může odstranit nebo zmírnit váš poskytovatel sluchadel.

Konvenční sluchadla mohou pacienty vystavit působení vyšších hladin zvuku, což může vést

k posunutí prahových hodnot frekvenčního rozsahu dotčeného akustickým traumatem.

Omezení použití

Použití aplikace je omezeno na funkce kompatibilního zařízení / kompatibilních zařízení.

Jakákoli závažná událost, která se vyskytla v souvislosti s aplikací, by měla být nahlášena zástupci výrobce a příslušnému orgánu ve státě bydliště. Závažná událost je popsána jako jakákoli událost, která přímo nebo nepřímo vedla, mohla vést anebo může vést k některé z následujících situací:

- a. úmrtí pacienta, uživatele anebo jiné osoby,
- b. dočasné nebo trvalé závažné zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele anebo jiné osoby,
- c. vážné ohrožení veřejného zdraví.

Chcete-li ohlásit neočekávanou operaci nebo událost, kontaktujte výrobce nebo jeho zástupce.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím aplikace si přečtěte příslušné bezpečnostní informace na následujících stránkách.

Bezpečnostní upozornění

Údaje pacienta jsou osobní údaje a jejich ochrana je důležitá:

- Zkontrolujte, že nastavení chytrého telefonu jsou aktuální, včetně nejnovějších bezpečnostních aktualizací operačního systému. Aktivujte automatické aktualizace.
- Zkontrolujte, že vámi nainstalovaná verze aplikace je aktuální.
- Se svými sluchadly používejte pouze originální aplikace Sonova z oficiálních zdrojů.
- Používejte silná hesla a udržujte své přihlašovací údaje v tajnosti.
- Uzamkněte telefon kódem PIN, případně pomocí biometrických údajů (například otisk prstu, obličej) a nastavte telefon, aby se automaticky zamykal po několika minutách nečinnosti.
- Zkontrolujte, že nainstalované aplikace mají pouze ta oprávnění, která potřebují.
- Nevytvářejte párování Bluetooth® se svými sluchadly na veřejných místech. Vyhněte se tak nechtěnému rušení třetími osobami. Doporučujeme provádět párování Bluetooth® doma.
- NEPOUŽÍVEJTE telefon v privilegovaném režimu jailbreak nebo root. Zajistěte za všech okolností bezpečnost svých dat. Vezměte prosím na vědomí, že výčet těchto opatření není úplný.
- Při přenosu dat nezabezpečenými kanály posílejte buď anonymizovaná data, nebo data šifrujte.

- Chraňte svůj chytrý telefon zálohováním dat nejen z důvodu ztráty dat, ale také jako ochranu proti krádeži.
- Ze svého chytrého telefonu, který již nepoužíváte nebo jej chcete zlikvidovat, odstraňte všechna data.

Údržba softwaru

Neustále monitorujeme zpětnou vazbu z trhu. Pokud budete mít problémy s nejnovější verzí aplikace, obraťte se prosím na svého místního zástupce výrobce, případně poskytněte zpětnou vazbu prostřednictvím App Store nebo Google Play Store.

⚠ Změna nastavení, např. snížení hlasitosti, ztlumení sluchadel nebo zvýšení intenzity funkce „Snížit hluk“, může vést k nebezpečí, že například neuslyšíte varovné signály příchozího dopravního prostředku.

- ① Pokud sluchadla nereagují na zařízení z důvodu neobvyklého rušení způsobeného elektromagnetickými poli, přemístěte je z dosahu těchto elektromagnetických polí. Aktivujte svůj Bluetooth. Funkce Bluetooth musí být aktivována pro připojení vašich sluchadel. Pokud vaše sluchadla nereagují, zkontrolujte prosím, zda jsou sluchadla zapnutá a zda baterie není vybitá.

- ① Pokyny jsou k dispozici na internetové stránce: unitron.com/appguide ve formátu Adobe® Acrobat® PDF. Pro jejich zobrazení musíte mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader. Navštivte Adobe.com pro jeho stažení.
- ① Chcete-li získat bezplatně tištěnou kopii návodu, obraťte se prosím na svého místního zástupce společnosti Unitron. Kopie bude odeslána do 7 dnů.



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Švýcarsko



Dovozce pro Evropskou unii:
Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen, Německo

Distributor pro Českou republiku:
REJA spol. s r. o.
www.reja.cz
www.audiodum.cz