


Unitron Remote Plus App

Lietotāja rokasgrāmata — Remote Plus 5.3



Lietotnes pārskats	3	Novērtējumi	9
Darba sākšana	3	Dzīvesveida cilne	10
Informācija par savienojamību	3	Klausīšanās vides	10
Pievienošana	4	Vidējais valkāšanas laiks	10
Lietotnes privātuma paziņojuma		Soļu skaitītājs	10
pieņemšana	4	Aktīvās minūtes	10
Savienošana pārī ar dzirdes aparātu(-iem)	4	Ierīču cilne	11
Ieskatu aktivizēšana	4	Pieskārienu vadība	11
Lietotnes režīma izvēle	4	Automātiskā ieslēgšana	12
Sākuma cilne — Izvērstais režīms	5	Adaptīvais Bluetooth®	12
Dzirdes aparāta skaļuma pielāgošana	5	Attālinātā pielāgošana	12
Skaļuma vadības sadalīšana / apvienošana .	5	Atrast manas ierīces	13
Komforta un skaidrības pielāgojumi	5	Savienojuma pārvaldīšana	13
Mainīt programmas	5	Manas ierīces	13
Izvēles lietotņu programmas	6	Atbalsta cilne	14
Programmas iestatījumi	7	Cilne Vairāk	15
Tinīta mazinātājs	7	Lietotnes režīms	15
Balanss	7	Ieskatu iestatījumi	15
Skaņas iestatījumi	7	Paziņojumu centrs	15
Ekvalaizera iestatījumi	7	Izskats	15
Programmas pielāgošana	7	Datu analītika	15
Sākuma cilne — Klasiskais režīms	8	Demonstrācijas režīms	15
Dzirdes aparāta skaļuma pielāgošana	8	Juridiskā informācija	15
Skaļuma sadalīšana	8	Atbilstības informācija	16
Komforta un skaidrības pielāgojumi	8	Atbilstības deklarācija	16
Mainīt programmas	8	Simbolu apraksts	16
		Svarīga drošības informācija	17

Lietotnes pārskats

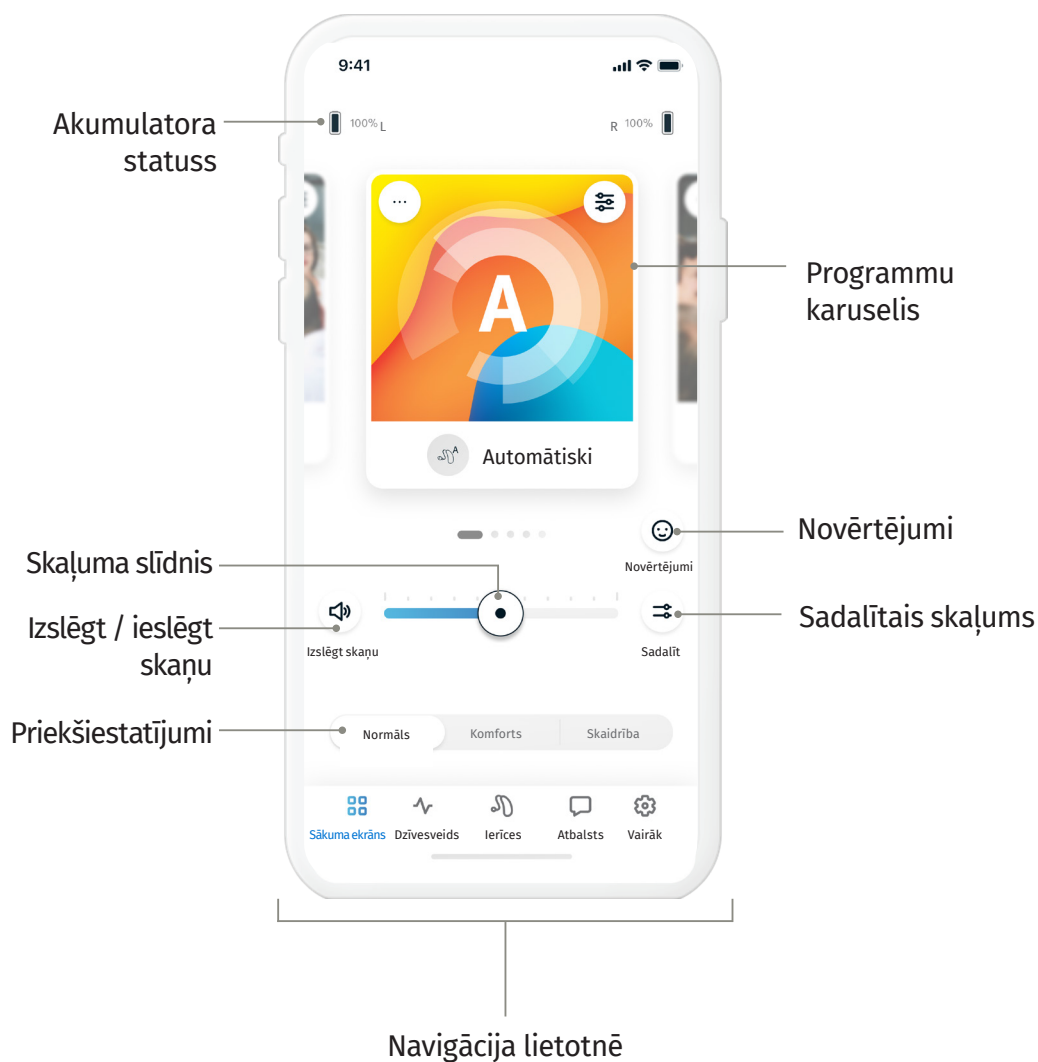

Darba sākšana

Lietotni Unitron Remote Plus ir izstrādājis uzņēmums Sonova — pasaules dzirdes risinājumu līderis. Rūpīgi izlasiet lietotāja instrukcijas, lai gūtu labumu no visām piedāvātajām iespējām.

- ① Šajā lietotāja rokasgrāmatā ir aprakstītas lietotnes funkcijas un tas, kā lietotājs var izmantot šīs funkcijas. Pirms lietotnes lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu
- ① Lai rīkotos ar lietotni, nav nepieciešama papildu apmācība.


Šī lietošanas pamācība attiecas uz lietotnes Unitron Remote Plus versiju 5.3 un jaunākām apakšversijām. Lai iegūtu iepriekšējās lietotnes lietošanas pamācības versijas, sazinieties ar vietējo pārstāvi vai apmeklējiet tīmekļa vietni www.unitron.com.

Informācija par savietojamību


- ⚠️ Lai izmantotu lietotni Unitron Remote Plus, ir nepieciešami Unitron dzirdes aparāti ar Bluetooth® nodrošinātu bezvadu savienojamību. Lietotni Unitron Remote Plus var izmantot ierīcēs ar Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) iespēju, un tā ir savietojama ar iOS versiju 15 vai jaunāku versiju. Lietotni Unitron Remote Plus var izmantot Google Mobile Services (GMS) sertificētās Android ierīcēs, kas atbalsta Bluetooth® 4.2 un Android OS 8.0 (vai jaunāku versiju).
- ① Dažiem tālruņiem ir pieskārienu skaņas vai taustiņu toņi, ko var straumēt uz dzirdes aparātu(-iem). Lai to nepieļautu, atveriet tālruņa iestatījumus, atlasiet skaņas un gādājiet, lai būtu deaktivizētas visas pieskārienu skaņas un taustiņu toņi.
- ① Lietotnē Unitron Remote Plus pieejamās funkcijas ir atkarīgas no pievienotajiem dzirdes aparātiem. Ne visas funkcijas ir pieejamas visiem dzirdes aparātiem.

Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth® SIG, Inc.


Apple, Apple logotips, iPhone un iOS ir uzņēmuma Apple Inc. preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. App Store ir uzņēmuma Apple Inc. pakalpojumu zīme. Android, Google Play un Google Play logotips ir uzņēmuma Google Inc. preču zīmes.

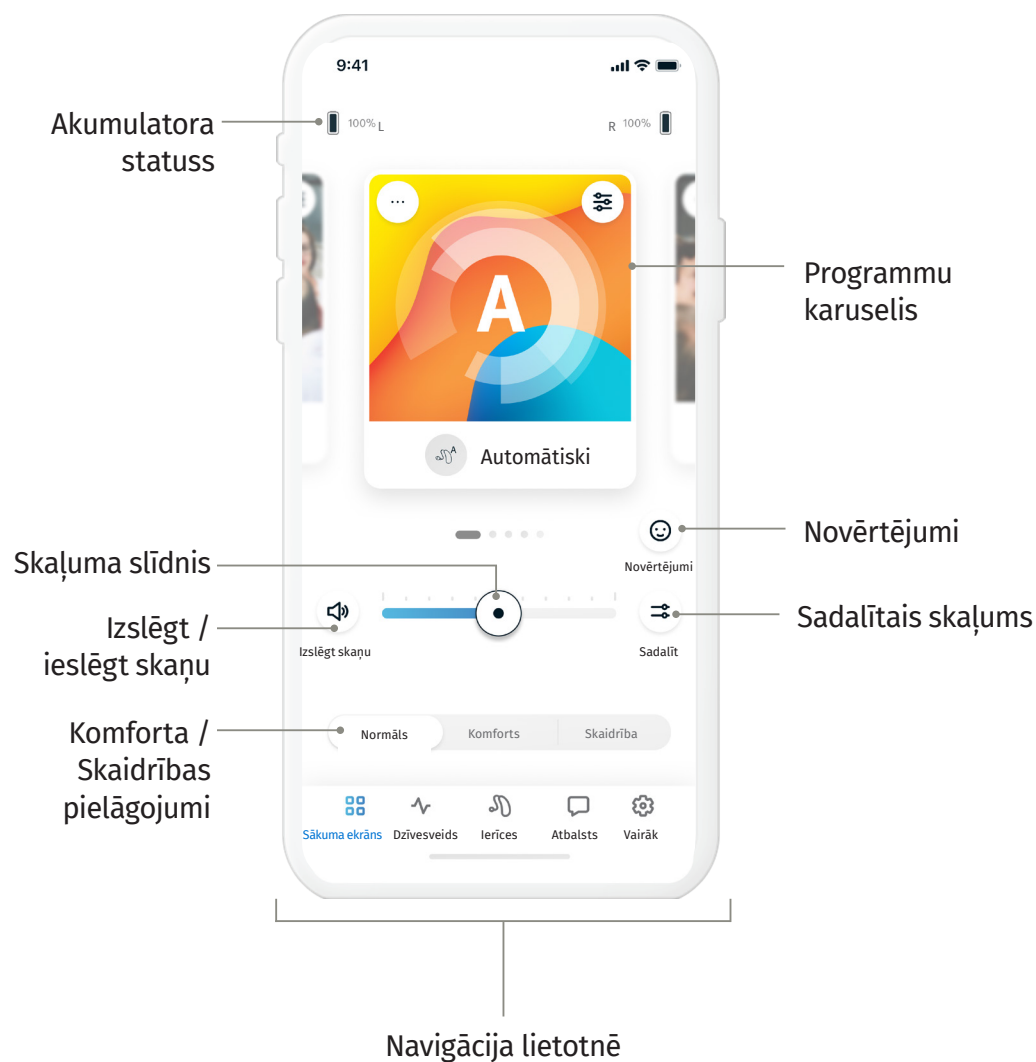


Dzirdes aparāta skaļuma pielāgošana

Pārvietojiet skaņas slīdni pa labi vai pa kreisi, lai palielinātu vai samazinātu dzirdes aparāta skaļumu abās ausīs. Lai izslēgtu vai ieslēgtu dzirdes aparātu skaņu, nospiediet slīdņa kreisajā pusē pogu () **Izslēgt skaņu**.

Dalīt skaļumu

Lai kontrolētu katra dzirdes aparāta skaļumu atsevišķi, nospiediet () **sadalītā** skaļuma pogu.

Skaļuma apvienošana

Lai sapludinātu skaļuma slīdņus, nospiediet () skaļuma **apvienošanas** pogu.

Komforta un skaidrības pielāgojumi*

Automātiskai programmai jūs varat atlasīt **Normāls**, **Komforts** vai **Skaidrība**. **Skaidrība** ir pieejama, lai uzlabotu runas dzirdamību, bet **Komforts** tiek izmantots, lai mazinātu troksni un uzlabotu vispārējo klausīšanās komfortu. **Skaidrība** un **Komforts** ir savstarpēji izslēdzošī un nevar vienlaikus būt „ieslēgts” statusā. **Normāls** ir noklusējuma iestatījums






Mainīt programmas

Pārvelciet pa kreisi vai pa labi programmu karuselī, lai apskatītu visas pieejamās programmas. Pārtraucot pārvilkšanu, atlasītā programma (piem., Restorāns) tiek aktivizēta jūsu dzirdes aparātā(-os).

* Šī funkcija netiek atbalstīta visos dzirdes aparātu modeļos.

Izvēles lietotņu programmas

Sarakstā atlasiet iepriekšdefinētas programmas, lai personalizētu dzirdes aparātus specifiskai situācijai. Pieejamās izvēles lietotņu programmas atšķiras atkarībā no dzirdes aparāta tehnoloģijas līmeņa.

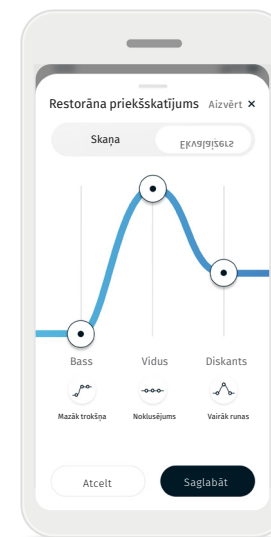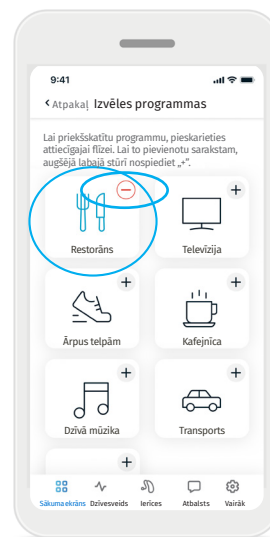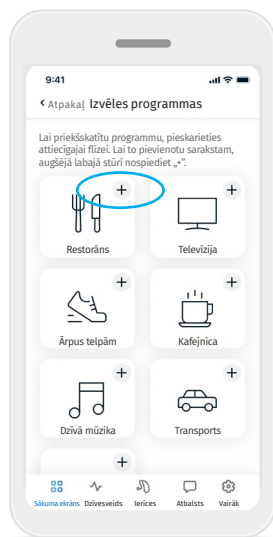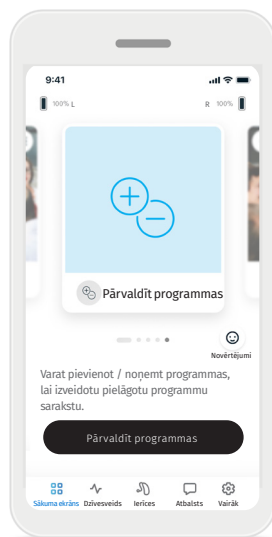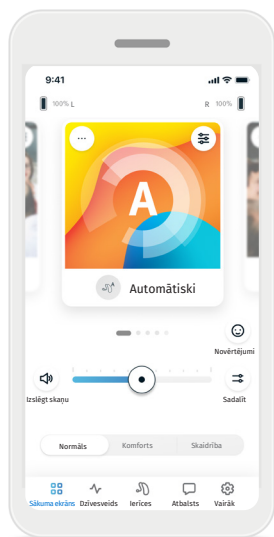

1. Atveriet cilni **Sākums**.

2. Pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek parādīts programmu pārvaldības attēls / ikona. Noklikšķiniet uz pogas **Pārvaldīt programmas**.

3. Lai ātri pievienotu izvēles programmu, noklikšķiniet uz (+) **pluszīmes**.


4. Noklikšķiniet uz (-) **mīnuszīmes**, lai izvēles programmu noņemtu no programmu saraksta.

5. Noklikšķiniet uz **programmas paneļa**, lai priekšskatītu šo programmu.

6. Ja noklikšķināsiet uz **programmas flīzes**, tiks atvērts programmas priekšskatījuma ekrāns. Tiks parādīts programmas priekšskatījuma ekrāns. Nomainiet iestatījumus un noklikšķiniet uz **Saglabāt**, lai programmu sarakstam pievienotu izvēles programmu.

Programmas iestatījumi

Turpmāki pielāgojumi var būt pieejami atkarībā no pašlaik izvēlētās programmas, jūsu dzirdes aparāta konfigurācijas un pievienotajiem audio avotiem.

Papildu iestatījumiem varat piekļūt tieši Sākuma ekrānā, pieskaroties () [Izvērstās funkcijas](#) pogai programmas paneļa augšējā labajā stūrī, lai atvērtu papildu iestatījumus.

Tinīta mazinātājs

Ja jūsu dzirdes veselības aprūpes speciālists ir iespējojis tinīta mazinātāju, jums ir iespēja pielāgot trokšņa mazinātāja skaļumu.

Balanss

Ja izmantojat ārēju straumēšanas ierīci (piemēram, TV Connector, mūziku), varat pielāgot fokusu, lai dzirdētu vairāk raidītā signāla vai arī vairāk no apkārtējās vides.

Skaņas iestatījumi

Varat pielāgot [fokusa mikroфона](#) vadīklu, lai vairāk koncentrētos uz skaņām no priekšpusē vai klausītos sev visapkārt.

[Runas uzlabošanas](#) vadīkla ļauj uzlabot vai samazināt runas dzirdamību līdz vēlamajam komforta līmenim.

[Trokšņa mazināšanas](#) vadīkla ļauj palielināt vai samazināt trokšņa līmeni līdz vēlamajam komforta līmenim.

Ekvalaizera iestatījumi

Šeit varat mainīt [ekvalaizera](#) iestatījumus.

Programmas pielāgošana

Lietotnē Remote Plus varat mainīt programmu nosaukumus, lai varētu personalizēt katru programmu atkarībā no tās nozīmes.


Varat mainīt jebkuras programmas nosaukumu, tostarp izvēles programmu nosaukumus. Lai nomainītu programmas nosaukumu, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Programmas attēla (vai ikonas) augšējā kreisajā stūrī pieskarieties pie (...) [programmas iestatījumiem](#).
2. Tiek rādīts programmas iestatījumu ekrāns
3. Pieskarieties [Mainīt programmas nosaukumu](#).
4. Tekstlodziņā ievadiet vēlamo programmas nosaukumu un noklikšķiniet uz [Apstiprināt](#).





Dzirdes aparāta skaļuma pielāgošana

Pārvietojiet slīdni augšup vai lejup, lai palielinātu vai samazinātu dzirdes aparāta skaļumu abās pusēs.

Lai izslēgtu vai ieslēgtu dzirdes aparātu skaņu, nospiediet slīdņa apakšā esošo pogu () **Izslēgt skaņu**.

Dalīt skaļumu

Lai kontrolētu katra dzirdes aparāta skaļumu atsevišķi, nospiediet () **sadalītā** skaļuma pogu.

Izmantojiet skaļuma regulēšanas slīdņus, lai mainītu skaļumu. Lai sapludinātu skaļuma slīdņus, nospiediet () skaļuma **apvienošanas** pogu.

Komforta un skaidrības pielāgojumi*

Automātiskajai programmai varat atlasīt **Skaidrība**, **Komforts** vai **Normāls**. **Skaidrība** ir pieejama, lai uzlabotu runas dzirdamību, bet **Komforts** tiek izmantots, lai mazinātu troksni un uzlabotu vispārējo klausīšanās komfortu. **Skaidrība** un **Komforts** ir savstarpēji izslēdzoši un nevar vienlaikus būt „ieslēgt” statusā. **Normāls** ir noklusējuma iestatījums.

Mainīt programmas

Lai skatītu visas pieejamās programmas, pieskarieties pie **bultiņas** blakus pašreizējās programmas nosaukumam. Atlasiet vēlamo programmu (piemēram, TV Connector).

* Šī funkcija netiek atbalstīta visos dzirdes aparātu modeļos.

Novērtējumi

Ja ir aktivizēta funkcija Ieskats un iespējota funkcija Vērtējumi, varat dalīties atsauksmēs par savu dzirdes pieredzi ar savu dzirdes aprūpes speciālistu.

Kad tiek iespējota šī funkcija, sākuma ekrāna labajā pusē parādās laimīgas sejas ikona, ja tiek izmantots **Izvērsta** režīms, vai sākuma ekrāna apakšdaļā, ja tiek izmantots **Klasiskais** režīms.

1. Noklikšķiniet uz (😊)Novērtējumu ikonas.
2. Apmierinātības gadījumā izvēlieties pozitīvo, neapmierinātības gadījumā izvēlieties negatīvo.
3. Atlasiet situāciju, kas visprecīzāk atbilst jūsu pašreizējai situācijai. Ja veicat negatīvu Novērtējumu, atlasiet iemeslu no saraksta.
4. Skatiet savas atsauksmes kopsavilkumu un sniedziet papildu komentārus (nav obligāti). Pieskatieties pogai **Iesniegt**, lai iesniegtu savas atsauksmes.

Dzīvesveida cilne

⚠ Šajā sadaļā ietvertā informācija ir paredzēta tikai izglītojošiem un informatīviem nolūkiem. Dzīvesveida sadaļā parādīto informāciju nedrīkst izmantot kā profesionāla medicīniska padoma aizstājēju vai aizvietotāju. Vienmēr konsultējieties ar ārstu vai kādu citu veselības aprūpes speciālistu, ja jums rodas jautājumi par savu veselību vai pirms vingrojumu programmas sākšanas.

Cilne **Dzīvesveids** aizved jūs uz rutināmu ekrānu, kur varat skatīt savus dzīvesveida datus, kā to izseko jūsu dzirdes aparāti. Varat skatīt savu dzirdes aparātu valkāšanas laiku, informāciju par savām klausīšanās vidēm, kā arī citus fizisko aktivitāšu datus.

- **Klausīšanās vides**
Šajā sadaļā ir pieejams jūsu dažādās vidēs pavadītā laika kopsavilkums, kā to noteica jūsu dzirdes aparāts(-i).
- **Vidējais valkāšanas laiks**
Šis ir vidējais laiks, ko pavadījāt, valkājot dzirdes aparātu(-s) katru dienu.
- **Soļu skaitītājs**
Soļu skaitītājs* parāda jūsu dienā noieto soļu skaitu, kā to ir izmērījis jūsu dzirdes aparāta(u) akselerometrs.
- **Aktīvās minūtes**
Aktīvās minūtes ir to minūšu skaits, kuras aktīvi pavadījāt dienas laikā, piemēram, staigājot, skrienot vai veicot citas līdzīgas vidējas līdz intensīvas aktivitātes, valkājot dzirdes aparātu(-s).

* Šī funkcija netiek atbalstīta visos dzirdes aparātu modeļos.

Ierīču cilne

Ierīču cilnē varat modificēt savu dzirdes aparātu iestatījumus.

Pieskāriena vadība

Ja jūsu dzirdes aparātiem ir Pieskāriena vadība, varat personalizēt to reakciju uz dubultskārieniem un pielāgot pieskāriena jutību šādi:

- **Straumēšana**
Pieņemt / beigt zvanu vai straumēšanu — iespējot / atspējot spēju pieņemt / beigt zvanus vai izveidot savienojumu ar straumēšanas ierīci (piemēram, TV Connector), izmantojot dubultskārienu. Pieskārienu vadību varat izmantot straumēšanas ierīces pievienošanai tikai tad, ja jūsu dzirdes veselības aprūpes speciālists ir konfigurējis jūsu dzirdes aparātus manuālai savienojuma izveidei.
- **Pielāgotas darbības**
(konfigurētas atsevišķi kreisajam un labajam dzirdes aparātam):
 - Puzēt / atsākt multivides straumēšanu — dubultskāriens puzē / atsāk multivides straumēšanu.
 - Balss asistents
— dubultskāriens aktivizē balss asistentu jūsu viedtālrunī.
 - Izslēgts — dubultskāriens neveic darbību.
- **Pieskāriena jutīgums**
(konfigurēts atsevišķi kreisajam un labajam dzirdes aparātam):
 - Maigs — jutīgākais.
 - Normāls — noklusējuma jutīgums.
 - Stingrs — mazāk jutīgais.

Automātiskā ieslēgšana


Varat izvēlēties, vai dzirdes aparātiem ir jāieslēdzas automātiski, kad izņemat tos no lādētāja.

Adaptīvais Bluetooth®

Ja jums ir problēmas ar audio kvalitāti zvanu laikā, šīs funkcijas atspējošana var uzlabot jūsu pieredzi.

Attālinātā pielāgošana

Ja ir aktivizēta funkcija Ieskati, jūs varat saņemt uzniirstošos paziņojumus, kuros ir ietverti dzirdes aparātu pielāgojumi, ko nosūta jūsu dzirdes aprūpes speciālists.

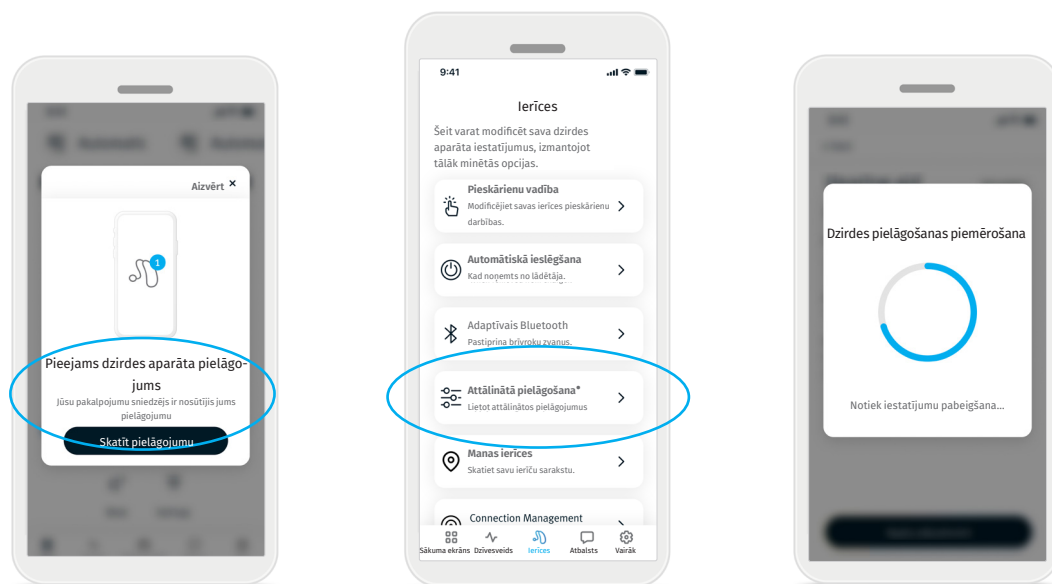

1. Saņemiet personalizētu ziņojumu no sava dzirdes veselības aprūpes speciālista. Noklikšķiniet uz **Skatīt pielāgojumu**, lai piekļūtu pielāgojumam.
2. Vai atveriet lietotni Remote Plus un dodieties uz **Ierīces > Attālinātā pielāgošana**.
3. Atlasiet pielāgojumu, noklikšķiniet uz **Lietot pielāgojumu** un ievērojiet instrukcijas, lai piemērotu izmaiņas.
4. Tagad pielāgojums tiek lietots jūsu dzirdes aparātiem. Ja vēlaties izmantot citu iestatījumu, varat atlasīt pieejamo pielāgojumu un lietot to saviem dzirdes aparātiem.

Ierīču cilne

[Atrast manas ierīces*](#)

Funkcija Atrast manas ierīces palīdz atrast jūsu dzirdes aparātus, parādot pēdējo zināmo atrašanās vietu, kur bija pieslēgti dzirdes aparāti. Tuvojoties dzirdes aparātiem, lietotne sniedz norādes, pamatojoties uz signāla stiprumu, palīdzot precīzi noteikt to atrašanās vietu.

[Savienojuma pārvaldība*](#)

Palieciet pievienoti nodrošina nepārtrauktu savienojumu starp lietotni un dzirdes aparātiem, tāpēc jums nav nepieciešams katru reizi, atverot lietotni, no jauna pieslēgties dzirdes aparātiem. Palieciet pievienoti uzlabo arī funkcijas Atrast manas ierīces precizitāti. Šī funkcija ir aktivizēta pēc noklusējuma, taču to var deaktivizēt jebkurā laikā. Palieciet pievienoti var nedaudz ietekmēt dzirdes aparāta akumulatora darbības laiku dienā.

[Manas ierīces](#)


Ja jums ir problēmas ar lietotnes savienojuma izveidi, varat izvēlēties opciju [Aizmirst ierīces](#) un mēģināt vēlreiz veikt savienošana pāri. Ja vēlaties izveidot cita dzirdes aparātu pāra savienojumu ar lietotni, vispirms ir jāliek aizmirst pašlaik pievienotie dzirdes aparāti. Pēc tam varat savienot pāri jaunās ierīces.

PIEZĪME. Ierīču aizmirstšana noņems savienojumu starp jūsu dzirdes aparātiem un lietotni.

* Šī funkcija netiek atbalstīta visos dzirdes aparātu modeļos.

Atbalsta cilne

Atbalsta cilnē varat atrast informāciju par saviem dzirdes aparātiem.

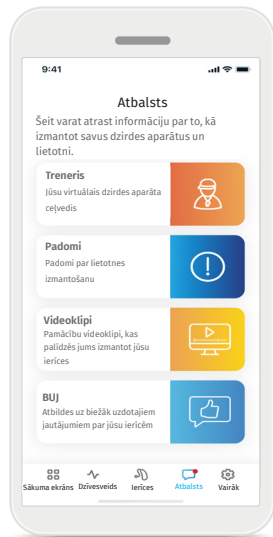

- Piekļuve Trenera ziņojumiem
- Atrodiet padomus Remote Plus lietotnes izmantošanai
- Skatieties pamācību videoklipus, lai palīdzētu ar jūsu ierīcēm
- Pārlūkojiet Biežāk uzdotie jautājumi, lai uzzinātu atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par jūsu ierīcēm.

Cilne Vairāk

Cilnē [Vairāk](#) varat atrast lietotnes papildu iestatījumus un ar lietotni saistīto juridisko informāciju.

Lietotnes režīms

Pārslēdzieties starp diviem lietotnes režīmiem [Sākuma](#) ekrānā: Izvērsto režīmu un Klasisko režīmu. [Izvērstais](#) režīms ir piemērots lietotājiem, kuri vēlas piekļuvi papildu funkcijām un pielāgošanas opcijām. [Klasiskais](#) režīms ir piemērots lietotājiem, kuri vēlas piekļuvi pamata funkcijām un opcijām. Šis režīms ir ieteicams lietotājiem, kuri vēlas vienkāršāku pieredzi.

Ieskatu iestatījumi

Visas Ieskata funkcijas tiek aktivizētas pēc noklusējuma. Varat izvēlēties iespējot vai atspējot atsevišķas funkcijas vai izvēlēties pilnībā deaktivizēt Ieskatus. Deaktivizēšana dzēš visus Ieskatu datus, kas iepriekš augšupielādēti Sonova mākonī, un tiek atspējotas visas Ieskatu funkcijas, tostarp Trenera ziņojumi un attālinātie pielāgojumi.

Paziņojumu centrs

Iespējojiet vai atspējojiet Trenera paziņojumus. Trenera ziņojumi joprojām ir pieejami cilnē Atbalsts, ja paziņojumi tiek atspējoti.

Izskats

- [Programmu attēli](#)
Nospiediet pārslēgšanas pogu, lai atlasītu lietotņu programmu attēlus vai ikonas. Atlasiet attēlus, ja vēlaties košāku un krāsaināku programmu attēlu skatu. Atlasiet ikonas, ja vēlaties mazāk krāsainu programmu ikonu skatu.
- [Pieskaņot tālruņa izskatam](#)
Automātiski pieskaņo tālruņa gaišā vai tumšā režīma iestatījumu. Atspējojot šo funkciju, režīmu var atlasīt manuāli.

Datu analītika

Iespējojiet vai atspējojiet lietojuma datu kopīgošanu. Sniedzot lietojuma datus, jūs ļausit mums mācīties un uzlabot produktus un pakalpojumus. Mēs nekad nepārdosim jūsu personas datus citiem. Tā ir daļa no mūsu Privātuma paziņojuma.

Demonstrācijas režīms

Ieslēdziet vai izslēdziet demonstrācijas režīmu. Demonstrācijas režīms ļauj jums izmēģināt lietotni, nepievienojot klausīšanās ierīces.

Juridiskā informācija

Piekļūstiet ar lietotni saistītai juridiskai un normatīvai informācijai.

Informācija par atbilstību

Atbilstības deklarācija

Ar šo Sonova AG paziņo, ka šis produkts atbilst Medicīnisko ierīču regulas (ES) 2017/745 prasībām.

Lietotāja rokasgrāmata visās piemērojamajās valodās elektroniskā formātā ir pieejama, izmantojot www.unitron.com/appguide

Lietotāja rokasgrāmatai var piekļūt arī tieši no lietotnes, dodoties uz sadaļu „Vairāk”, atlasot "Par lietotni" un pēc tam pieskaroties apakšā esošajai saitei, lai ārējā pārlūkprogrammas logā nokļūtu palīdzības un atbalsta sadaļā. Tur varat pāriet uz cilni „Lietotāja rokasgrāmata” un ritināt uz leju līdz sadaļai Lietotnes.

Simbolu apraksts



Ar CE simbolu Sonova AG apliecina, ka šis produkts atbilst Medicīnisko ierīču regulas (ES) 2017/745 prasībām. Cipari pēc CE simbola atbilst to sertificēto institūciju kodam, ar kurām konsultējās saskaņā ar iepriekš minēto regulu.



Norāda medicīniskās ierīces ražotāju, kā definēts Medicīnisko ierīču regulā (ES) 2017/745.



Norāda, ka ierīce ir medicīniska ierīce



Norāda pilnvaroto pārstāvi Eiropas Kopienā. EC REP ir arī importētāja Eiropas Savienībā.



Norāda ražotāja kataloga numuru, lai medicīnisko ierīci varētu identificēt.



Šis simbols norāda, ka ir svarīgi, lai lietotājs izlasītu un ņemtu vērā šajā lietošanas pamācībā sniegto svarīgo informāciju.



Norādījums, ka lietošanas instrukcijas ir pieejamas elektroniski.



Šis simbols norāda, ka ir svarīgi, lai lietotājs pievērstu uzmanību svarīgiem šajā lietošanas pamācībā sniegtiem brīdinājuma paziņojumiem.



Svarīga informācija par rīkošanos un produkta drošību.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth® SIG, Inc., un jebkura Sonova AG šādu zīmju izmantošana notiek saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Autortiesību simbols.

Svarīga drošības informācija

Pirms lietotnes lietošanas izlasiet attiecīgo drošības informāciju turpmākajās lappusēs.

Lietotnes paredzētais lietojums

ir esošu dzirdes aparāta funkciju atlase, pielāgošana un saglabāšana, piekļuve statusa informācijai un saziņa starp lietotāju un dzirdes veselības aprūpes speciālistu bezvadu režīmā vizualizētā veidā.

Paredzētā pacientu grupa

Šis risinājums ir paredzēts galalietotājiem (nespeciālistiem) ar vienpusēju vai abpusēju vieglu līdz ļoti smagu dzirdes zudumu, kuri lieto saderīgu dzirdes aparātu un novērtē ērtības, piemēram, iespēju vadīt savu dzirdes aparātu no viedtālruna. Lietotne ir paredzēta vismaz 17 gadu veciem lietotājiem. Tinīta funkcija ir paredzēta vismaz 18 gadus veciem pacientiem ar hronisku tinītu.

Paredzētais lietotājs

Paredzētais lietotājs ir persona, kurai ir dzirdes zudums un kuram ir saderīga ierīce.

Indikācijas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka indikācijas nav saistītas ar lietotni, bet gan ar saderīgajiem dzirdes aparātiem. Vispārējās klīniskās indikācijas dzirdes aparātu lietošanai un tinīta funkcijai ir šādas:

- Dzirdes zudums
 - Vienpusīgs vai abpusējs
 - Konduktīvs, sensorineirāls vai jaukts
 - No viegla līdz izteikti smagam
- Hronisks tinīts (attiecas tikai uz ierīcēm, kas nodrošina tinīta funkciju)

Kontrindikācijas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka kontrindikācijas nav saistītas ar lietotni, bet gan ar saderīgajiem dzirdes aparātiem. Vispārējās klīniskās kontrindikācijas dzirdes aparātu lietošanai un tinīta funkcijai ir šādas:

- Dzirdes zudums nav dzirdes aparāta pieregulēšanas diapazonā (t.i., pastiprinājums, frekvenču raksturliktne)
- Akūts tinīts
- Auss deformācija (t.i., slēgts auss kanāls, auss kaula trūkums)
- Neirāls dzirdes zudums (retrokoheāras patoloģijas, piemēram, neesošs/ nefunkcionējošs dzirdes nervs)

Galvenie kritēriji pacienta nosūtīšanai ārsta vai cita speciālista atzinuma un/vai ārstēšanas saņemšanai ir šādi:

- Redzama iedzimta vai traumas rezultātā iegūta auss deformācija;
- Aktīva auss tecēšana anamnēzē pēdējo 90 dienu laikā;
- Pēkšņs vai strauji progresējošs dzirdes zudums vienā vai abās ausīs pēdējo 90 dienu laikā;
- Akūts vai hronisks reibonis;
- Audiometriskā atšķirība starp gaisa un kaula vadāmību ir vienāda vai lielāka par 15 dB pie 500 Hz, 1000 Hz un 2000 Hz;
- Acīmredzami pierādījumi par ievērojamu auss sēra uzkrāšanos vai svešķermeni auss kanālā;
- Sāpes vai diskomforts ausī;

- Neparasts bungādiņas un auss kanāla izskats, piemēram:
 - ārējā dzirdes kanāla iekaisums
 - perforēta bungādiņa
 - citas anomālijas, kuras dzirdes veselības aprūpes speciālists uzskata par medicīnisku problēmu

Dzirdes veselības aprūpes speciālists var nolemt, ka nosūtīšana nav piemērota vai pacienta interesēs, ja:

- Ja ir pietiekami pierādījumi, ka veselības stāvoklis ir pilnībā izmeklējis medicīnas speciālists un ir nodrošināta jebkāda iespējamā ārstēšana
 - Stāvoklis nav būtiski pasliktinājies vai mainījies kopš iepriekšējās izmeklēšanas un/vai ārstēšanas
 - Ja pacients ir pieņēmis apzinātu un kompetentu lēmumu nepiekrīst ieteikumam meklēt ārsta atzinumu, ir pieļaujams turpināt ieteikt atbilstošas dzirdes aparātu sistēmas, ņemot vērā šādus apsvērumus:
 - Ieteikumam nebūs negatīvas ietekmes uz pacienta veselību vai vispārējo labsajūtu
 - Ieraksti apliecina, ka ir veikti visi nepieciešamie apsvērumi par pacienta interesēm
- Ja tas ir juridiski nepieciešams, pacients ir parakstījis atrunu, lai apstiprinātu, ka ieteikums par nozīmējumu nav akceptēts un ka tas ir apzināts lēmums.

Svarīga drošības informācija

Pirms lietotnes lietošanas izlasiet attiecīgo drošības informāciju turpmākajās lappusēs.

Klīniskie ieguvumi

Programmas pašas par sevi nesniedz tiešu klīnisku labumu galalietotājam, bet sniedz citus ieguvumus, kas galvenokārt ir saistīti ar lietojamību. Klīniskos ieguvumus nodrošina tikai dzirdes aparāti. Lietotne paredzētajiem lietotājiem nodrošina šādus ieguvumus:

- Nodrošina iespēju pielāgot un saglabāt dzirdes aparāta iestatījumus individuālām vajadzībām ierobežotā diapazonā, kā definēts sākotnējā pieregulējumā, piemēram, lai risinātu konkrētas vajadzības. Tas var palīdzēt uzlabot klausīšanās komfortu un apmierinātību ar dzirdes aparātiem noteiktās klausīšanās situācijās (piemēram, samazinot skaļumu trokšņainās klausīšanās vidēs).

Blakusparādības

Lūdzu, ņemiet vērā, ka blakusparādības nav saistītas ar lietotni, bet gan ar saderīgajiem dzirdes aparātiem. Fizioloģiskos dzirdes aparātu lietošanas blakusefektus, piemēram, tinītu, reiboni, ausu sāra uzkrāšanos, pārāk lielu spiedienu, svīšanu vai mitrumu, tulzinas, niezi un/vai izsitumus, smaguma vai spiediena sajūtu un tā sekas, piemēram, galvassāpes un/vai sāpes ausīs, var novērst vai mazināt dzirdes veselības aprūpes speciālists.

Dzirdes aparāti var pakļaut pacientus augstāka līmeņa skaņas iedarbībai, kas var mainīt dzirdes sliksni frekvenču diapazonā, ko ietekmē akustiskā trauma.

Lietošanas ierobežojumi

Lietotnes lietošana ir ierobežota ar saderīgās ierīces / ierīču iespējām.

Par jebkuru nopietnu incidentu, kas ir noticis saistībā ar lietotni, ir jāziņo ražotāja pārstāvim un dzīvesvietas valsts kompetentajai iestādei. Nopietns starpgadījums ir jebkurš starpgadījums, kas tieši vai netieši ir izraisījis, varētu būt izraisījis vai varētu izraisīt kādu no šīm situācijām:

- a. pacienta, lietotāja vai citas personas nāve
 - b. īslaicīga vai pastāvīga pacienta, lietotāja vai citas personas veselības stāvokļa nopietnu pasliktināšanās
 - c. nopietns drauds sabiedrības veselībai
- Lai ziņotu par neparedzētu darbību vai notikumu, lūdzu, sazinieties ar ražotāju vai pārstāvi.

Svarīga drošības informācija

Pirms lietotnes lietošanas izlasiet attiecīgo drošības informāciju turpmākajās lappusēs.

Drošības paziņojums

Pacientu dati ir privāti dati, un to aizsardzība ir svarīga:

- Gādājiet, lai viedtālrunos būtu instalēti jaunākie operētājsistēmas drošības atjauninājumi. Iespējotiet automātisko atjaunināšanu.
- Gādājiet, lai jūsu instalētā lietotnes versija būtu atjaunināta
- Izmantojiet savus dzirdes aparātus tikai ar oriģinālajām Sonova lietotnēm, kas iegūtas oficiālos veikalos.
- Obligāti izmantojiet drošas paroles un nevienam neizpaužiet savus akreditācijas datus
- Bloķējiet savu tālruni ar PIN kodu un / vai biometrijas datiem (piemēram, pirksta nospiedumu, seju), un iestatiet, lai tālrunis automātiski bloķētos pēc vairāku minūšu neaktivitātes.
- Gādājiet, lai instalētajām lietotnēm būtu tikai tām nepieciešamās atļaujas
- Neveiciet savu dzirdes aparātu savienošanu pārī ar Bluetooth® sabiedriskā vietā. Tas ir jādara, lai izvairītos no nevēlama trešo pušu traucējumu riska. Savienošanu pārī ar Bluetooth® ieteicams veikt mājās.
- NEIZMANTOT tālrunus, kuriem ir noņemta oriģinālā programmatūra, kas sniedz kontroli pār dažādām ierīces apakšsistēmām. Pārliecinieties, ka dati vienmēr ir drošībā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis saraksts nav izsmelošs.

- Pārsūtot datus pa nedrošiem kanāliem, nosūtiet anonīmus datus vai šifrējiet tos.
- Aizsargājiet savu viedtālruna datu dublējumu ne tikai no datu zuduma, bet arī no zādzības.
- Noņemiet visus datus no viedtālruna, kuru vairs neizmantos vai kurš tiks likvidēts.

Programmatūras apkope

Mēs pastāvīgi uzraugām tirgū saņemtās atsauksmes (atgriezenisko saiti) par mūsu produktiem. Ja jums rodas kādas problēmas ar jaunāko lietotnes versiju, sazinieties ar vietējo ražotāja pārstāvi un / vai sniedziet atsauksmes veikalā App Store vai Google Play veikalā.

- ⚠ Iestatījumu maiņa, piemēram, skaļuma samazināšana, dzirdes aparātu izslēgšana vai trokšņa samazināšanas palielināšana, var izraisīt grūtības sadzirdēt satiksmes trokšņus.
- ⓘ Ja dzirdes aparāti neatbild ierīcei neparastu lauka traucējumu dēļ, pārvietieties tālāk no traucējošā lauka. Aktivizējiet Bluetooth. Lai izveidotu savienojumu ar jūsu dzirdes aparātiem, ir jābūt iespējotai tehnoloģijai Bluetooth. Ja dzirdes aparāti nereaģē, pārbaudiet, vai tie ir ieslēgti un vai akumulators nav izlādējies.

- ⓘ Instrukcijas ir pieejamas šajā vietnē: unitron.com/appguide Adobe® Acrobat® PDF formātā. Lai tās skatītu, jums ir jābūt instalētai programmai Adobe Acrobat Reader. Lai to lejupielādētu, apmeklējiet vietni [Adobe.com](https://www.adobe.com).
- ⓘ Lai saņemtu bezmaksas instrukciju kopiju papīra formātā, sazinieties ar vietējo Unitron pārstāvi. Kopija tiek nosūtīta 7 dienu laikā.



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland



Un importētājs Eiropas Savienībā:
Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen, Germany

Galvotājs Austrālijā:
Sonova Australia Pty Ltd
12 Inglewood Place,
Norwest NSW 2153
Austrālija