

Aplicación Remote Plus de Unitron

Guía de usuario



Introducción

Uso previsto

La aplicación Remote Plus de Unitron está destinada a usuarios de audífonos que deseen ajustar determinadas características de los audífonos de Unitron a través de dispositivos Android e iOS de Apple¹.

Si el profesional de la salud auditiva ofrece la funcionalidad [Percepciones](#) al usuario de audífonos y este la activa, dicha característica le permitirá al usuario enviar datos de los audífonos relacionados con su experiencia de escucha a su profesional de la salud auditiva.

Información sobre compatibilidad:

- ⚠ Para usar los audífonos inalámbricos con Bluetooth de Unitron se necesita la aplicación Remote Plus de Unitron. La aplicación Remote Plus de Unitron puede usarse en dispositivos con Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) y es compatible con los teléfonos iPhone 5s o posteriores que cuenten con la versión 10.2 o posterior del sistema operativo iOS. La aplicación Remote Plus de Unitron puede utilizarse en dispositivos con certificación de los Servicios de Google para Móviles (Google Mobile Services, GMS) que sean compatibles con Bluetooth 4.2 y la versión 6.0 o posterior del sistema operativo Android.

- ⓘ [Algunos teléfonos cuentan con sonidos de teclas o tonos de teclado que se pueden transmitir a los audífonos. Para evitarlo, vaya a los ajustes de su teléfono, seleccione los sonidos y asegúrese de que todos los sonidos de teclas y tonos de teclado están desactivados.](#)

¹ Teléfonos compatibles: la aplicación Remote Plus de Unitron únicamente puede usarse en teléfonos con tecnología Bluetooth® Low Energy.

La marca Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas por Bluetooth SIG, Inc.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone e iOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.


Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.



Contenido

- Descripción general de la aplicación 4
- Política de privacidad 5
- Emparejamiento con audífonos 6
- Pantalla principal..... 7
- Cambio de programas en los audífonos 8
- Calificaciones 9
- Menú de configuración10
- Información sobre cumplimiento 11
- Información y descripción de símbolos12


Descripción general de la aplicación

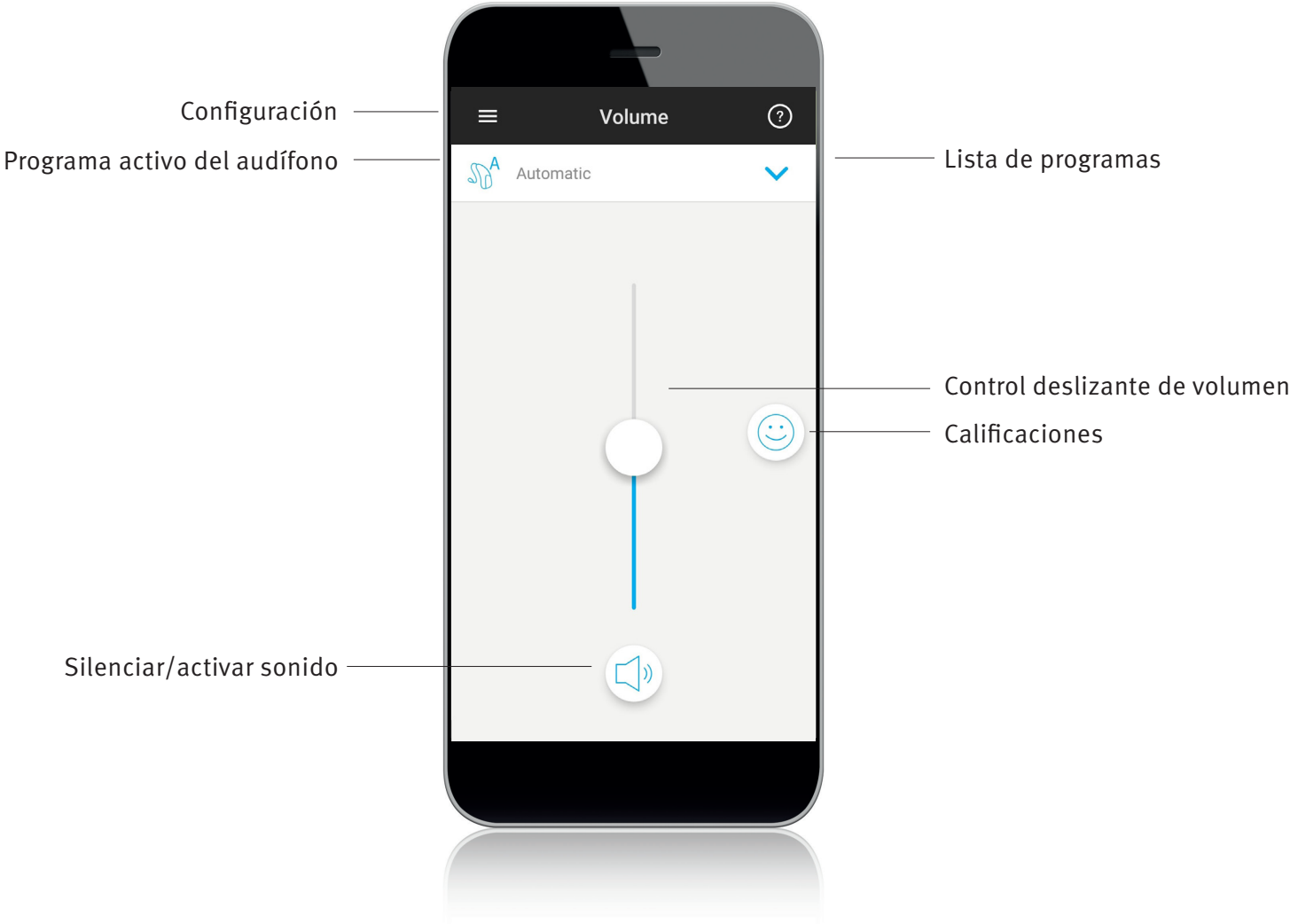

Política de privacidad


Aceptación del aviso de privacidad de la aplicación

Para usar la aplicación Remote Plus de Unitron, debe aceptar el aviso de privacidad y el análisis de los datos anónimos del uso desde la aplicación.

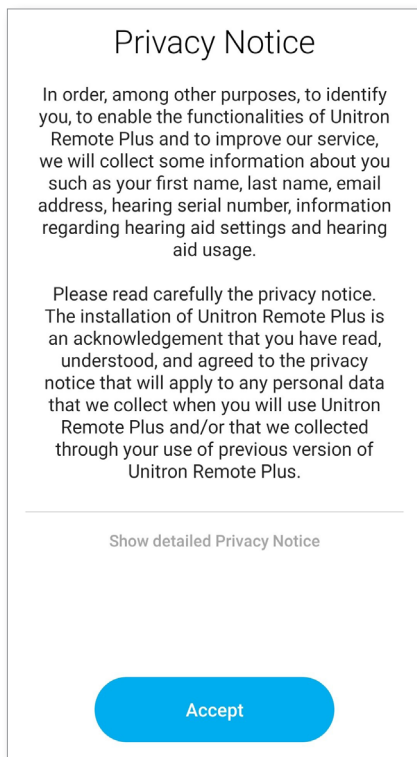


Activar Percepciones

Para activar la función **Percepciones**, pulse el botón «Activar». Para saltarse este paso, pulse el botón «Quizás más tarde».

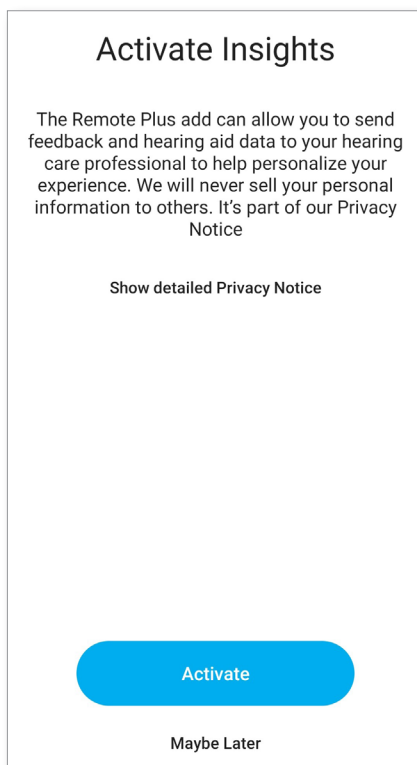


Emparejamiento con audífonos

Detección de los audífonos

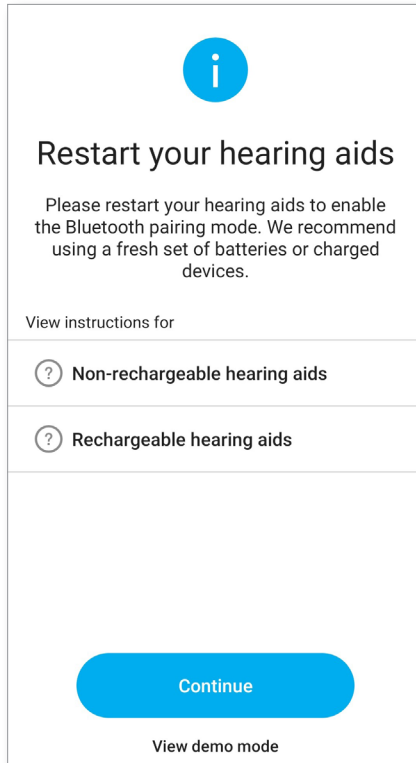

- ① Si sus audífonos tienen un compartimento para la pila, reinicie sus audífonos abriendo y cerrando dicho compartimento. Si sus audífonos no tienen un compartimento para la pila, entonces apague cada uno de los audífonos pulsando la parte inferior del botón hasta que el LED se vuelva de color rojo (4 segundos). A continuación, encienda nuevamente el audífono presionando el mismo botón hasta que el LED se vuelva de color verde (2 segundos).
- ① Siempre puede seleccionar el modo «demostración» para probar la aplicación sin conectar un audífono de Unitron y obtener una primera impresión de las funcionalidades. En este modo, no se dispone de ninguna funcionalidad de mando a distancia para sus audífonos.

Selección de los audífonos

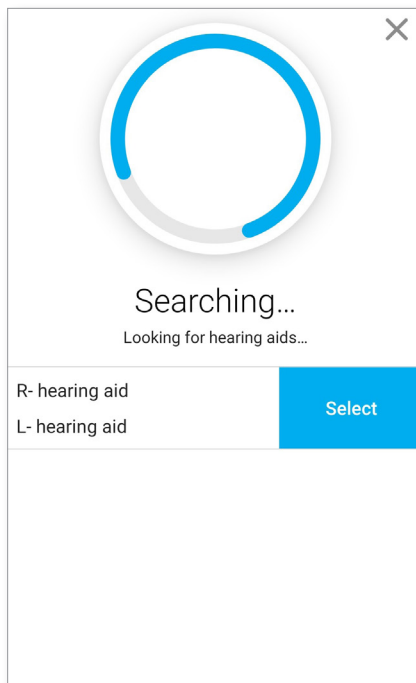


- ① Si la aplicación detectó más de un par de dispositivos, pulse el botón en su audífono para que el dispositivo deseado aparezca resaltado en el aplicación.

Pantalla principal

Ajuste del volumen del audífono


Mueva el control deslizante hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el volumen del audífono en ambos lados.

Pulse el botón «Silenciar» debajo del control deslizante para silenciar o activar el sonido de los audífonos.

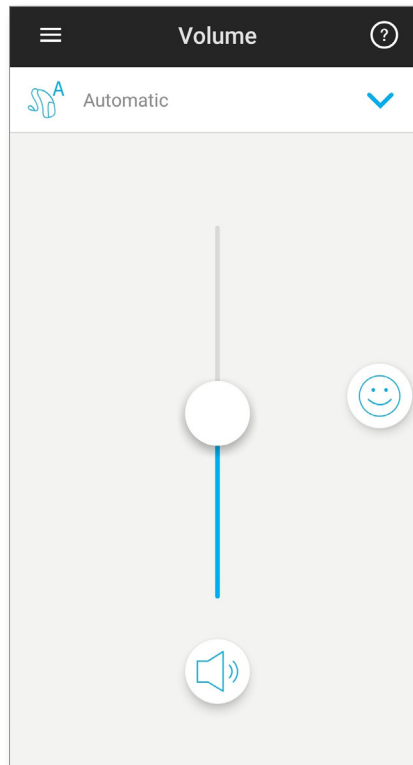

División del volumen


Si está activada la opción «Selección de lado» en la configuración de la aplicación, aparecerá otro botón sobre el control deslizante. Pulse el botón «Dividir» para controlar el volumen en cada audífono por separado.

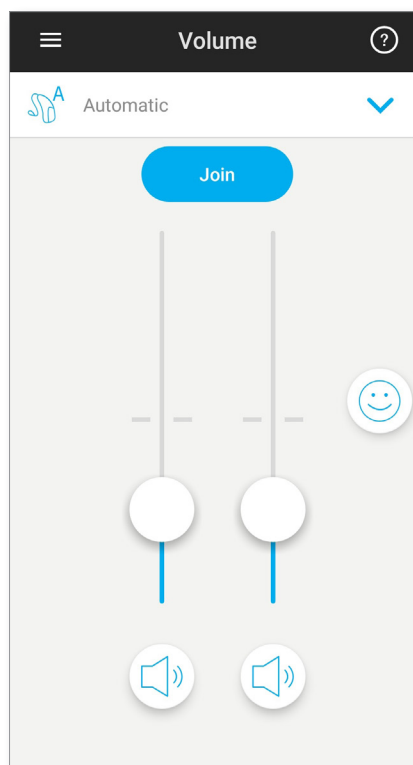


Cambio de programas en los audífonos



Selección de otro programa

Pulse la flecha situada junto al nombre del programa actual para ver todos los programas disponibles. Pulse el programa deseado.

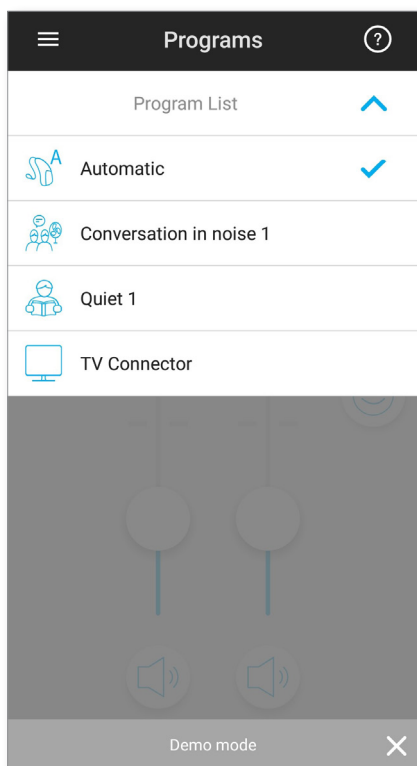

Ajustes avanzados de los programas

Hay disponibles más ajustes en función de la configuración de los audífonos y las fuentes de audio conectadas (TV Connector). Pulse el botón  en la esquina inferior derecha para acceder a estas opciones:

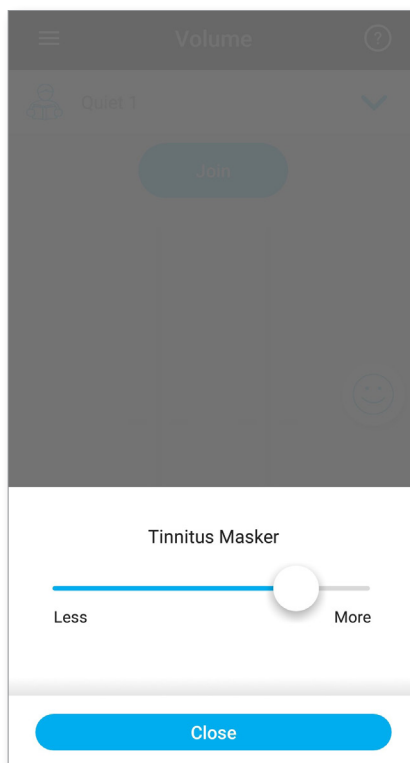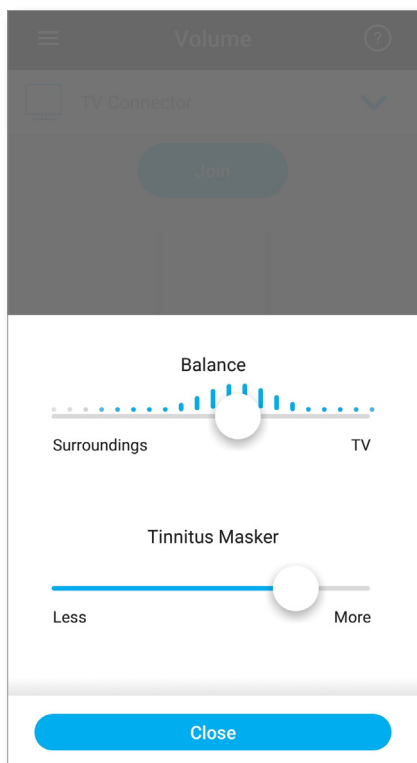


Calificaciones


Si activó la función **Calificaciones**, verá el icono de una cara sonriente (😊) en el lado derecho de la pantalla principal. Pulse en él para enviar comentarios a su médico.

Valore su experiencia


A. Elija entre satisfecho o insatisfecho.

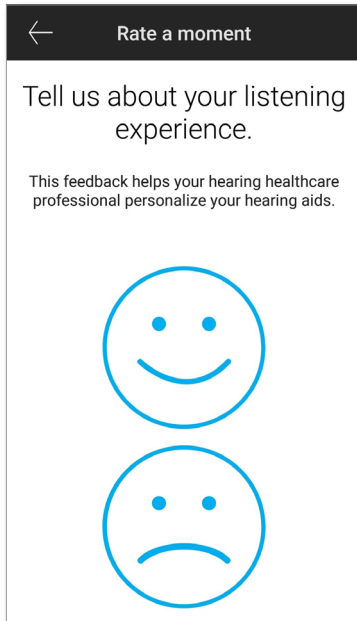


B. Seleccione el entorno donde se encuentra en ese momento.

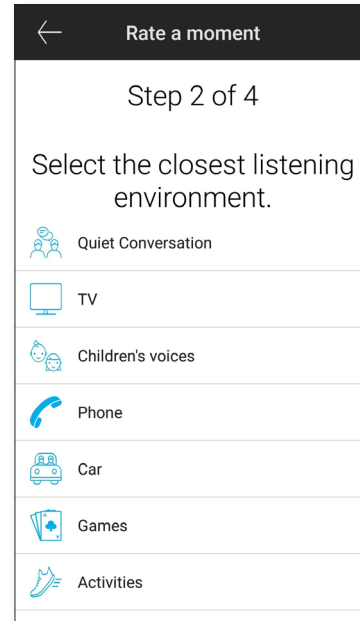

C. Si eligió la opción «Insatisfecho», puede escoger, a partir de una lista predeterminada, la opción que mejor describa el problema.

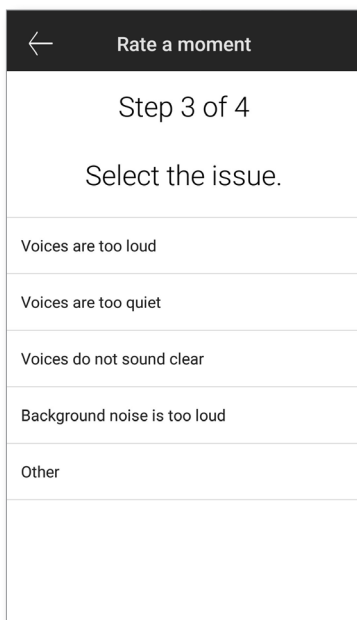


D. Vea un resumen de sus comentarios y añada más información (opcional). Pulse el botón «Enviar» para enviar el comentario a su profesional de la salud auditiva.

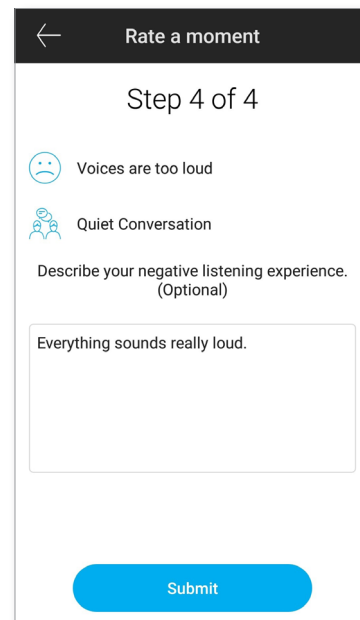


Menú de configuración

La aplicación está disponible en varios idiomas. Esta usará automáticamente el idioma del sistema operativo de su teléfono. Si no es compatible con el idioma del teléfono, el idioma predeterminado será el inglés.

1) Pulse el  icono en la pantalla principal para acceder al menú de configuración.

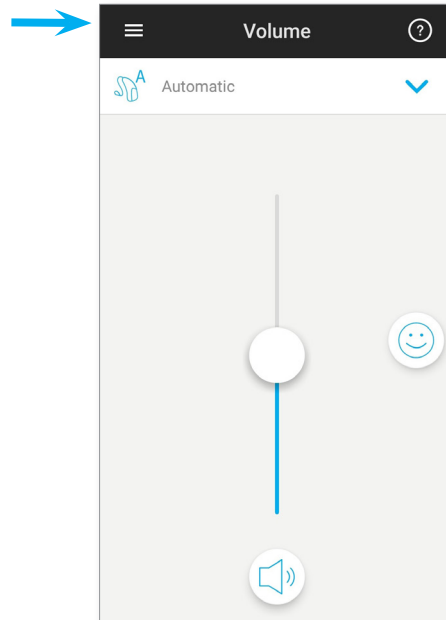

- 2) Seleccione «[Configuración de la aplicación](#)» para acceder a la configuración de la aplicación.
- 3) Seleccione «[Mis audífonos](#)» para acceder a los ajustes específicos de los audífonos.
- 4) Seleccione «[Percepciones](#)» para ver la política de privacidad de Percepciones, la información de la funcionalidad o para desactivar la misma.
- 5) Seleccione «[Vídeos](#)» para ver vídeos de instrucciones.
- 6) Seleccione «[Preguntas frecuentes](#)» para ver las preguntas frecuentes sobre la aplicación y los audífonos en el navegador web del teléfono.

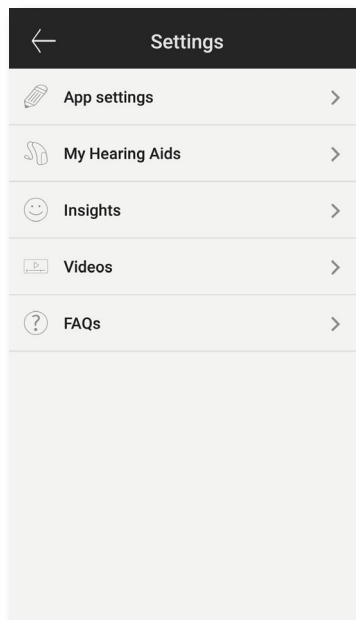

Información sobre cumplimiento

Declaración de conformidad

Por la presente, Sonova AG declara que este producto de Unitron cumple los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a los dispositivos médicos. El texto completo de la declaración de conformidad se puede obtener del fabricante o del representante local de Unitron, cuya dirección puede encontrar en la lista disponible en <http://www.unitron.com> (localizaciones internacionales).

- ① Si los audífonos no responden al mando a distancia debido a una alteración inusual del campo, aléjese del campo que la provoca.
- ① Las instrucciones están disponibles en: unitron.com/appguide en formato PDF de Adobe® Acrobat®. Para verlas, debe tener instalado Adobe Acrobat Reader. Visite Adobe.com para descargar este programa.
- ① Para obtener una copia impresa gratuita de las instrucciones, póngase en contacto con su representante local de Unitron. La copia se le enviará en el plazo de 7 días.

Información y descripción de símbolos



Con el símbolo CE, Sonova AG confirma que este producto Unitron, incluidos los accesorios, cumple los requisitos de la Directiva 93/42/CEE sobre dispositivos médicos.

Los números después del símbolo CE se corresponden con el código de las instituciones certificadas que fueron consultadas en las directivas mencionadas.



Este símbolo indica que es importante para el usuario leer y tener en cuenta la información relevante que aparece en esta guía de usuario.



Este símbolo indica que es importante para el usuario prestar atención a las advertencias expuestas en esta guía de usuario.



Información importante sobre el manejo y el uso efectivo del producto.




Símbolo de derechos de autor



Este símbolo debe ir acompañado por el nombre y la dirección del fabricante (quien pone este dispositivo en el mercado).



La marca Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas por Bluetooth SIG, Inc. Cualquier uso que Unitron realice de dichas marcas será bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

 Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland

unitron.com

CE
0459

© 2018-2019 Sonova AG. All rights reserved.
A/2019-04 029-6231-06