

Unitron Remote Plus-app

Brugervejledning



Kom godt i gang

Beregnet brug

Unitron Remote Plus-appen er beregnet til, at brugere af høreapparater kan finindstille visse aspekter af Unitron-høreapparater gennem Android- og Apple iOS-enheder¹.

Hvis hørespecialisten tilbyder funktionerne **Insights** til brugeren af høreapparat og denne accepterer, kan brugeren af høreapparat sende høreapparatdata og -feedback om deres høreoplevelser til deres hørespecialist.

Oplysninger om kompatibilitet:

⚠ Trådløse Unitron Bluetooth-høreapparater er nødvendige for at bruge Unitron Remote Plus-appen. Unitron Remote Plus-appen kan bruges på enheder med Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) og er kompatible med iPhone 5s eller nyere med iOS Version 10.2 eller nyere. Unitron Remote Plus-appen kan bruges på GMS-certificerede (Google Mobile Services) Android-enheder, der understøtter Bluetooth 4.2 og Android OS 6.0 eller nyere.

ⓘ **Visse telefoner har berøringslyde eller tastaturtoner, som kan streames til høreapparatet eller høreapparaterne. For at undgå dette, skal du åbne dine telefonindstillinger, vælge lyde, og sørge for, at alle berøringslyde og tastaturtoner er deaktiveret.**

¹ Kompatible telefoner: Unitron Remote Plus-appen kan kun bruges med telefoner, der understøtter muligheden for Bluetooth®-lavenergiteknologi.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, som ejes af Bluetooth SIG, Inc.

Apple, Apple-logoet, iPhone og iOS er varemærker, som tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke, som tilhører Apple Inc.

Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker, som tilhører Google Inc.



Indhold

Appoversigt	4
Fortrolighedspolitik	5
Par med høreapparater	6
Hovedskærbillede	7
Skift programmer på høreapparatet	8
Vurderinger	9
Menuen Indstillinger	10
Oplysninger vedrørende overholdelse	11
Oplysninger om og forklaring af symboler	12

Appoversigt



Fortrolighedspolitik

Accept af fortrolighedspolitik

For at bruge Unitron Remote Plus-appen, skal du acceptere fortrolighedspolitikken og den anonyme dataanalyse af brug fra appen.

Privacy Notice

In order, among other purposes, to identify you, to enable the functionalities of Unitron Remote Plus and to improve our service, we will collect some information about you such as your first name, last name, email address, hearing serial number, information regarding hearing aid settings and hearing aid usage.

Please read carefully the privacy notice. The installation of Unitron Remote Plus is an acknowledgement that you have read, understood, and agreed to the privacy notice that will apply to any personal data that we collect when you will use Unitron Remote Plus and/or that we collected through your use of previous version of Unitron Remote Plus.

Show detailed Privacy Notice

Accept

Aktivér Insights

For at tilvælge funktionen **Insights**, skal du trykke på knappen Aktivér. Hvis du vil springe dette trin over, skal du trykke knappen ”Måske senere”.

Activate Insights

The Remote Plus add can allow you to send feedback and hearing aid data to your hearing care professional to help personalize your experience. We will never sell your personal information to others. It's part of our Privacy Notice


Show detailed Privacy Notice

Activate

Maybe Later


Par med høreapparater

Registrer dine høreapparater

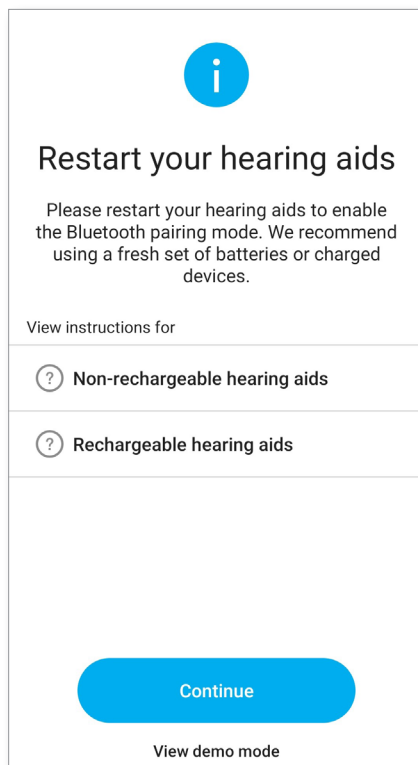

- ① Hvis dine høreapparater har en batterilem, skal du genstarte høreapparaterne ved at åbne og lukke batterilemmen. Hvis dine høreapparater ikke har en batterilem, skal du først slukke hvert høreapparat ved at trykke på den nederste del af batteriet, indtil lysdioden skifter til rød (4 sek.). Tænd derefter for hvert høreapparat ved at trykke på den samme knap indtil lysdioden skifter til grøn (2 sek.).
- ① Du kan altid vælge "demo"-tilstanden for at prøve appen uden at tilslutte et Unitron-høreapparat og få et første indtryk af funktioniteterne. I denne tilstand er der ingen fjernstyringsfunktioner tilgængelige for dit høreapparat.

Vælg dit høreapparat

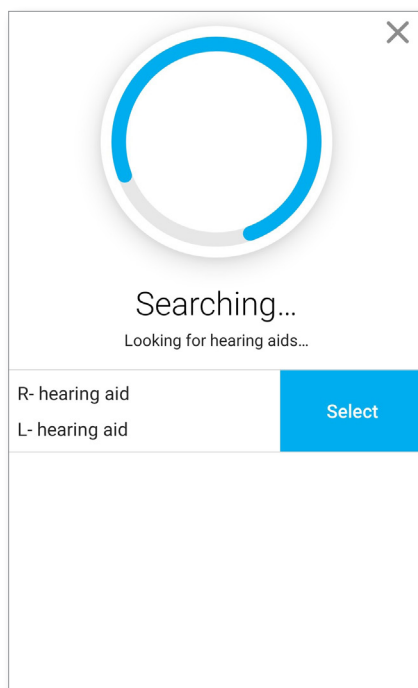


- ① Hvis der registreres mere end et sæt enheder af appen, skal du trykke på knappen på dit høreapparat, og den tilsvarende enhed fremhæves i appen.

Hovedskærbillede


Juster høreapparatets lydstyrke

Flyt skyderen op eller ned for at øge eller sænke høreapparatets lydstyrke på begge sider. Tryk på knappen Dæmp under skyderen for at slå lyden fra eller til på høreapparatet.

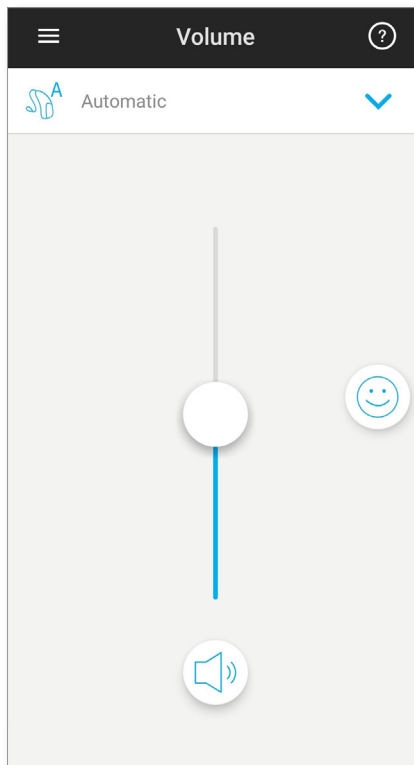

Opsplit lydstyrken


Hvis "Sidevalg" er slået til i appindstillingerne, vises der en knap over skyderen. Tryk på knappen "Opsplit" for at styre lydstyrken på hvert høreapparat separat.

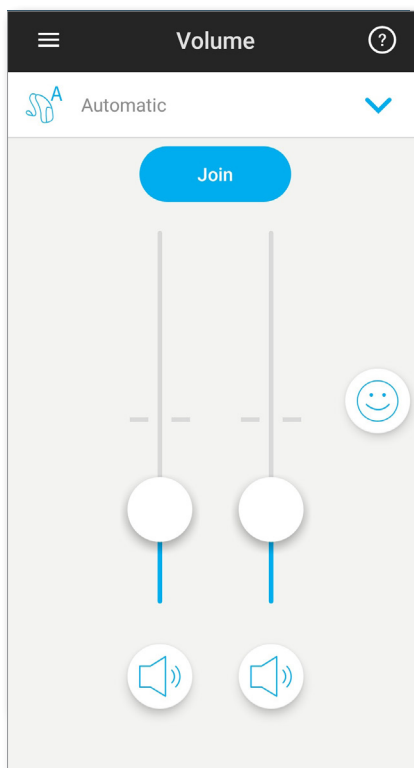

Skift programmer på høreapparatet



Vælg et andet program

Tryk på pilen ved siden af det aktuelle programnavn for at få vist alle tilgængelige programmer. Tryk på det ønskede program.

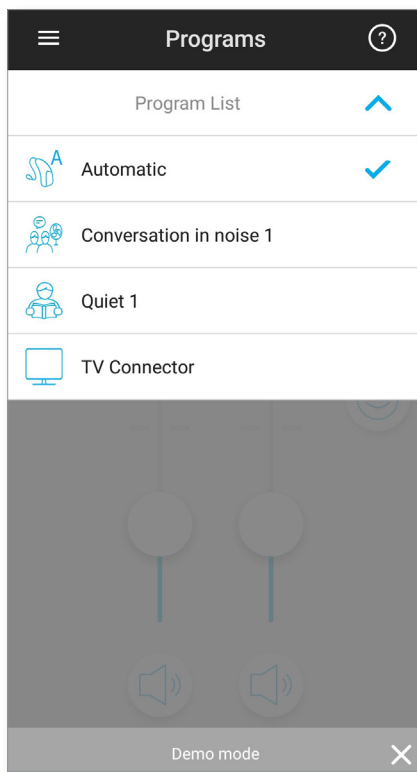

Avancerede programindstillinger

Yderligere justeringer er tilgængelige. De afhænger af dit høreapparats konfiguration eller de tilsluttede lydskilder (TV Connector). Tryk på knappen  i nederste, højre hjørne for at få adgang til disse muligheder:

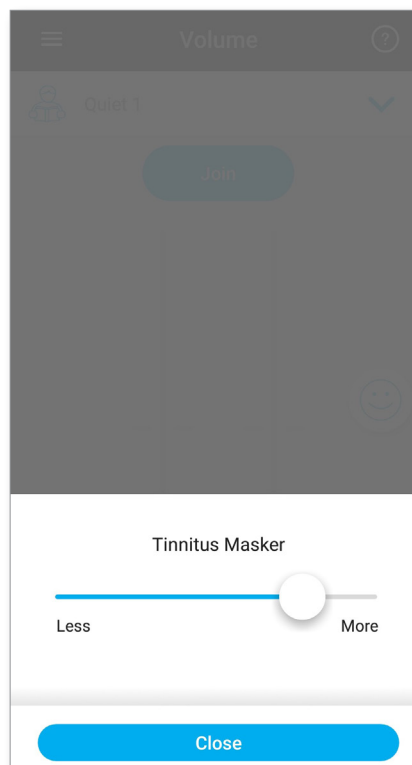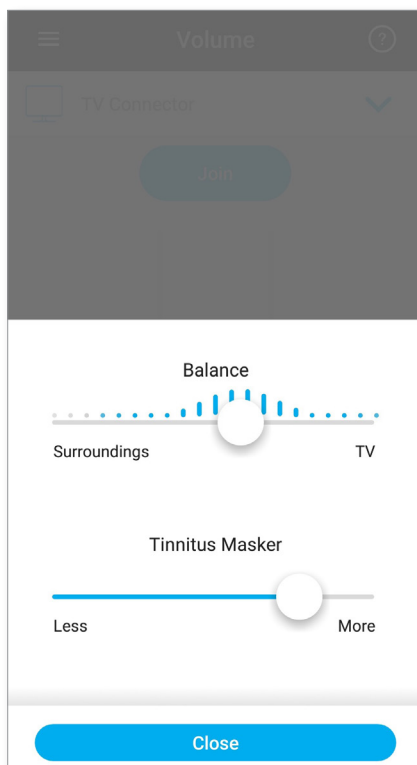


Vurderinger


Hvis du har valgt funktionen **Vurderinger**, vises en glad smiley (😊) i højre side af hovedskærmbilledet. Tryk på den for at sende feedback til din kliniker.

Vurder din oplevelse


A. Vælg mellem enten tilfreds eller utilfreds.

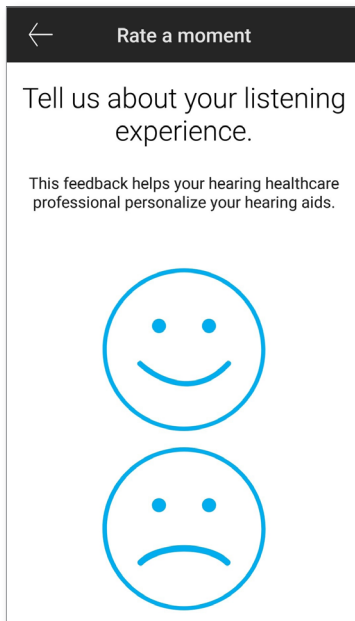


B. Vælg det miljø, du i øjeblikket befinder dig i.

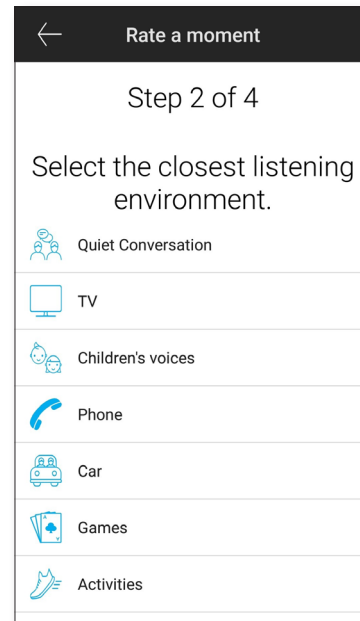

C. Hvis du vælger utilfreds, kan du derefter vælge det, som bedst beskriver problemet, på en forududfyldt liste.

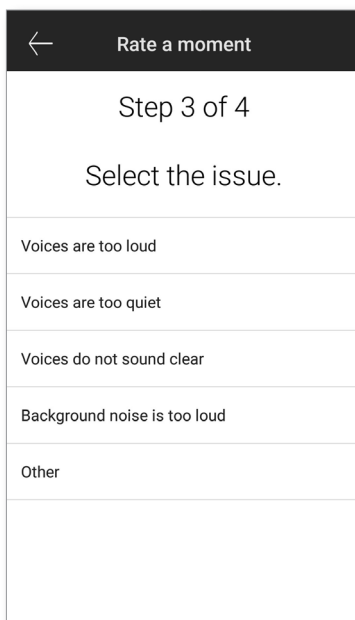


D. Få vist en oversigt over din feedback, og angiv flere kommentarer (valgfri). Tryk på knappen **Send** for at sende din feedback til din hørespecialist.

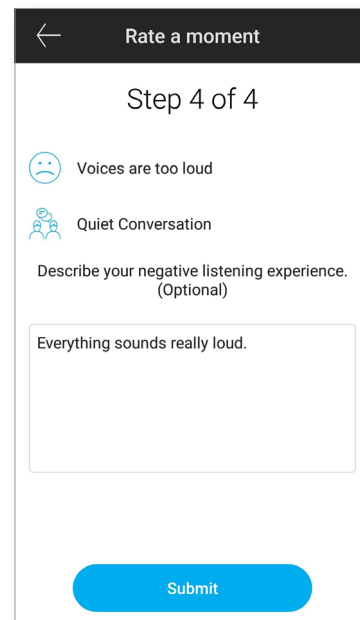


Menuen Indstillinger

Appen er tilgængelig på flere sprog. Den vil automatisk matche sproget i telefonens operativsystem. Hvis telefonens sprog ikke understøttes, er standardsproget engelsk.

1) Tryk på ikonet  på hovedskærbilledet for at få adgang til menuen Indstillinger.

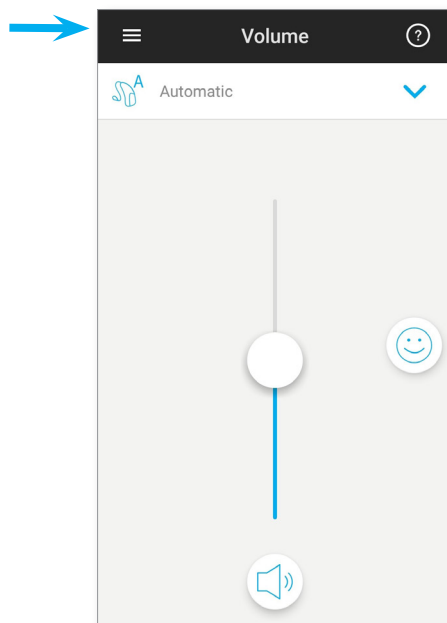

- 2) Vælg **"Appindstillinger"** for at åbne programindstillingerne.
- 3) Vælg **"Mine høreapparater"** for at åbne høreapparatsspecifikke indstillinger.
- 4) Vælg **"Insights"** for at få vist fortrolighedspolitikken for Insights, oplysninger om funktioner eller for at fravælge denne funktion.
- 5) Vælg **"Videoer"** for at få vist Sådan gør du-videoer.
- 6) Vælg **"Oftestillede spørgsmål"** for at få vist ofte stillede spørgsmål om appen og høreapparaterne i telefonens webbrowser.

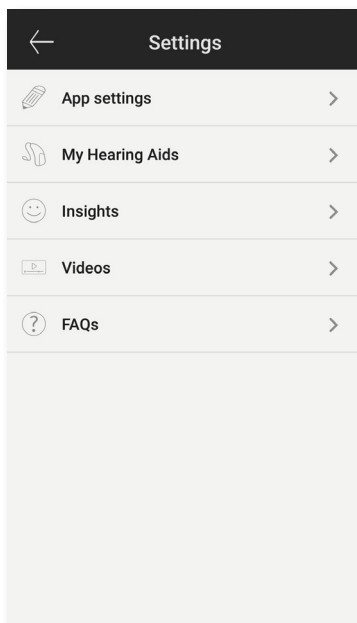

Oplysninger vedrørende overholdelse

Overensstemmelseserklæring

Hermed Sonova AG erklærer, at dette Unitron-produkt overholder de nødvendige krav i direktiv 93/42/EØF angående medicinsk udstyr. Den fulde tekst i overensstemmelseserklæringen kan fås hos producenten eller hos den lokale Unitron-repræsentant, hvis adresse kan tages fra listen på <http://www.unitron.com> (verdensomspændende placeringer).

- ① Hvis høreapparatet ikke reagerer på enheden pga. en usædvanlig feltforstyrrelse, skal du fjerne dig fra det forstyrrende felt.
- ① Du kan finde vejledninger på: unitron.com/appguide i Adobe® Acrobat® PDF-format. Du skal have Adobe Acrobat Reader installeret for at kunne læse dem. Besøg Adobe.com for at downloade.
- ① Hvis du ønsker at få en gratis papirkopi af vejledningen, skal du kontakte din lokale Unitron-repræsentant. Vi sender en kopi inden for 7 dage.

Oplysninger og forklaring af symboler



Med CE-symbolet bekræfter Sonova AG, at dette Unitron-produkt, inklusive tilbehør, opfylder kravene i direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.

Tallene efter CE-symbolet svarer til koden for de certificerede institutioner, der er blevet konsulteret i henhold til ovennævnte direktiver.



Dette symbol angiver, at det er vigtigt, at brugeren læser og tager hensyn til de relevante oplysninger i denne brugervejledning.



Dette symbol indikerer, at det er vigtigt, at brugere tager hensyn til relevante advarsler i denne brugervejledning.



Vigtige oplysninger til håndtering og effektiv brug af produktet.




Copyright-symbol



Dette symbol skal være ledsaget af navn og adresse på fabrikanten (der bringer denne enhed på markedet).



Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Unitron sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

 Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland

unitron.com

CE
0459

© 2018-2019 Sonova AG. All rights reserved.
A/2019-04 029-6231-08