

Unitron Remote Plus

Bruksanvisning



Komma igång

Avsedd användning

Unitron Remote Plus-appen är avsedd för att användare av hörapparater ska kunna justera vissa delar av Unitron-hörapparater via Android- och Apple iOS-enheter¹.

Om en audionom aktiverar [Insikter](#) till användaren av hörapparaterna och användaren väljer att använda funktionen kan data om lyssningsupplevelse skickas till audionom.


Information om kompatibilitet:

Trådlösa 

Unitron Bluetooth-hörapparater krävs för att använda Unitron Remote Plus-appen.

Unitron Remote Plus-appen kan användas på enheter med Bluetooth® Low-Energy (BT-LE)-möjlighet och är kompatibel med iPhone 5s eller en senare version som använder iOS-version 10.2 eller senare.

Unitron Remote Plus-appen kan användas på Google Mobile Services (GMS)-certifierade Android-enheter med stöd för Bluetooth 4.2 och Android OS 6.0 eller senare.

-  [Vissa telefoner har pek- eller knappljud som kan överföras till hörapparaten. För att undvika detta ska du gå till din telefons inställningar, välja ljudinställningar och se till att alla pek- och knappljud är inaktiverade.](#)

¹ Kompatibla telefoner: Unitron Remote Plus-appen kan endast användas på telefoner med möjlighet för Bluetooth® Low-Energy-teknik.

Bluetooth®-ordvarumärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Apple, Apple-logotypen, iPhone och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.



Innehåll

Översikt av app.....	4
Integritetspolicy.....	5
Parkoppling med hörapparat(er)	6
Huvudskärm	7
Ändra program på hörapparat(er).....	8
Betyg	9
Menyn Inställningar.....	10
Följsamhetsinformation.....	11
Information om och förklaring av symboler	12

Översikt av app



Integritetspolicy

Godkänna appens sekretessmeddelande

För att använda Unitron Remote Plus-appen måste du godkänna sekretessmeddelandet och den anonyma dataanalysen om användning från appen.

Privacy Notice

In order, among other purposes, to identify you, to enable the functionalities of Unitron Remote Plus and to improve our service, we will collect some information about you such as your first name, last name, email address, hearing serial number, information regarding hearing aid settings and hearing aid usage.

Please read carefully the privacy notice. The installation of Unitron Remote Plus is an acknowledgement that you have read, understood, and agreed to the privacy notice that will apply to any personal data that we collect when you will use Unitron Remote Plus and/or that we collected through your use of previous version of Unitron Remote Plus.

Show detailed Privacy Notice

Accept

Aktivera Insikter

Tryck på knappen Aktivera för att välja funktionen **Insikter**. Tryck på knappen "Kanske senare" för att hoppa över detta steg.

Activate Insights

The Remote Plus add can allow you to send feedback and hearing aid data to your hearing care professional to help personalize your experience. We will never sell your personal information to others. It's part of our Privacy Notice


Show detailed Privacy Notice

Activate

Maybe Later


Parkoppling med hörapparat(er)

Identifiera din(a) hörapparat(er)

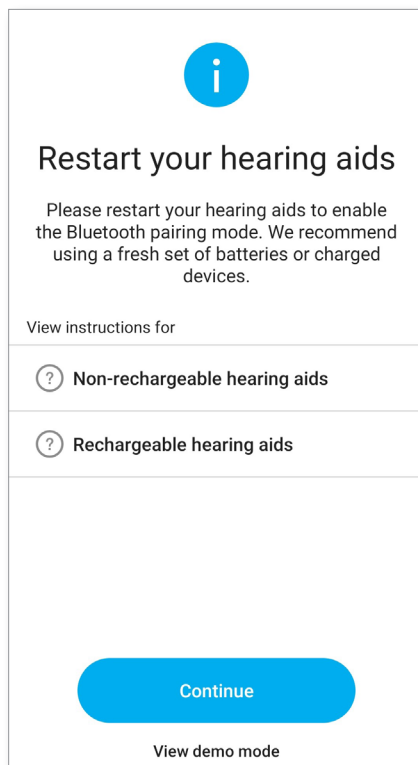

- ① Om din(a) hörapparat(er) har en batterilucka ska du starta om din(a) hörapparat(er) genom att öppna och stänga batteriluckan. Om din(a) hörapparat(er) inte har någon batterilucka ska du först stänga av varje hörapparat genom att trycka på den nedre delen av knappen tills indikatorlampan blir röd (4 sekunder). Starta sedan varje hörapparat genom att trycka på samma knapp tills indikatorlampan blir grön (2 sekunder).
- ① Du kan alltid välja läget "demo" för att prova appen utan att ansluta en Unitron-hörapparat och få ett första intryck av funktionerna. I detta läge finns ingen fjärrkontrollfunktion tillgänglig för dina hörapparater.

Välj din(a) hörapparat(er)

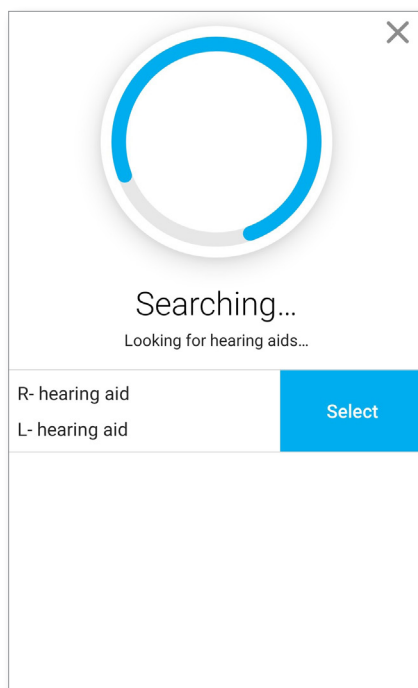


- ① Tryck på knappen på din hörapparat om fler än en uppsättning enheter har upptäckts av appen och motsvarande enhet kommer att markeras i appen.

Huvudskärm


Justera hörapparatens volym

Flytta reglaget upp eller ned för att höja eller sänka hörapparatens volym på båda sidor.
Tryck på ljud av-knappen under reglaget för att stänga av eller slå på hörapparaternas ljud.

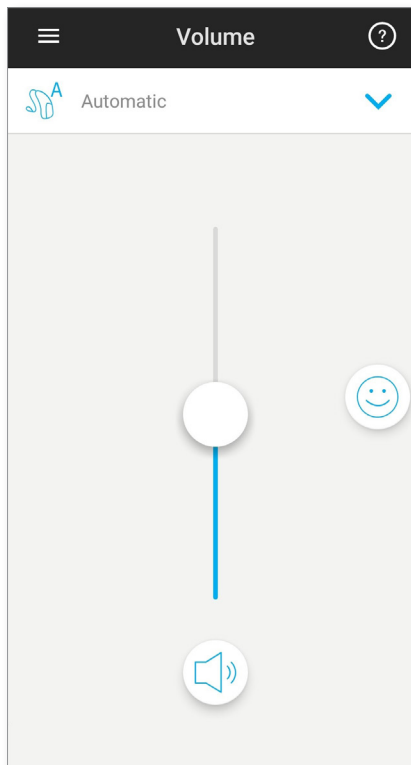

Dela volymen


Om "Sidoval" är aktiverat i appinställningarna visas en knapp ovanför reglaget.
Tryck på knappen "Dela" för att styra volymen separat på varje hörapparat.

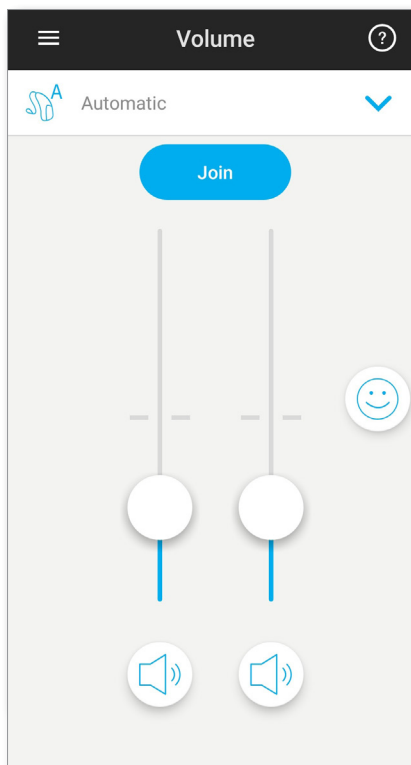


Ändra program på hörapparat(er)



Välja ett annat program

Tryck på pilen bredvid aktuellt programnamn för att se alla tillgängliga program. Tryck på önskat program.

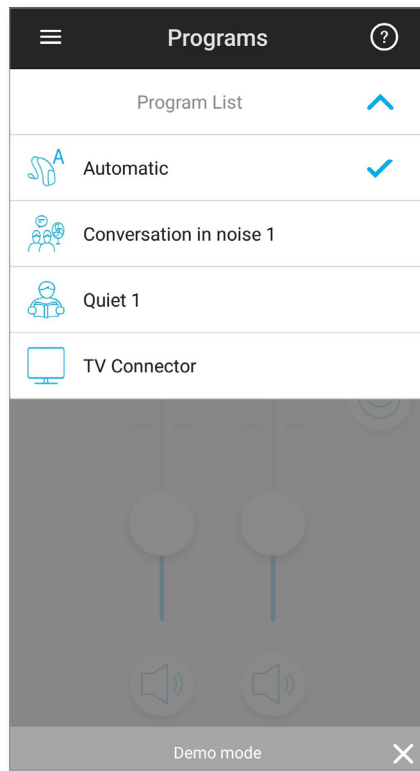

Avancerade programinställningar

Ytterligare justeringar finns beroende på din hörapparats konfiguration eller anslutna ljudkällor (TV Connector). Tryck på knappen  längst ned till höger på skärmen för att komma åt dessa alternativ:

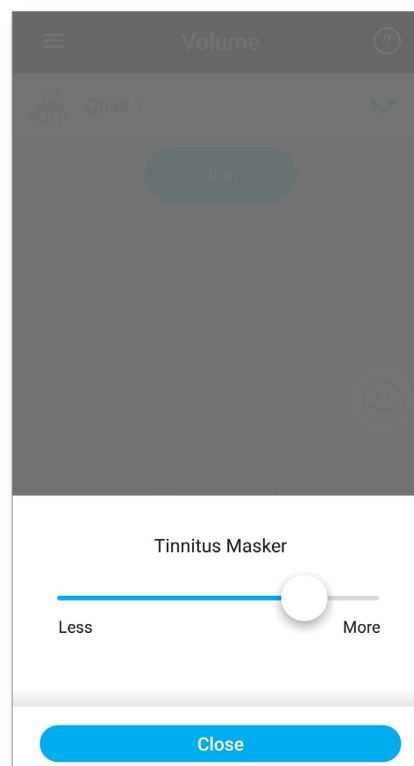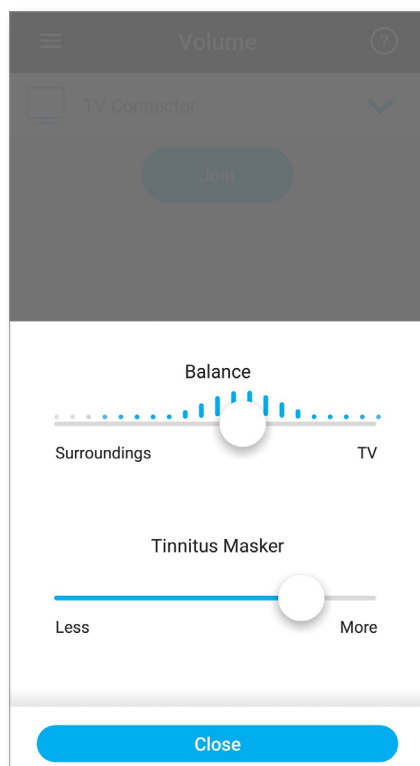

Betyg

Om du valde funktionen **Betyg** ser du en ikon med ett glatt ansikte (😊) till höger på huvudskärmen. Tryck på den för att skicka din upplevelse till din audionom.

Betygsätt din upplevelse

A. Välj mellan antingen nöjd eller missnöjd.

← Rate a moment

Tell us about your listening experience.

This feedback helps your hearing healthcare professional personalize your hearing aids.

😊

☹️

B. Välj miljön du för närvarande befinner dig i.

← Rate a moment

Step 2 of 4

Select the closest listening environment.

- Quiet Conversation
- TV
- Children's voices
- Phone
- Car
- Games
- Activities

C. Om du väljer missnöjd kan du sedan från en fördefinierad lista välja vad som bäst beskriver problemet.

← Rate a moment

Step 3 of 4

Select the issue.

- Voices are too loud
- Voices are too quiet
- Voices do not sound clear
- Background noise is too loud
- Other

D. Se en sammanfattning av din upplevelse och ge fler kommentarer (valfritt). Tryck på knappen "Skicka" för att skicka din upplevelse till din audionom.

← Rate a moment

Step 4 of 4

- ☹️ Voices are too loud
- Quiet Conversation

Describe your negative listening experience. (Optional)


Everything sounds really loud.

Submit


Menyn Inställningar

Appen finns på olika språk. Den matchar automatiskt språket i telefonens operativsystem. Om telefonens språk inte stöds är standardspråket engelska.

1) Tryck på ikonen  på huvudskärmen för att komma åt menyn Inställningar.

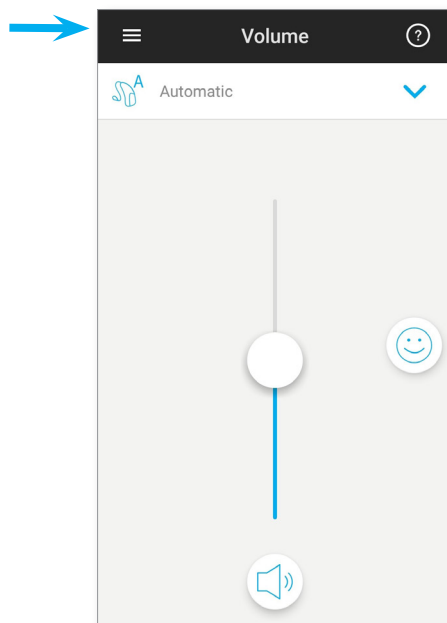

- 2) Välj **Appinställningar** för att komma åt applikationsinställningar.
- 3) Välj **Mina hörapparater** för att komma åt specifika hörapparatsinställningar.
- 4) Välj **Insikter** för att visa integritetspolicyn för Insikter, information om funktionen eller för att välja bort denna funktion.
- 5) Välj **Videor** för att se instruktionsvideor.
- 6) Välj **Vanliga frågor** för att visa vanliga frågor om appen och hörapparaterna i telefonens webbläsare.

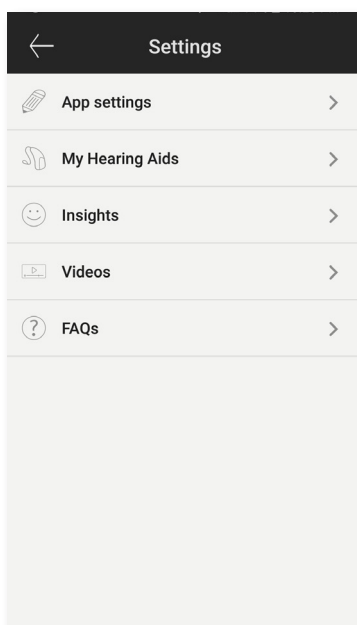

Följsamhetsinformation

Överensstämmelseförklaring

Härmed försäkrar Sonova AG att denna produkt från Unitron uppfyller de väsentliga kraven i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Hela texten för överensstämmelseförklaringen kan erhållas från tillverkaren eller den lokala Unitron-representanten vars adress finns i listan på <http://www.unitron.com> (globala platser).

- ① [Förflytta dig från det störande fältet om hörapparaterna inte svarar på enheten på grund av ovanliga fältstörningar.](#)
- ① [Anvisningar finns tillgängliga på: \[unitron.com/appguide\]\(http://unitron.com/appguide\) i Adobe® Acrobat® PDF-format. För att visa dem måste du ha Adobe Acrobat Reader installerad. Besök \[Adobe.com\]\(http://adobe.com\) för att ladda ned.](#)
- ① [För att erhålla ett gratis pappersexemplar av anvisningarna, kontakta din lokala Unitron-representant. Ett exemplar skickas inom 7 dagar.](#)

Information om och förklaring av symboler



Sonova AG intygar genom CE-symbolen att denna produkt från Unitron – inklusive tillbehör – uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG om radioutrustning och teleterminalutrustning.

Koden efter CE-symbolen identifierar de certifieringsinstitut som konsulterats för ovanstående direktiv.



Denna symbol visar att det är viktigt att användaren läser och beaktar den relevanta informationen i denna bruksanvisning.



Denna symbol visar att det är viktigt att användaren uppmärksammar relevanta varningsmeddelanden i denna bruksanvisning.



Viktig information om hantering och effektiv användning av produkten.




Upphovsrättssymbol



Symbolen ska åtföljas av tillverkarens (som gör produkten tillgänglig på marknaden) namn och adress.



Bluetooth®-ordvarumärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Unitron under licens. Andra varumärken och firmanamn är respektive ägares egendom.

 Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland

unitron.com

CE
0459

© 2018–2019 Sonova AG. All rights reserved.
A/2019-06 029-6231-09