

Unitron Remote Plus -sovellus

Käyttöohje



Aloittaminen

Käyttötarkoitus

Unitron Remote Plus -sovellus on tarkoitettu kuulokojeen käyttäjille. Sen avulla säädetään tiettyjä Unitron-kuulokojeiden toimintoja, kun se on asennettu Android- tai Apple iOS -laitteeseen¹.

Jos kuuloasiantuntija tarjoaa kuulokojeen käyttäjälle [Insights](#)-toimintoa ja tämä ottaa sen käyttöön, kuulokojeen käyttäjä voi lähettää kuuloasiantuntijalle kuulokojetietoja ja palautetta.

Yhteensopivuus

- ⚠ Unitron Remote Plus -sovelluksen käyttöön tarvitaan langaton Unitron Bluetooth -kuulokoje. Unitron Remote Plus -sovellusta voidaan käyttää Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) -yhteensopivissa laitteissa. Se on yhteensopiva iPhone 5s- ja uudempien puhelimien kanssa, joissa on iOS-versio 10.2 tai uudempi. Unitron Remote Plus -sovellusta voidaan käyttää Google Mobile Services (GMS) -sertifioituissa Android-laitteissa, jotka ovat yhteensopivia Bluetooth 4.2- ja Android OS 6.0 -version ja uudempien kanssa.
- ⓘ Tietyissä puhelimissa näytön koskettaminen tai näppäimistön käyttäminen aiheuttaa äänen, joka voidaan siirtää kuulokojeisiin. Voit välttää tämän siirtymällä puhelimen asetuksiin, valitsemalla [Äänet-vaihtoehdon](#) ja varmistamalla, että näppäimistöäännet on poistettu käytöstä.

¹ Yhteensopivat puhelimet: Unitron Remote Plus -sovellusta voidaan käyttää vain Bluetooth® low energy -yhteensopivissa puhelimissa.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta.

Apple, Apple-logo, iPhone ja iOS ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.




CE-merkkiä on haettu vuonna 2018.

Sisältö

Sovelluksen yleiskatsaus	4
Tietosuojakäytäntö.....	5
Muodostaminen laitepariksi kuulokojeiden kanssa.....	6
Pääruutu	7
Kuulokojeiden ohjelman vaihtaminen	8
Arviot.....	9
Asetusvalikko	10
Yhteensopivuustiedot	11
Symbolien tiedot ja selitykset	12

Sovelluksen yleiskatsaus

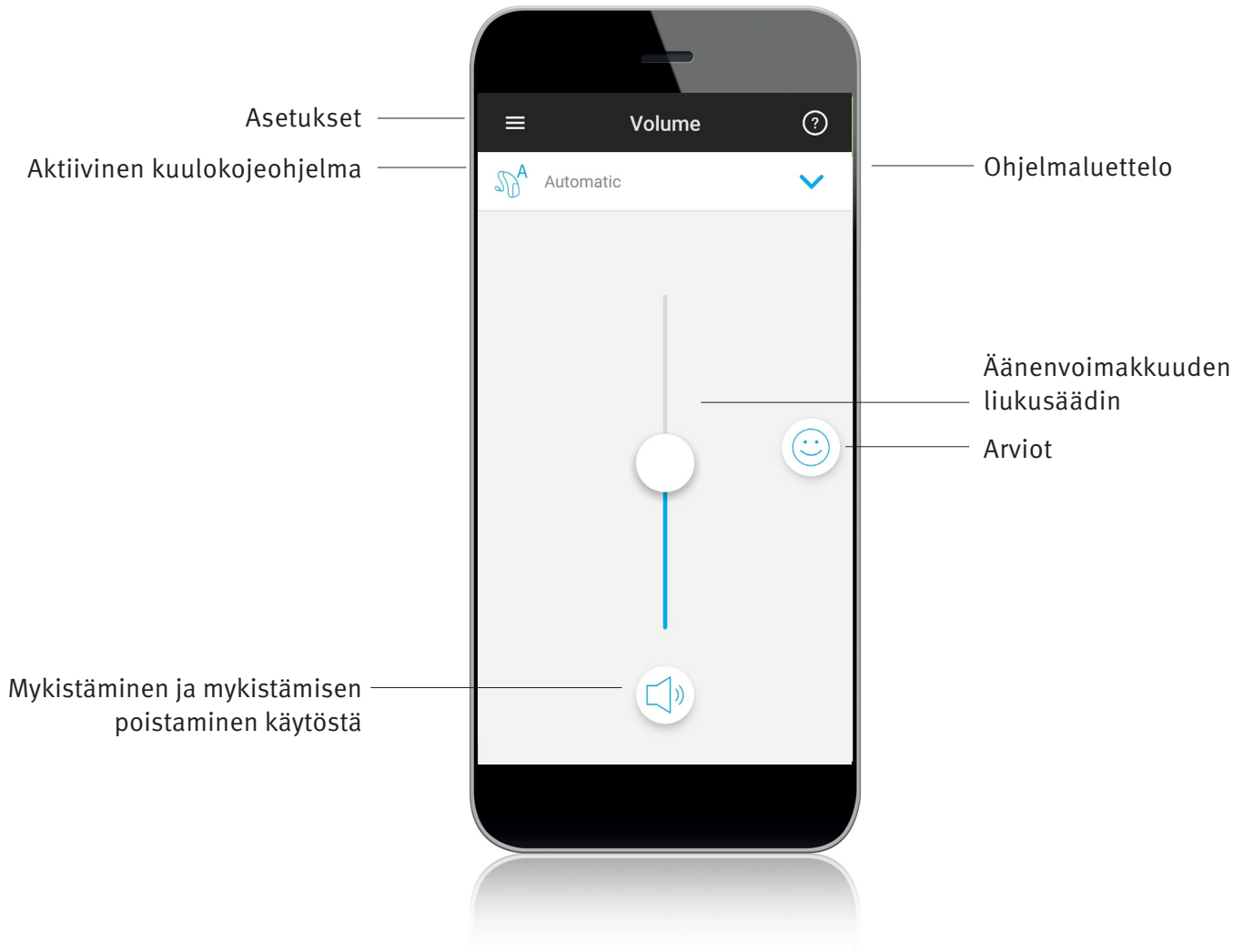

Tietosuojakäytäntö

Sovelluksen tietosuojakäytännön hyväksyminen

Unitron Remote Plus -sovelluksen käyttäminen edellyttää, että hyväksyt tietosuojakäytännön ja sen, että sovelluksen käyttötietoja analysoidaan nimettömästi.

Privacy Notice

In order, among other purposes, to identify you, to enable the functionalities of Unitron Remote Plus and to improve our service, we will collect some information about you such as your first name, last name, email address, hearing serial number, information regarding hearing aid settings and hearing aid usage.

Please read carefully the privacy notice. The installation of Unitron Remote Plus is an acknowledgement that you have read, understood, and agreed to the privacy notice that will apply to any personal data that we collect when you will use Unitron Remote Plus and/or that we collected through your use of previous version of Unitron Remote Plus.

Show detailed Privacy Notice

Accept

Ota Insights käyttöön

Voit ottaa **Insights**-toiminnon käyttöön napauttamalla aktivoimispainiketta. Voit ohittaa tämän vaiheen napauttamalla ”Ehkä myöhemmin”-painiketta.

Activate Insights

The Remote Plus add can allow you to send feedback and hearing aid data to your hearing care professional to help personalize your experience. We will never sell your personal information to others. It's part of our Privacy Notice


Show detailed Privacy Notice

Activate

Maybe Later


Muodostaminen laitepariksi kuulokojeiden kanssa

Kuulokojeiden tunnistaminen

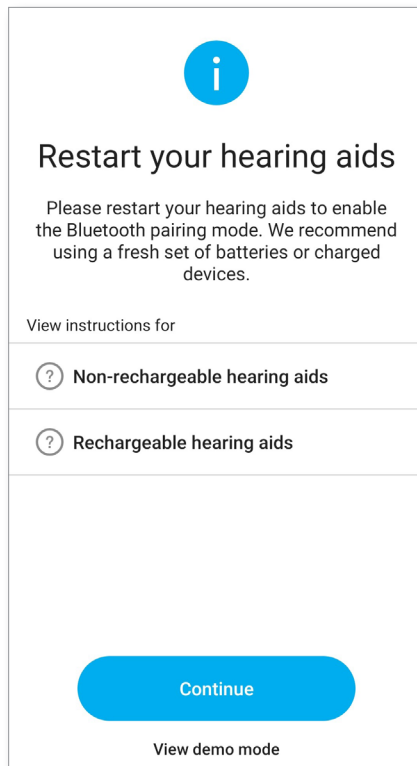

- ① Jos kuulokojeissasi on paristokotelon kansi, voit käynnistää ne uudelleen avaamalla ja sulkemalla kannet. Jos kuulokojeissasi ei ole paristokotelon kantta, kytke kojeet ensin pois päältä painamalla painikkeen alareunaa, kunnes LED muuttuu punaiseksi (4 s). Käynnistä sitten kuulokojeet painamalla samaa painiketta, kunnes LED muuttuu vihreäksi (2 s).
- ① Voit kokeilla sovelluksen käyttämistä yhdistämättä sitä Unitron-kuulokojeeseen ottamalla käyttöön esittelytilan. Silloin saat yleiskatsauksen toiminnoista. Tässä toimintatilassa kuulokojeiden kaukosäätötoiminnot eivät ole käytettävissä.

Kuulokojeiden valitseminen

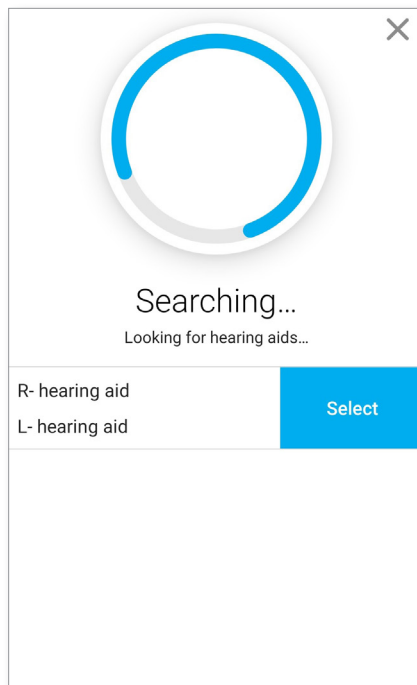


- ① Jos sovellus tunnistaa useampia kuin yhden laitesarjan, paina kuulokojeesi painiketta, niin kyseinen laite korostetaan sovelluksessa.

Pääruutu


Kuulokojeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit suurentaa ja pienentää molempien kuulokojeiden äänenvoimakkuutta siirtämällä liikusäädintä ylös tai alas. Voit mykistää kuulokojeet tai poistaa mykistyksen painamalla liikusäätimen alapuolella näkyvää mykistyspainiketta.

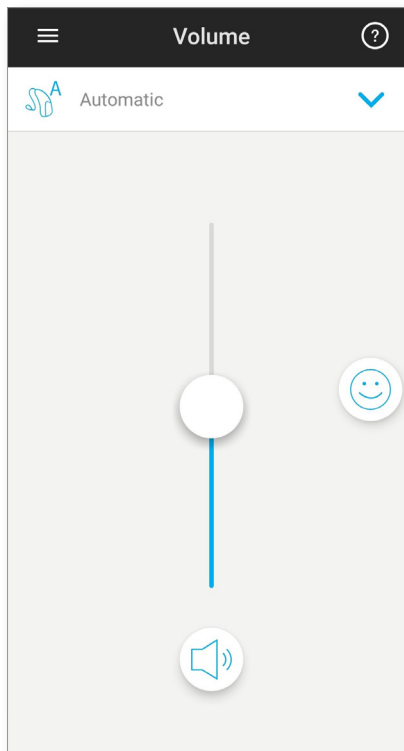

Oikean ja vasemman kuulokojeen äänenvoimakkuuden säätäminen erikseen


Jos sovelluksen asetuksissa on valittu "Oikean ja vasemman kuulokojeen säätäminen erikseen" -vaihtoehto, liikusäätimen yläpuolella näkyy painike. Voit säätää molempien kuulokojeiden äänenvoimakkuutta erikseen napauttamalla "Jaa"-painiketta.

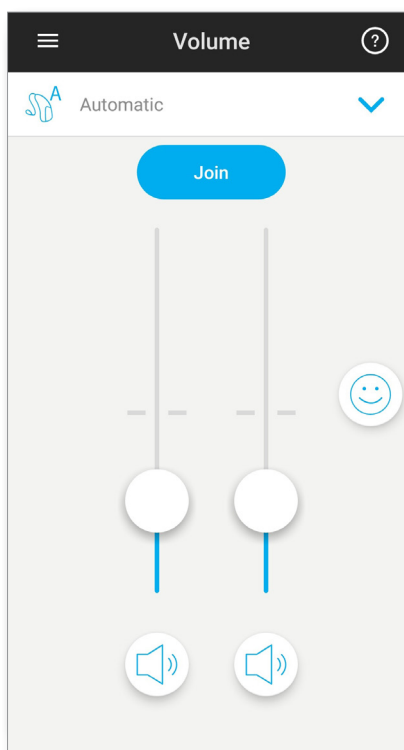


Kuulokojeiden ohjelman vaihtaminen



Toisen ohjelman valitseminen

Näet käytettävissä olevat ohjelmat napauttamalla käytössä olevan ohjelman vieressä näkyvää nuolta. Napauta haluamaasi ohjelmaa.

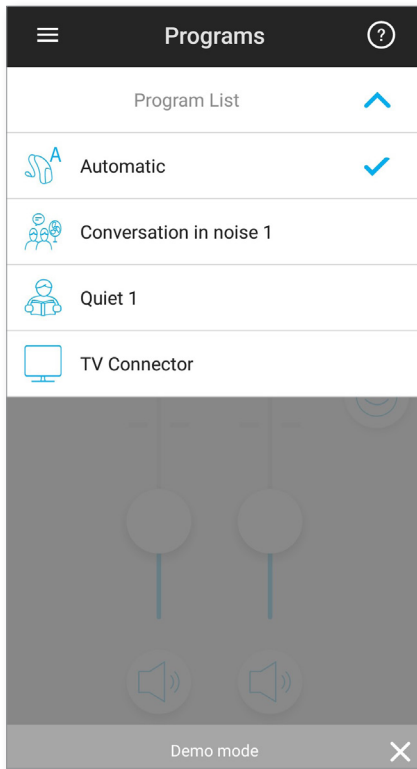

Ohjelman lisäasetukset

Lisäasetukset määräytyvät kuulokojeen asetusten tai yhdistettyjen äänilähteiden mukaan (TV Connector). Saat käyttöösi nämä vaihtoehdot napauttamalla oikeassa alakulmassa näkyvää  -painiketta.

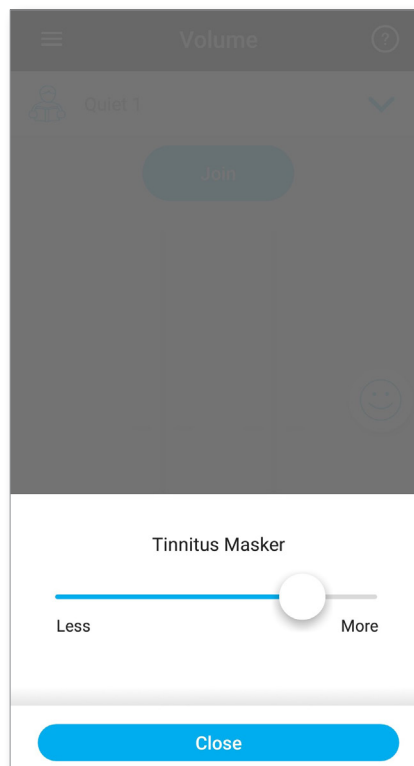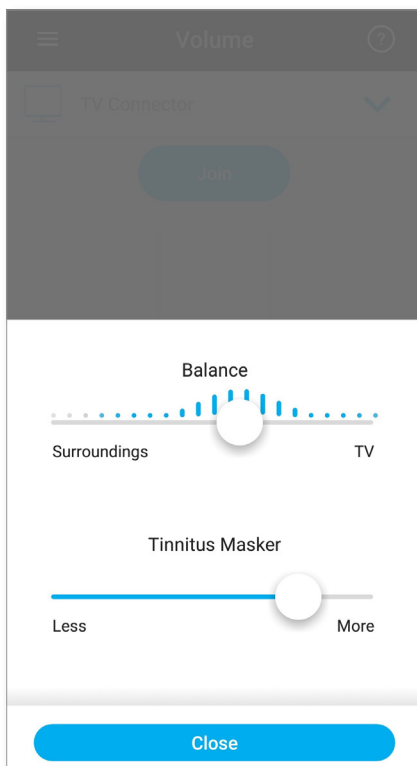


Arviot


Jos olet ottanut **Arviot**-toiminnon käyttöön, pääruudun oikeassa reunassa näkyy hymynaamakuvake (😊). Voit lähettää palautetta kuuloasiantuntijallesi napauttamalla sitä.

Arvioi kokemuksesi


A. Kerro, oletko tyytyväinen vai tyytymätön.

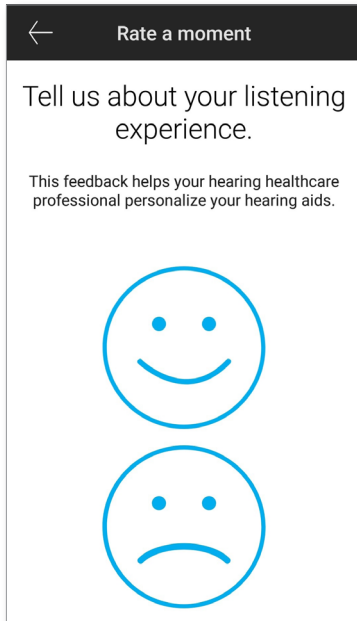


B. Valitse tämänhetkinen ympäristösi.

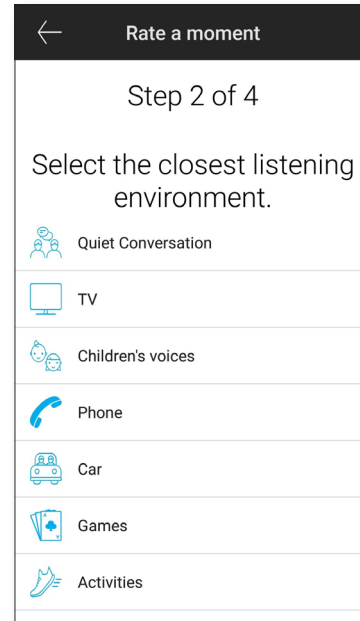

C. Jos ilmoitat olevasi tyytymätön, voit valita ongelman kuvauksen luettelosta.

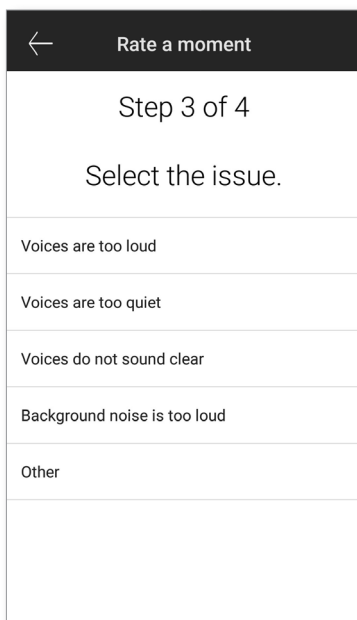


D. Näet yhteenvedon palautteestasi ja voit antaa lisäkommentteja (tämä on valinnaista). Lähteä palautteesi kuuloasiantuntijalle napauttamalla ”Läheta”-painiketta.

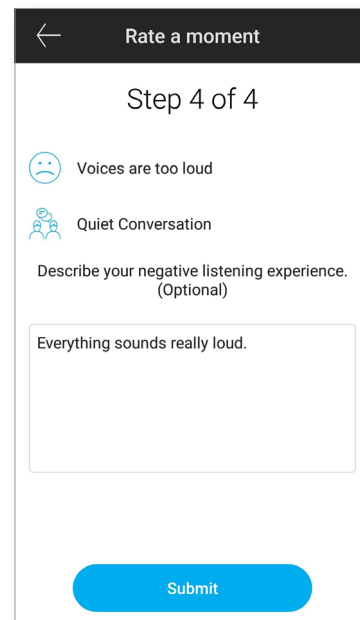


Asetusvalikko

Sovellus on saatavana useina kieliversioina. Siinä otetaan automaattisesti käyttöön puhelimen käyttöjärjestelmän kieli. Jos puhelimen kieltä ei tueta, sovelluksen oletuskieli on englanti.

1) Voit siirtyä asetusvalikkoon napauttamalla pääruudussa näkyvää  -kuvaketta.

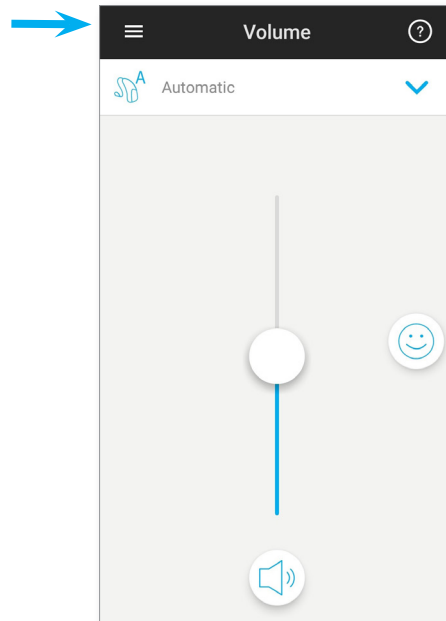

- 2) Voit määrittää sovelluksen asetukset napauttamalla ”[Sovelluksen asetukset](#)” -painiketta.
- 3) Voit määrittää kuulokojeikohtaiset asetukset napauttamalla ”[Omat kuulokojeeni](#)” -painiketta.
- 4) Voit tarkastella Insights tietosuojakäytäntöä tai toiminnon tietoja tai poistaa toiminnon käytöstä napauttamalla ”[Insights](#)”-painiketta.
- 5) Voit katsoa ohjevideoita napauttamalla ”[Videot](#)”-painiketta.
- 6) Voit tarkastella usein kysytyjä sovellusta ja kuulokojeita koskevia kysymyksiä puhelimen selaimessa napauttamalla ”[UKK:t](#)”-painiketta.

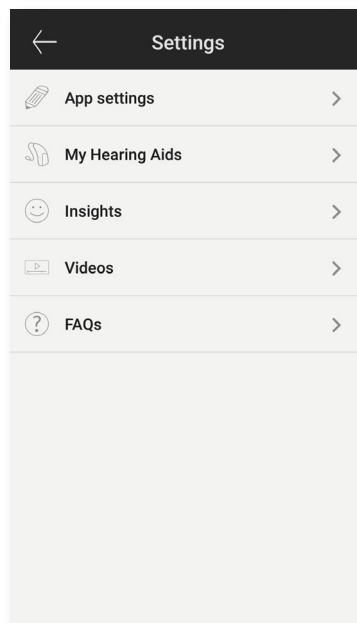

Yhteensopivuustiedot

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Sonova AG vakuuttaa, että tämä Unitron-tuote täyttää lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETA olennaiset vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana valmistajalta tai Unitronin paikalliselta edustajalta, jonka yhteystiedot näkyvät luettelossa osoitteessa <http://www.unitron.com> (koko maailma).

- ① Jos häiriöt vaikuttavat kuulokojeiden ja laitteen väliseen yhteyteen, siirry kauemmas häiriölähteestä.
- ① Ohjeet ovat saatavana osoitteessa unitron.com/appguide Adobe® Acrobat® PDF -muodossa. Niiden lukeminen edellyttää, että Adobe Acrobat Reader on asennettu. Voit ladata sen osoitteesta Adobe.com.
- ① Saat ohjeet maksuttomana paperitulosteena ottamalla yhteyden paikalliseen Unitron-edustajaan. Tuloste lähetetään seitsemän päivän kuluessa.

Symbolien tiedot ja selitykset



CE-symboli osoittaa, että Sonova AG vakuuttaa tämän Unitron-tuotteen lisälaitteineen täyttävän lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETA vaatimukset.

CE-symbolin jälkeen näkyvät numerot vastaavat niiden sertifioidujen laitosten koodeja, joita konsultoitin edellä mainittujen direktiivien vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi.



Tämä symboli osoittaa, että käyttäjän on syytä lukea tämän käyttöohjeen sisältämät tiedot ja ottaa ne huomioon.



Tämä symboli osoittaa, että käyttäjän on kiinnitettävä huomiota tämän käyttöohjeen varoituksiin.



Tärkeitä tietoja tämän tuotteen käsittelemisestä ja käyttämisestä tehokkaasti.



Tekijänoikeussymboli



Tämä symboli näkyy valmistajan (laitteen markkinoille tuoneen yrityksen) nimen ja osoitteen yhteydessä.



Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Unitron käyttää niitä lisenssin nojalla. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat niiden omistajille.



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland

unitron.com



© 2018-2019 Sonova AG. All rights reserved.
A/2019-04 029-6231-11