

Unitron Remote Plus 应用程序

用户指南



入门介绍

预期用途

Unitron Remote Plus 应用程序旨在帮助助听器用户通过 Android 和 Apple iOS 设备调整 Unitron 助听器的某些设置¹。

助听器用户若启用听力保健专家为他们提供的循证医学功能，便可向听力保健专家传送助听器数据和关于听力体验的反馈。

兼容性信息：

⚠ Unitron 无线蓝牙助听器搭配 Unitron Remote Plus 应用程序使用。
Unitron Remote Plus 应用程序可在支持 Bluetooth® 低功耗 (BT-LE) 功能的设备上使用，兼容 iPhone 5s 或更新机型，系统版本 iOS 10.2 或更新。
Unitron Remote Plus 应用程序可在经 Google 移动服务 (GMS) 认证、支持 Bluetooth 4.2 和 Android OS 6.0 或更高版本的 Android 安卓设备上使用。

① 如果手机开启了触摸音或按键音，这些声音可能会传给助听器。为避免这种情况，请前往手机的设置菜单，选择声音设置，并确保停用所有触摸音和按键音。

¹ 兼容手机：Unitron Remote Plus 应用程序只能在具有 Bluetooth® 低功耗技术功能的手机上使用。

Bluetooth® 文字标志及徽标为 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。

Apple、Apple 徽标、iPhone 及 iOS 为 Apple Inc. 在美国和其他国家注册的商标。App Store 为 Apple Inc. 的服务标志。

Android、Google Play 及 Google Play 徽标为 Google Inc. 的商标。




2018 年实施的 CE 标志

目录

应用程序概述	4
隐私政策	5
与助听器配对	6
主屏幕	7
改变助听器上的程序	8
实景评估	9
设置菜单	10
合规信息	11
符号信息及说明	12


应用程序概述

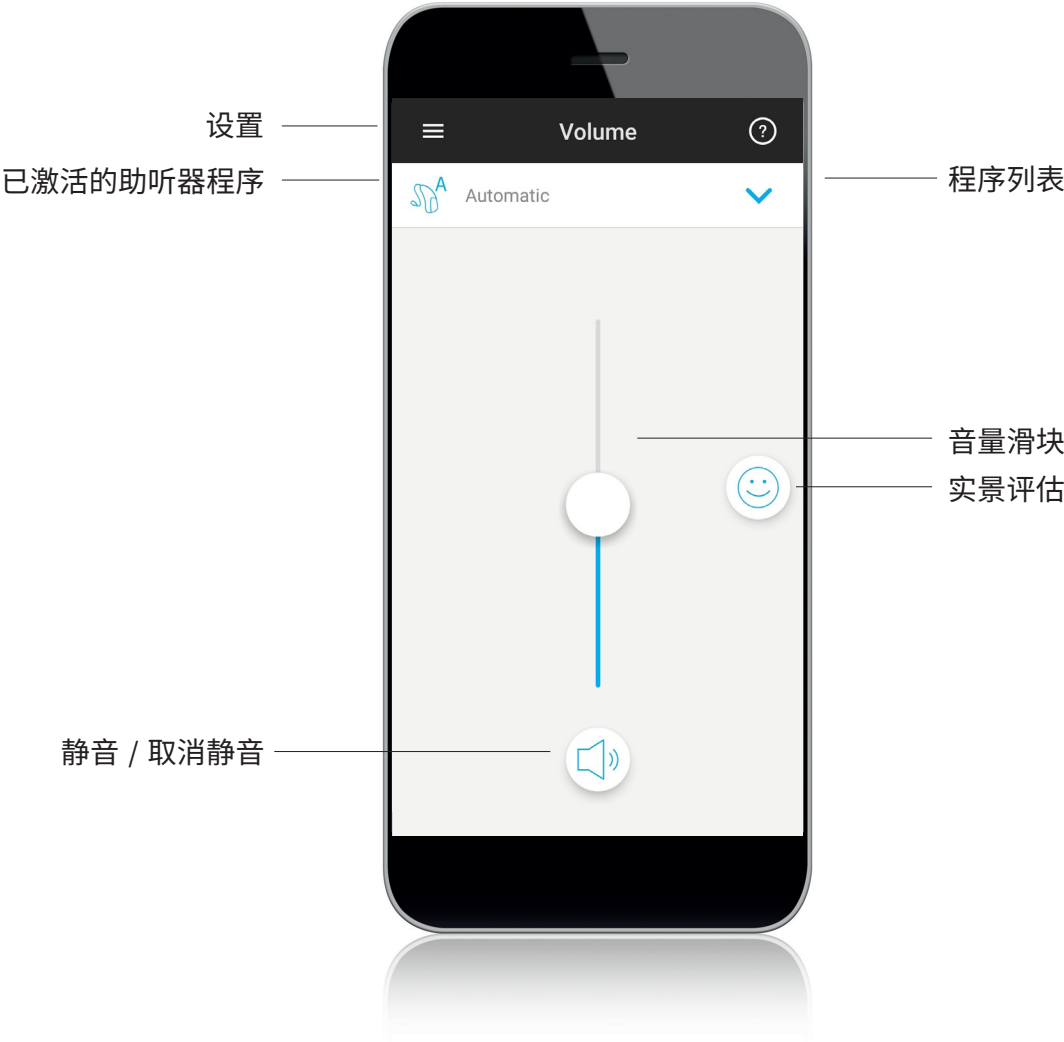

隐私政策


接受应用程序隐私须知

要使用 Unitron Remote Plus 应用程序，您需要接受隐私须知，以及有关应用程序使用情况的匿名数据分析。

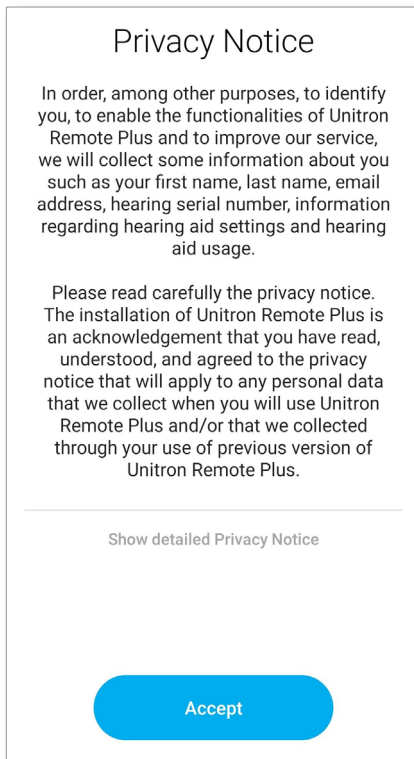


激活循证医学功能

要使用循证医学功能，请轻触激活按钮。要跳过该步骤，请轻触“稍后”按钮。

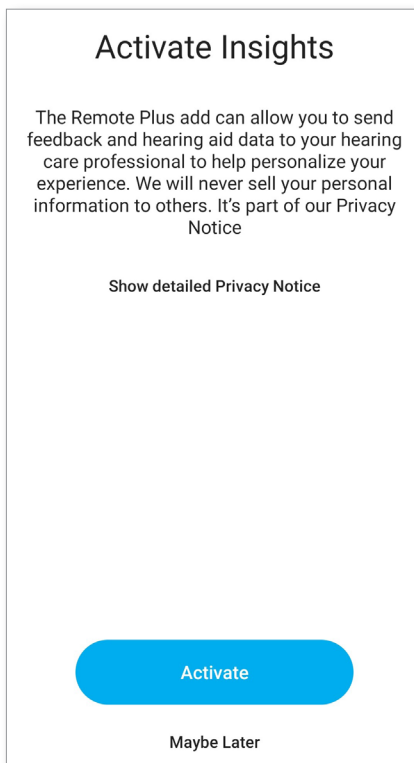


与助听器配对

检测助听器

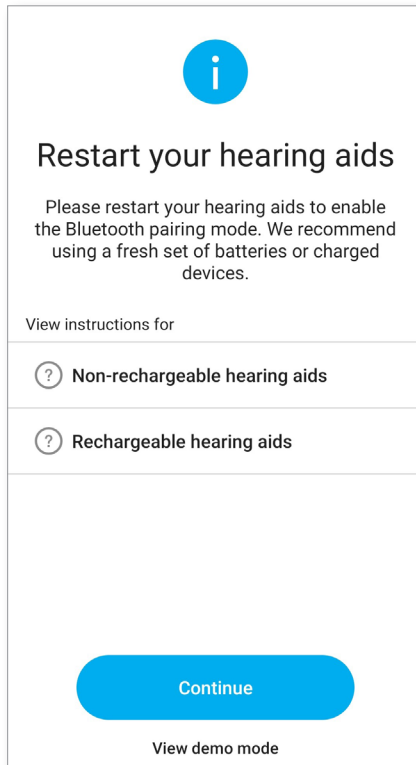

- ① 如果助听器带有电池仓门，可通过打开并关闭仓门来重新启动助听器。如果助听器不带电池仓门，可通过长按按钮下部直到 LED 灯变红（约按 4 秒）来关闭各个助听器。然后长按相同的按钮，直到 LED 灯变绿（约按 2 秒）打开各个助听器。
- ① 您可以随时选择“演示”模式来试用应用程序，此时无需连接 Unitron 助听器即可体验各种功能。但在此模式下，无法使用遥控功能操作助听器。

选择助听器

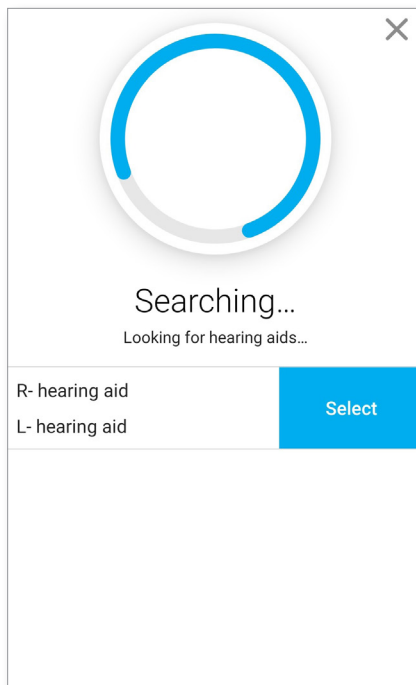


- ① 如果应用程序检测到多个设备，请按下助听器上的按钮，该助听器便会在应用程序中突出显示。

主屏幕


调整助听器音量

向上或向下移动滑块，即可增大或减少两侧的助听器音量。
按下滑块下方的静音按钮可使助听器静音或取消静音。

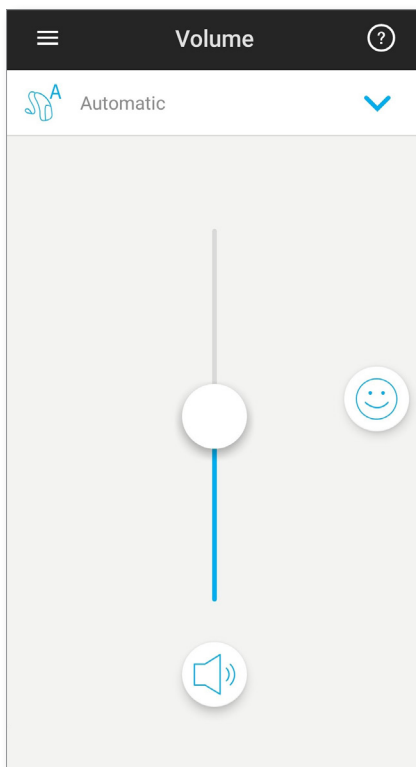

分开调整音量


如果在应用程序设置中打开“单侧选择”，则滑块顶部会显示一个按钮。
按下“分开调整”按钮，即可单独控制每个助听器的音量。

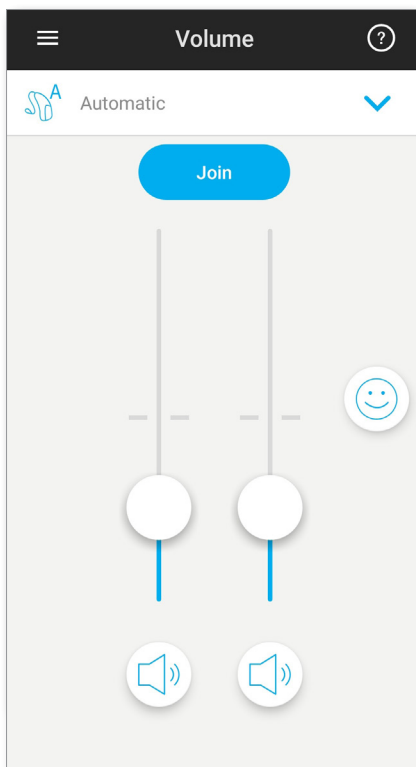


改变助听器上的程序



选择其他程序

轻触当前程序名称旁边的箭头，查看所有可用的程序。可轻触选择所需程序。

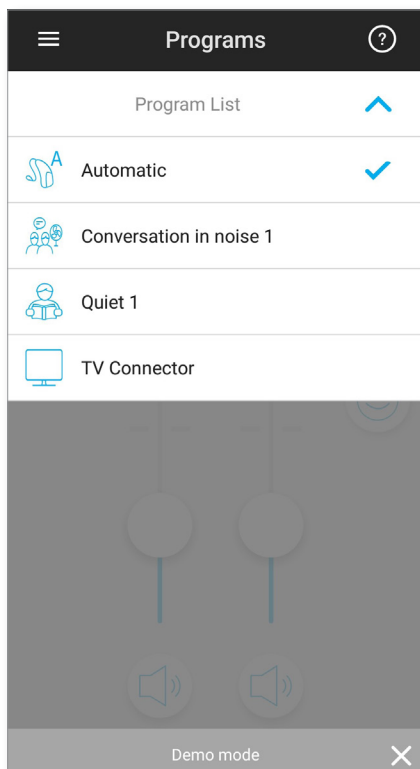

高级程序设置

根据您的助听器配置或连接的音频源 (TV Connector 无线翻译官)，可进行进一步的调整。轻触右下角的  按钮以访问这些选项：

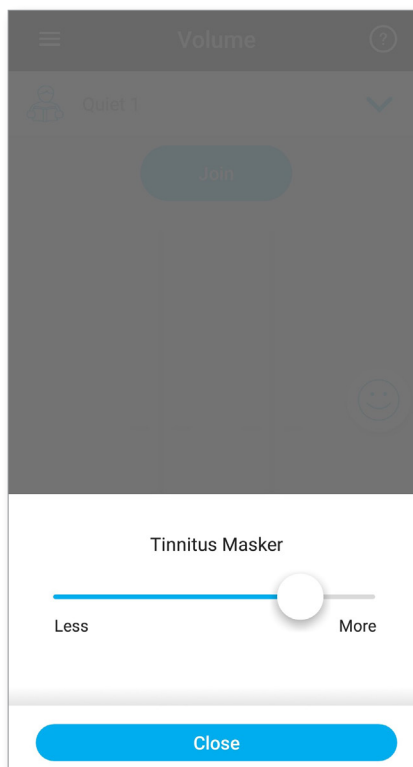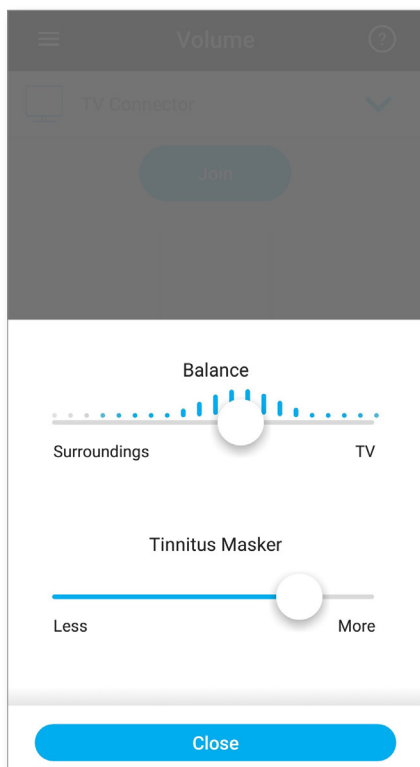


实景评估


如果您选择加入**用户实景评估**功能，主屏幕右侧将显示笑脸图标(☺)。轻触该图标可将反馈发送给听力保健专家。

评价您的体验


A. 选择满意或不满意。

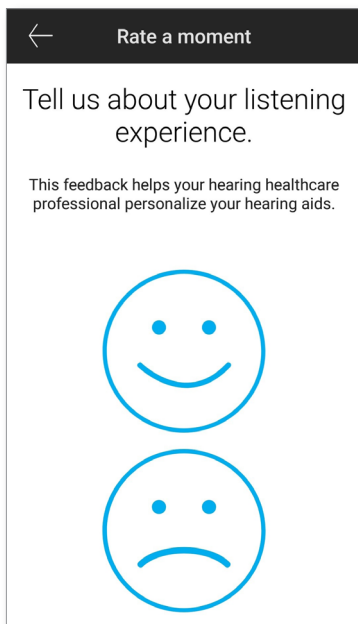


B. 选择您当前所处的环境。

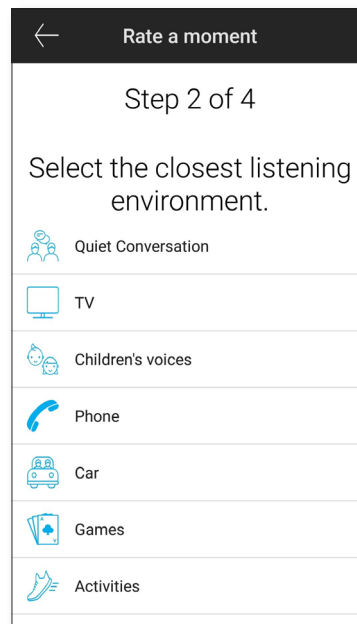

C. 如果选择“不满意”，您可以从预定义的列表中选择最能描述问题的选项。

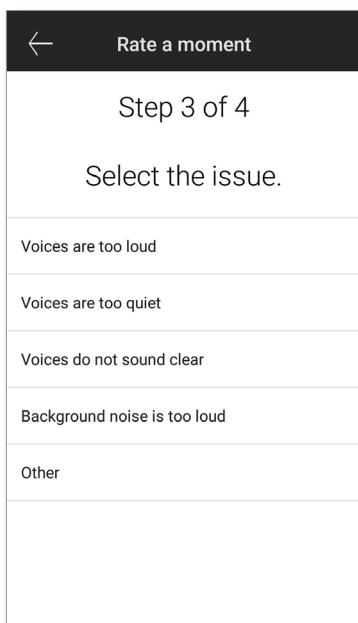


D. 查看反馈摘要并提供更多意见（可选）。轻触“提交”按钮，将反馈提交给听力保健专家。

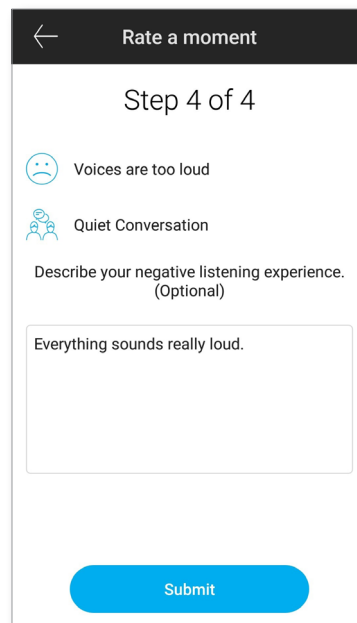


设置菜单

此应用程序支持多种语言，并且会自动匹配手机操作系统的语言。如果手机语言不受应用程序支持，则默认使用英语。

1) 轻触主屏幕上的  图标，进入设置菜单。

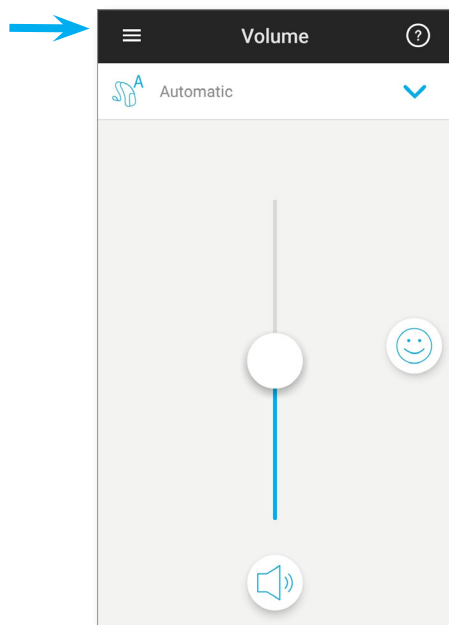

- 2) 选择“[应用程序设置](#)”，进入应用程序设置。
- 3) 选择“[我的助听器](#)”，进入特定于助听器的设置。
- 4) 选择“[循证医学](#)”，查看循证医学隐私政策、功能信息或停止使用此功能。
- 5) 选择“[视频](#)”，查看指导视频。
- 6) 选择“[常见问题](#)”，在手机的 Web 浏览器上查看关于应用程序和助听器的常见问题。

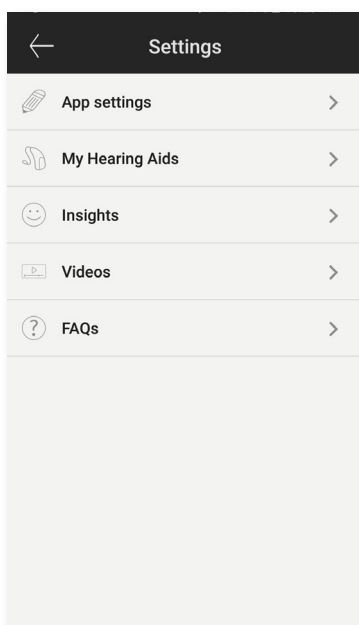

合规信息

合规声明

Sonova AG 特此声明，此 Unitron 产品符合医疗设备指令 93/42/EEC 的基本要求。
《一致性声明》全文可由制造商或当地 Unitron 代表提供，您可登录 <http://www.unitron.com>（全球业务点）获取他们的地址。

- ① 如果助听器由于异常场干扰而不响应设备指令，请远离干扰场。
- ① 请访问以下网站查阅相关说明：unitron.com/appguide。
该说明文档为 Adobe® Acrobat® PDF 格式。如需查看该文档，您必须安装 Adobe Acrobat Reader。请访问 Adobe.com 下载此程序。
- ① 要获得说明书的免费纸质副本，请联系您当地的 Unitron 代表。
他们会在 7 天内向您发送一份副本。

符号信息及说明



使用 CE 符号即表示 Sonova AG 确认此 Unitron 产品（包括配件）符合医疗设备指令 93/42/EEC 要求。
CE 标志后的数字为符合上述指令的认证机构的代码。



此符号表示用户务必阅读和掌握使用说明书里的相关信息。



此符号表示用户务必关注使用说明书里的相关警告通知。



操作和有效使用产品的重要信息。




版权标记



此符号旁边应提供制造商（将此装置投放到市场中的机构）的名称与地址。



Bluetooth® 文字标志及徽标为 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，Unitron 对此类商标的任何使用均获该公司许可。其它商标和商标名的所有权，均属于其各自的所有者。

 Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland

unitron.com

CE
0459

© 2018-2019 Sonova AG. All rights reserved.
A/2019-04 029-6231-18