

유니트론 리모트 플러스 앱

사용자 설명서



사용 방법

사용 목적

유니트론 리모트 플러스 앱은 보청기 사용자가 Android 및 Apple iOS 장치¹에서 Unitron 보청기를 조절할 수 있도록 고안되었습니다.

청각 전문가가 보청기 사용자에게 **인사이트** 기능을 제공하며 해당 기능을 활성화하면, 보청기 사용자는 보청기 데이터와 청취 경험에 대한 피드백을 보내고 청각 전문가에게서 원격 조정 서비스를 받을 수 있습니다.

호환성 정보:

⚠️ 유니트론 리모트 플러스 앱을 사용하려면 Unitron 블루투스 무선 보청기가 필요합니다.

Unitron Remote Plus 앱은 Bluetooth® Low-Energy(BT-LE) 기능이 있는 장치에서 사용할 수 있으며 iOS 버전 12 이상과 호환됩니다.

유니트론 리모트 플러스 앱은 Bluetooth 4.2 및 Android OS 7 이상을 지원하는 Google 모바일 서비스(GMS) 인증 Android 장치에서 사용할 수 있습니다.

- ① 일부 휴대폰에는 보청기로 스트리밍될 수 있는 터치 사운드 또는 키패드 톤이 있습니다. 이를 방지하려면 휴대폰 설정으로 이동하여 사운드를 선택하고 모든 터치 사운드와 키패드 톤이 비활성화되어 있는지를 확인하십시오.

¹ 호환되는 휴대전화: 유니트론 리모트 플러스 앱은 Bluetooth® Low Energy 기술을 지원하는 휴대 전화에서만 사용할 수 있습니다.

Bluetooth® 문구 표시 및 로고는 Bluetooth SIG Inc.에서 소유한 등록 상표입니다.

Apple, Apple 로고, iPhone 및 iOS는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.사의 등록 상표입니다. App Store는 Apple 사의 서비스 상표입니다.


Android, Google Play 및 Google Play 로고는 Google Inc.의 상표입니다.



목차

앱 개요.....	4
개인정보 보호 고지.....	5
보청기와 페어링.....	6
메인 화면.....	7
조절 옵션 활성화 - 편안하게와 선명하게.....	8
보청기 프로그램 변경.....	9
추가 조절 옵션.....	10
청취 만족도 평가.....	12
설정 메뉴.....	14
선택적 프로그램.....	17
원격 조정.....	23
규정 준수 정보.....	24
기호 안내 및 설명.....	25

앱 개요

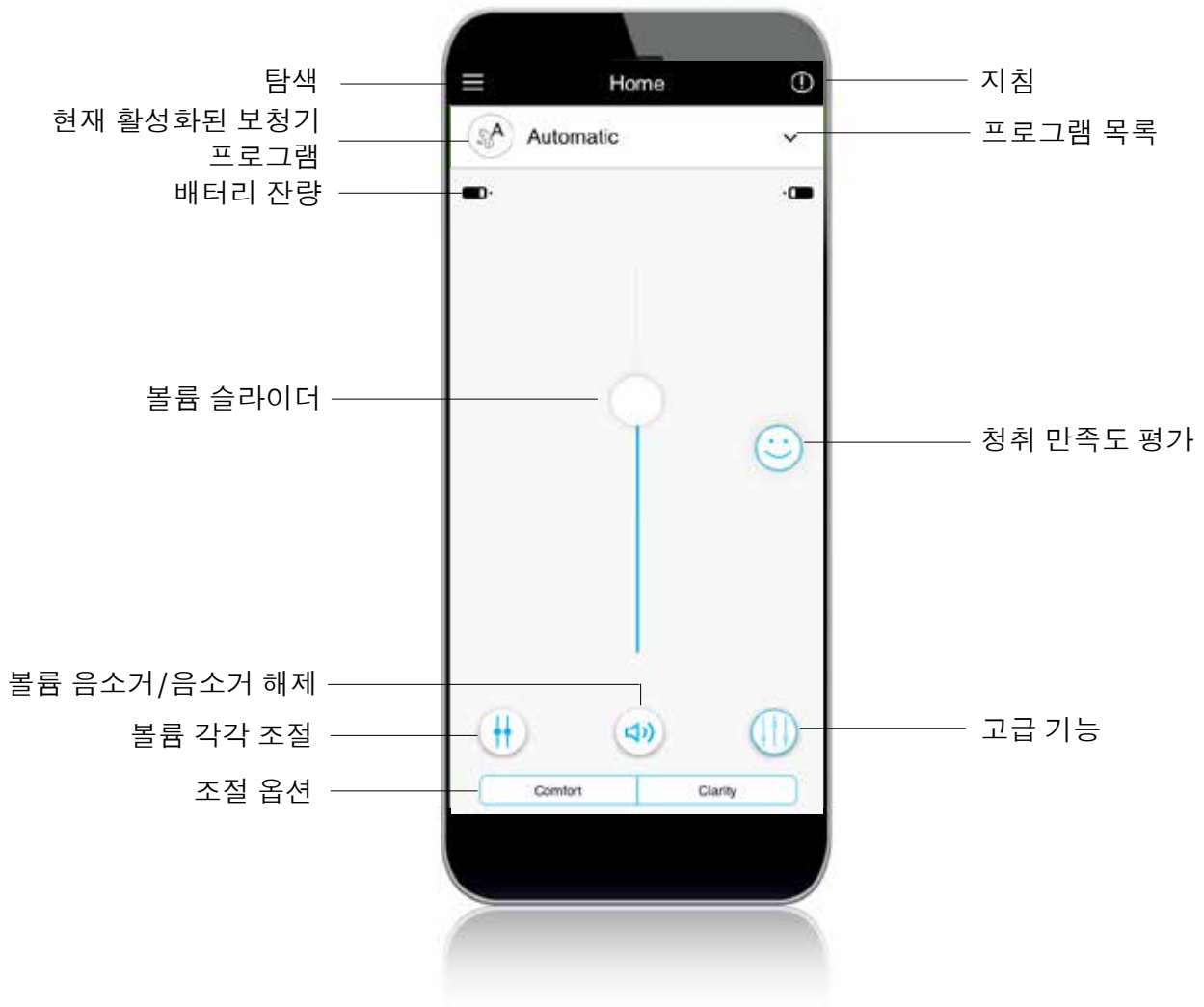

개인정보 보호 고지


앱 개인정보 보호 고지 수락

유니트론 리모트 플러스 앱을 사용하려면 개인정보 보호 고지 및 앱 사용에 대한 익명 데이터 분석에 동의해야 합니다.




인사이트 기능 활성화

원격 조정을 포함한 인사이트 기능을 선택하려면 “활성화” 버튼을 누릅니다. 이 단계를 건너뛰려면 “나중에 다시 보기” 버튼을 누릅니다.

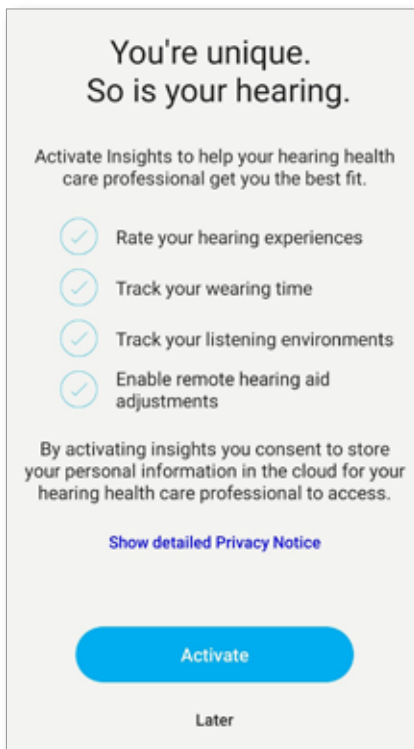


보청기와 페어링

보청기 탐색

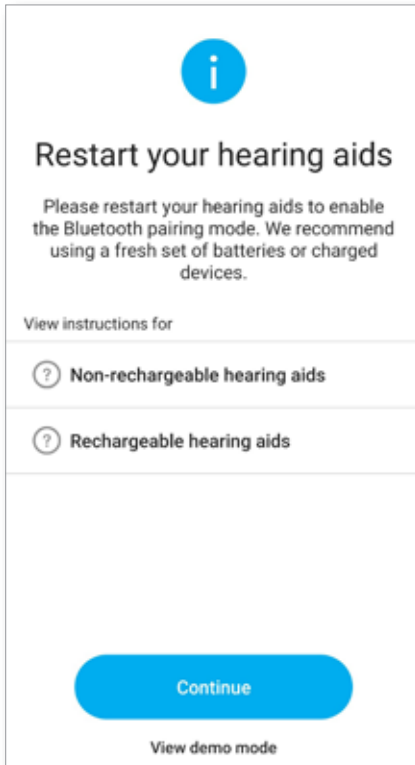

- ① 비충전식 보청기의 경우, 배터리 도어를 열고 닫아 보청기를 다시 시작하십시오. 충전식 보청기의 경우, 먼저 상태 표시등이 빨간색으로 변할때까지 (4초간) 푸시 버튼 아래 부분을 눌러 보청기 전원을 끕니다. 그 다음 다시 상태 표시등으로 바뀔 때까지 (2초간) 푸시 버튼 아래부분을 눌러 보청기 전원을 켭니다.
- ① “데모” 모드를 선택하면 유니트론 보청기와 앱을 연결하지 않고도 앱에 있는 다양한 기능들을 경험해 볼 수 있습니다. 이 모드에서는 보청기 원격 피팅 기능을 사용할 수 없습니다.

보청기 선택

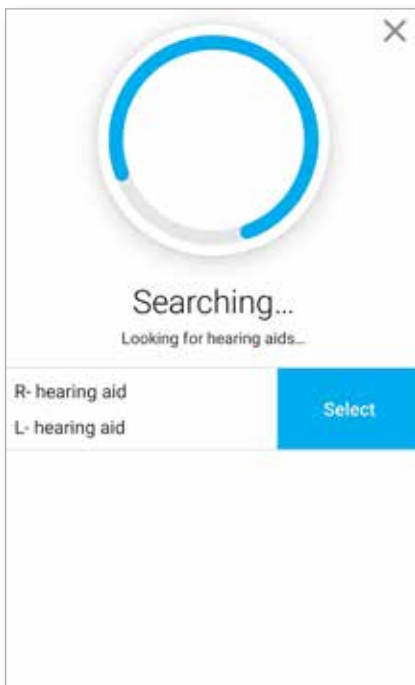

- ① 앱에서 탐색한 장치가 2대 이상인 경우, 보청기의 푸시 버튼을 누르면 해당하는 장치가 앱에서 강조 표시 됩니다.

메인 화면

보청기 볼륨 조절

슬라이더를 위아래로 움직여 양쪽 보청기 볼륨을 높이거나 낮출 수 있습니다.

슬라이더 아래에 있는 (🔊) “음소거” 버튼을 누르면 보청기를 음소거 하거나 음소거 해제할 수 있습니다.

볼륨 슬라이더
볼륨 음소거/음소거 해제




볼륨 양쪽 조절

(⚖️) “볼륨 양쪽 조절” 버튼을 누르면 각 보청기의 볼륨을 개별적으로 조절할 수 있습니다.

볼륨 슬라이더를 사용하여 볼륨을 변경합니다. (⬆️) “볼륨 좌우 조절” 버튼을 사용하여 각 보청기의 볼륨을 한번에 조절할 수 있습니다.

볼륨 양쪽 조절


볼륨 좌우 조절

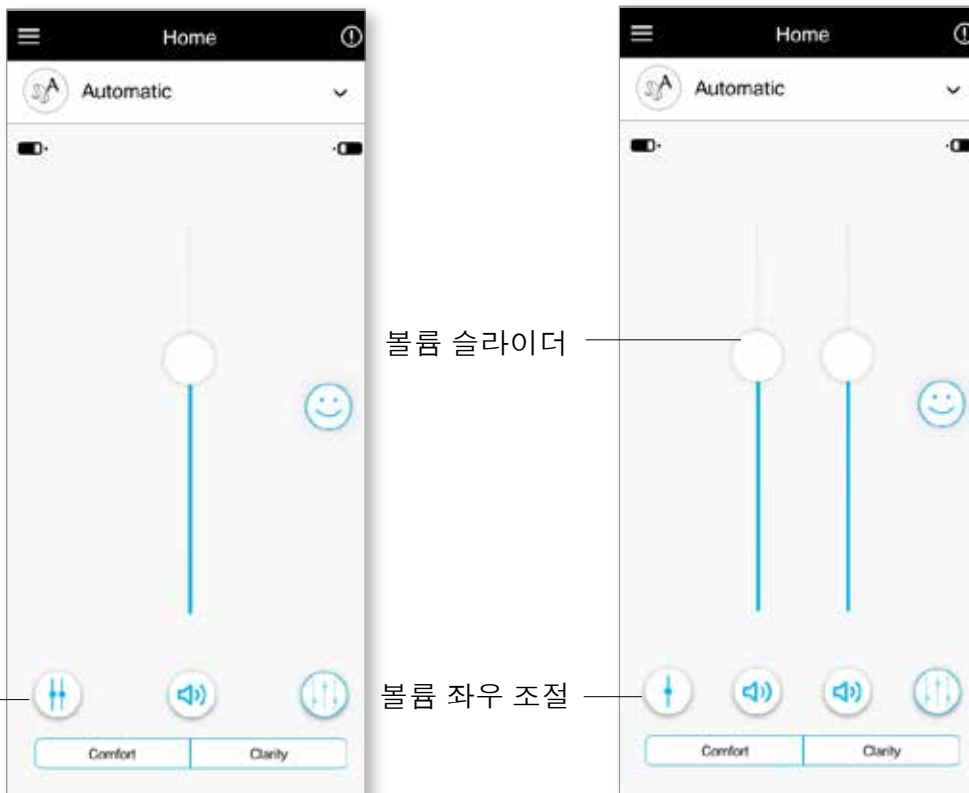

조절 옵션 활성화

편안하게와 선명하게

자동 청취 프로그램의 경우 “선명하게” 버튼을 누르면 향상된 어음 인지도를 제공하며 “편안하게” 버튼을 누르면 보다 자연스러운 청취를 할 수 있습니다. “선명하게”와 “편안하게” 버튼 중 한 가지만 활성화 할 수 있습니다.

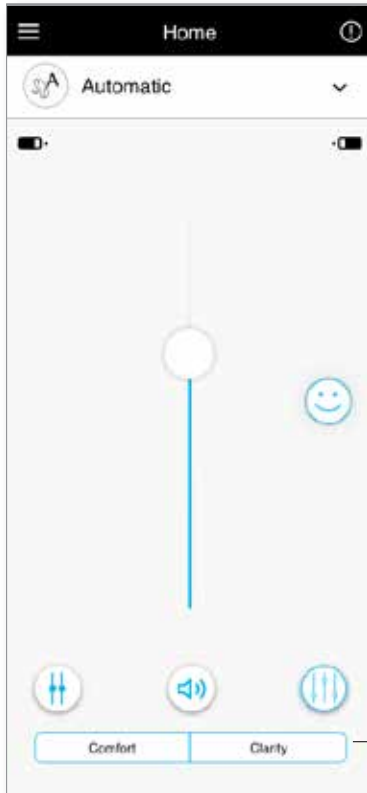


편안하게/선명하게 조절 옵션

보청기 프로그램 변경

다른 프로그램 선택


사용 가능한 모든 프로그램을 보려면 현재 프로그램 이름 옆의 화살표를 누릅니다. 원하는 프로그램(예: TV 커넥터)을 선택합니다.

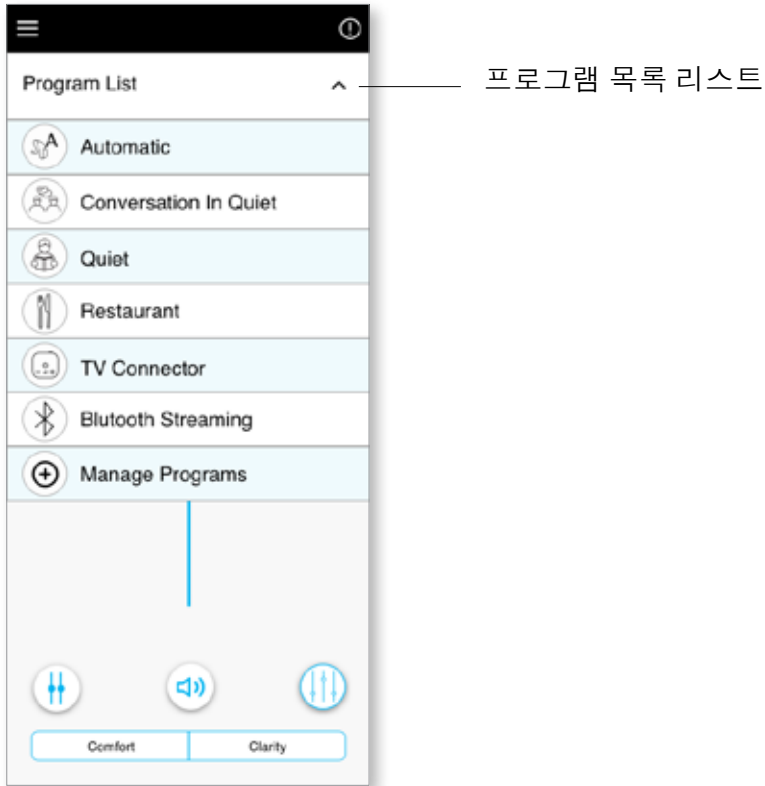


추가 조절 옵션

TV 커넥터

보청기 구성 또는 연결된 음원(TV 커넥터)에 따라 추가 조절이 가능합니다. 다음 옵션에 액세스하려면 오른쪽 하단 모서리에 있는 (🔊) 고급 기능 버튼을 누릅니다.

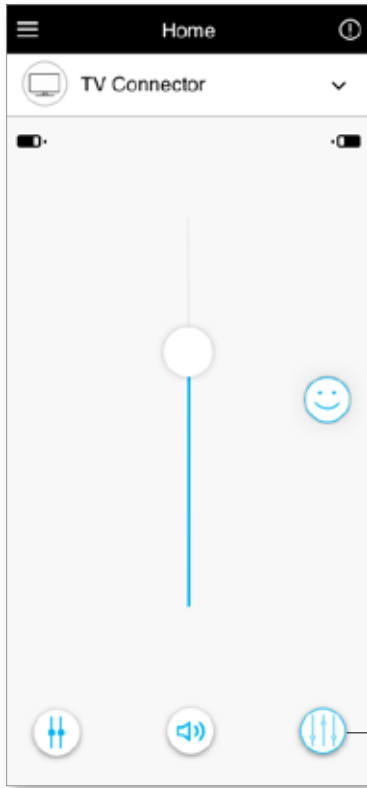

추가 조절 옵션

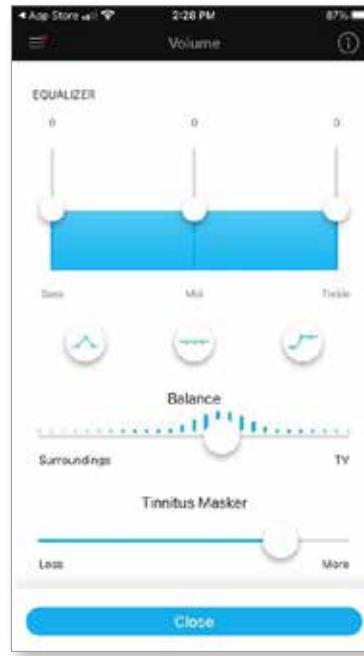

이퀄라이저

추가 조절 옵션에서 이퀄라이저를 통해 소리를 조절할 수 있습니다.

환경음과 미디어음 조절

외부 스트리밍 장치(예: TV 커넥터, 음악)를 사용하는 경우, 추가 조절 옵션에서 미디어음과 환경음을 균형있게 조절할 수 있습니다.

이명적응용 잡음발생 기능


이명적응용 발생 기능을 활용하는 경우, 앱에서 차폐음 볼륨을 조절할 수 있습니다.

프로그램 - 레스토랑

1. 슬라이더를 위아래로 움직여 보청기 볼륨을 높이거나 낮출 수 있습니다. 추가 조절 옵션은 특정 청취 프로그램에서 활성화됩니다.
2. 추가 조절 옵션을 확인하려면 (🔊) 아이콘을 클릭합니다. 추가 조절 옵션에서 이퀄라이저로 소리 조절을 할 수 있습니다. 배경 소음을 줄이기 위해서는 “소음 감소” 조절 기능을 사용할 수 있습니다. 어음을 더 크게 듣기 위해서는 “어음 강화” 조절 기능을 사용할 수 있습니다. “방향성 조절”(포커스 마이크)를 통해 전면에서 오는 어음에 더 초점을 맞추거나 주변의 모든 소리를 들을 수 있습니다. 완료되면 화면 하단의 “닫기”를 선택하고 홈 화면으로 돌아갑니다.



추가 조절 옵션

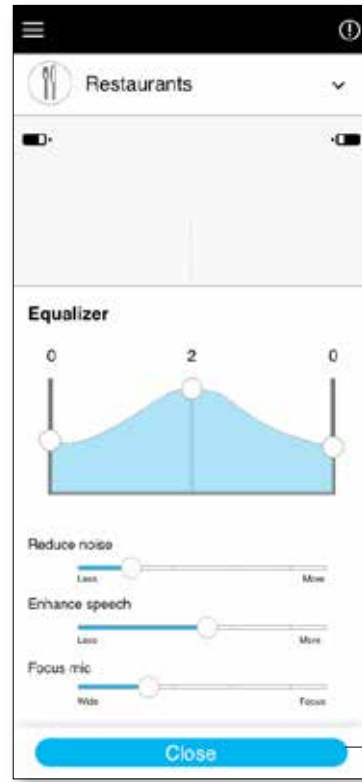


닫기

청취 만족도 평가


인사이트 기능을 활성화하면 메인 화면의 오른쪽에 있는 웃는 얼굴 아이콘(😊)이 표시됩니다. 스마일 아이콘을 클릭하면 청취 만족도 평가 결과를 담당 청각 전문가가 확인할 수 있으며 개인별 맞춤 솔루션을 제공합니다.

청취 만족도 평가하기


청취 만족도 평가를 하기 위해서는 “스마일” 평가 아이콘을 클릭하십시오.

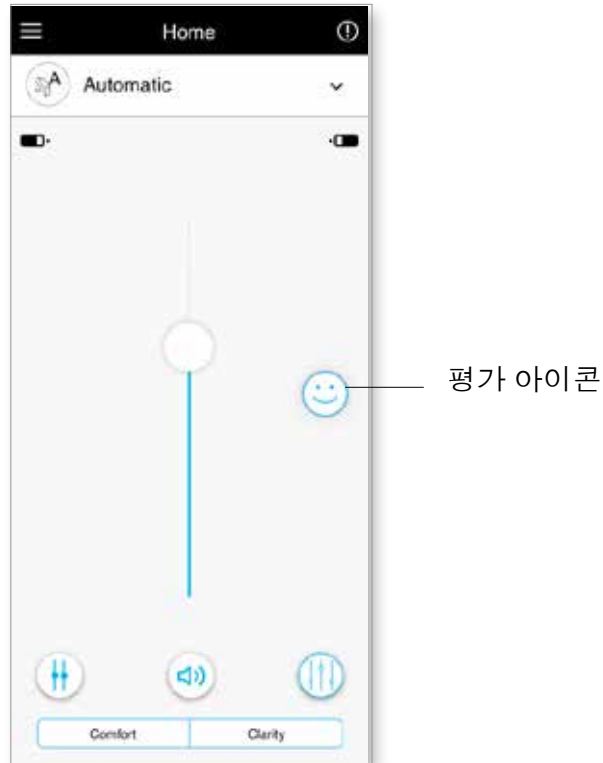

1. 만족스러웠는지 또는
불만족스러웠는지 선택합니다.

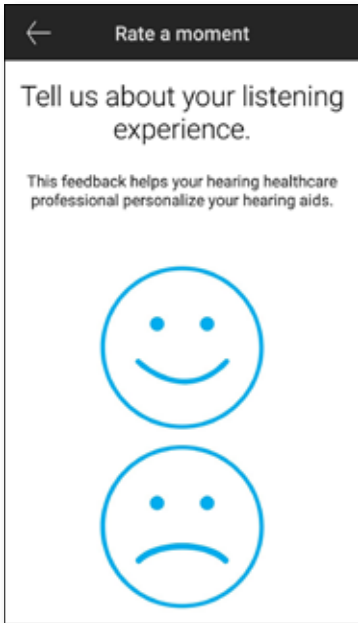

2. 현재 청취 환경을
선택합니다.

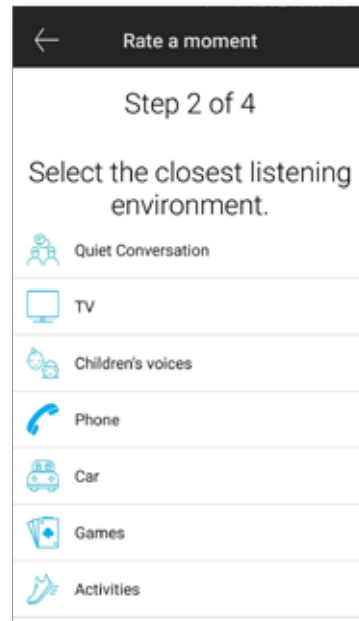

3. I불만족스러웠다고 선택한 경우
설정된 목록에서 현재 청취 어려움을
가장 잘 설명하는 항목을 선택할 수
있습니다.




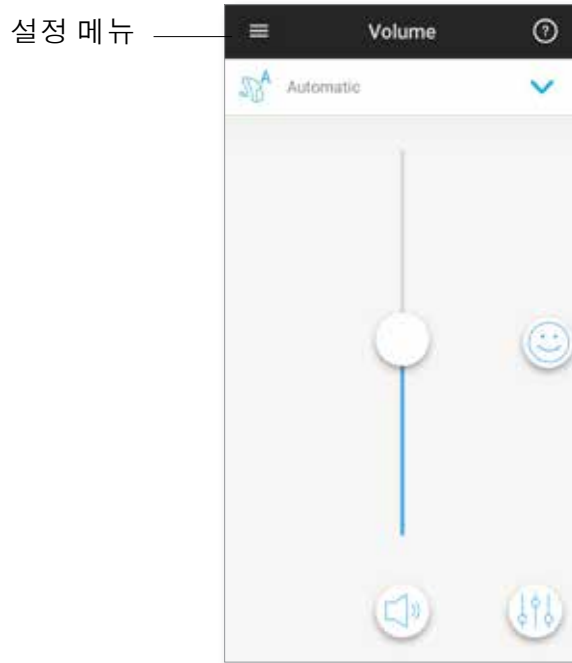
4. 요약된 피드백을 확인하고 자세한
설명을 입력합니다(선택사항). “제출”
버튼을 클릭하여 청각 전문가에게
피드백을 제출하십시오.




설정 메뉴

이 앱은 다양한 언어로 제공됩니다. 휴대폰의 운영 체제 언어에 맞게 자동으로 설정됩니다. 휴대폰의 언어가 지원되지 않는 경우 기본 언어는 영어입니다.

1) 설정 메뉴에 액세스하려면 메인 화면의  아이콘을 누르십시오.



- 2) “**앱 설정**”을 선택해 설정 화면으로 들어갑니다.
- 3) “**보청기 정보**”를 선택해 보청기 세부 설정에 들어갑니다.
- 4) “**인사이트**” 기능을 눌러 관련한 개인정보 보호 정책, 청각 전문가의 원격 조정 알림을 포함한 기능 정보를 확인하거나, 해당 기능을 비활성화합니다.
- 5) “**사용자 설명 동영상**”을 클릭하면 방법에 대한 영상을 볼 수 있습니다.
- 6) “**자주 묻는 질문**”을 클릭하면 휴대폰 웹 브라우저에서 앱과 보청기에 대해 자주 묻는 질문을 확인합니다.

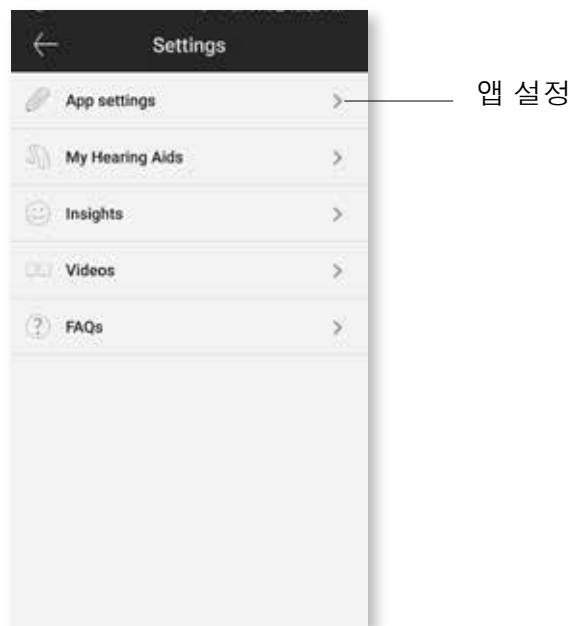

탭 컨트롤


탭 컨트롤 기능이 탑재된 유니트론 보청기의 경우, 더블 탭에 반응하는 방식을 사용자 지정할 수 있습니다. 일부 유니트론 보청기에는 센서가 내장되어 있어 탭 컨트롤 기능을 통해 편리하게 보청기를 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 기능에 탭 컨트롤 기능을 사용할 수 있습니다.

- 전화 통화: 통화 수락/종료
- TV 및 미디어 스트리밍: 일시 중지/다시 재생
- 모바일 액세스: 음성 도우미


위의 기능에 탭 컨트롤을 활성화/비활성화하려면 탭 제어가 있는 보청기를 앱과 페어링해야 합니다.

탭 컨트롤 활성화:

1. 설정에서 “**내 장치**”를 선택합니다.
2. “**탭 컨트롤**”을 선택합니다.

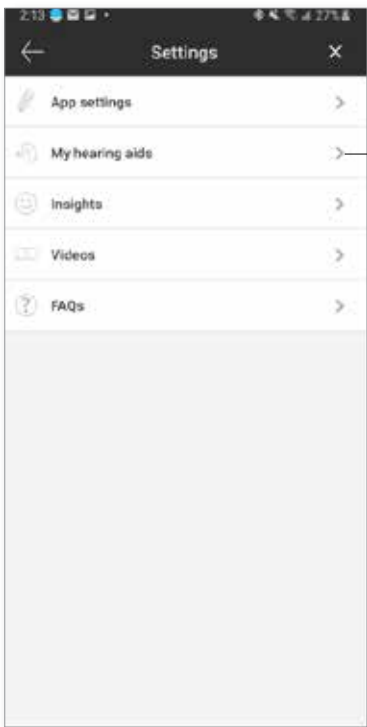


내 장치

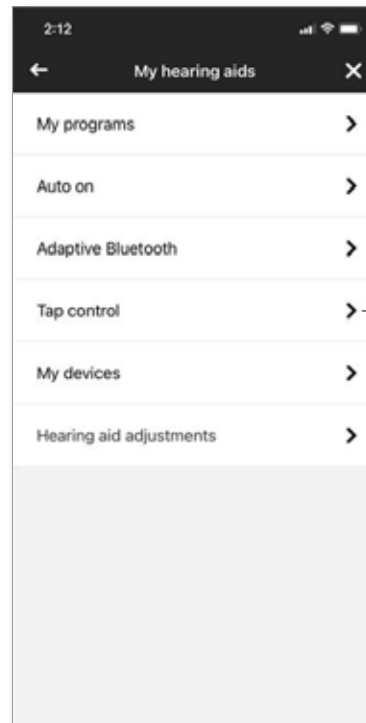

탭 컨트롤


3. 두 번 탭하여 전화 통화 또는 스트리밍을 수락/종료하도록 구성합니다. 두 번 탭하여 한 보청기 또는 양쪽 모두에서 음성 비서 일시 중지/다시 재생하거나 활성화/비활성화하도록 탭 제어를 설정할 수 있습니다.

4. 설정이 구성되면 뒤로 화살표를 클릭합니다. 앱이 변경사항을 저장합니다. 취소하려면 'X' 기호를 클릭합니다.

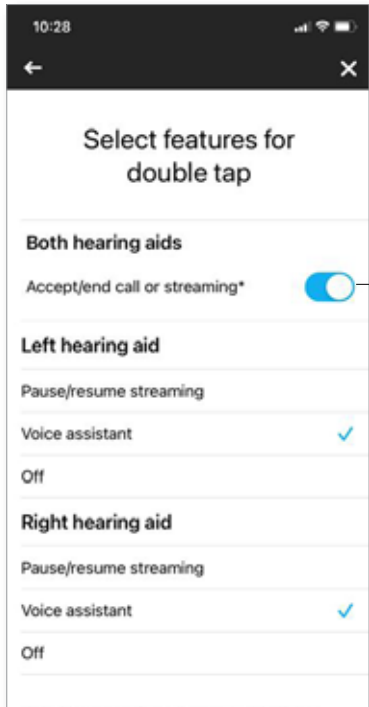

구성

뒤로 화살표

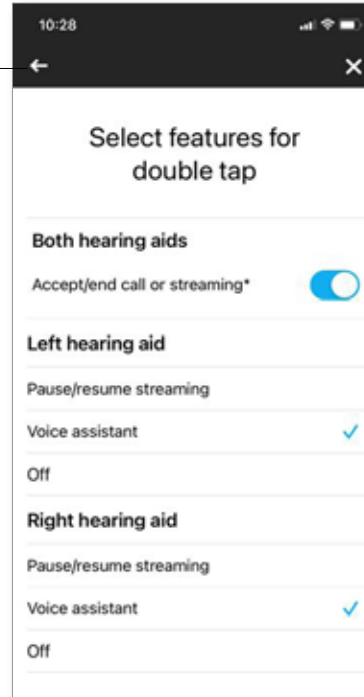

취소


선택적 프로그램

사전 정의된 프로그램 목록에서 선택하여 보청기를 특정 상황에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 핵심 기능은 보청기에 의해 정의되며 앱을 통해 사용자는 6개의 선택적 프로그램 중에서 선택할 수 있습니다. 사용자는 앱 내에서 선택적 프로그램을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.


선택적 프로그램 목록:

- 식당
- TV 시청
- 대중교통
- 카페
- 야외 활동
- 음악

1. 청취 프로그램 목록을 클릭하여 현재 조절할 수 있는 청취 프로그램을 확인할 수 있습니다. 프로그램 관리를 클릭하여 원하는 청취 프로그램을 확인할 수 있습니다.
2. 사용 가능한 선택적 프로그램 목록이 표시됩니다. 뒤로 화살표를 클릭하여 프로그램 목록으로 돌아갑니다.

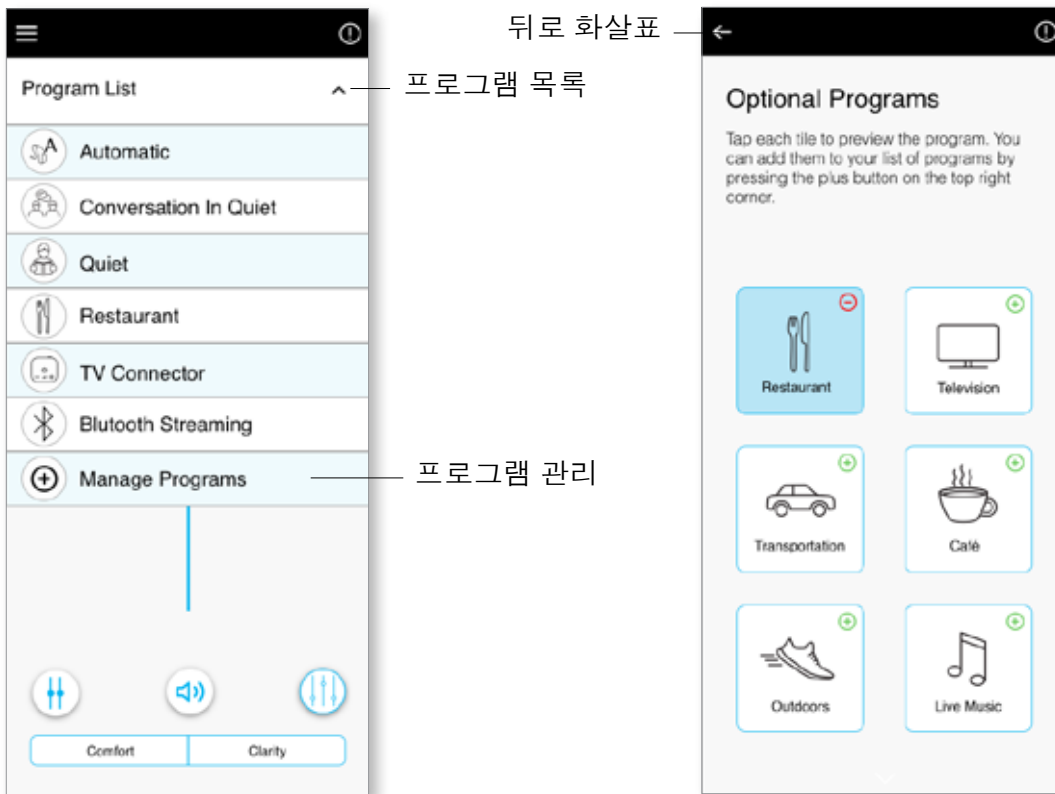

3. (⊕) “녹색 플러스 기호” 를 클릭하면 해당 청취 프로그램을 추가할 수 있습니다.

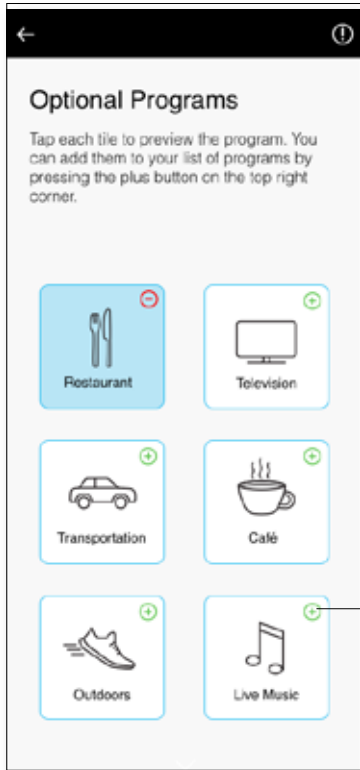

녹색 플러스 기호를 클릭하여 프로그램 추가

4. 청취 프로그램을 선택하면 프로그램 별 미리보기 화면을 확인할 수 있습니다. 알맞게 각각의 기능들을 조절한 뒤 ‘저장’ 버튼을 클릭하면 해당 청취 프로그램이 추가됩니다.



저장

5. 녹색 플러스 버튼을 클릭하면 해당 청취 프로그램이 선택이 되며 하늘색으로 표시 됩니다. 그리고 빨간색 마이너스 버튼을 (⊖) 클릭하면 선택한 청취 프로그램을 제거할 수 있습니다.

6. 설정 변경을 하고자 하는 청취 프로그램을 클릭합니다.



프로그램을 제거하려면 빨간색 마이너스 기호 클릭




클릭하여 편집

7. 프로그램이 열리면 슬라이더를 위아래로 이동하여 볼륨을 변경합니다. 또한 추가 조절 옵션을 클릭하면 세부적으로 사운드를 직접 조절할 수 있습니다.

8. 조절할 수 있는 추가 조절 옵션이 있습니다. 다음 조절 옵션을 청취 환경별에 맞게 직접 조절할 수 있습니다.

- **이퀄라이저** - 각각의 설정 옵션을 조절할 수 있습니다.
 - **소음 감쇄 및 어음 강화** - 슬라이더를 움직여 조절할 수 있습니다.
 - **방향성 조절** - 방향성 기능을 더 넓게 또는 좁게 조절할 수 있습니다.
- ‘닫기’버튼을 클릭하여 변경사항을 저장합니다.


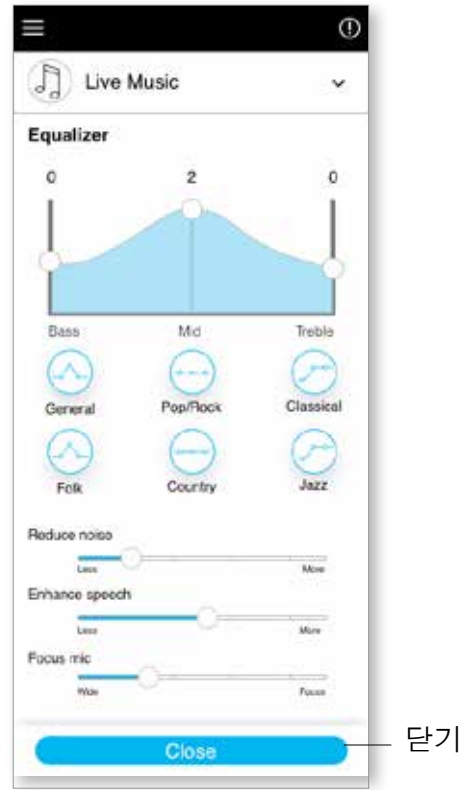


프로그램 이름 편집


리모트 플러스 앱을 통해 사용자는 프로그램의 이름을 변경할 수 있으므로, 각 프로그램의 의미를 맞춤 설정할 수 있습니다. 선택적 프로그램을 포함하여 모든 프로그램의 프로그램 이름을 변경할 수 있습니다.

프로그램 이름을 변경하려면:


1. 설정 메뉴에서, “보청기 정보”메뉴를 클릭합니다.
2. 보청기 정보 화면이 표시됩니다. “프로그램”메뉴를 누릅니다.

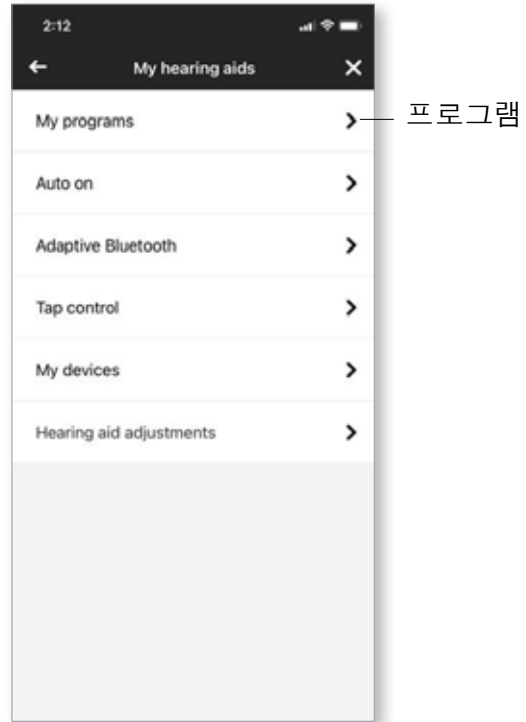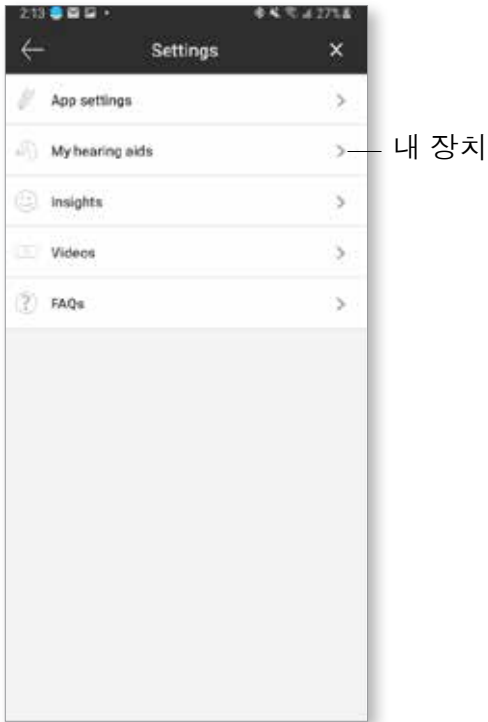

3. “프로그램”목록이 표시됩니다.
원하는 프로그램(예: 자동 프로그램)
을 누릅니다.

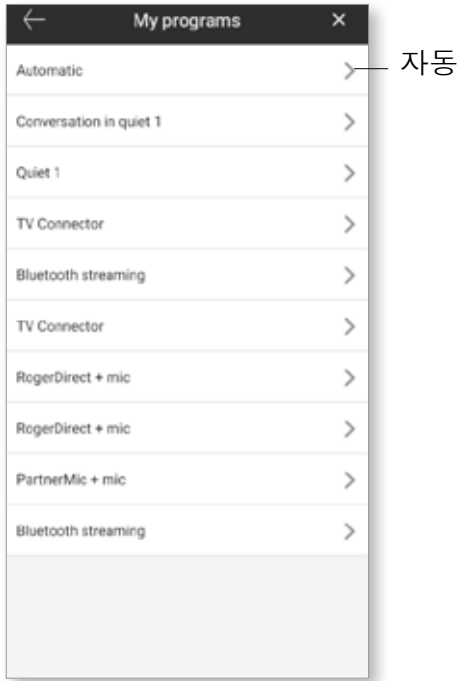

4. 편집/연필 아이콘을 누르고 “프로그램
이름”을 변경합니다. 이렇게 하면
“프로그램 목록”(프로그램 목록)
“과 추가 프로그램” 화면에서 이름이
변경됩니다.


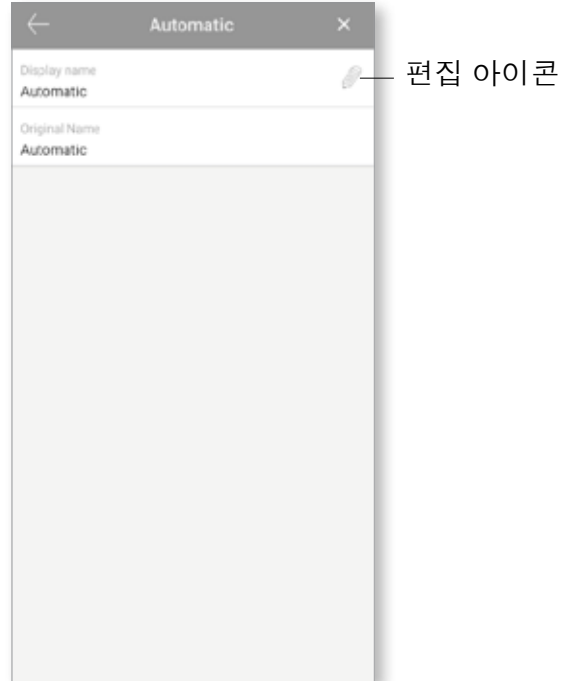


원격 조정



인사이트기능을 선택하면 담당 청각 전문가가 원격으로 보청기 착용자의 스마트폰으로 피팅을 전송할 수 있으며 푸시 알림이 함께 발송됩니다.

원격 피팅 사용

1. 청각 전문가에게서 전송된 원격 피팅에 대한 설명을 앱에서 확인할 수 있습니다.
2. 원격 피팅을 적용하려면 전송된 푸시 알림을 클릭하십시오. 또는 리모트 플러스 앱을 열고 **앱 설정 > 보청기 정보 > 보청기 원격 피팅**으로 이동합니다.

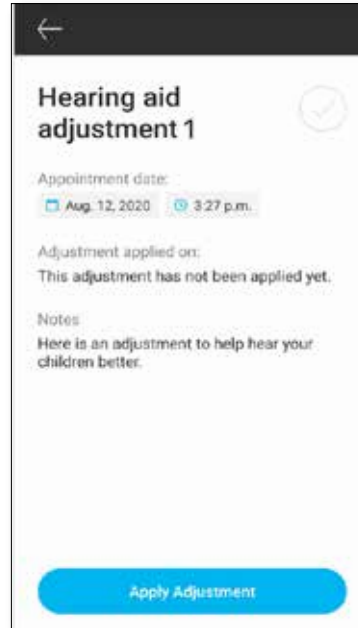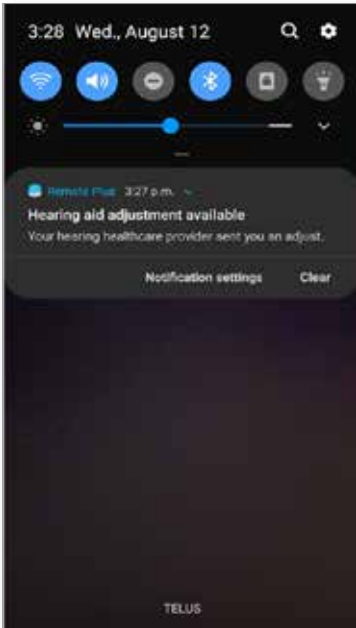

3. 청각 전문가가 보낸 원격 피팅을 선택하여 적용합니다.
4. 다른 설정 적용을 원할 경우 원하는 이전 메시지를 선택하여 보청기에 적용할 수 있습니다.

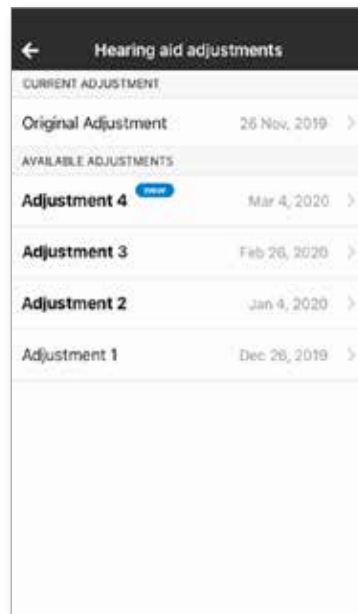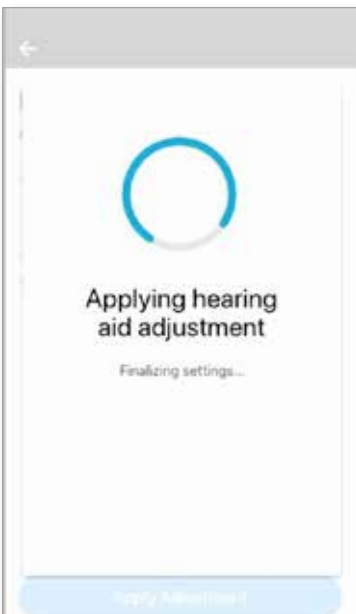

규정 준수 정보

적합성 선언

Sonova AG는 이 Unitron 제품이 의료기기 지침 93/42/EEC의 필수 요구사항에 부합함을 선언합니다. 적합성 선언문 전문은 제조사 또는 Unitron의 현지 대리점에서 구할 수 있으며, 해당 주소는 <http://www.unitron.com>(지사 정보)에서 볼 수 있습니다.

- ① 보청기가 비정상적인 교란으로 인해 반응하지 않을 경우에는 교란을 일으키는 원인으로부터 멀리 떨어져 주십시오.
- ① 지침은 unitron.com/appguide에서 Adobe® Acrobat® PDF 형식으로 확인할 수 있습니다. 해당 지침을 보려면 Adobe Acrobat Reader가 설치되어 있어야 합니다. Adobe.com에서 다운로드하십시오.
- ① 현지 Unitron 대리점에 문의하여 무료로 인쇄본 지침 사본을 받을 수 있으며, 사본은 7일 이내에 발송됩니다.

기호 안내 및 설명



CE 마크는 Sonova AG는 액세서리를 포함한 Unitron 제품이 의료기기 지침 93/42/EEC의 요건을 충족함을 확인한다는 의미입니다.

CE 마크 뒤의 숫자는 상기 지침에 따라 확인을 받은 인증기관의 코드를 말합니다.



이 기호는 사용자가 이 사용 설명서에 있는 관련 정보를 읽고 주의를 기울이는 것이 중요하다는 것을 나타냅니다.



이 기호는 사용자 설명서에 있는 경고 안내문을 숙지하고 주의를 기울여야 함을 나타냅니다.



제품의 취급 및 효과에 대한 중요한 정보를 나타냅니다.



저작권 표기



이 기호는 (본 장치 출시) 제조업체 이름 및 주소와 함께 표시됩니다.



유럽공동체(EC)의 공인 대리점을 나타냅니다. EC REP는 또한 유럽 연합의 수입 업체입니다.



Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며, Unitron은 라이선스하에서 해당 마크를 사용합니다. 그 밖의 상표 및 상품명은 각 소유자들의 재산입니다.



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland



And importer for European Union:
Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen, Germany



unitron.com