

# Εφαρμογή Remote Plus της Unitron

## Οδηγός χρήσης



# Έναρξη χρήσης


---


## Προβλεπόμενη χρήση

Η εφαρμογή Remote Plus της Unitron απευθύνεται σε χρήστες των ακουστικών βοηθημάτων για την προσαρμογή ορισμένων παραμέτρων των ακουστικών βοηθημάτων Unitron μέσω συσκευών Android και Apple iOS<sup>1</sup>:

Εάν ο ακοοπροθετιστής προσφέρει τα χαρακτηριστικά **Insights** (Πληροφορίες) στον χρήστη των ακουστικών βοηθημάτων και ο τελευταίος παρέχει τη συγκατάθεσή του, ο χρήστης των ακουστικών βοηθημάτων μπορεί να αποστέλλει δεδομένα των ακουστικών βοηθημάτων και σχόλια σχετικά με την εμπειρία ακρόασής του, καθώς και να λαμβάνει απομακρυσμένες προσαρμογές από τον ακοοπροθετιστή του.

## Πληροφορίες συμβατότητας:

 Απαιτούνται τα ασύρματα ακουστικά βοηθήματα Unitron Bluetooth για τη χρήση της εφαρμογής Remote Plus της Unitron. Η εφαρμογή Remote Plus της Unitron μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές με δυνατότητα Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) και είναι συμβατή με iOS Έκδοσης 12 ή νεότερο. Η εφαρμογή Remote Plus της Unitron μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές Android με πιστοποίηση Google Mobile Services (GMS) που υποστηρίζουν Bluetooth 4.2 και Android OS 7 ή νεότερο.

 Ορισμένα τηλέφωνα διαθέτουν ήχους αφής ή τόνους πληκτρολογίου, οι οποίοι μπορούν να μεταφερθούν μέσω ροής στο(στα) ακουστικό(ά) βοήθημα(τα). Για να αποφευχθεί αυτό, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, επιλέξτε τους ήχους και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ήχοι αφής και οι τόνοι πληκτρολογίου είναι απενεργοποιημένοι.

<sup>1</sup> Συμβατά τηλέφωνα: Η εφαρμογή Remote Plus της Unitron μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε τηλέφωνα με δυνατότητα τεχνολογίας Bluetooth® Low Energy.

Η μάρκα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc.

Το Apple, το λογότυπο Apple, τα iPhone και iOS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc.

Τα Android, Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.




# Περιεχόμενα

---

Επισκόπηση της εφαρμογής .....	4
Δήλωση απορρήτου.....	5
Σύζευξη με το(τα) ακουστικό(ά) σας βοήθημα(τα) .....	6
Κύρια οθόνη .....	7
Αλλαγή προγραμμάτων στο(στα) ακουστικό(ά) βοήθημα(τα).....	9
Ρυθμίσεις προηγμένων χαρακτηριστικών .....	10
Βαθμολογήσεις.....	12
Μενού ρυθμίσεων .....	14
Προαιρετικά προγράμματα.....	17
Απομακρυσμένη προσαρμογή.....	23
Πληροφορίες συμμόρφωσης .....	24
Πληροφορίες και επεξήγηση συμβόλων .....	25

# Επισκόπηση της εφαρμογής

---

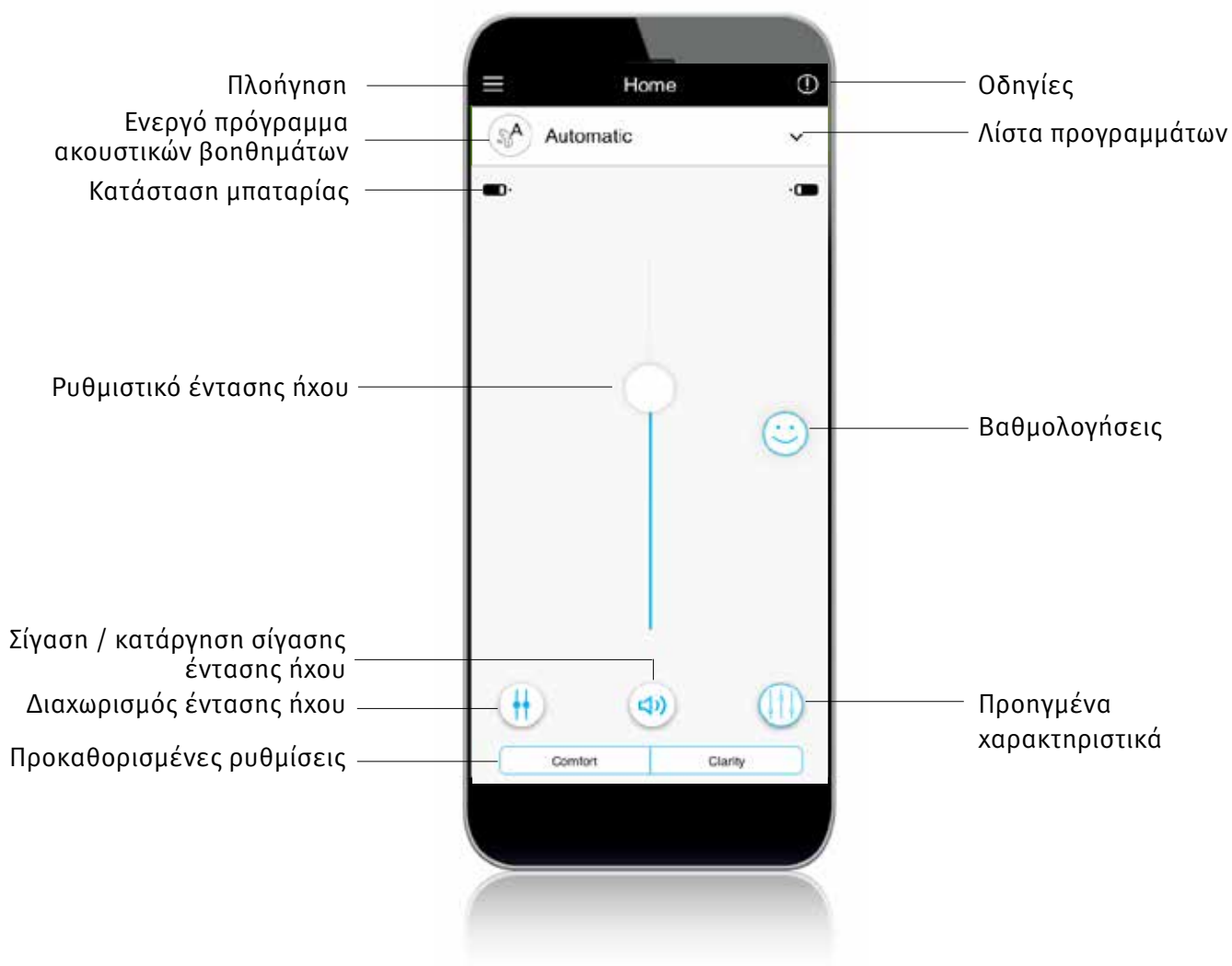

# Δήλωση απορρήτου

## Αποδοχή της δήλωσης απορρήτου της εφαρμογής

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Remote Plus της Unitron, θα χρειαστεί να αποδεχτείτε τη δήλωση απορρήτου και την ανάλυση ανώνυμων δεδομένων σχετικά με τη χρήση από την εφαρμογή.

**Privacy notice**

Last updated: August 15, 2019

THIS NOTICE DESCRIBES HOW PERSONAL INFORMATION ABOUT YOU MAY BE USED AND DISCLOSED, HOW YOU CAN GET ACCESS TO THIS INFORMATION AND WHICH RIGHTS YOU HAVE. PLEASE REVIEW IT CAREFULLY.

**This Privacy Notice describes the following:**

- The personal data that Sonova collects from and about you through the Unitron Remote Plus application ("The Mobile Application" or "Mobile App") or Unitron TrueFit fitting software together with all related technology to access or otherwise use the Mobile Application ("Mobile Service") as described below.
- How do we use and protect your personal data?
- The choices you have about how we use your personal data.
- How you can exercise your rights (e.g. right to access, right to rectification, right to complain, etc.).

This privacy notice is in line with the EU General Data Protection Regulation (GDPR), the Swiss Federal Data Protection Act (FDP), the United States Health Insurance Portability and Accountability Act (as amended from time to time) ("HIPAA") and other applicable data protection laws that may apply to you. In the United States, any reference to HIPAA under this Privacy Policy to personal data shall apply to your personal data that fits the definition of Protected Health Information under HIPAA. Protected Health Information is any piece of information in an individual's medical record that was created, used, or disclosed during the course of diagnosis or treatment that can be used to personally identify you.

If you are unwilling to accept the terms and conditions of this Privacy Policy, we ask you to not use this Mobile Application and/or the Mobile Service. By using the Mobile Application or the Mobile Service, you agree to the terms of this Privacy Policy. When you submit information via the Mobile Service, you provide consent to the collection, use and disclosure of that information in accordance with this Privacy Policy.

We reserve the right to occasionally update this Privacy Policy. At such time, we will also revise the "last updated" date shown in this Privacy Policy. We reserve the right to apply the terms of any updated Privacy Policy to the all personal data that we maintain. We shall inform you about changes to a revised Privacy Policy by [email or by another method to be determined by us.](#)

[Accept](#)

## Ενεργοποίηση χαρακτηριστικού Insights (Πληροφορίες)

Για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τα χαρακτηριστικά **Insights** (Πληροφορίες) συμπεριλαμβανομένης της απομακρυσμένης προσαρμογής, πατήστε το κουμπί «**Activate**» (Ενεργοποίηση). Για να παραλείψετε αυτό βήμα, πατήστε το κουμπί «**Later**» (Αργότερα).

**You're unique.  
So is your hearing.**

Activate Insights to help your hearing health care professional get you the best fit.

- Rate your hearing experiences
- Track your wearing time
- Track your listening environments
- Enable remote hearing aid adjustments

By activating insights you consent to store your personal information in the cloud for your hearing health care professional to access.


[Show detailed Privacy Notice](#)

[Activate](#)

[Later](#)


# Σύζευξη με το(τα) ακουστικό(ά) σας βοήθημα(τα)

## Ανίχνευση του(των) ακουστικού(ών) βοηθήματος(ων)

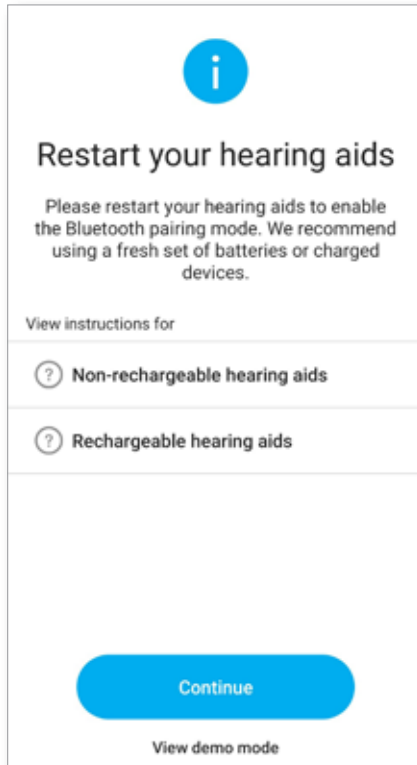

- ① Εάν το(τα) ακουστικό(ά) σας βοήθημα(τα) έχει(ουν) μπαταριοθήκη, επανεκκινήστε τα ακουστικά σας βοηθήματα ανοίγοντας και κλείνοντας την μπαταριοθήκη. Εάν το(τα) ακουστικό(ά) σας βοήθημα(τα) δεν έχει(ουν) μπαταριοθήκη, πρώτα απενεργοποιήστε κάθε ακουστικό βοήθημα πατώντας το χαμηλότερο μέρος του κουμπιού μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED να γίνει κόκκινη (4 δευτερόλεπτα). Στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ακουστικό βοήθημα πατώντας το ίδιο κουμπί μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED να γίνει πράσινη (2 δευτερόλεπτα).
- ① Μπορείτε πάντα να επιλέξετε τη λειτουργία «demo» (επίδειξη) για να δοκιμάσετε την εφαρμογή χωρίς τη σύνδεση ακουστικού βοηθήματος Unitron και να έχετε μια πρώτη εντύπωση της λειτουργικότητας. Σε αυτήν τη λειτουργία, η απομακρυσμένη λειτουργικότητα δεν είναι διαθέσιμη για τα ακουστικά σας βοηθήματα.

## Επιλογή του(των) ακουστικού(ών) βοηθήματος(ων)

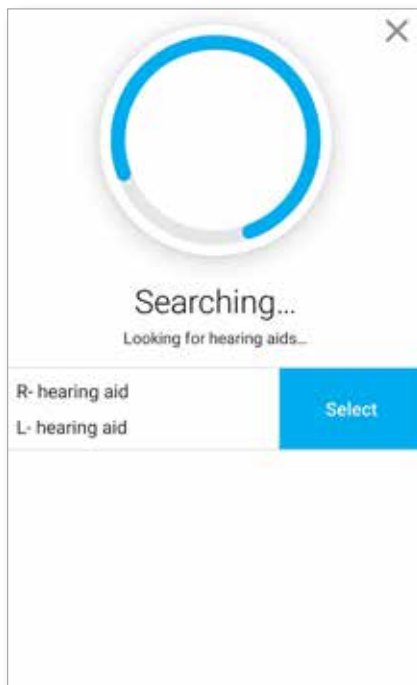

- ① Εάν έχουν ανιχνευτεί περισσότερα από ένα σετ συσκευών από την εφαρμογή, πατήστε το κουμπί στο ακουστικό σας βοήθημα και η αντίστοιχη συσκευή θα επισημανθεί στην εφαρμογή.

# Κύρια οθόνη

## Προσαρμογή της έντασης ήχου των ακουστικών βοηθημάτων

Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου των ακουστικών σας βοηθημάτων και στις δύο πλευρές.

Πατήστε το κουμπί «σίγασης» (🔇) κάτω από το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε τη σίγαση των ακουστικών βοηθημάτων.

Ρυθμιστικό έντασης ήχου

Σίγαση / κατάργηση σίγασης έντασης ήχου



## Διαχωρισμός της έντασης ήχου

Πατήστε το κουμπί «διαχωρισμού έντασης ήχου» (🔊) για να ελέγξετε την ένταση ήχου σε κάθε ακουστικό βοήθημα ξεχωριστά.



Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό έντασης ήχου για να αλλάξετε την ένταση ήχου.

Πατήστε το κουμπί «ένωσης έντασης ήχου» (🔊) για να συγχωνεύσετε τα ρυθμιστικά έντασης ήχου.

Διαχωρισμός έντασης ήχου

Ρυθμιστικό έντασης ήχου

Ένωση έντασης ήχου

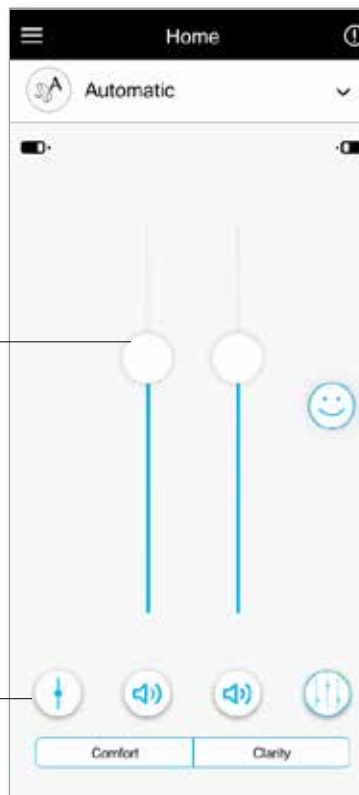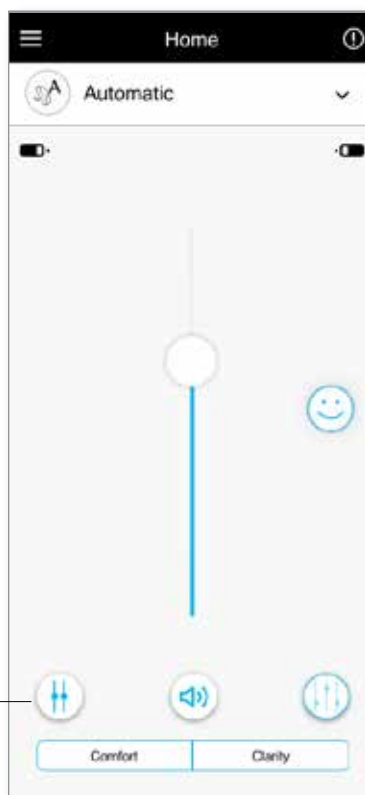


## Ενεργοποίηση προκαθορισμένων ρυθμίσεων

### Comfort (Άνεση) και Clarity (Ευκρίνεια)

Για το Αυτόματο Πρόγραμμα, η λειτουργία «Clarity» (Ευκρίνεια) είναι διαθέσιμη για τη βελτίωση της ομιλίας, ενώ η λειτουργία «Comfort» (Άνεση) χρησιμοποιείται για τη μείωση του θορύβου βελτιώνοντας τη συνολική άνεση ακρόασης.

Οι λειτουργίες Comfort (Άνεση) και Clarity (Ευκρίνεια) είναι αμοιβαία αποκλειόμενες και δεν μπορούν να βρισκονται και οι δύο ταυτόχρονα στην κατάσταση «ενεργοποίησης».

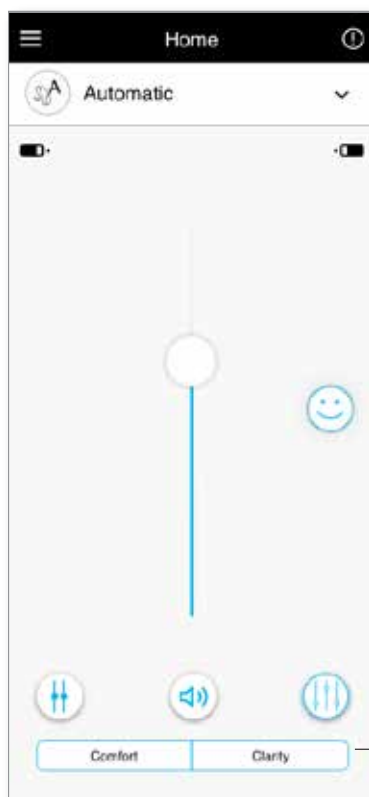


Προκαθορισμένες ρυθμίσεις  
Comfort (Άνεση)/Clarity (Ευκρίνεια)

# Αλλαγή προγραμμάτων στο(στα) ακουστικό(ά) βοήθημα(τα)

## Επιλογή ενός άλλου προγράμματος



Πατήστε το βέλος δίπλα στο τρέχον όνομα προγράμματος για να δείτε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα (π.χ. TV Connector).

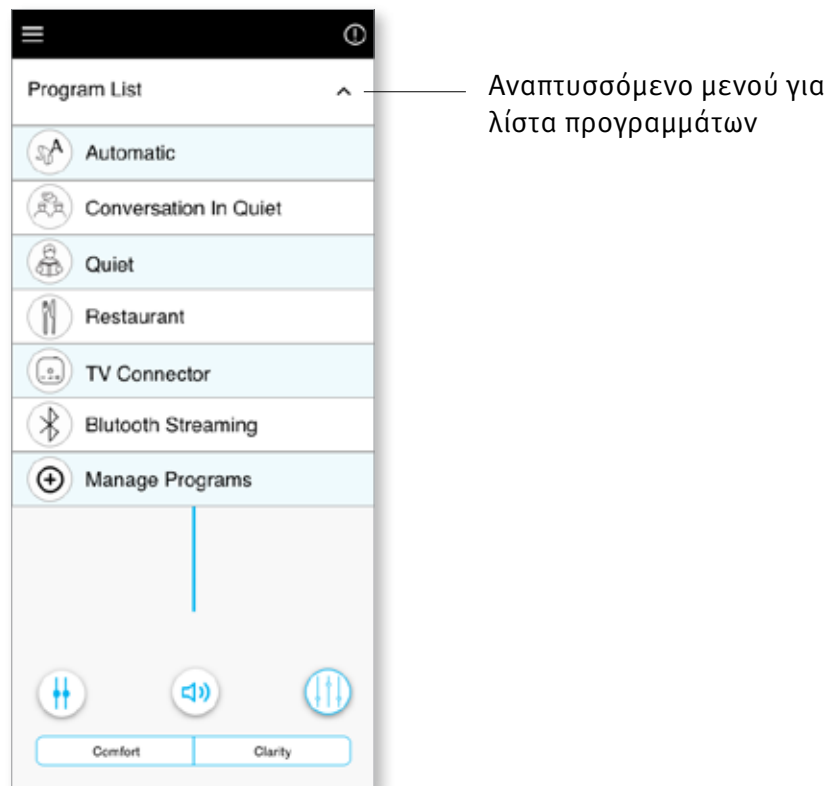

# Ρυθμίσεις προηγμένων χαρακτηριστικών

## TV Connector

Περαιτέρω προσαρμογές είναι διαθέσιμες ανάλογα με τη διαμόρφωση των ακουστικών σας βοηθημάτων ή των συνδεδεμένων πηγών ήχου (TV Connector). Πατήστε το κουμπί προηγμένων χαρακτηριστικών (🔊) στην κάτω δεξιά γωνία για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

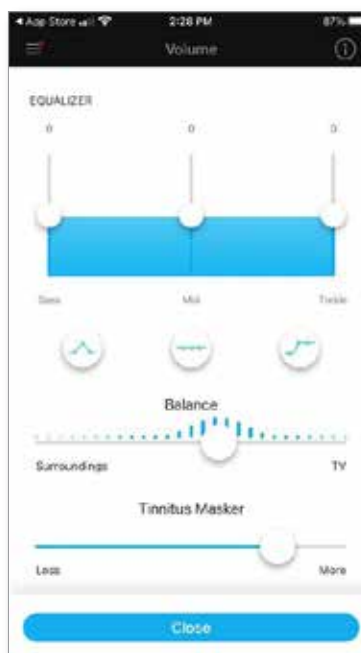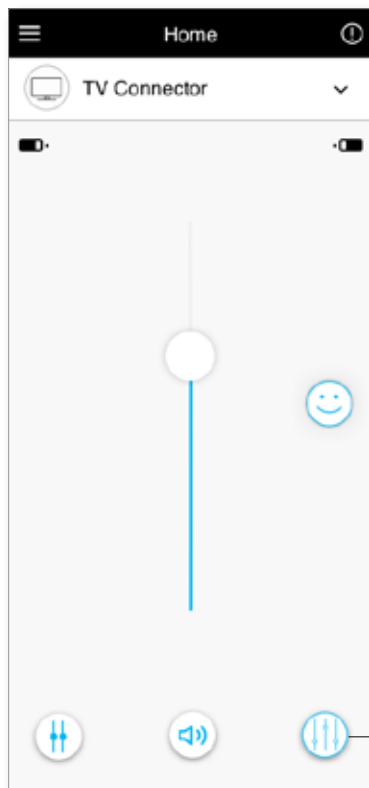

Προηγμένα χαρακτηριστικά

## Equalizer (Ισοσταθμιστής)

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προηγμένα χαρακτηριστικά ρυθμίσεων ισοσταθμιστή.

## Balance (Ισορροπία)

Εάν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική συσκευή ροής (π.χ. TV Connector, μουσική), μπορείτε να προσαρμόσετε την εστίαση για να ακούτε περισσότερο από το σήμα που μεταφέρεται μέσω ροής ή, εναλλακτικά, περισσότερο από το γύρω περιβάλλον.

## Tinnitus Masker (Συσκευή ανακούφισης από εμβοές)


Εάν έχετε συσκευή ανακούφισης από εμβοές και έχετε λάβει οδηγίες από τον ακοοπροθετιστή σας σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Tinnitus Masker (Συσκευή ανακούφισης από εμβοές), μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου του θορύβου κάλυψης.

## Πρόγραμμα - Restaurants (Εστιατόρια)

1. Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου των ακουστικών σας βοηθημάτων.  
Προηγμένα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα για επιλεκτικά προγράμματα.
2. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προηγμένα χαρακτηριστικά, πατήστε το εικονίδιο (🗨️). Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προηγμένα χαρακτηριστικά ρυθμίσεων ισοσταθμιστή. Προσαρμόστε το στοιχείο ελέγχου «Reduce noise» (Μείωση θορύβου) για να μειώσετε τον θόρυβο σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Προσαρμόστε το στοιχείο ελέγχου «Enhance speech» (Βελτίωση ομιλίας) για να τονίσετε την ομιλία σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Προσαρμόστε το στοιχείο ελέγχου «Focus mic» (Εστίαση μικροφώνου) για να εστιάσετε περισσότερο στους ήχους από μπροστά ή να ακούτε γύρω σας. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε «Close» (Κλείσιμο) στο κάτω μέρος της οθόνης και επιστρέψτε στην αρχική οθόνη.



Προηγμένα  
χαρακτηριστικά

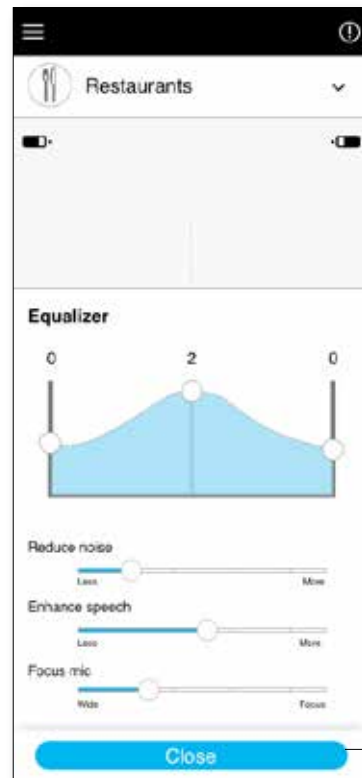

Κλείσιμο

# Βαθμολογήσεις

Εάν δώσατε τη συγκατάθεσή σας για το χαρακτηριστικό **Insights** (Πληροφορίες), θα δείτε ένα εικονίδιο χαρούμενου προσώπου (😊) στη δεξιά πλευρά της κύριας οθόνης. Πατήστε το για να αποστείλετε σχόλια στον ακοοπροθετιστή σας.


## Βαθμολογήστε την εμπειρία σας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις βαθμολογήσεις, πατήστε το εικονίδιο βαθμολογήσεων με το «χαμογελαστό προσωπάκι».




Εικονίδιο βαθμολογήσεων


1. Επιλέξτε εάν είστε ευχαριστημένοι ή όχι.

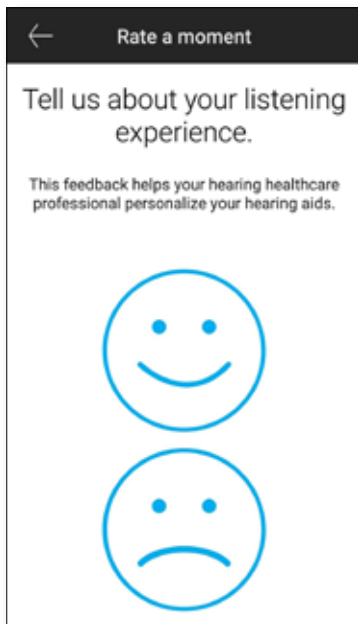

2. Επιλέξτε το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε επί του παρόντος.

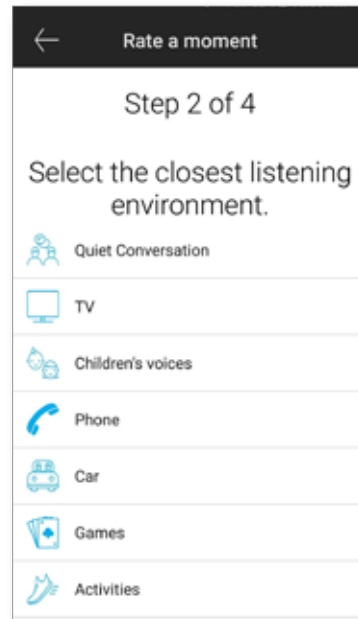

3. Εάν επιλέξατε 'Όχι ευχαριστημένοι', μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε από μια προκαθορισμένη λίστα εκείνο που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο το πρόβλημα.

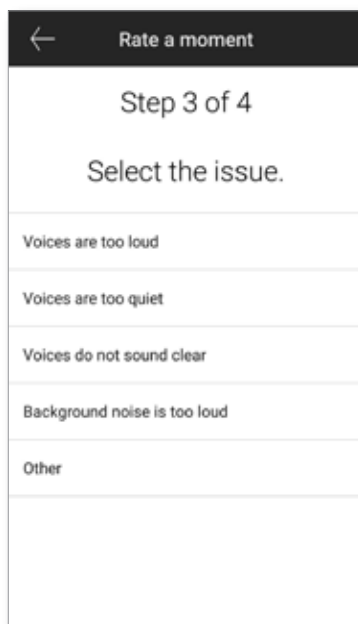


4. Προβάλετε μια σύνοψη των σχολίων σας και δώστε περισσότερα σχόλια (προαιρετικά). Πατήστε το κουμπί «Submit» (Υποβολή) για να υποβάλετε τα σχόλιά σας στον ακοοπροθετιστή σας.



## Μενού ρυθμίσεων


Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε διαφορετικές γλώσσες. Θα αντιστοιχιστεί αυτόματα στη γλώσσα του λειτουργικού συστήματος του τηλεφώνου. Εάν η γλώσσα του τηλεφώνου δεν υποστηρίζεται, η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι τα Αγγλικά.

1) Πατήστε το εικονίδιο  στην κύρια οθόνη για να έχετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων.

Μενού ρυθμίσεων



- 2) Επιλέξτε «[App settings](#)» (Ρυθμίσεις εφαρμογής) για πρόσβαση στις ρυθμίσεις εφαρμογής.
- 3) Επιλέξτε «[My Hearing Aids](#)» (Τα ακουστικά μου βοηθήματα) για να έχετε πρόσβαση στις ειδικές ρυθμίσεις για τα ακουστικά βοηθήματα.
- 4) Επιλέξτε «[Insights](#)» (Πληροφορίες) για να προβάλετε την πολιτική απορρήτου του χαρακτηριστικού Insights, πληροφορίες για το χαρακτηριστικό συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων απομακρυσμένης προσαρμογής από τον ακοοπροθετιστή σας ή για να άρετε τη συναίνεσή σας για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.
- 5) Επιλέξτε «[Videos](#)» (Βίντεο) για να δείτε βίντεο οδηγιών.
- 6) Επιλέξτε «[FAQs](#)» (Συχνές ερωτήσεις) για να προβάλετε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή και τα ακουστικά βοηθήματα στο πρόγραμμα περιήγησης στο web του τηλεφώνου.

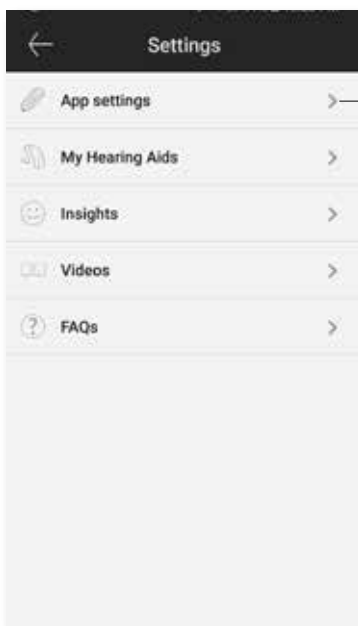

Ρυθμίσεις εφαρμογής

## Έλεγχος αγγίγματος


Εάν τα ακουστικά σας βοηθήματα έχουν έλεγχο αγγίγματος, μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο τα ακουστικά σας βοηθήματα ανταποκρίνονται στα διπλά πατήματά σας. Σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα, υπάρχει ένας ενσωματωμένος αισθητήρας, ο οποίος επιτρέπει τον έλεγχο ορισμένων λειτουργιών του ακουστικού βοηθήματος μέσω του ελέγχου αγγίγματος. Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν:

- Τηλεφωνική κλήση: αποδοχή/τερματισμός κλήσης
- Ροή τηλεόρασης και πολυμέσων: παύση/συνέχιση
- Πρόσβαση στο κινητό: φωνητικός βοηθός

Τα ακουστικά βοηθήματα με έλεγχο αγγίγματος πρέπει να συζευχθούν με την εφαρμογή για να είναι δυνατή η χρήση της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ελέγχου αγγίγματος για τις παραπάνω λειτουργίες.


Ενεργοποίηση ελέγχου αγγίγματος:

1. Από το μενού Settings (Ρυθμίσεις) της εφαρμογής, επιλέξτε «**My Hearing aids**» (Τα ακουστικά μου βοηθήματα)

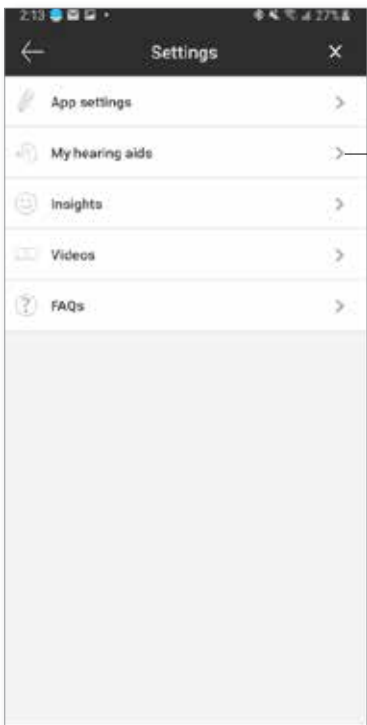

Τα ακουστικά μου  
βοηθήματα


2. Επιλέξτε «**Tap control**» (Έλεγχος αγγίγματος)

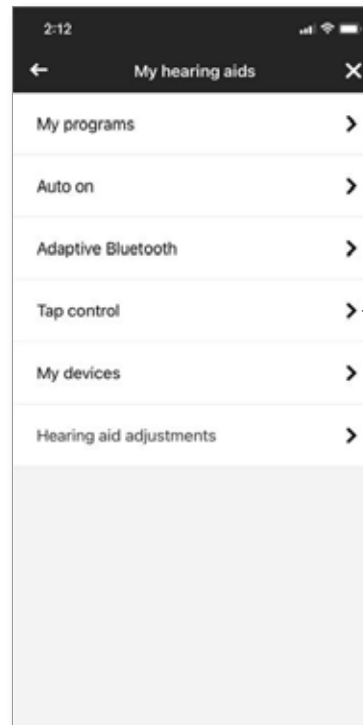

Έλεγχος αγγίγματος


3. Διαμορφώστε το διπλό πάτημα για αποδοχή/τερματισμό τηλεφωνικής κλήσης ή ροής. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον έλεγχο αγγίγματος έτσι ώστε το διπλό πάτημα να κάνει παύση/συνέχιση ή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωνητικού βοηθού είτε στο ένα είτε και στα δύο ακουστικά βοηθήματα.

4. Μόλις διαμορφωθούν οι ρυθμίσεις, πατήστε το πίσω βέλος και η εφαρμογή θα αποθηκεύσει τις αλλαγές. Πατήστε το σύμβολο 'x' για ακύρωση.

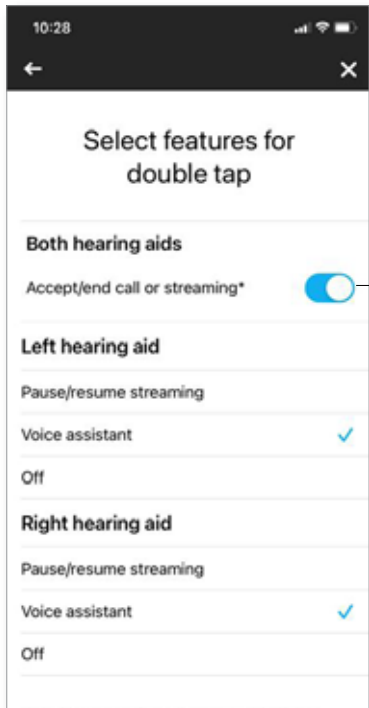

πίσω βέλος

διαμόρφωση

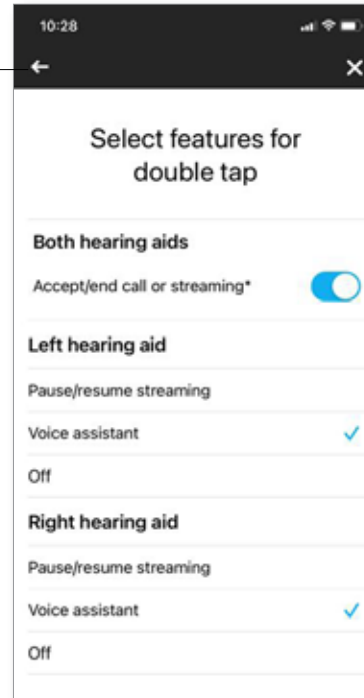

άκυρο

# Προαιρετικά προγράμματα


Επιλέξτε από έναν κατάλογο προκαθορισμένων προγραμμάτων, έτσι ώστε τα ακουστικά βοηθήματα να μπορούν να εξατομικευθούν για μια συγκεκριμένη κατάσταση. Η βασική λειτουργία καθορίζεται από τα ακουστικά βοηθήματα και η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει από 6 προαιρετικά προγράμματα. Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τα προαιρετικά προγράμματα μέσα από την εφαρμογή.

Λίστα προαιρετικών προγραμμάτων:


- Restaurant (Εστιατόριο)
- Television (Τηλεόραση)
- Transportation (Μετακίνηση)
- Café (Καφετέρια)
- Outdoors (Εξωτερικός χώρος)
- Live Music (Ζωντανή μουσική)

1. Πατήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να δείτε τη λίστα προγραμμάτων. Επιλέξτε Manage Programs (Διαχείριση προγραμμάτων) για να δείτε τα προαιρετικά προγράμματα.

2. Εμφανίζεται η λίστα των διαθέσιμων προαιρετικών προγραμμάτων. Πατήστε το πίσω βέλος για επιστροφή στη λίστα προγραμμάτων.

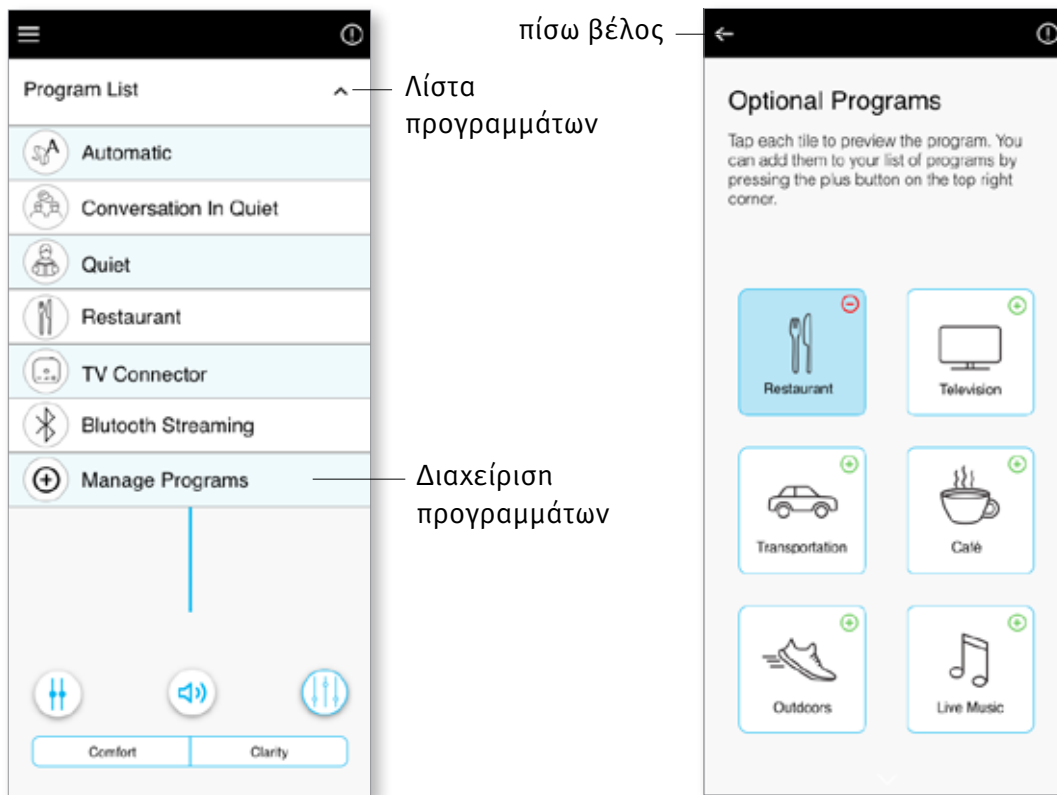


3. Πατήστε το «πράσινο σύμβολο συν» ( + ) για να προσθέσετε το προαιρετικό πρόγραμμα

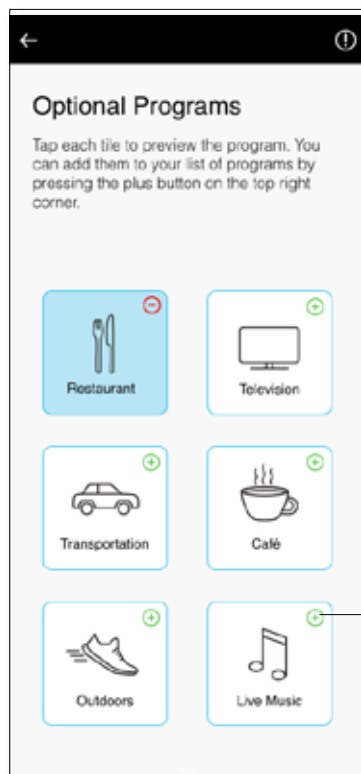


πατήστε το πράσινο σύμβολο 'συν' για να προσθέσετε το πρόγραμμα

4. Θα εμφανιστεί η οθόνη προεπισκόπησης του προγράμματος. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις και πατήστε το «Save» (Αποθήκευση) για να προσθέσετε το προαιρετικό πρόγραμμα στη λίστα προγραμμάτων

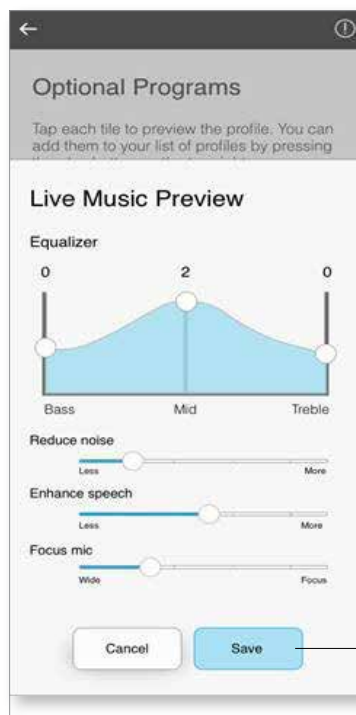

Αποθήκευση

5. Η εφαρμογή θα εμφανίσει ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι το προαιρετικό πρόγραμμα έχει προστεθεί. Πατήστε το «κόκκινο σύμβολο μείον» (⊖) για να αφαιρέσετε το προαιρετικό πρόγραμμα από τη λίστα προγραμμάτων

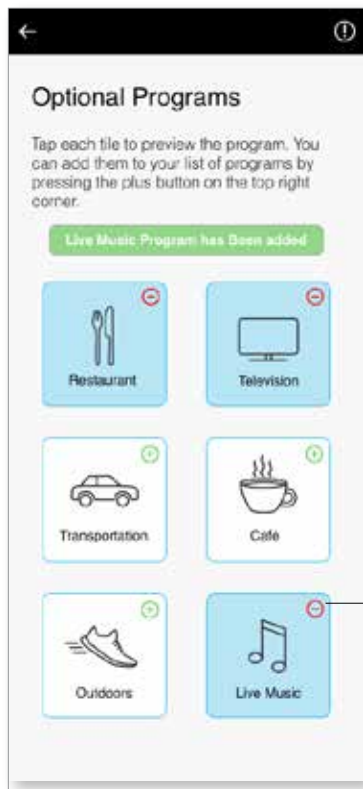


πατήστε το κόκκινο σύμβολο 'μείον' για να αφαιρέσετε το πρόγραμμα

6. Πατήστε το πλακίδιο του προαιρετικού προγράμματος για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις




πατήστε για επεξεργασία

7. Αφού ανοίξει το πρόγραμμα, αλλάξτε την ένταση του ήχου μετακινώντας το ρυθμιστικό προς τα πάνω και προς τα κάτω. Επίσης, πατήστε το κουμπί προηγμένων χαρακτηριστικών για να δείτε πρόσθετες επιλογές.

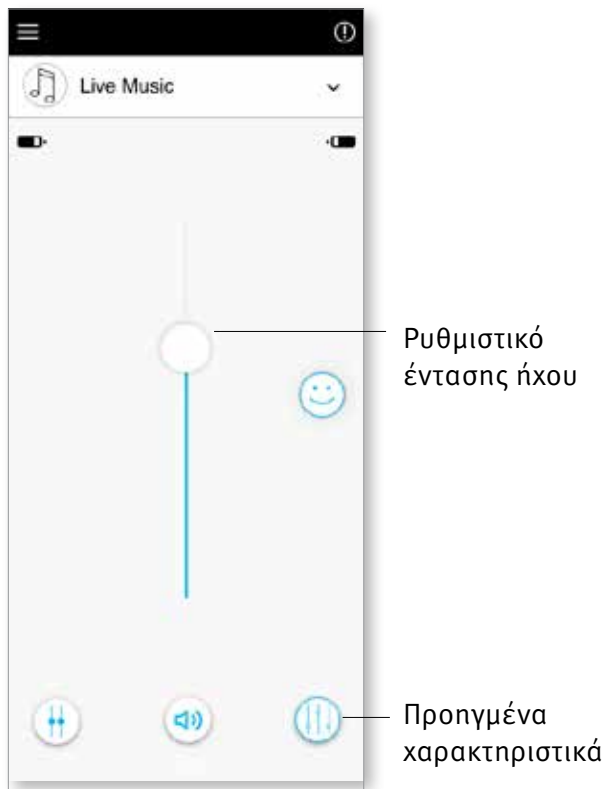

8. Προηγμένα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα για χρήση. Οι ακόλουθες προκαθορισμένες ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν:
- **Equalizer (Ισοσταθμιστής)** - μπορεί να προσαρμοστεί για κάθε προκαθορισμένη ρύθμιση
  - **Reduce noise (Μείωση θορύβου)** και **Enhance speech (Βελτίωση ομιλίας)** – μπορούν να ρυθμιστούν σε περισσότερο ή λιγότερο
  - **Focus mic (Εστίαση μικροφώνου)** – μπορεί να προσαρμοστεί σε ευρεία ή επικεντρωμένη
- Πατήστε «Close» (Κλείσιμο) για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές

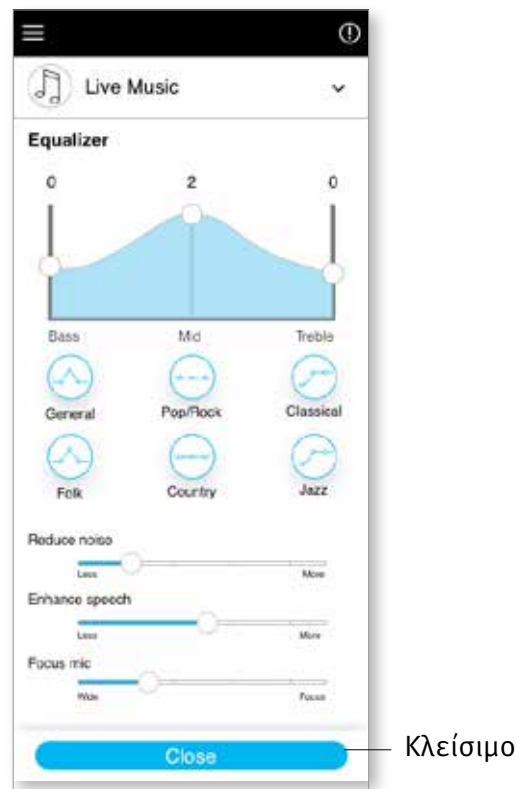


## Επεξεργασία του ονόματος ενός προγράμματος


Η εφαρμογή Remote Plus επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει το όνομα των προγραμμάτων, έτσι ώστε να μπορείτε να εξατομικεύσετε τι σημαίνει κάθε πρόγραμμα για εσάς. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του προγράμματος για οποιοδήποτε πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών προγραμμάτων.

Για να αλλάξετε το όνομα του προγράμματος:

1. Πατήστε το μενού Settings (Ρυθμίσεις), στη συνέχεια επιλέξτε «**My hearing aids**» (Τα ακουστικά μου βοηθήματα)
2. Εμφανίζεται η οθόνη My hearing aids (Τα ακουστικά μου βοηθήματα) Πατήστε το «**My programs**» (Τα προγράμματά μου)

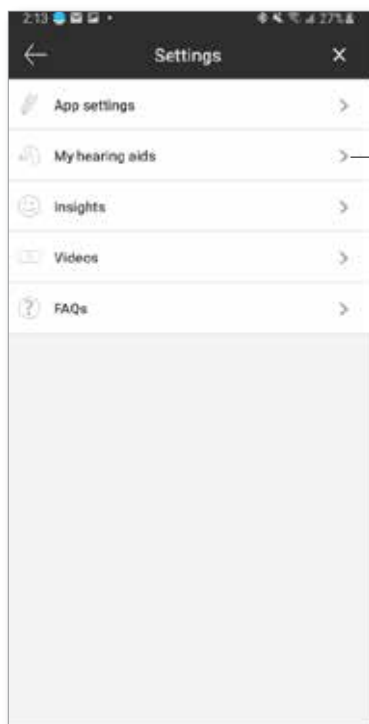


Τα ακουστικά μου  
βοηθήματα

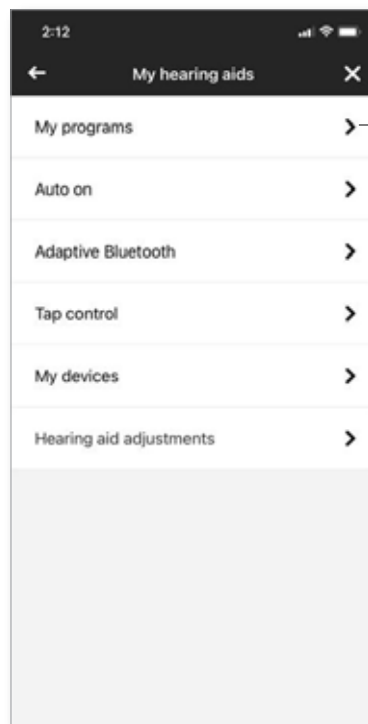


Τα προγράμματά μου

3. Εμφανίζεται η λίστα «My programs» (Τα προγράμματά μου). Πατήστε το επιθυμητό πρόγραμμα (π.χ. Automatic (Αυτόματο)).

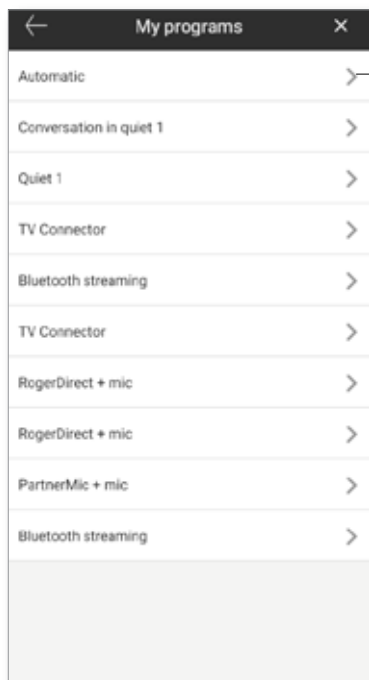

Αυτόματο

4. Πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας/ μολυβιού και αλλάξτε το «Display name» (Όνομα εμφάνισης). Αυτό θα πρέπει να αλλάξει το όνομα στο αναπτυσσόμενο μενού «Program list» (Λίστα προγραμμάτων) και στην οθόνη επιλογής «Optional program» (Προαιρετικό πρόγραμμα).

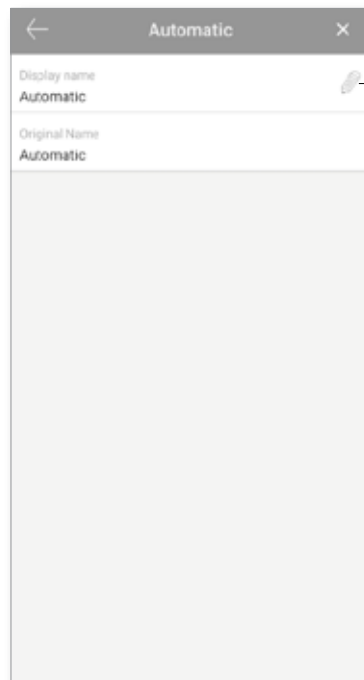


εικονίδιο επεξεργασίας

# Απομακρυσμένη προσαρμογή


Εάν δώσατε τη συγκατάθεσή σας για το χαρακτηριστικό **Insights** (Πληροφορίες), θα μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push, οι οποίες περιέχουν προσαρμογές στα ακουστικά σας βοηθήματα που αποστέλλονται από τον ακοοπροθετιστή σας.

## Εφαρμογή απομακρυσμένης προσαρμογής


1. Λάβετε ένα εξατομικευμένο μήνυμα από τον ακοοπροθετιστή σας.
2. Πατήστε την ειδοποίηση για να έχετε πρόσβαση στην προσαρμογή. Ή ανοίξτε την εφαρμογή Remote Plus και μεταβείτε στο **Settings** (Ρυθμίσεις) > **My hearing aids** (Τα ακουστικά μου βοηθήματα) > **Hearing aid adjustments** (Προσαρμογές ακουστικών βοηθημάτων).

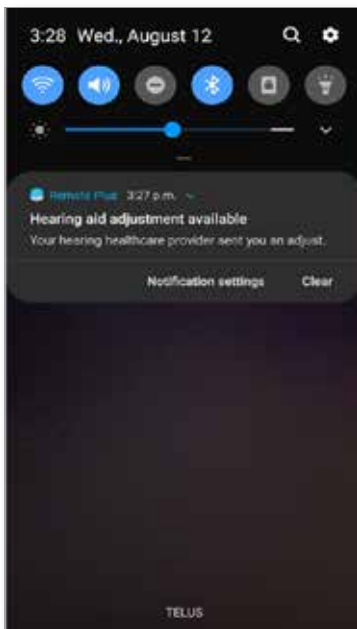

3. Επιλέξτε τις προσαρμογές και εφαρμόστε τις αλλαγές.

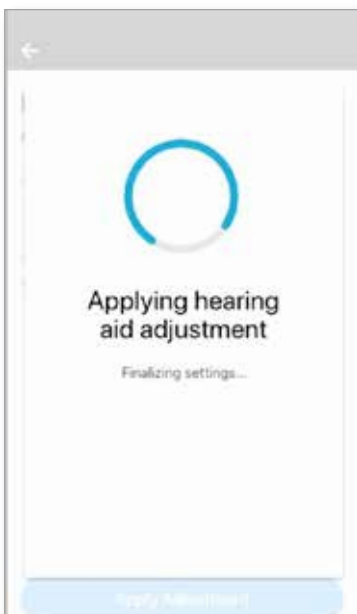

4. Εάν προτιμούσατε μια άλλη ρύθμιση, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε προηγούμενο μήνυμα και να το εφαρμόσετε στα ακουστικά σας βοηθήματα.

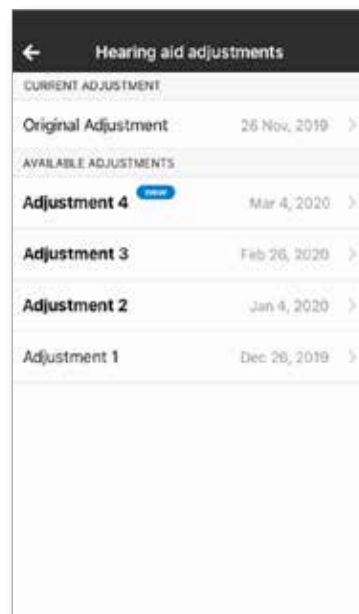

# Πληροφορίες συμμόρφωσης

---

## Δήλωση συμμόρφωσης

Δια του παρόντος, η Sonova AG δηλώνει ότι αυτό το προϊόν Unitron συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 93/42/ΕΟΚ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο από τον κατασκευαστή ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της Unitron, του οποίου η διεύθυνση μπορεί να ληφθεί από τη λίστα στο <http://www.unitron.com> (διεθνείς τοποθεσίες).

- ① Εάν τα ακουστικά σας βοηθήματα δεν ανταποκρίνονται στη συσκευή λόγω ασυνήθιστης διαταραχής πεδίου, απομακρυνθείτε από το πεδίο που προκαλεί τη διαταραχή.
- ① Οδηγίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [unitron.com/appguide](http://unitron.com/appguide) σε μορφή Adobe® Acrobat® PDF. Για να τις προβάλετε, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Adobe Acrobat Reader. Επισκεφθείτε το [Adobe.com](http://Adobe.com) για να κάνετε λήψη.
- ① Για να λάβετε ένα δωρεάν έντυπο αντίγραφο των οδηγιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Unitron. Ένα αντίγραφο θα αποσταλεί εντός 7 ημερών.

## Πληροφορίες και επεξήγηση συμβόλων

---



Με το σύμβολο CE, η Sonona AG επιβεβαιώνει ότι αυτό το προϊόν Unitron – συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ – πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 93/42/ΕΟΚ. Οι αριθμοί μετά το σύμβολο CE αντιστοιχούν στον κωδικό των πιστοποιημένων ιδρυμάτων που γνωμοδότησαν σύμφωνα με τις προαναφερθείσες οδηγίες.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι είναι σημαντικό ο χρήστης να λάβει υπόψη τις σχετικές πληροφορίες σε αυτόν τον οδηγό χρήσης.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι είναι σημαντικό ο χρήστης να προσέξει τις σχετικές προειδοποιήσεις σε αυτόν τον οδηγό χρήσης.



Σημαντικές πληροφορίες για τον χειρισμό και την αποτελεσματική χρήση του προϊόντος.



Σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων



Το σύμβολο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από την επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή (που διαθέτει την παρούσα συσκευή στην αγορά).



Υποδεικνύει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο EC REP είναι επίσης ο εισαγωγέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Η μάρκα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών από την Unitron γίνεται κατόπιν αδείας. Τα λοιπά σήματα κατατεθέντα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι αυτά των αντίστοιχων κατόχων τους.

---



Sonova AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa, Switzerland



Και εισαγωγέας για την Ευρωπαϊκή Ένωση:  
Sonova Deutschland GmbH  
Max-Eyth-Str. 20  
70736 Fellbach-Oeffingen, Germany



**unitron.com**