

Unitron Remote Plus uygulaması

Kullanım Kılavuzu



Başlarken

Kullanım amacı

Unitron Remote Plus uygulaması, işitme cihazı kullanıcılarının Android ve Apple iOS telefonları üzerinden Unitron işitme cihazlarının belirli işlevlerini ayarlaması amacıyla tasarlanmıştır¹.

İşitme uzmanı, işitme cihazı kullanıcılarına **Görüşler** özelliklerini sunar ve işitme cihazı kullanıcıları tercih ederse, kullanıcı işitme uzmanına işitme cihazı verileri ve dinleme deneyimleri hakkında geri bildirimlerini gönderebilir.

Uyumluluk bilgisi:

⚠ Unitron Bluetooth kablosuz işitme cihazlarının Unitron Remote Plus uygulaması ile birlikte kullanılması gerekmektedir.

Unitron Remote Plus uygulaması, Bluetooth® Düşük Enerji (BT-LE) kapasitesine sahip cihazlarda kullanılabilir ve iPhone 5s veya iOS 10.2 veya üst versiyonunu çalıştıran daha yeni modellerle uyumludur.

Unitron Remote Plus uygulaması, Bluetooth 4.2 ve Android OS 6.0 veya daha yeni versiyonunu destekleyen Google Mobile Services (GMS) onaylı Android cihazlarda kullanılabilir.

- ⓘ **Bazı telefonlar, işitme cihazlarına aktarılabilen dokunma seslerine veya tuş takımı tonlarına sahiptir. Bunu önlemek için telefonunuzun ayarlarında sesleri seçin ve tüm dokunma seslerinin ve tuş takımı tonlarının devre dışı olduğundan emin olun.**

¹ Uyumlu telefonlar: Unitron Remote Plus uygulaması, sadece Bluetooth® düşük enerji teknolojisine sahip telefonlarda kullanılabilir.

Bluetooth® kelime işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc'in tescilli ticari markalarıdır.

Apple, Apple logosu, iPhone ve iOS, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc. şirketinin bir hizmet markasıdır.


Android, Google Play ve Google Play logosu, Google Inc. şirketinin ticari markalarıdır.



İçindekiler

Uygulamaya genel bakış.....	4
Gizlilik politikası	5
İşitme cihazları ile eşleştirme	6
Ana ekran	7
İşitme cihazlarındaki programları değiştirme	8
Değerlendirmeler.....	9
Ayarlar menüsü.....	10
Uyumluluk Bilgisi.....	11
Semboller hakkında bilgi ve açıklamalar	12

Uygulamaya genel bakış

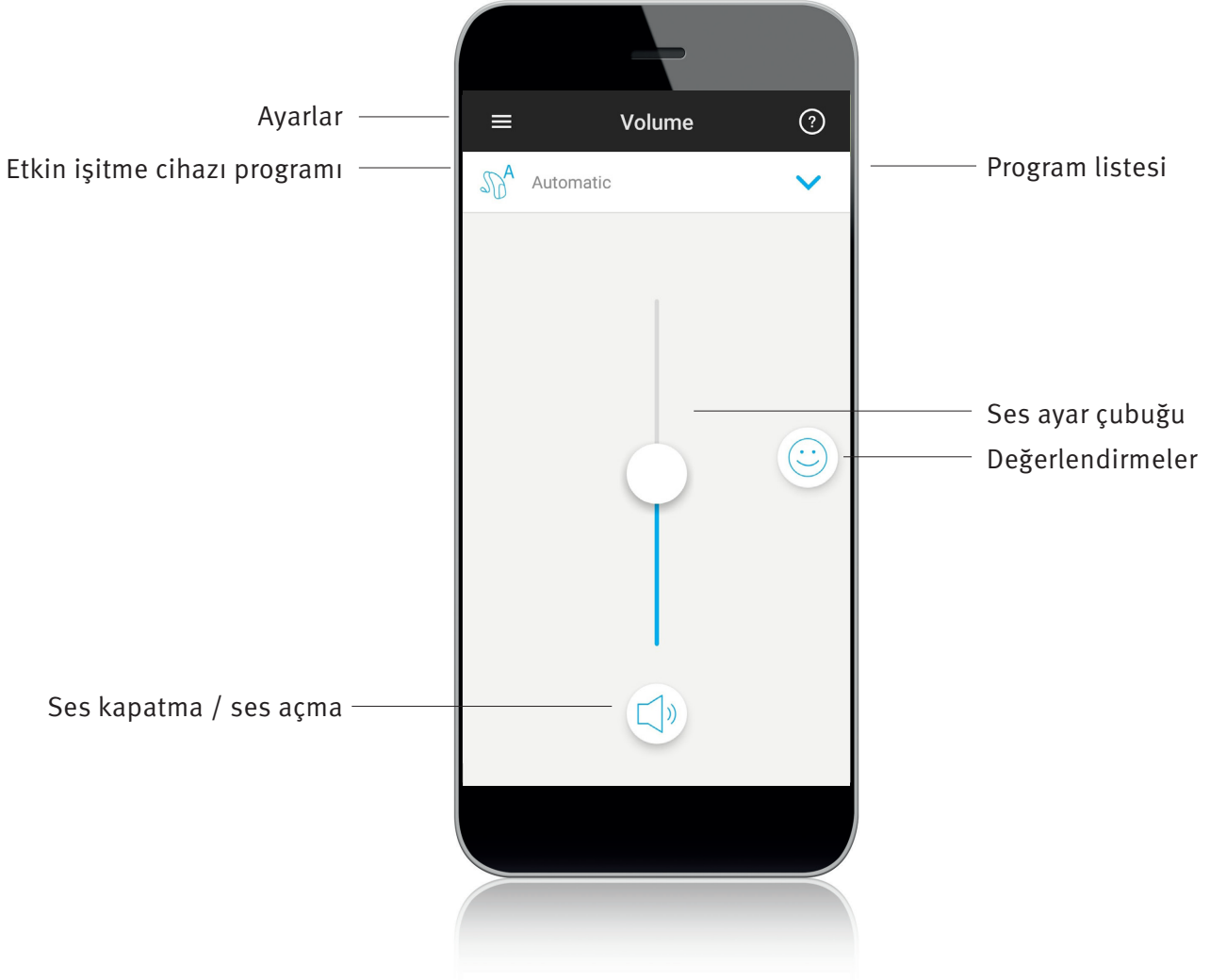

Gizlilik politikası

Uygulamanın gizlilik bildirimini kabul etme

Unitron Remote Plus uygulamasını kullanmak için gizlilik bildirimini ve uygulama kullanımı için isimsiz veri analizini kabul etmeniz gerekmektedir.

Privacy Notice

In order, among other purposes, to identify you, to enable the functionalities of Unitron Remote Plus and to improve our service, we will collect some information about you such as your first name, last name, email address, hearing serial number, information regarding hearing aid settings and hearing aid usage.

Please read carefully the privacy notice. The installation of Unitron Remote Plus is an acknowledgement that you have read, understood, and agreed to the privacy notice that will apply to any personal data that we collect when you will use Unitron Remote Plus and/or that we collected through your use of previous version of Unitron Remote Plus.

Show detailed Privacy Notice

Accept

Görüşleri etkinleştirme

Görüşler özelliğini aktifleştirmek için etkinleştirme butonuna basın. Bu aşamayı atlamak için “Belki daha sonra” butonuna basın.

Activate Insights

The Remote Plus add can allow you to send feedback and hearing aid data to your hearing care professional to help personalize your experience. We will never sell your personal information to others. It's part of our Privacy Notice


Show detailed Privacy Notice

Activate

Maybe Later


İşitme cihazları ile eşleştirme

İşitme cihazlarınızı tespit etme

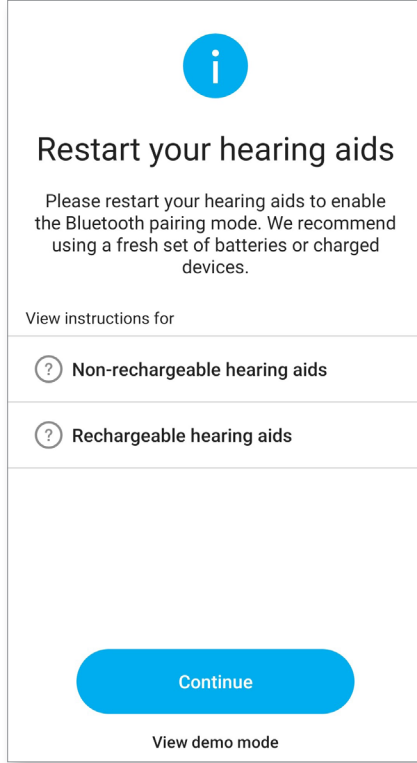

- ① İşitme cihazlarınızda pil kapağı varsa, pil kapağını açıp kapatarak cihazlarınızı yeniden başlatın. İşitme cihazlarınızın pil kapağı yoksa önce her işitme cihazını, LED ışığı kırmızı yanana kadar butonun alt kısmına basarak (4 saniye) kapatın. Daha sonra her işitme cihazını, LED ışığı yeşil yanana kadar aynı butona basarak (2 saniye) açın.
- ① Unitron işitme cihazını bağlamadan uygulamayı denemek için “demo” modunu seçebilir ve işlevleri hakkındaki ilk izlenimi edinebilirsiniz. Bu modda işitme cihazlarınız için uzaktan kontrol işlevi etkin değildir.

İşitme cihazlarınızı seçme

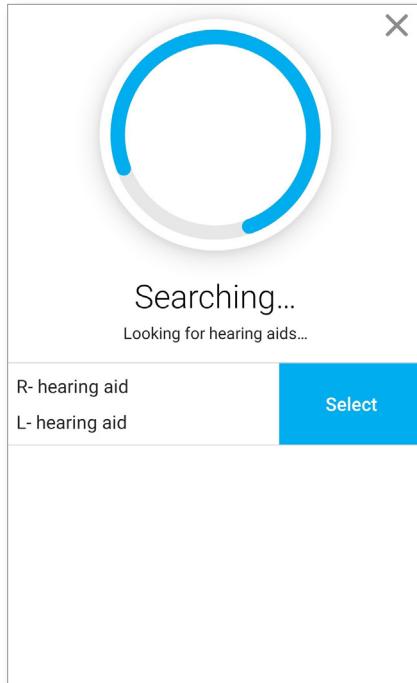


- ① Uygulama tarafından birden fazla cihaz seti tespit edilirse işitme cihazınızın üzerindeki butona basın, ilgili cihaz uygulamada vurgulanacaktır.

Ana ekran


İşitme cihazının sesini ayarlama

Her iki tarafta işitme cihazının sesini yükseltmek veya alçaltmak için ayar çubuğunu yukarı veya aşağı doğru hareket ettirin. İşitme cihazlarının sesini kapatmak veya açmak için ayar çubuğunun altındaki sessiz butonuna basın.

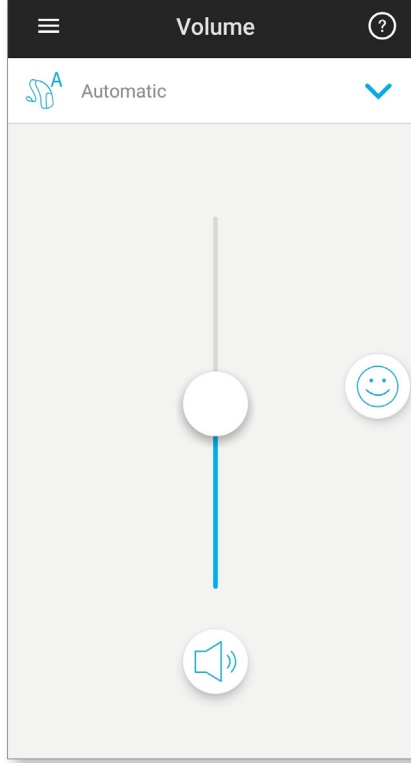

Sesi bölme


Uygulama ayarlarında “Taraf seçimi” açıksa, ayar çubuğunun üst kısmında bir buton görünür. Her işitme cihazındaki sesi ayrı ayrı kontrol etmek için “Ayrırma” butonuna basın.

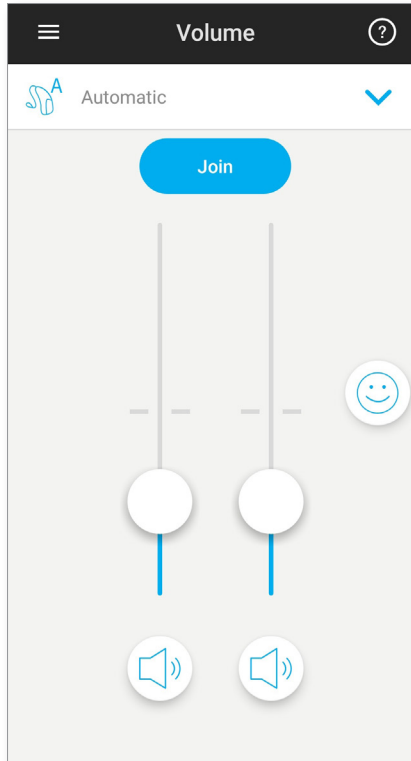


İşitme cihazlarındaki programları deęiřtirme



Bařka bir program seęme

Kullanılabilir programları gormek iin mevcut program adının yanındaki oka basın. İstenilen programa basın.

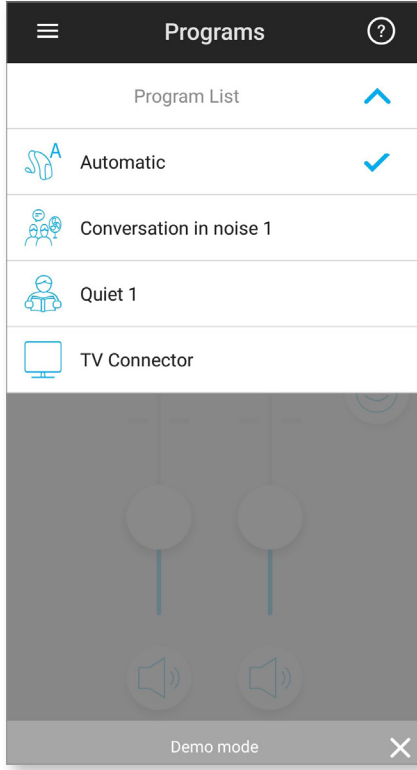

Geliřmiř program ayarları

Dięer ayarlamalar, iřitme cihazınızın konfigurasyonuna veya baęlı olan ses kaynaklarına (TV Connector) baęlı olarak mevcuttur. Bu seeneklere eriřmek iin saę alt koředeki  butona basın:

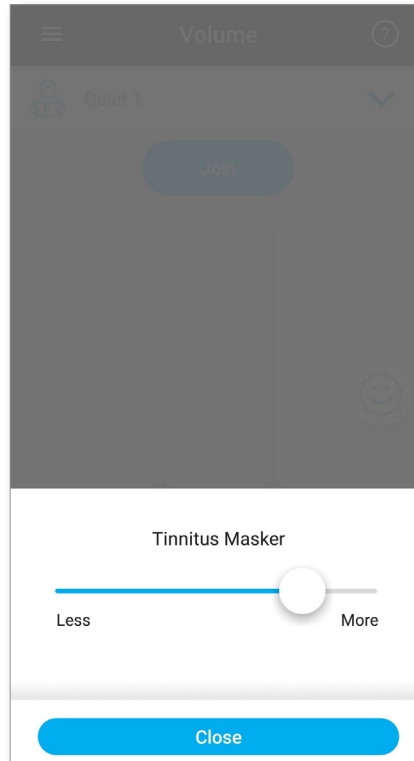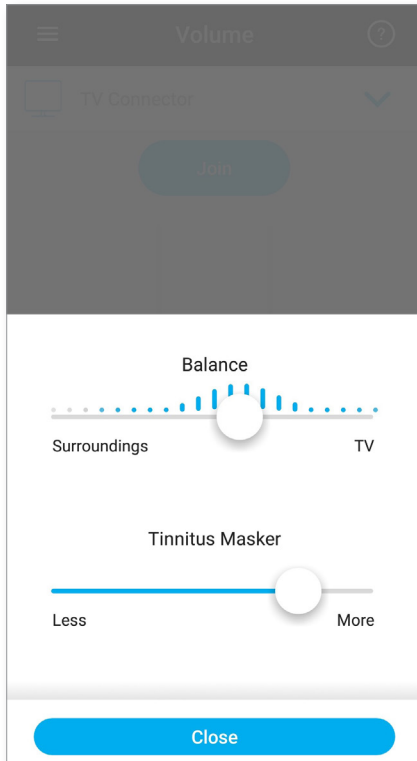


Değerlendirmeler

Değerlendirmeler özelliğine dahil olursanız, ana ekranın sağ tarafında mutlu yüz simgesini (😊) göreceksiniz. İşitme uzmanınıza geri bildirimde bulunmak için bu simgeye basın.

Deneyimlerinizi değerlendirin

A. Memnun veya memnun değil seçeneklerinden birini seçin.

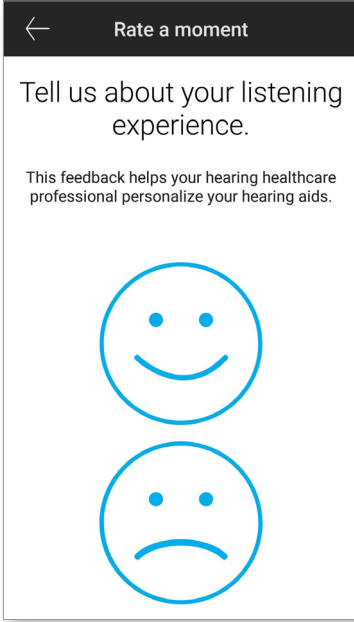

← Rate a moment


Tell us about your listening experience.

This feedback helps your hearing healthcare professional personalize your hearing aids.

😊

☹️

B. Şu anda bulunduğunuz ortamı seçin.

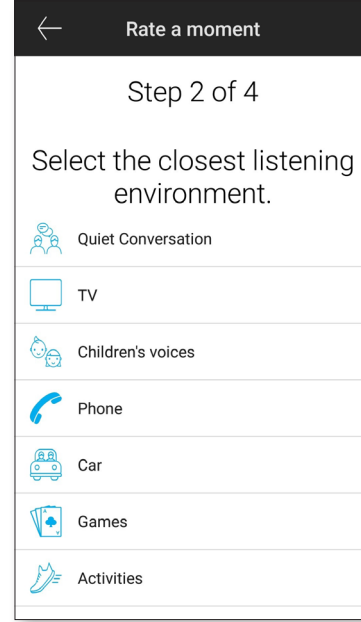

← Rate a moment

Step 2 of 4

Select the closest listening environment.

👤 Quiet Conversation

📺 TV

👶 Children's voices


📞 Phone

🚗 Car

🃏 Games

👣 Activities

C. Memnun değil seçeneğini belirlediyseniz, önceden hazırlanmış bir listeden sorunu en iyi şekilde açıklayan seçeneği seçebilirsiniz.

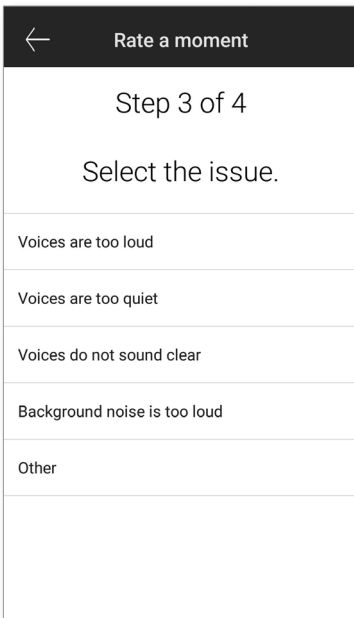

← Rate a moment

Step 3 of 4

Select the issue.

Voices are too loud


Voices are too quiet

Voices do not sound clear

Background noise is too loud

Other

D. Geri bildirimizin özetine bakın ve daha fazla yorum yapın (isteğe bağlı). Geri bildirimizi işitme uzmanınıza göndermek için “Gönder” butonuna basın.

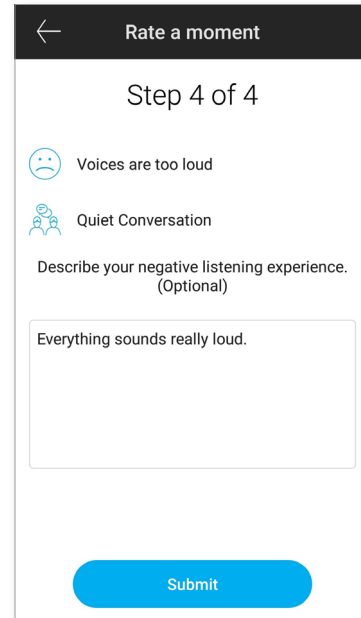

← Rate a moment

Step 4 of 4

☹️ Voices are too loud

👤 Quiet Conversation


Describe your negative listening experience. (Optional)


Everything sounds really loud.

Submit


Ayarlar menüsü

Uygulama, farklı dillerde mevcuttur. Otomatik olarak telefonunuzun işletim sisteminin dili ile eşleşecektir. Telefonunuzun dili desteklenmiyorsa, varsayılan dil İngilizcedir.

1) Ayarlar menüsüne erişmek için ana ekrandaki  simgesine basın.

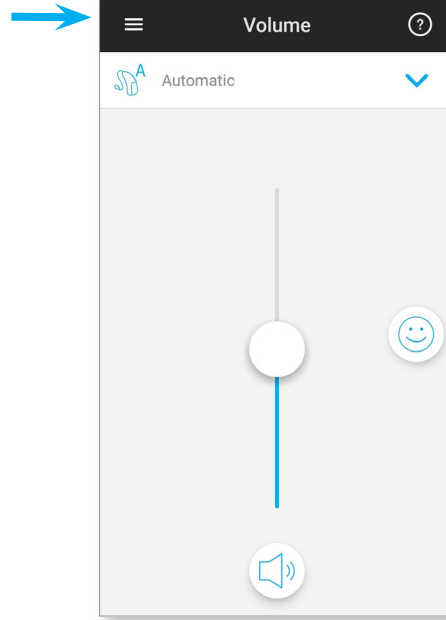

- 2) Uygulama ayarlarına erişmek için “[Uygulama ayarları](#)” seçeneğini seçin.
- 3) İşitme cihazına özgü ayarlara erişmek için “[İşitme Cihazlarım](#)” seçeneğini seçin.
- 4) Görüşler gizlilik politikasını, özellik bilgilerini görüntülemek veya bu özellikten çıkmak için “[Görüşler](#)” seçeneğini seçin.
- 5) Eğitici videoları izlemek için “[Videolar](#)” seçeneğini seçin.
- 6) Telefonunuzun web tarayıcısında uygulama ve işitme cihazları hakkında sıkça sorulan soruları görüntülemek için “[SSS](#)” seçeneğini seçin.

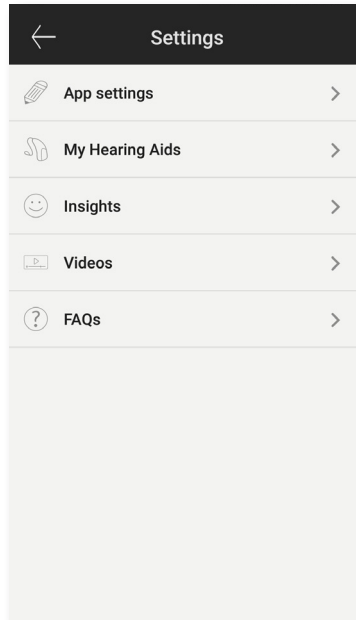

Uyumluluk Bilgisi

Uygunluk Beyanı

Burada Sonova AG, bu Unitron ürününün Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/EEC'nin temel gereklilikleri ile uygun olduğunu beyan etmektedir. Uygunluk Beyanı'nın tam metni, üreticiden veya <http://www.unitron.com> (dünya genelindeki lokasyonlar) adresindeki listeden bilgilerine ulaşabileceğiniz yerel Unitron temsilcisinden temin edilebilir.

- ① İşitme cihazları, normal olmayan bir alan bozulmasından ötürü cihaza tepki vermiyorsa, bozulmaya neden olan alandan uzaklaşın.
- ① Talimatlar: unitron.com/appguide adresinde Adobe® Acrobat® PDF formatında bulunmaktadır. Görüntülemek için Adobe Acrobat Reader programına sahip olmanız gerekir. Yükleme için [Adobe.com](http://adobe.com) adresini ziyaret edin.
- ① Talimatların ücretsiz basılı kopyasını almak için lütfen yerel Unitron temsilcinizle irtibata geçin. 7 gün içinde bir kopya gönderilecektir.

Semboller hakkında bilgi ve açıklamalar



CE Sembolü ile Sonova AG, bu Unitron ürününün - aksesuarlar dahil - Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/EEC'nin gerekliliklerini karşıladığını doğrular.

CE sembolünün ardından gelen sayılar, yukarıda belirtilen direktiflere istinaden danışılan onaylı kuruluşların kodunu belirtmektedir.



Bu sembol, kullanıcının bu kullanım kılavuzundaki ilgili bilgileri okuması ve dikkate almasının önemli olduğunu belirtir.



Bu sembol, kullanıcının bu kullanım kılavuzundaki ilgili uyarı bildirimlerine dikkat etmesinin önemli olduğunu belirtir.



Ürünün taşınması ve etkin şekilde kullanılması için önemli bilgiler.




Telif hakkı sembolü



Bu sembole, üreticinin (bu cihazı piyasaya süren kişi) adı ve adresi de eşlik etmelidir.



Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc'in tescilli ticari markalarıdır ve Unitron tarafından bu tür markaların kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili mal sahiplerine aittir.

 Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, İsviçre

unitron.com

CE
0459

© 2018-2019 Sonova AG. Tüm hakları saklıdır.
A/2019-04 029-6231-22