

Приложение Unitron Remote Plus

Руководство пользователя



Начало работы

Назначение

Приложение Unitron Remote Plus предназначено для пользователей слуховых аппаратов с целью настройки различных параметров слуховых аппаратов Unitron с помощью устройств на платформе Android и Apple iOS¹.

Если специалист-сурдолог предлагает пользователю слухового аппарата функции [Insights](#), и тот решит воспользоваться ими, то пользователь сможет отправлять специалисту-сурдологу данные слухового аппарата и отзывы относительно своих слуховых ощущений.

Информация о совместимости

⚠ Для беспроводных слуховых аппаратов Bluetooth компании

Unitron требуется использовать приложение Unitron Remote Plus.

Приложение Unitron Remote Plus можно использовать на устройствах с функцией Bluetooth® с низким энергопотреблением (BT-LE) и совместимым с iPhone 5s или более новыми моделями с iOS версии 10.2 или более новой.

Приложение Unitron Remote Plus можно использовать на устройствах Android, сертифицированных для работы с сервисами Google для мобильных устройств (GMS), поддерживающих стандарт Bluetooth 4.2 и работающих под управлением операционной системы Android OS 6.0 или более новой.

ⓘ Некоторые телефоны имеют звуковые сигналы нажатия на сенсорный экран или набора на клавиатуре, которые могут воспроизводиться на слуховых аппаратах. Во избежание этого перейдите в настройки телефона, выберите меню настройки звуков и убедитесь, что все звуки нажатия на сенсорный экран и набора на клавиатуре выключены.

¹ Совместимые телефоны: приложение Unitron Remote Plus можно использовать только на телефонах с поддержкой технологии Bluetooth® с низким энергопотреблением.

Словесный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc.

Apple, логотип Apple, iPhone и iOS являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.


Android, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками компании Google Inc.



Содержание

| | |
|---|----|
| Обзор приложения..... | 4 |
| Политика конфиденциальности..... | 5 |
| Сопряжение со слуховыми аппаратами | 6 |
| Главный экран | 7 |
| Изменение программ слуховых аппаратов | 8 |
| Оценки | 9 |
| Меню параметров | 10 |
| Информация о соответствии..... | 11 |
| Информация и значения символов | 12 |


Обзор приложения

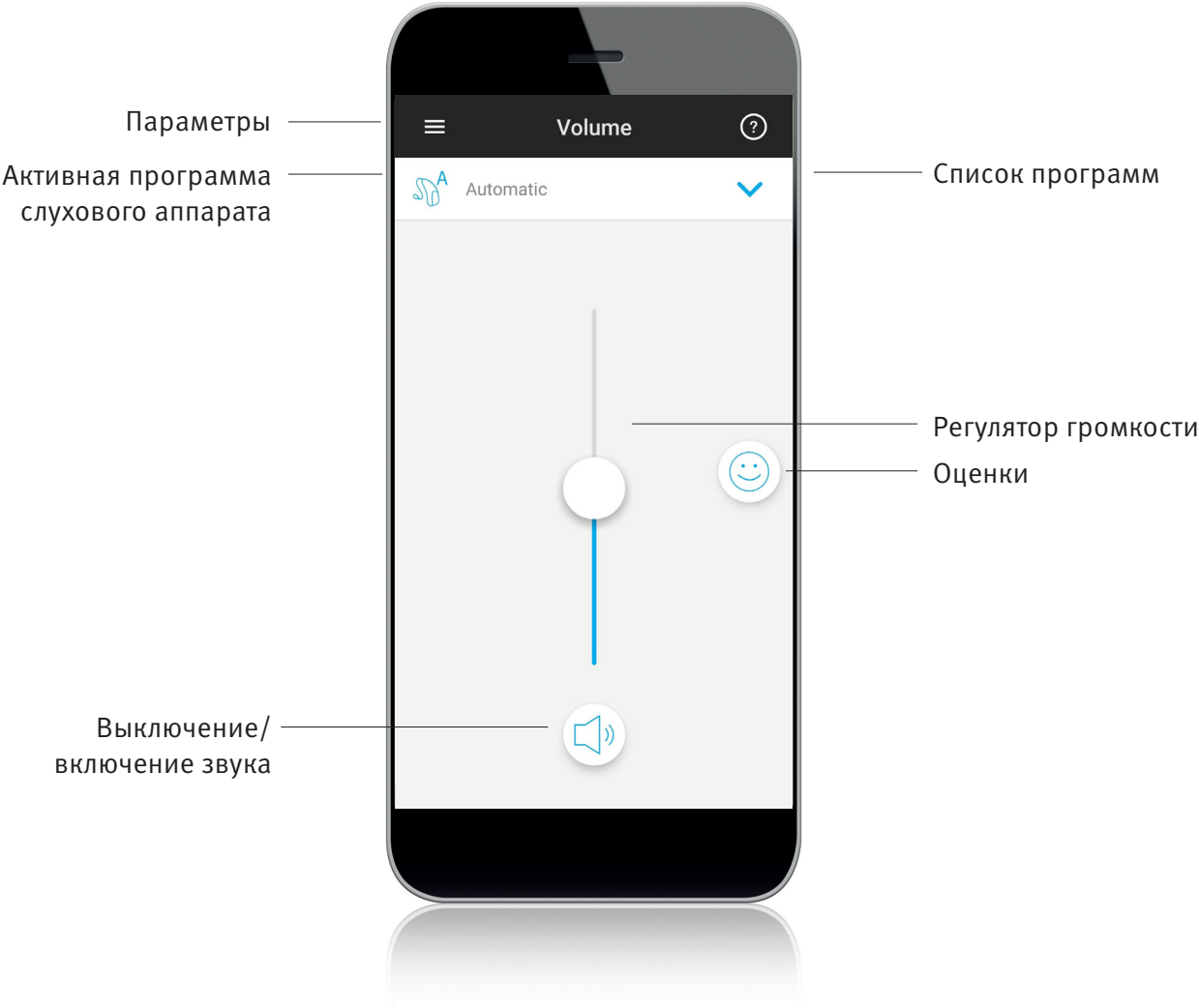

Политика конфиденциальности


Принятие уведомления о конфиденциальности приложения

Для использования приложения Unitron Remote Plus необходимо принять уведомление о конфиденциальности и анонимный анализ использования данных, получаемых из приложения.

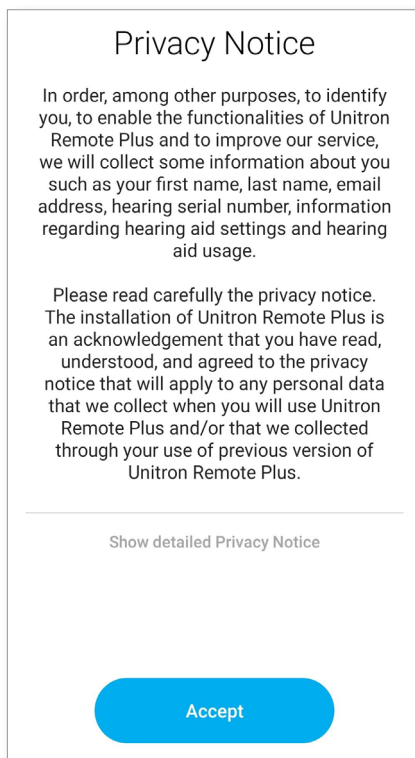


Активация функции Insights

Для использования функции **Insights** коснитесь кнопки активации. Чтобы пропустить этот шаг, коснитесь кнопки «Может быть позже».

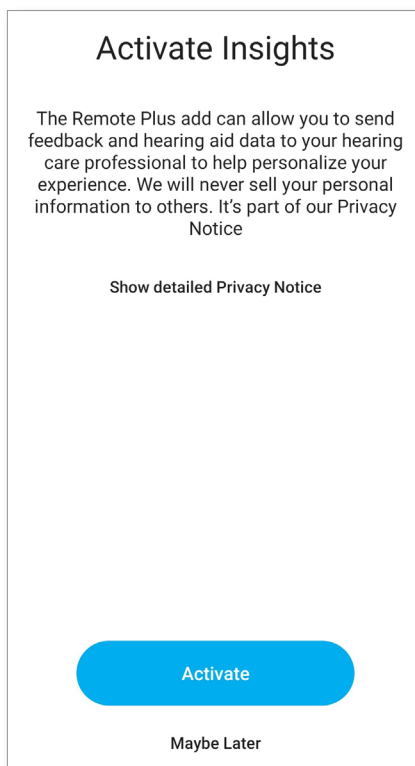


Сопряжение со слуховыми аппаратами

Обнаружение слуховых аппаратов

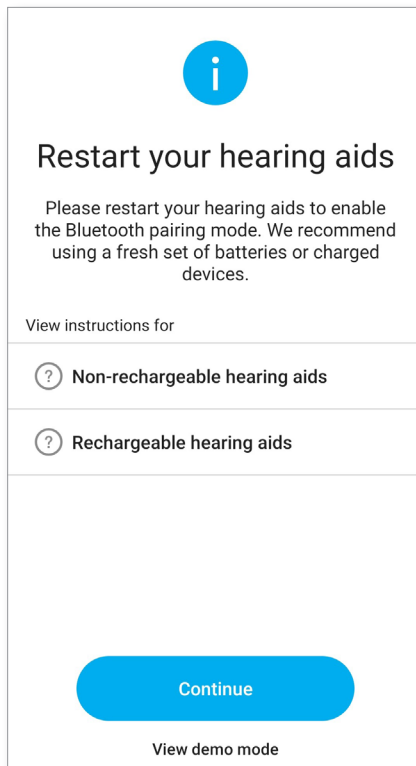

- ① Если слуховые аппараты оснащены крышкой батарейного отсека, перезагрузите их, открыв и закрыв крышку батарейного отсека. Если слуховые аппараты не оснащены крышкой батарейного отсека, то сначала выключите каждый слуховой аппарат, нажав и удерживая нажатой (в течение 4 секунд) нижнюю часть кнопки, пока светодиодный индикатор не загорится красным. Затем включите каждый слуховой аппарат, нажав и удерживая нажатой (в течение 2 секунд) ту же кнопку, пока светодиодный индикатор не загорится зеленым.
- ① В любой момент можно выбрать демонстрационный режим, чтобы поработать с приложением без подключения слухового аппарата Unitron и получить первое впечатление о функциональных возможностях приложения. В этом режиме функции дистанционного управления слуховым аппаратом недоступны.

Выбор слуховых аппаратов

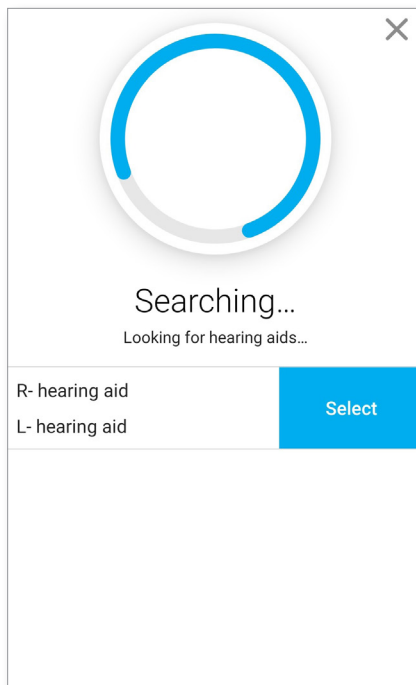


- ① Если приложение обнаружило несколько комплектов устройств, нажмите кнопку на слуховом аппарате и соответствующее устройство будет выделено в приложении.

Главный экран


Регулировка громкости слухового аппарата

Переместите регулятор вверх или вниз для увеличения или уменьшения громкости слухового аппарата с обеих сторон. Нажмите кнопку выключения звука под регулятором, чтобы выключить или включить звук слухового аппарата.

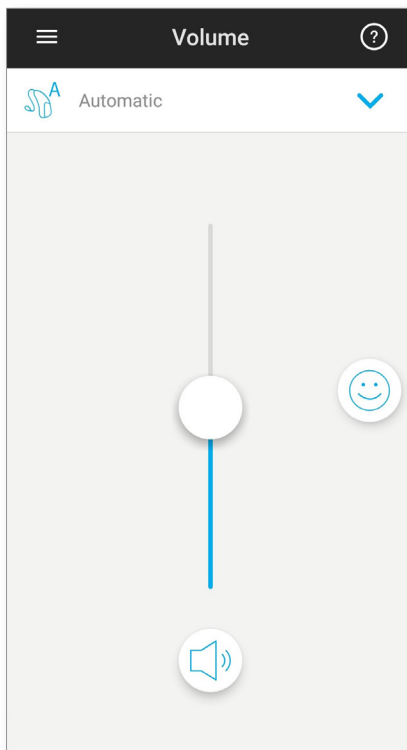

Разделение громкости


Если в параметрах приложения выбран параметр «Выбор стороны», над регулятором появится кнопка. Нажмите кнопку [Разделить](#), чтобы контролировать громкость каждого слухового аппарата независимо.

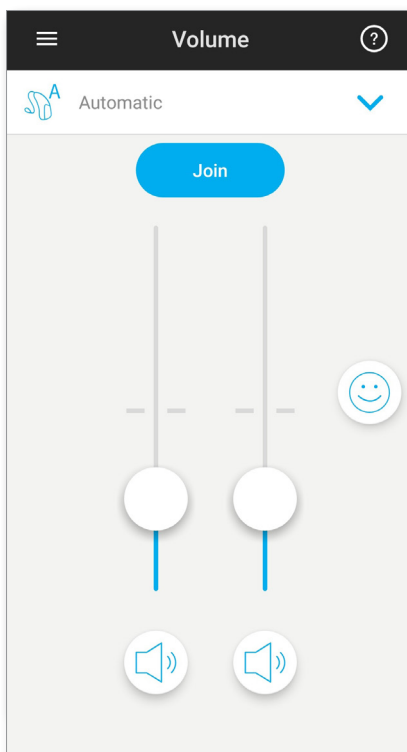


Изменение программ слуховых аппаратов



Выбор другой программы

Коснитесь стрелки рядом с именем текущей программы, чтобы просмотреть все доступные программы. Коснитесь нужной программы.

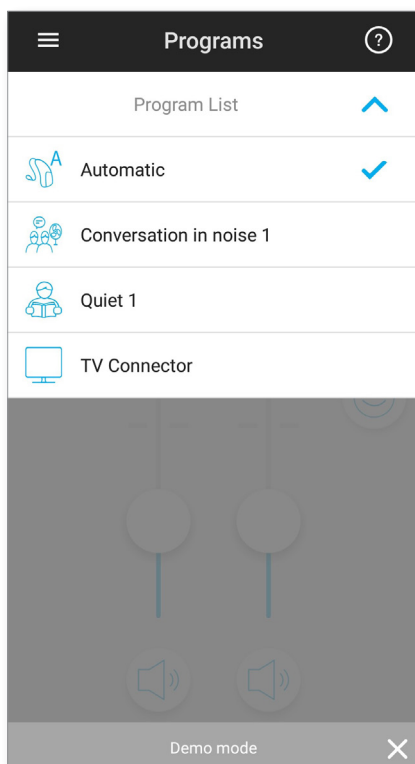

Дополнительные параметры программы

В зависимости от конфигурации слухового аппарата или подключенных источников аудио (TV Connector) могут быть доступны дополнительные настраиваемые параметры. Для доступа к этим параметрам коснитесь кнопки  в правом нижнем углу.

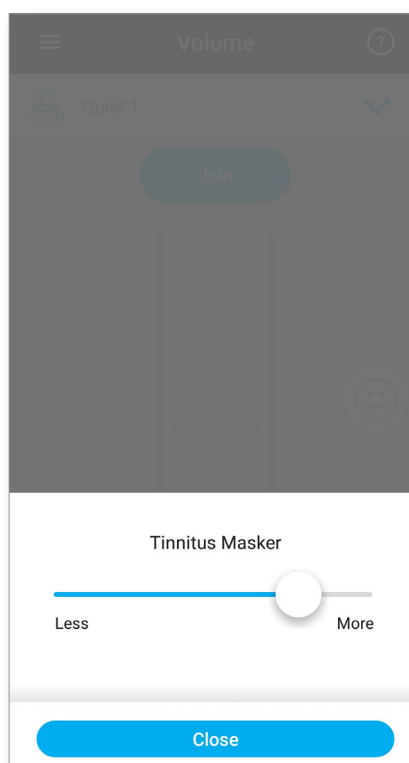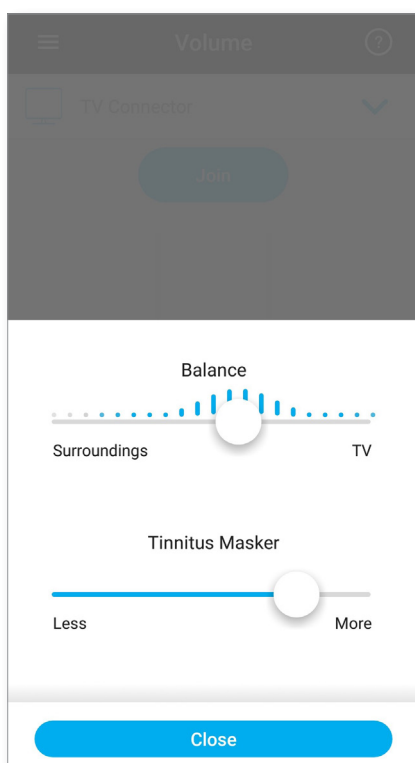


Оценки


Если вы решили воспользоваться функцией **Оценки**, то увидите значок со счастливым лицом (😊) с правой стороны главного экрана. Коснитесь его, чтобы отправить отзыв своему врачу.

Оценка удобства работы


A. Выберите лицо с удовлетворенным или неудовлетворенным выражением.

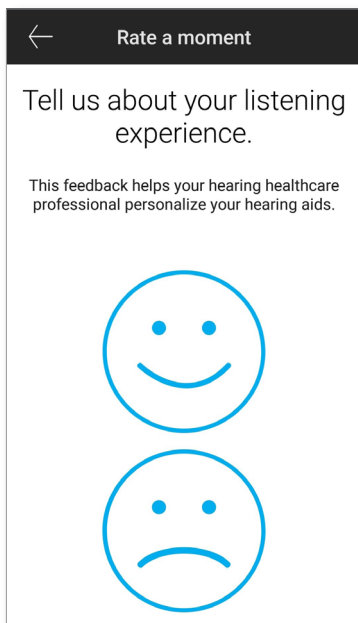


B. Выберите условия, в которых вы находитесь в данный момент.

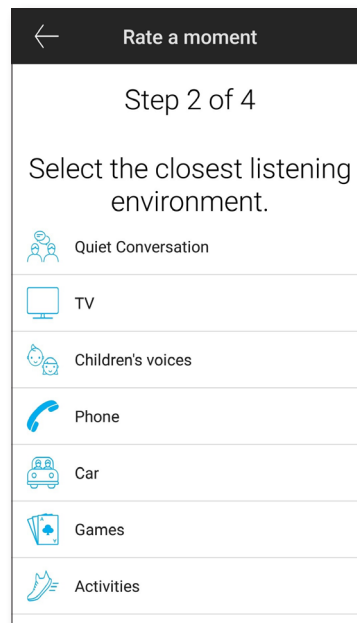

C. Если выбрать неудовлетворенное лицо, на данном этапе вы сможете выбрать одно из предварительно выбранных описаний проблемы.

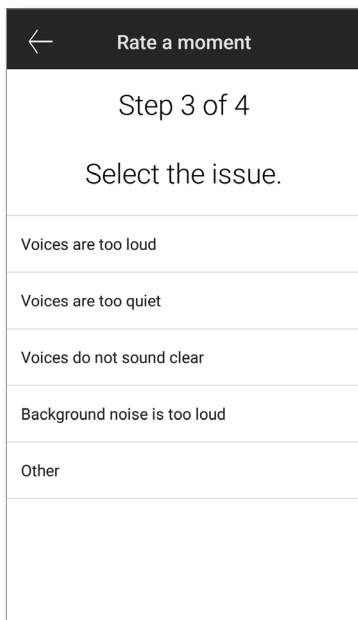


D. Просмотрите сводную информацию о вашем отзыве и предоставьте дополнительные комментарии (необязательно). Коснитесь кнопки **Отправить**, чтобы отправить свой комментарий специалисту-сурдологу.

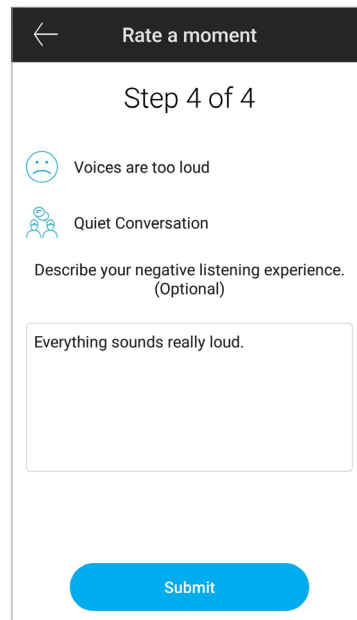


Меню параметров

Приложение доступно на нескольких языках. Приложение автоматически выберет язык, соответствующий языку операционной системы. Если язык телефона не поддерживается, будет установлен язык по умолчанию (английский).

1) Для перехода в меню параметров коснитесь значка  на главном экране.

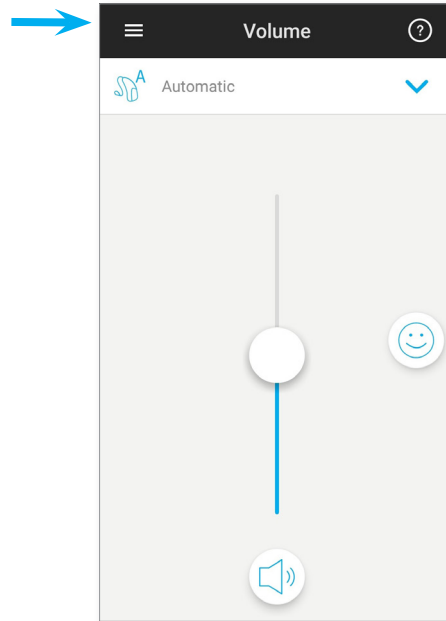

- 2) Выберите пункт [Параметры приложения](#), чтобы перейти к параметрам приложения.
- 3) Выберите пункт [Мои слуховые аппараты](#), чтобы получить доступ к настройкам конкретного слухового аппарата.
- 4) Выберите пункт [Insights](#), чтобы просмотреть политику конфиденциальности и сведения о функции Insights или чтобы отказаться от этой функции.
- 5) Выберите пункт [Видеоролики](#), чтобы просмотреть обучающие видеоролики.
- 6) Выберите пункт [Ответы на вопросы](#), чтобы просмотреть часто задаваемые вопросы о приложении и слуховых аппаратах в веб-браузере телефона.

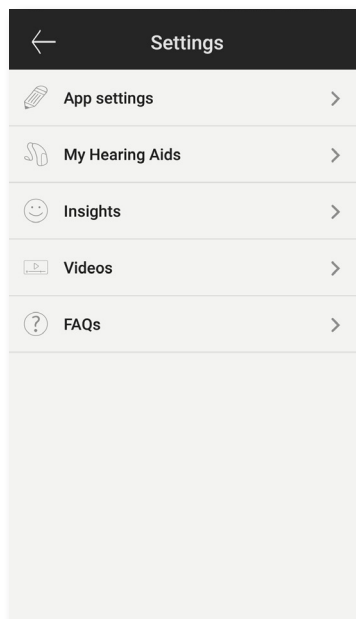

Информация о соответствии

Декларация о соответствии

Настоящим компания Sonova AG заявляет, что данная продукция Unitron соответствует основным требованиям директивы о медицинском оборудовании 93/42/ЕЕС. Полный текст заявления о соответствии можно получить у производителя или у местного представителя компании Unitron, адрес которого можно получить в списке на веб-сайте <http://www.unitron.com> (офисы во всем мире).

- ① Если слуховые аппараты не реагируют на сигналы пульта из-за помех в электромагнитном поле, отойдите от источника этих помех.
- ① Инструкции доступны по адресу unitron.com/appguide в формате Adobe® Acrobat® PDF. Для просмотра этих инструкций необходимо наличие установленной программы Adobe Acrobat Reader. Чтобы загрузить ее, перейдите на веб-сайт Adobe.com.
- ① Чтобы получить бесплатную бумажную копию инструкций, обратитесь к местному представителю Unitron. Копия будет отправлена в течение 7 дней.

Информация и значения символов



Настоящим символом CE компания Sonova AG заявляет, что данная продукция Unitron, в том числе аксессуары, отвечает требованиям директивы о медицинском оборудовании 93/42/ЕЕС. Числа после символа CE соответствуют коду сертифицированных учреждений, предоставивших консультации по вышеуказанным директивам.



Этот символ означает, что для пользователя важно прочитать и принять к сведению соответствующую информацию этого руководства.



Этот символ означает, что пользователю следует обратить особое внимание на соответствующие предупреждения в этом руководстве.



Важная информация об обращении с продукцией и эффективном ее использовании.



Отметка об авторском праве



Этот символ сопровождается именем и адресом производителя (того, кто выпускает устройство на рынок).



Словесный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc. Любое использование подобных знаков компанией Unitron регулируется лицензией. Другие товарные знаки и названия принадлежат соответствующим владельцам.

