

Додаток Unitron Remote Plus

Інструкція з використання




Початок роботи


Призначення

Додаток Unitron Remote Plus призначено для налаштування певних функцій слухових апаратів Unitron користувачами за допомогою пристроїв Android і Apple iOS¹.

Якщо спеціаліст зі слухопротезування пропонує використання функції [Статистика](#) користувачу слухового апарата й той погоджується, користувач може надіслати дані свого слухового апарата, а також відгук про прослуховування в різних ситуаціях своєму спеціалісту, у якого він консультується.

Інформація про сумісність

 Щоб користуватися додатком Unitron Remote Plus, потрібні безпроводні слухові апарати Unitron Bluetooth. Додаток Unitron Remote Plus можна використовувати на пристроях із підтримкою Bluetooth® Low-Energy (BT-LE), які сумісні з телефонами iPhone 5s чи новішої версії із системою iOS версії 10.2 чи пізнішої. Додаток Unitron Remote Plus можна використовувати на пристроях Android із сертифікатом Google Mobile Services (GMS), які підтримують технологію Bluetooth 4.2 та систему Android 6.0 чи пізнішої версії.

 Деякі телефони мають аудіосигнали чи звуки клавіатури, які можуть передаватися на слухові апарати. Щоб уникнути цього, перейдіть у налаштування телефону, виберіть меню звуку та переконайтеся, що всі аудіосигнали та звуки клавіатури вимкнено.

¹ Сумісні телефони: додаток Unitron Remote Plus можна використовувати лише на телефонах із технологією Bluetooth®.

Мовний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговельними марками корпорації Bluetooth SIG Inc.


Apple, логотип Apple, iPhone та iOS є торговельними марками корпорації Apple Inc., зареєстрованої в США й інших країнах. App Store є знаком обслуговування корпорації Apple Inc.

Android, Google Play і логотип Google Play є торговельними марками корпорації Google Inc.

Зміст

Огляд додатка.....	4
Політика конфіденційності.....	5
Створення пари зі слуховими апаратами.....	6
Головний екран	7
Змінення програм на слухових апаратах.....	8
Оцінки.....	9
Меню налаштувань	10
Інформація про відповідність.....	11
Інформація та пояснення символів.....	12


Огляд додатка

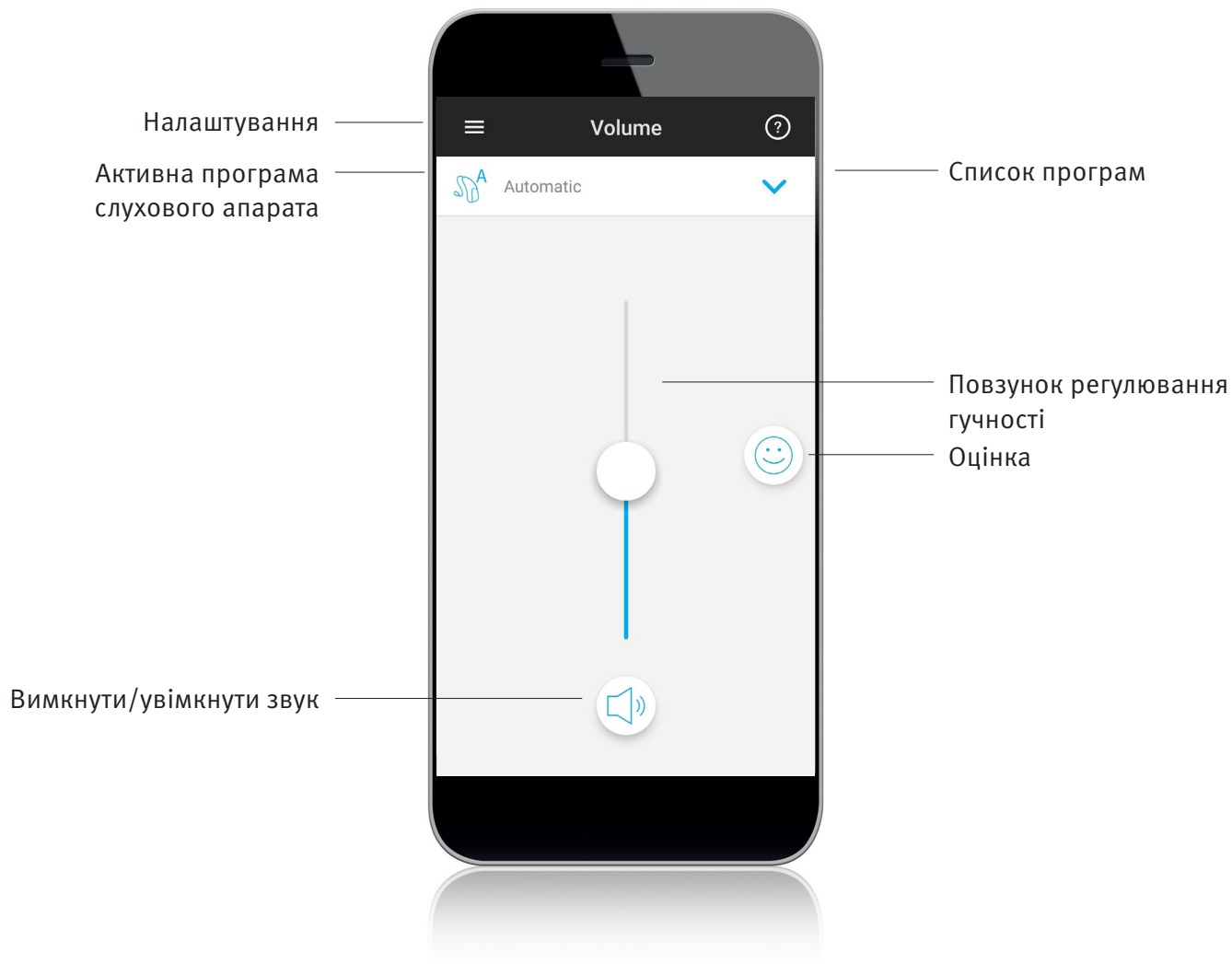

Політика конфіденційності

Як прийняти повідомлення про конфіденційність у додатку


Щоб користуватися додатком Unitron Remote Plus, потрібно прийняти повідомлення про конфіденційність і дати згоду на аналіз анонімних даних про використання цього додатка.

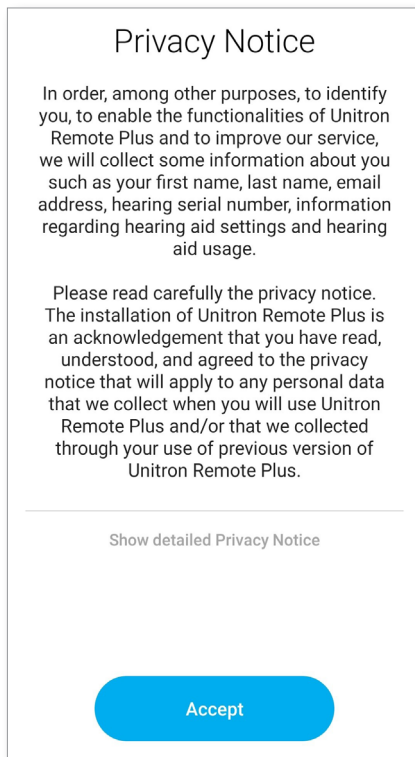

Як активувати функцію «Статистика»


Щоб увімкнути функцію **Статистики**, торкніться кнопки «Активувати».

Щоб пропустити цей крок, торкніться кнопки «Можливо, пізніше».

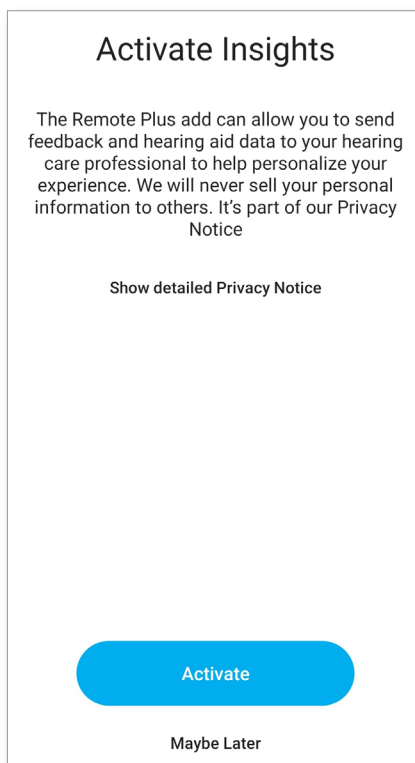


Створення пари зі слуховими апаратами

Як виявити слухові апарати

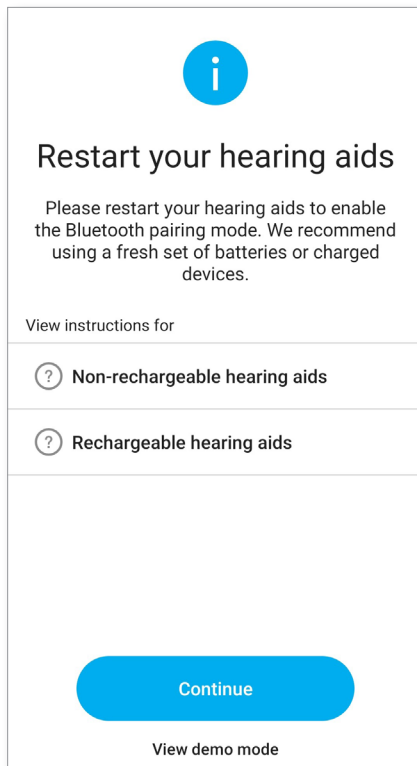

- ① Якщо слухові апарати мають кришку батарейного відсіку, перезапустіть апарат, відкривши й заклавши цю кришку. Якщо такої кришки немає, вимкніть кожен зі слухових апаратів, утримуючи нижню частину кнопки, поки LED-індикатор не стане червоним (4 с). Потім увімкніть кожен апарат, натискаючи ту саму кнопку, поки LED-індикатор не стане зеленим (2 с).
- ① Ви завжди можете вибрати режим ознайомлення, щоб випробувати додаток, не підключаючи слуховий апарат Unitron, і отримати перші враження про його функції. У цьому режимі функції віддаленого керування слуховими апаратами недоступні.

Як вибрати слухові апарати

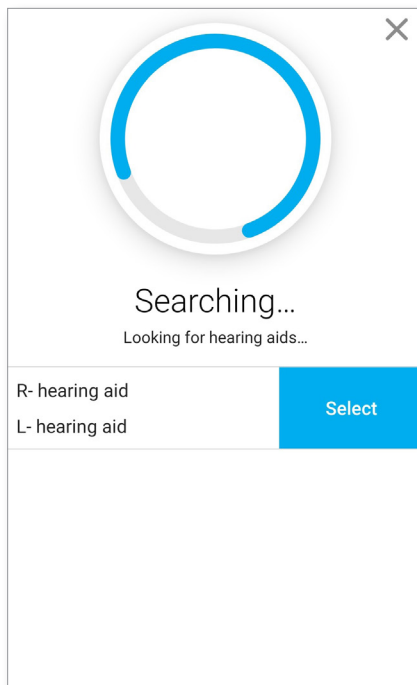


- ① Якщо додаток виявив більше ніж один комплект пристроїв, натисніть кнопку на слуховому апараті, і відповідний пристрій буде виділено в додатку.

Головний екран


Регулювання гучності слухового апарата

Пересувайте повзунок вгору, або вниз, щоб збільшити чи зменшити гучність слухових апаратів в обох вухах. Натисніть кнопку вимкнення звуку нижче повзунка, щоб вимкнути звук у слухових апаратах.

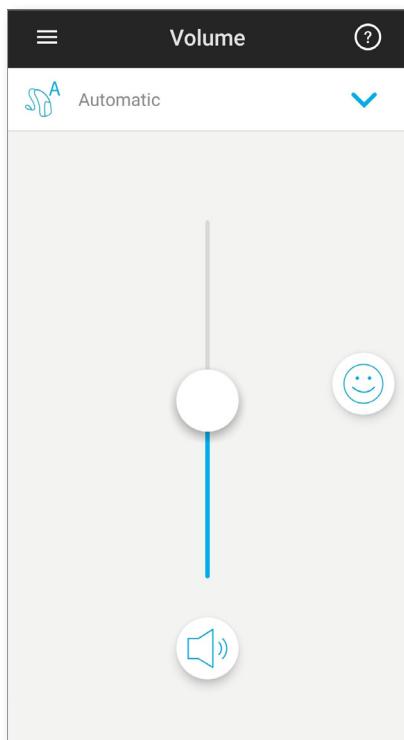

Індивідуальне регулювання гучності


Якщо в налаштуваннях додатка ввімкнено функцію «Вибір вуха», над повзунком відобразиться кнопка. Натисніть «Роз'єднати», щоб регулювати гучність кожного слухового апарата індивідуально.

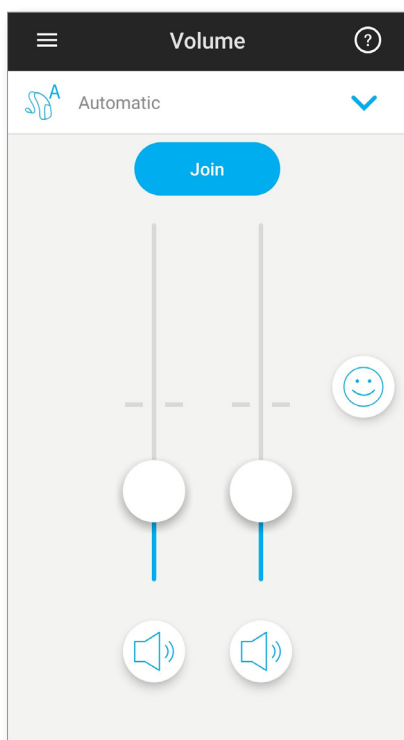


Змінення програм на слухових апаратах



Вибір іншої програми

Торкніться стрілки збоку назви поточної програми, щоб переглянути список доступних програм. Торкніться потрібної програми.

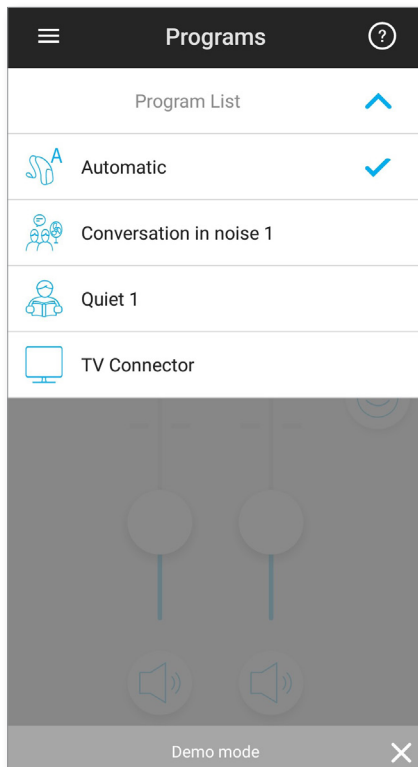

Розширені налаштування програми

Доступні додаткові налаштування залежно від конфігурації слухового апарата чи підключених джерел звуку (TV Connector). Торкніться кнопки  в правому нижньому куті, щоб отримати доступ до таких параметрів:

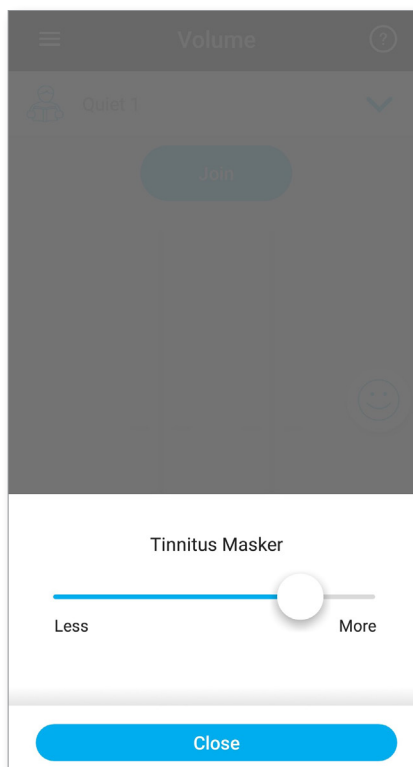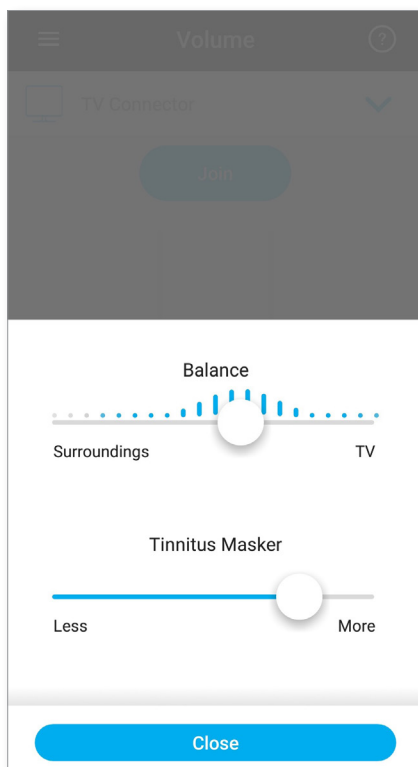


Оцінки


Якщо Ви ввімкнули функцію **Оцінки**, з правого боку головного екрана побачите значок з усміхненим обличчям (😊). Торкніться його, щоб надіслати відгук своєму лікарю.

Як оцінити свій досвід використання


А. Вкажіть, задоволені Ви чи ні.

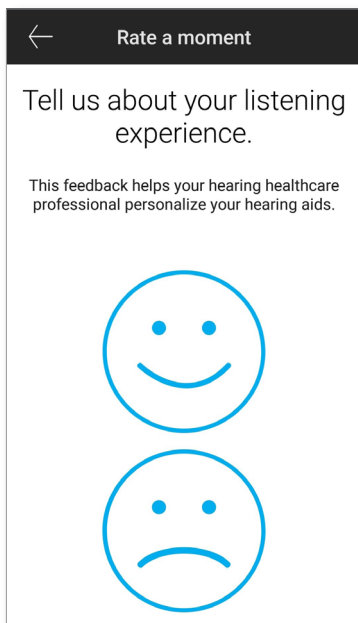


Б. Виберіть середовище, у якому Ви зараз перебуваєте.

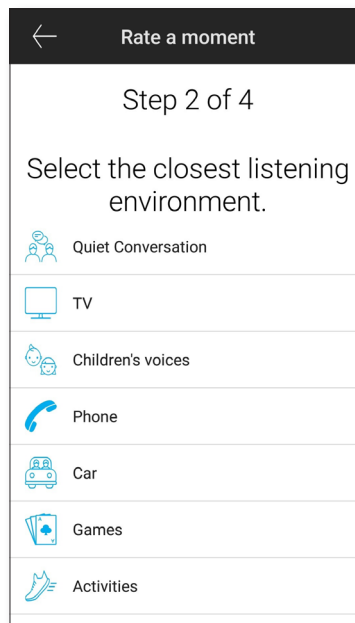

В. Якщо вказали, що незадоволені, зі списку готових варіантів виберіть той, який найкраще описує вашу проблему.

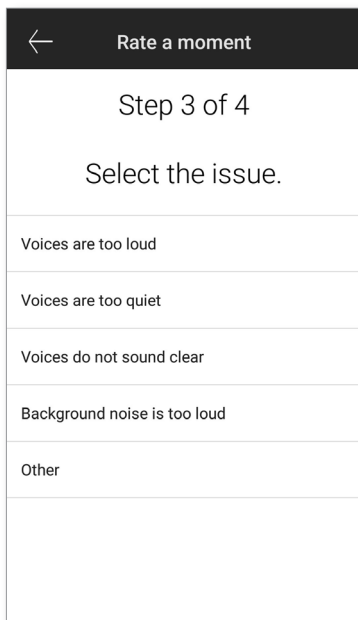


Г. Перегляньте підсумок оцінки й надайте додаткові коментарі (необов'язково). Торкніться кнопки «Надіслати», щоб надіслати свій відгук спеціалісту зі слухопротезування.

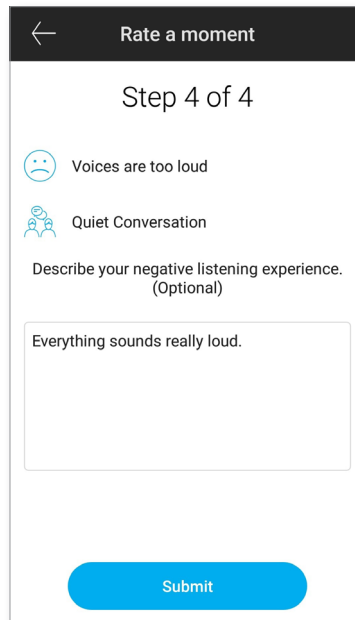


Меню налаштувань

Додаток доступний багатьма мовами. У ній буде автоматично вибрано мову операційної системи телефону. Якщо така мова не підтримується, буде використовуватися мова за замовчуванням – англійська.

1) Торкніться  значка на головному екрані, щоб перейти до меню налаштувань.

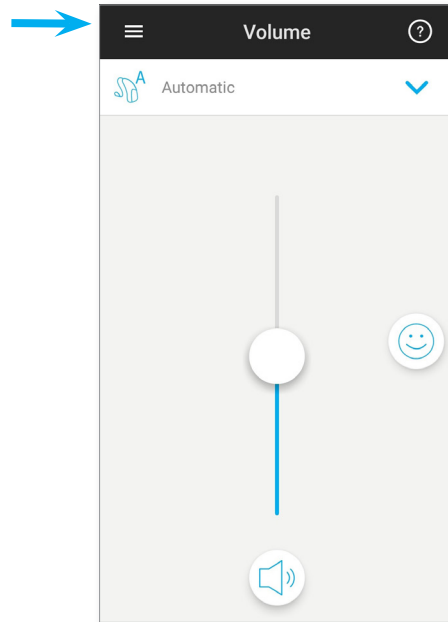

- 2) Виберіть «[Налаштування додатка](#)», щоб перейти до параметрів.
- 3) Виберіть «[Мої слухові апарати](#)», щоб перейти до спеціальних налаштувань слухового апарата.
- 4) Виберіть «[Статистика](#)», щоб переглянути політику конфіденційності Статистики, відомості про цю функцію, а також за потреби вимкнути її.
- 5) Виберіть «[Відео](#)», щоб переглянути відеопосібники з використання.
- 6) Виберіть «[Запитання та відповіді](#)», щоб переглянути поширені запитання про додаток і слухові апарати у веб-браузері свого телефону.

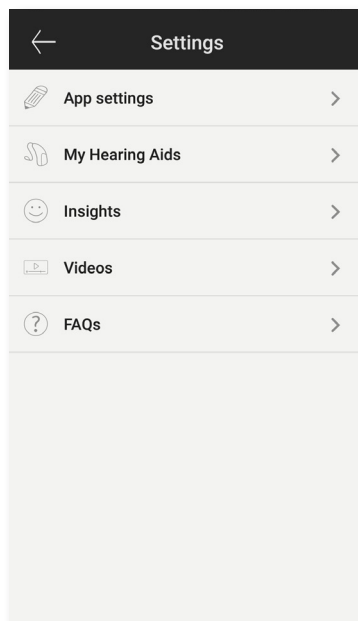

Інформація про відповідність

Заява про відповідність

Ця компанія Sonova AG заявляє, що виріб Unitron відповідає основним вимогам Директиви 93/42/ЄЕС про медичне обладнання. Повний текст Заяви про відповідність можна отримати у виробника, або місцевого представника Unitron, адресу якого можна знайти в списку на сайті <http://www.unitron.com> (світові представництва).

- ① Якщо слухові апарати не реагують на телефон через незвичне збудження поля, вийдіть із зони дії цього поля.
- ① Інструкції доступні на сторінці unitron.com/appguide у форматі Adobe® Acrobat® PDF. Щоб переглянути їх, потрібно інстальювати Adobe Acrobat Reader. Завантажити цей додаток можна на сайті Adobe.com.
- ① Щоб отримати безкоштовний паперовий примірник інструкцій, зверніться до свого місцевого представника Unitron. Примірник буде надіслано протягом 7 днів.

Інформація та пояснення символів



Маркуванням CE компанія Sonova AG підтверджує, що цей виріб Unitron, включно з його аксесуарами, відповідає вимогам Директиви 93/42/ЕЕС щодо медичного обладнання. Цифри після символу CE відповідають коду сертифікованих установ, яким були надані рекомендації згідно з вимогами вищезгаданих директив.



Цей символ указує, що користувачу необхідно прочитати та врахувати важливу інформацію в інструкції.



Цей символ указує, що користувачу необхідно звернути увагу на важливі застереження в інструкції.



Важлива інформація про ефективне використання продукту та догляд за ним.




Символ про охорону авторських прав



Цей символ має супроводжуватися назвою й адресою виробника (який виводить цей пристрій на ринок).



Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговельними марками компанії Bluetooth SIG Inc. Будь-яке використання цих марок компанією Unitron регулюється ліцензією. Інші торговельні марки й назви належать їхнім відповідним власникам.

 Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Швейцарія

unitron.com

CE
0459

© Sonova AG, 2018–2019 pp. All rights reserved.
A/2019-06 029-6231-47