

# Unitron Remote Plus lietojne

## Lietotāja rokasgrāmata



# Darba sākšana


---


## Paredzētais lietojums

Lietotne Unitron Remote Plus ir paredzēta dzirdes aparātu lietotājiem, lai pielāgotu noteiktus Unitron dzirdes aparāta aspektus, izmantojot Android un Apple iOS ierīces<sup>1</sup>.

Ja dzirdes aprūpes speciālists piedāvā [leskata](#) funkcijas dzirdes aparāta lietotājam, un viņi tās izvēlas, dzirdes aparāta lietotājs var nosūtīt dzirdes aparāta datus un atsauksmes par klausīšanās pieredzi savam dzirdes aprūpes speciālistam.

## Saderības informācija:

 Unitron Bluetooth bezvadu dzirdes aparātiem ir nepieciešams izmantot Unitron Remote Plus lietotni. Unitron Remote Plus lietotni var izmantot ierīcēs ar Bluetooth® zemas enerģijas patēriņa (BT-LE) saderību un saderību ar iPhone 5s vai jaunāku, kas izmanto iOS 10,2 versiju vai jaunāku. Lietotni Unitron Remote Plus var izmantot Google mobilus pakalpojumus (GMS) sertificētās Android ierīcēs, kas atbalsta Bluetooth 4,2 un Android OS 6.0 vai jaunāku versiju.

 **Dažiem tālruņiem ir pieskāriena skaņas vai taustiņu toņi, kurus var straumēt uz dzirdes aparātu (-iem). Lai to novērstu, dodieties uz tālruņa iestatījumiem, izvēlieties skaņas un pārliecinieties, ka visas pieskāriena skaņas un tastatūras signāli ir deaktivēti.**

<sup>1</sup> Saderīgie tālruņi: lietotni Unitron Remote Plus var izmantot tikai tālruņiem ar Bluetooth® zemas enerģijas tehnoloģiju.

Bluetooth® nosaukums un logotips ir Bluetooth SIG, Inc. īpašumā esošas reģistrētas preču zīmes.

Apple, Apple logotips, iPhone un iOS ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. App Store ir Apple Inc. pakalpojuma zīme.

Android, Google Play un Google Play logotips ir Google Inc. preču zīmes.



0459


CE marķējums tiek piemērots no 2018. gada

# Saturs

---

Lietotnes pārskats .....	4
Privātuma politika .....	5
Savienošana pārī ar dzirdes aparātu (-iem) .....	6
Galvenais ekrāns .....	7
Dzirdes aparāta (-u) programmu maiņa .....	8
Vērtējumi .....	9
Iestatījumu izvēlne .....	10
Atbilstības informācija .....	11
Simbolu informācija un skaidrojums .....	12

# Lietotnes pārskats

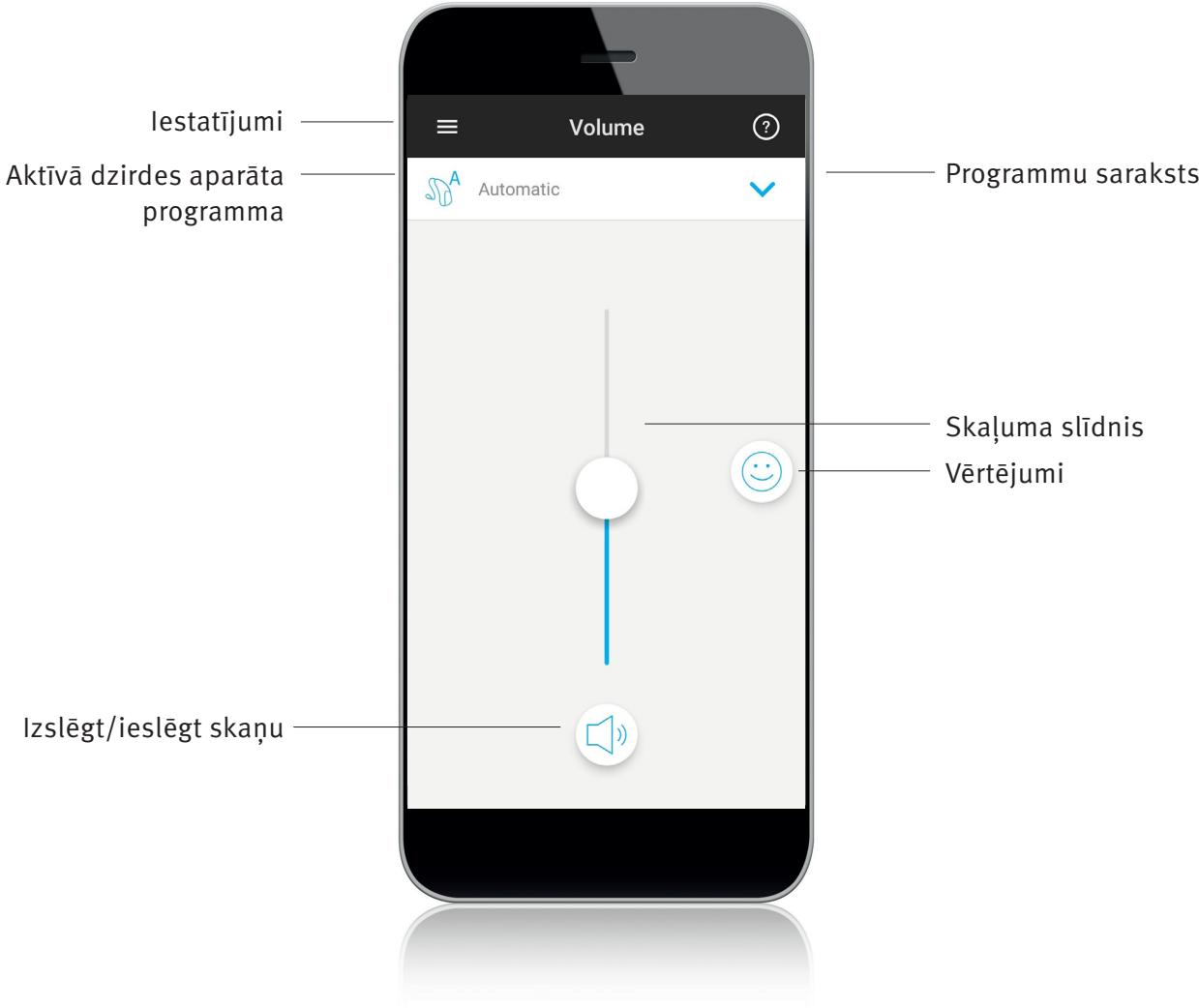

# Privātuma politika

---

## Pieņemt lietotnes konfidencialitātes paziņojumu

Lai izmantotu Unitron Remote Plus lietotni, jums nepieciešams pieņemt konfidencialitātes paziņojumus un anonīmu lietotnes izmantošanas datu analīzi.

### Privacy Notice

In order, among other purposes, to identify you, to enable the functionalities of Unitron Remote Plus and to improve our service, we will collect some information about you such as your first name, last name, email address, hearing serial number, information regarding hearing aid settings and hearing aid usage.

Please read carefully the privacy notice. The installation of Unitron Remote Plus is an acknowledgement that you have read, understood, and agreed to the privacy notice that will apply to any personal data that we collect when you will use Unitron Remote Plus and/or that we collected through your use of previous version of Unitron Remote Plus.

[Show detailed Privacy Notice](#)

[Accept](#)

## Aktivizēt leskatu

Lai izvēlētos **leskata** funkciju, pieskarieties aktivizēšanas pogai. Lai izlaistu šo soli, pieskarieties „Varbūt vēlāk” pogai.

### Activate Insights

The Remote Plus add can allow you to send feedback and hearing aid data to your hearing care professional to help personalize your experience. We will never sell your personal information to others. It's part of our Privacy Notice


[Show detailed Privacy Notice](#)

[Activate](#)

[Maybe Later](#)


# Savienošana pāri ar dzirdes aparātu (-iem)

## Nosakiet savu dzirdes aparātu (-us)

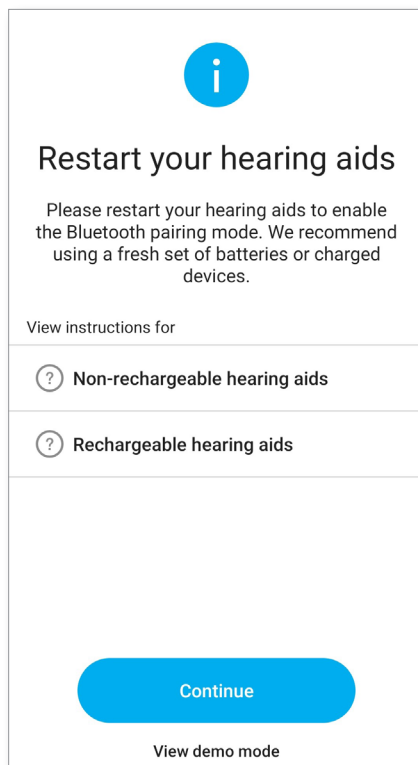

- ① Ja jūsu dzirdes aparātam (-iem) ir baterijas vāciņš, restartējiet jūsu dzirdes aparātu (-us) atverot un aizverot baterijas vāciņu. Ja jūsu dzirdes aparātam (-iem) nav baterijas vāciņa, vispirms izslēdziet katru dzirdes aparātu, piespiežot pogas zemāko daļu līdz LED kļūst sarkans (4 sek.). Pēc tam ieslēdziet katru dzirdes aparātu, piespiežot to pašu pogu, līdz LED kļūst zaļš (2 sek.).
- ① Jūs vienmēr varat izvēlēties „Demo” režīmu, lai izmēģinātu lietotni bez savienošanas ar Unitron dzirdes aparātu un iegūtu pirmo iespaidu par funkcijām. Šajā režīmā jūsu dzirdes aparātiem tālvadības funkcija nav pieejama.

## Atlasiet savu dzirdes aparātu (-us)

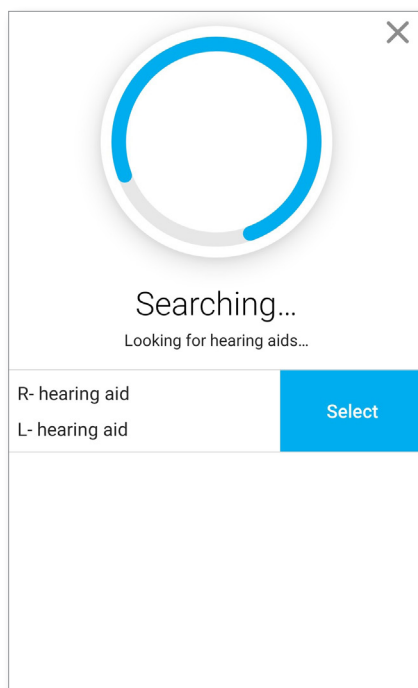


- ① Ja lietotne ir atradusi vairākas ierīces, nospiediet pogu uz sava dzirdes aparāta un pēc tam attiecīgā ierīce tiks izcelta lietotnē.

# Galvenais ekrāns


## Pielāgot dzirdes aparāta skaļumu

Pārvietojiet slīdņi uz augšu vai uz leju, lai palielinātu vai samazinātu dzirdes aparāta skaļumu abās pusēs. Nospiediet pogu izslēgt skaņu zem slīdņa, lai izslēgtu vai izslēgtu dzirdes aparātu.

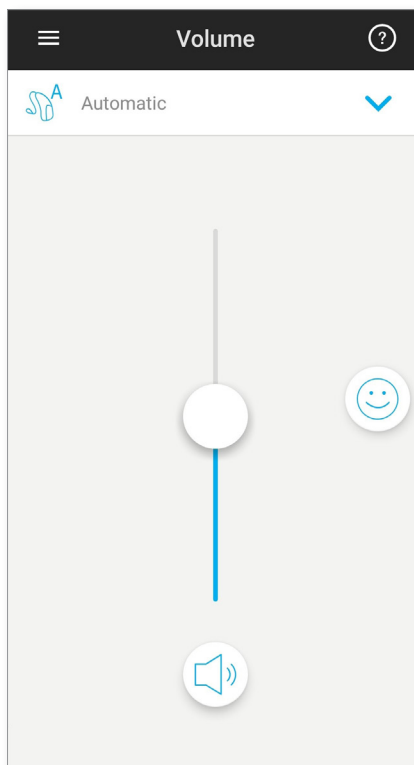

## Skaļuma sadalīšana


Ja „Atlase sānos” lietotnes iestatījumos ir ieslēgta, slīdņa augšpusē tiek parādīta poga. Nospiediet pogu „Sadalīt”, lai kontrolētu skaļumu katrā dzirdes aparātā atsevišķi.

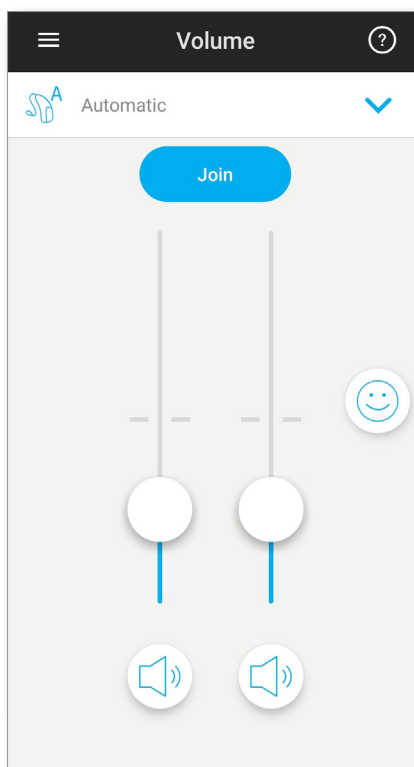


# Programmu maiņa dzirdes aparātā (-tos)



## Atlasiet citu programmu

Lai skatītu visas pieejamās programmas, pieskarieties bultiņai blakus pašreizējās programmas nosaukumam. Pieskarieties vēlamajai programmai.

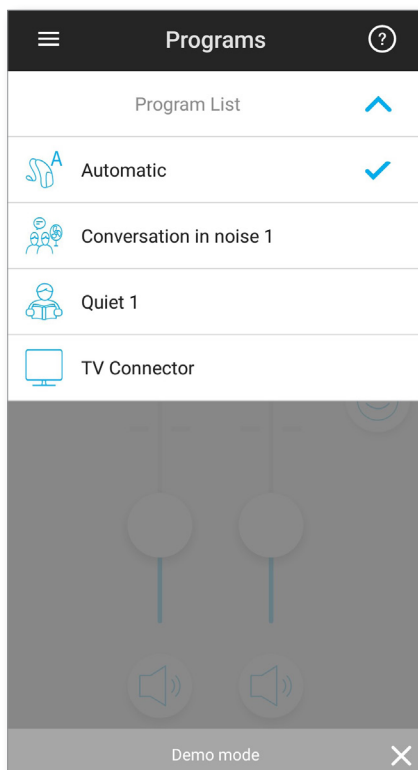

## Programmas paplašinātie iestatījumi

Ir pieejami papildu pielāgojumi, atkarībā no dzirdes aparāta konfigurācijas vai pievienotajiem audio avotiem (TV Connector). Pieskarieties pogai  apakšējā labajā stūrī, lai piekļūtu opcijām:

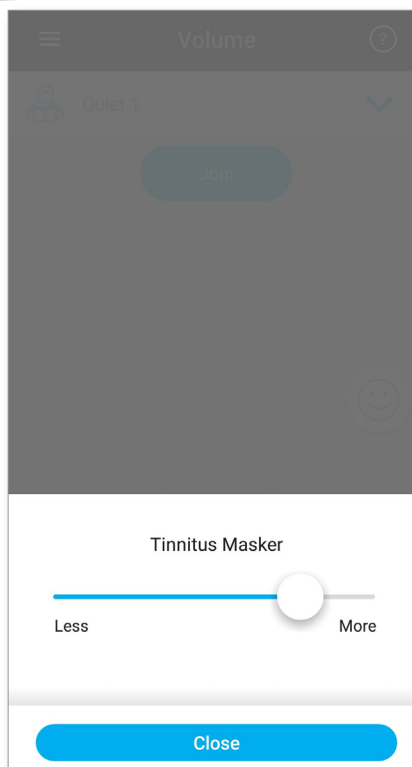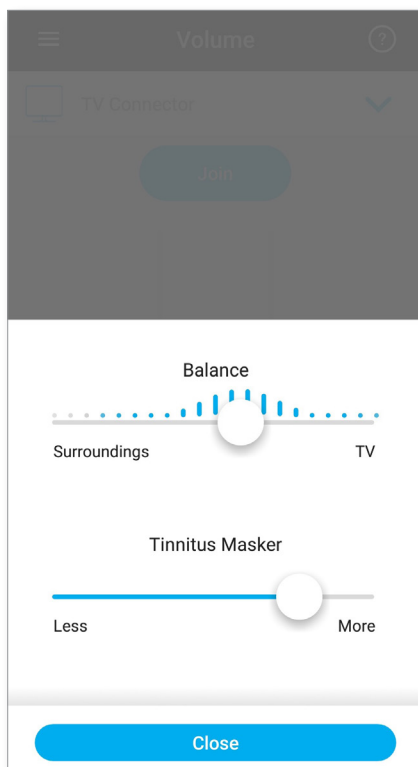

# Vērtējumi

Ja izvēlējāties funkciju **Mani vērtējumi**, jūs redzēsiet laimīgas sejas ikonu (😊) galvenā ekrāna labajā pusē. Pieskarieties tai, lai nosūtītu atsauksmi savam ārstam.

## Novērtējiet savu pieredzi

A. Izvēlieties no apmierināts vai neapmierināts.

← Rate a moment

Tell us about your listening experience.

This feedback helps your hearing healthcare professional personalize your hearing aids.

😊

☹️

B. Atlasiet vidi, kurā pašlaik atrodaties.

← Rate a moment

Step 2 of 4

Select the closest listening environment.

- Quiet Conversation
- TV
- Children's voices
- Phone
- Car
- Games
- Activities

C. Ja izvēlējāties neapmierināts, pēc tam varat izvēlēties iepriekš noteiktajā sarakstā vislabāk raksturojošo problēmu.

← Rate a moment

Step 3 of 4

Select the issue.

- Voices are too loud
- Voices are too quiet
- Voices do not sound clear
- Background noise is too loud
- Other

D. Skatiet atsauksmju kopsavilkumu un sniedziet vairāk komentāru (pēc izvēles). Pieskarieties „**iesniegt**” pogu, lai iesniegtu jūsu atsauksmi jūsu dzirdes aprūpes speciālistam.

← Rate a moment

Step 4 of 4

- Voices are too loud
- Quiet Conversation


Describe your negative listening experience. (Optional)


Everything sounds really loud.

Submit


# Iestatījumu izvēlne

Lietotne ir pieejama dažādās valodās. Tas automātiski atbildīs tālruņa operētājsistēmas valodai. Ja tālruņa valoda netiek atbalstīta, noklusējuma valoda ir angļu valoda.

1) Pieskarieties  ikonai galvenajā ekrānā, lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei.

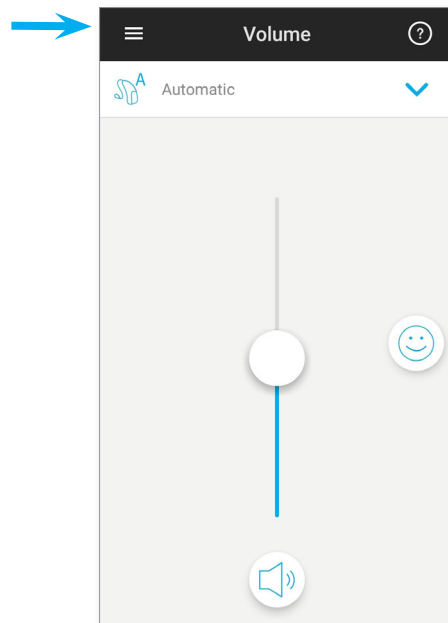

- 2) Atlasiet „[Lietotnes iestatījumi](#)”, lai piekļūtu lietotnes iestatījumiem.
- 3) Atlasiet „[Manas dzirdes ierīces](#)”, lai piekļūtu dzirdes aparāta konkrētajiem iestatījumiem.
- 4) Atlasiet „[Ieskats](#)”, lai skatītu Insights konfidencialitātes politiku, funkcijas informāciju, vai lai atteiktos no šīs funkcijas.
- 5) Atlasiet „[Video](#)”, lai skatītos skaidrojošus video.
- 6) Atlasiet „[BUJ](#)”, lai tālruņa pārlūkprogrammā skatītu biežāk uzdotos jautājumus par lietotni un dzirdes aparātiem.

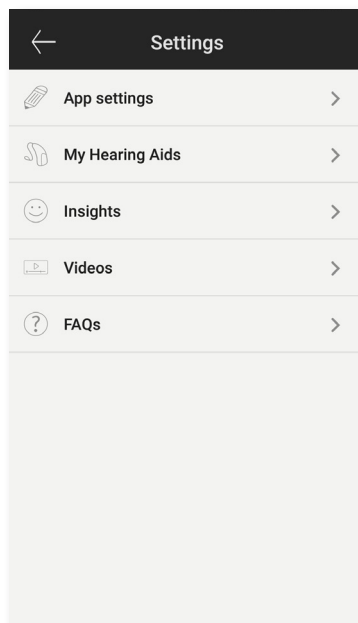

# Piekrišanas informācija

---

## Atbilstības deklarācija

Ar šo Sonova AG paziņo, ka šis Unitron produkts atbilst medicīnas ierīču direktīvas 93/42/EEK būtiskajām prasībām. Pilnu atbilstības deklarācijas tekstu var iegūt no ražotāja vai vietējā Unitron pārstāvja, kura adresi var iegūt no saraksta <http://www.unitron.com> (atrašanās vietas visā pasaulē).

- ① Ja dzirdes aparāti nereaģē uz ierīci dēļ lauka neparastiem traucējumiem, virzieties prom no traucējošā lauka.
- ① Instrukcijas ir pieejamas: [unitron.com/appguide](http://unitron.com/appguide) Adobe® Acrobat® PDF formātā. Lai tās skatītu, jums ir jābūt instalētai Adobe Acrobat Reader programmai. Lai lejupielādētu, apmeklējiet [Adobe.com](http://Adobe.com).
- ① Lai iegūtu instrukciju bezmaksas papīra kopiju, lūdzu, sazinieties ar vietējo Unitron pārstāvi. Kopija tiks nosūtīta 7 dienu laikā.

# Simbolu informācija un skaidrojums

---



Ar CE simbolu Sonova AG apstiprina, ka šī Unitron ierīce līdz ar piederumiem atbilst „Medicīnas ierīču direktīvas 93/42/EEK” prasībām.  
Cipari pēc CE simbola attiecas uz to sertificēto iestāžu kodu, kuras uzņēmumi konsultē par minētajām direktīvām.



Šis simbols norāda, ka lietotājam ir noteikti jāizlasa un jāievēro attiecīgā informācija šajā lietotāja rokasgrāmatā.



Šis simbols norāda, ka lietotājam ir noteikti jāpievērš uzmanība attiecīgajiem brīdinājuma paziņojumiem šajā lietotāja rokasgrāmatā.



Svarīga informācija par ierīces efektīvu izmantošanu.



Autortiesību simbols



Blakus šim simbolam ir ražotāja (kas ierīci piedāvā tirgū) nosaukums un adrese.



Bluetooth® nosaukums un logotips ir Bluetooth SIG, Inc. īpašumā esošas reģistrētas preču zīmes, kuras uzņēmums Unitron izmanto licenzēti. Citas preču zīmes un nosaukumi ir to īpašnieku īpašums.

---



Sonova AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa, Switzerland

**unitron.com**



© 2018-2019 Sonova AG. All rights reserved.  
A/2019-04 029-6231-91