



Unitron Remote Plus app

Uživatelská příručka – Remote Plus 5.2

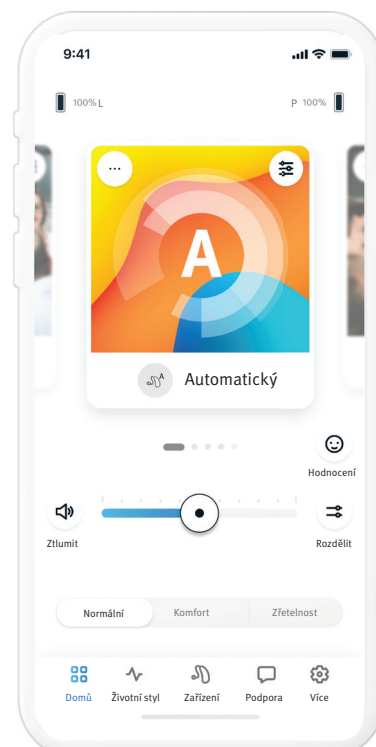

Přehled o aplikaci	3	Aktivace předvoleb – komfort a zřetelnost.....	10
Začínáme	3	Změna programů na sluchadle/sluchadlech ...	10
Informace o kompatibilitě	3	Hodnocení.....	11
Onboarding	4	Karta Životní styl	12
Potvrzení prohlášení o ochraně osobních údajů v aplikaci	4	Poslechová prostředí	12
Párování se sluchadlem/sluchadly.....	4	Průměrná doba nošení.....	12
Aktivace služby Přehledy	4	Počítadlo kroků	12
Výběr režimu aplikace	4	Aktivní minuty	12
Karta Domů – režim Pokročilý	5	Karta Zařízení	13
Úprava hlasitosti sluchadla.....	5	Ovládání poklepáním	13
Rozdělení hlasitosti.....	5	Automatické spuštění	13
Aktivace předvoleb – komfort a zřetelnost.....	5	Adaptivní Bluetooth®	13
Změna programů na sluchadle/sluchadlech	5	Moje zařízení.....	13
Hodnocení.....	6	Vzdálené nastavení	15
Volitelné programy	7	Karta Podpora	16
Nastavení programu.....	8	Karta Více	17
Maskér tinnitu	8	Režim aplikace	17
Nastavení zvuku	8	Vzhled	17
Zaměření mikrofonu	8	Nastavení funkcí Insights	17
Zvýraznění řeči	8	Centrum pro oznámení.....	17
Snížení hluku	8	Analytics	17
Nastavení funkce Ekvalizér	8	Režim Demo	17
Přizpůsobení programu.....	9	Právní informace	17
Karta Domů – Klasický režim	10	Informace o dodržování požadavků předpisů	18
Úprava hlasitosti sluchadla.....	10	Prohlášení o shodě	18
Rozdělení hlasitosti.....	10	Popis symbolů.....	18
		Důležité bezpečnostní informace.....	19

Přehled o aplikaci

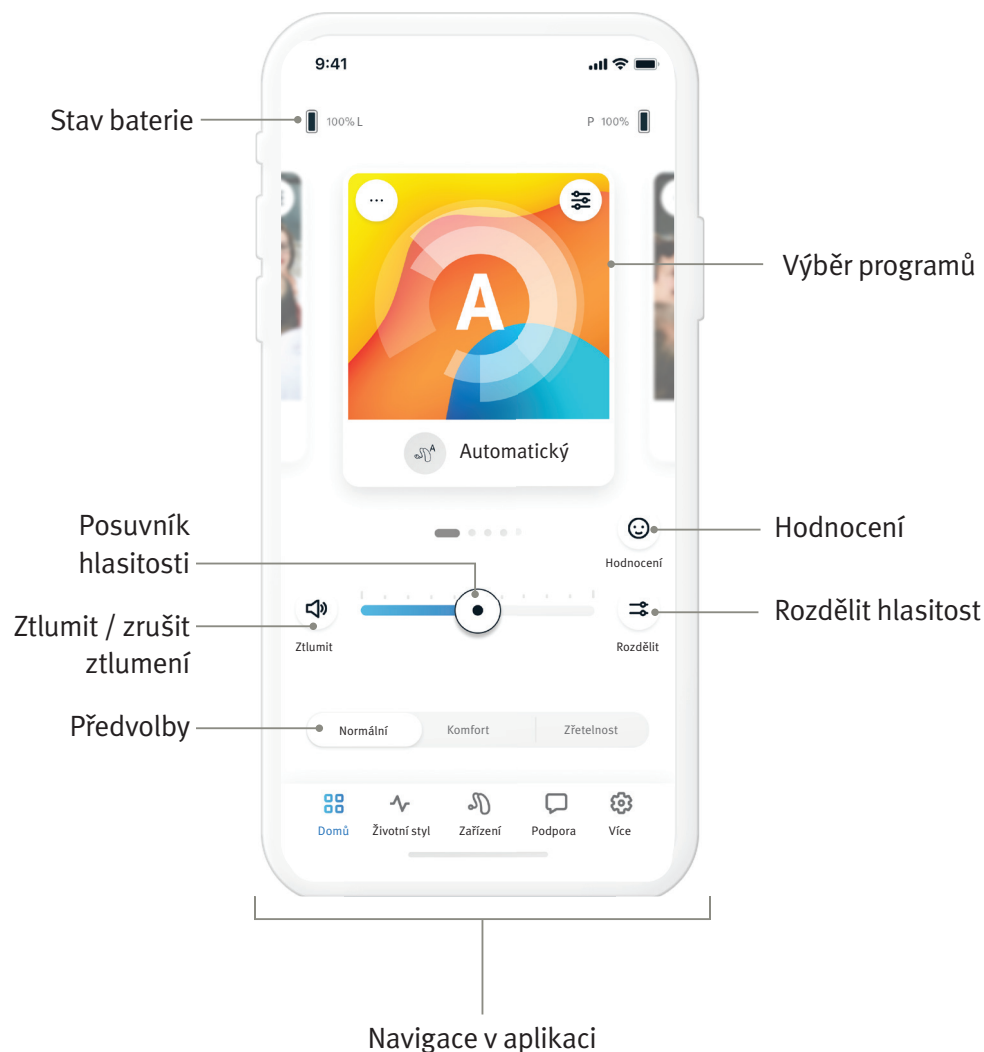

Začínáme

Aplikace Unitron Remote Plus byla vytvořena společností Sonova, jednou z největších společností na světě, která se věnuje řešením ztráty sluchu. Přečtěte si důkladně pokyny pro uživatele, abyste byli schopni využít všechny možnosti, které aplikace nabízí.

- ❗ Tato uživatelská příručka popisuje funkce aplikace a způsob ovládání těchto funkcí uživatelem. Před použitím aplikace si tuto uživatelskou příručku celou přečtěte.
- ❗ Pro používání aplikace není třeba žádné další zaškolení.

Tato uživatelská příručka je určena pro použití s aplikací Unitron Remote Plus verze 5.2 a pozdější dílčí verze aplikace. Potřebujete-li uživatelskou příručku pro předchozí verze aplikace, obraťte se prosím na svého místního obchodního zástupce nebo se podívejte na webovou stránku www.unitron.com.


Informace o kompatibilitě

⚠ Aplikace Unitron Remote Plus je určena pro použití se sluchadly Unitron s funkcí bezdrátové konektivity Bluetooth®. Aplikaci Unitron Remote Plus lze používat na zařízeních vybavených funkcí Bluetooth® Low-Energy (BT-LE), která jsou kompatibilní se systémem iOS verze 15 nebo novější. Aplikaci Unitron Remote Plus lze používat na zařízeních s operačním systémem Android s certifikací Google Mobile Services (GMS) s podporou technologie Bluetooth® 4.2 a operačním systémem Android verze 8.0 nebo novější.

- ❗ Některé telefony jsou vybaveny zvuky dotyku nebo tóny klávesnice, které by mohly být streamovány do sluchadla/sluchadel. Aby k tomu nedošlo, přejděte do nastavení telefonu, vyberte položku zvuky a zkontrolujte, že všechny zvuky dotyku a tóny klávesnice byly deaktivovány.
- ❗ Funkce dostupné v aplikaci Unitron Remote Plus se mohou lišit v závislosti na připojených sluchadlech. Ne všechny funkce jsou dostupné pro všechna sluchadla.


Značka slova a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými společností Bluetooth® SIG, Inc.

Apple, logo Apple, iPhone a iOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech amerických a dalších zemích. App Store je ochranná známka služeb Apple Inc. Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

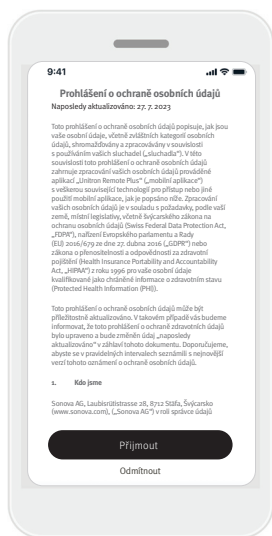

Potvrzení prohlášení o ochraně osobních údajů v aplikaci


Abyste mohli aplikaci Unicon Remote Plus používat, musíte souhlasit s prohlášením o ochraně osobních údajů a analýzou anonymizovaných dat o používání získaných z aplikace.

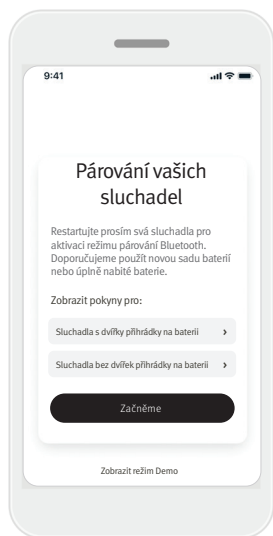

Spárování se sluchadlem/sluchadly


Detekce vašeho sluchadla / vašich sluchadel. Pokud vaše sluchadlo má / vaše sluchadla mají dvířka přihrádky na baterii, restartujte sluchadla otevřením a zavřením dvířek přihrádky na baterii. Pokud vaše sluchadlo nemá / sluchadla nemají dvířka přihrádky na baterii, nejprve každé sluchadlo vypněte stisknutím spodní části tlačítka, dokud se barva kontrolky LED nezmění na červenou (4 sekundy). Poté každé sluchadlo zapněte stisknutím téhož tlačítka, dokud se barva kontrolky LED nezmění na zelenou (2 sekundy).

Zvolte „Zobrazit režim Demo“ pro vyzkoušení aplikace bez připojení k vašim sluchadlům. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto režimu není k dispozici žádná funkce dálkového ovládání.

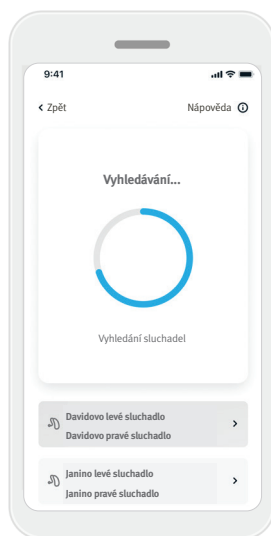


Vyberte vaše sluchadlo/sluchadla

Pokud aplikace detekuje více než jednu sadu zařízení, stiskněte tlačítko na svém sluchadle a příslušné zařízení bude v aplikaci zvýrazněno.

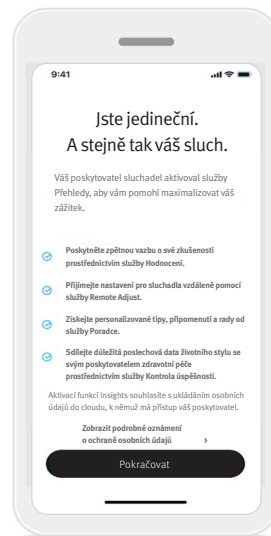


Aktivace služby Přehledy

Službu Přehledy povoluje váš sluchový specialista a umožňuje používat službu Přehledy, včetně služeb Vzdálené nastavení a Poradce. Doporučuje se povolit oznámení a přístup k poloze. Tyto funkce lze kdykoli povolit nebo zakázat na kartě **Více** v části Nastavení služby Přehledy.

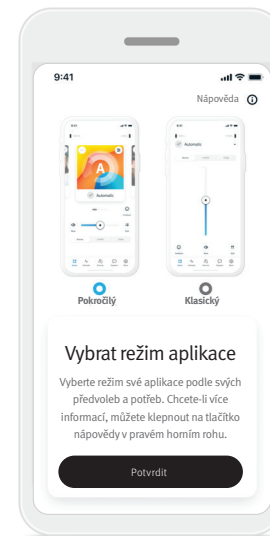

Výběr režimu aplikace

Aplikace nabízí dva režimy pro obrazovku Domů: Pokročilý režim je ideální pro ty, kteří chtějí získat přístup k pokročilým funkcím a možnostem úpravy. Klasický režim je ideální pro ty, kteří chtějí získat přístup k základním funkcím a možnostem. Tento režim se doporučuje pro ty, kteří preferují jednodušší zážitek. Tyto režimy můžete v aplikaci kdykoliv změnit na kartě **Více** v položce Režim aplikace.

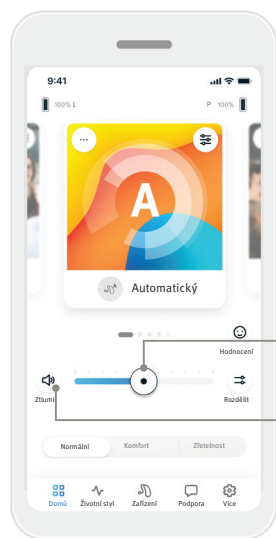


Posuvník
hlasitosti

Ztlumit /
Zrušit
ztlumení

Úprava hlasitosti sluchadla

Posunutím posuvníku
doprava nebo doleva
zvýšíte nebo snížíte
hlasitost sluchadla na
obou uších.


Stisknutím tlačítka (🔊)
Ztlumit na levé straně
posuvníku ztlumíte nebo
zrušíte ztlumení
sluchadel.

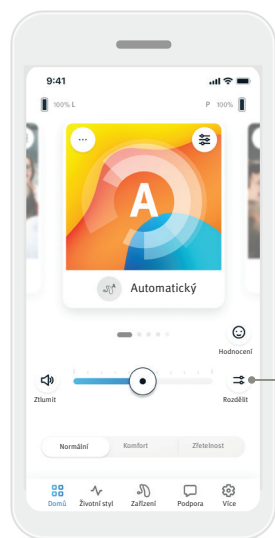

Rozdělit
hlasitost

Rozdělit hlasitost


Stisknutím tlačítka (↔)
Rozdělit hlasitost budete
ovládat hlasitost na
každém sluchadle
samostatně.

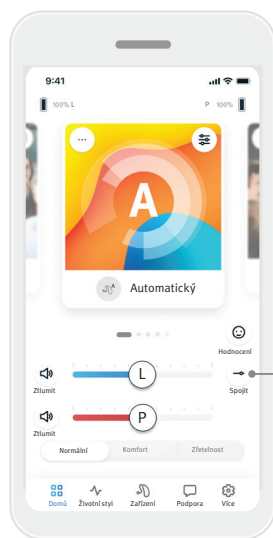

Spojit
hlasitost

Spojit hlasitost

Stisknutím tlačítka (→)
Spojit hlasitost sloučíte
posuvníky hlasitosti.

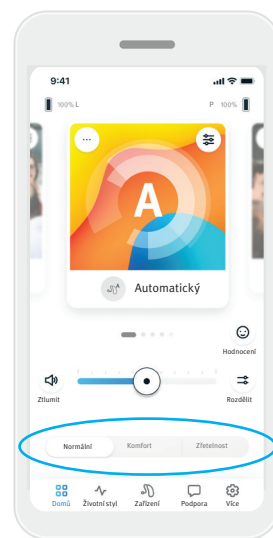

Výběr
programů

Aktivace předvoleb – komfort a zřetelnost*

V programu Automatický si
můžete vybrat z možností
Zřetelnost, **Komfort** nebo
Normální. **Zřetelnost** je
k dispozici pro zvýraznění
řeči, zatímco **Komfort** se
používá pro zmírnění
hluku za účelem celkového
komfortu poslechu.
Možnosti **Zřetelnost**
a **Komfort** se vzájemně
vylučují, a nemohou být
v zapnutém stavu
současně. **Normální** je
výchozí nastavení.


Změna programů na sluchadle/sluchadlech

Přejetím prstem doleva
a doprava na výběru
programů uvidíte všechny
dostupné programy. Když
přestanete přejíždět
prstem, bude vybraný
program (např.
Restaurace) použit ve
vašem sluchadle / vašich
sluchadlech.


*Tato funkce není podporována u všech
modelů sluchadel.

Hodnocení


Pokud jste aktivovali funkce Insights, můžete sdílet zpětnou vazbu o své zkušenosti se sluchadlem se svým lékařem. Pokud se k této možnosti přihlásíte, uvidíte smajlík na pravé straně obrazovky Domů.

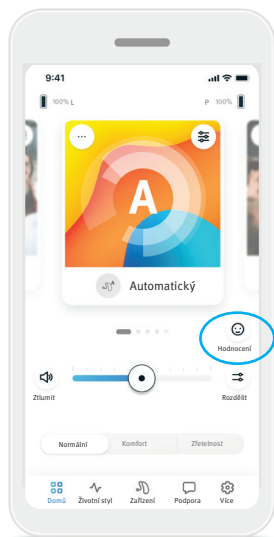


1. Klikněte na ikonu smajlíka (😊).

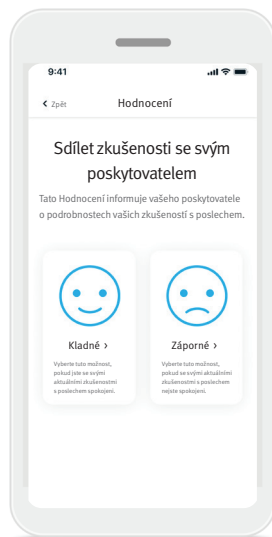

2. Vyberte **kladné**, jste-li spokojeni, nebo **záporné**, jste-li nespokojeni.

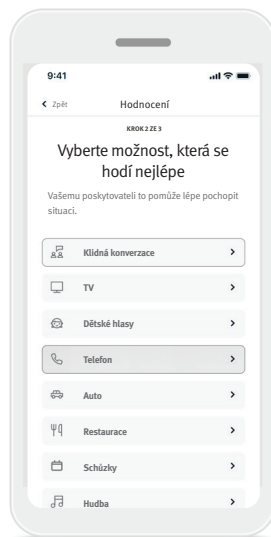

3. Vyberte situaci, která co nejlépe odpovídá té, v níž se právě nacházíte.

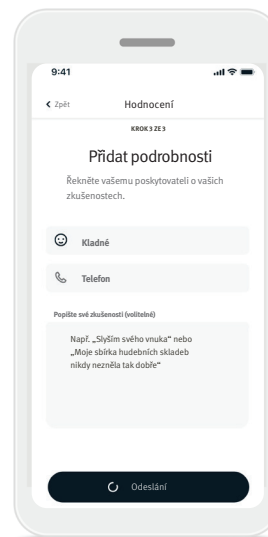


4. Zobrazte si svou zpětnou vazbu a zadejte další komentáře (volitelně). Klepnutím na tlačítko „**Odeslat**“ odešlete svou zpětnou vazbu svému poskytovateli sluchadel.


Volitelné programy

Vyberte si ze seznamu předem definovaných programů a personalizujte svá sluchadla podle konkrétní situace. Dostupné volitelné programy se liší podle úrovně technologie vašich sluchadel.

- Restaurace
- Televize
- Venku
- Kavárna
- Živá hudba
- Auto 360 / doprava
- Párty

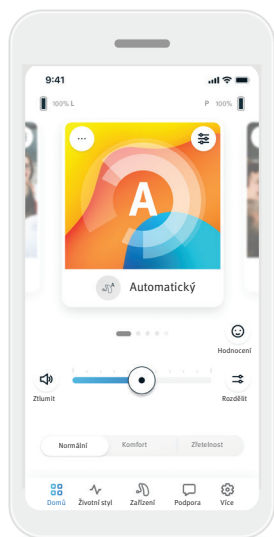


1. Přejděte na kartu **Domů**.

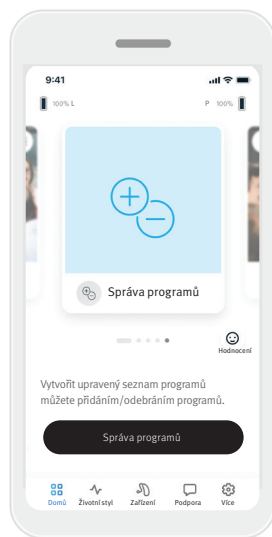

2. Přejed'te prstem doleva nebo doprava, dokud nevidíte obrázek/ikonu **Správa programů**. Klikněte na tlačítko **Správa programů**.




3. Pro rychlé přidání volitelného programu klikněte na **tlačítko plus (+)**.

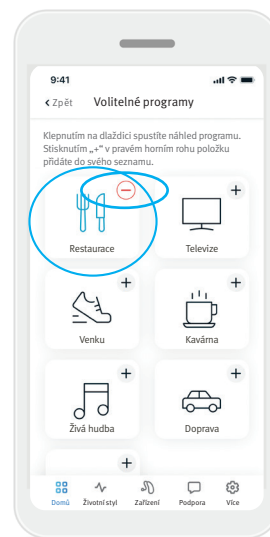

4. Kliknutím na tlačítko **(-)** **odeberete** volitelný program ze seznamu programů.


5. Kliknutím na **dlaždici programu** zobrazíte náhled programu.

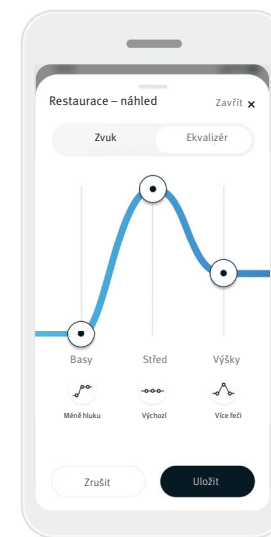

6. Kliknutím na **dlaždici programu** se přesunete na obrazovku náhledu programu. Bude zobrazena obrazovka náhledu programu. Změňte nastavení a kliknutím na možnost **Uložit** přidejte volitelný program do seznamu programů.

Nastavení programu

Další úpravy mohou být dostupné podle aktuálně zvoleného programu, konfigurace vašeho sluchadla a připojených zdrojů zvuku.

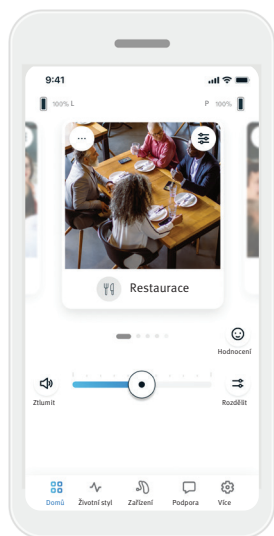


Maskér tinnitu


Pokud váš poskytovatel sluchadel aktivoval maskér tinnitu, budete mít možnost upravit hlasitost maskovacího šumu.

Ekvalizace

Pokud používáte externí streamovací zařízení (např. TV Connector, hudbu), můžete upravit zaměření tak, abyste slyšeli lépe streamovaný signál nebo abyste lépe slyšeli okolní prostředí.

Nastavení programu

Chcete-li pokročilejší nastavení, můžete přejít k dalším nastavením přímo na své obrazovce Domů klepnutím na tlačítko () **pokročilé funkce** v pravém horním rohu dlaždice vašeho programu.

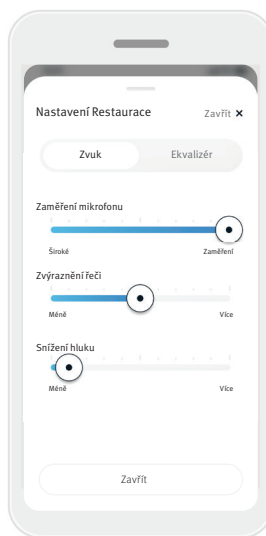


Nastavení zvuku

Můžete upravit ovládací prvek **Zaměření mikrofonu**, aby se zaměřil více na zvuky přicházející z předu nebo na poslech všude kolem vás.

Ovládací prvek **Zvýraznění řeči** vám umožňuje zvýraznit nebo potlačit řeč na požadovanou úroveň komfortu.

Ovládací prvek **Snížení hluku** umožňuje zvýšení nebo snížení hladiny hluku na požadovanou úroveň komfortu.

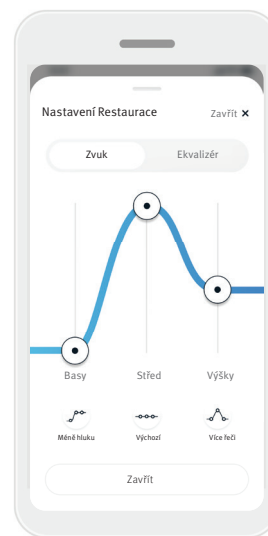


Nastavení funkce Ekvalizér


Zde můžete změnit nastavení funkce **Ekvalizér**.

Přizpůsobení programu


Aplikace Remote Plus vám umožňuje změnit názvy programů, takže můžete personalizovat, co pro vás který program znamená. Můžete změnit název programu pro libovolný program včetně volitelných programů. Chcete-li změnit název programu:

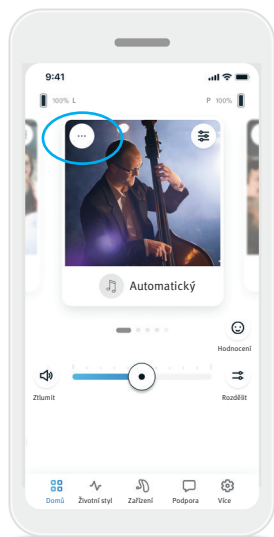


1. Klepněte na (...) **nastavení programu** v levém horním rohu obrázku programu (nebo ikony).

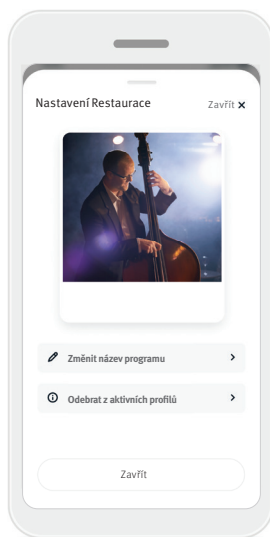

2. Zobrazí se obrazovka nastavení programu.
3. Klepněte na **Změnit název programu**.

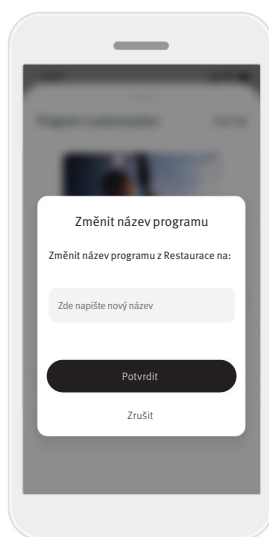


4. Zadejte svůj preferovaný název programu do textového pole a klikněte na **Potvrdit**.

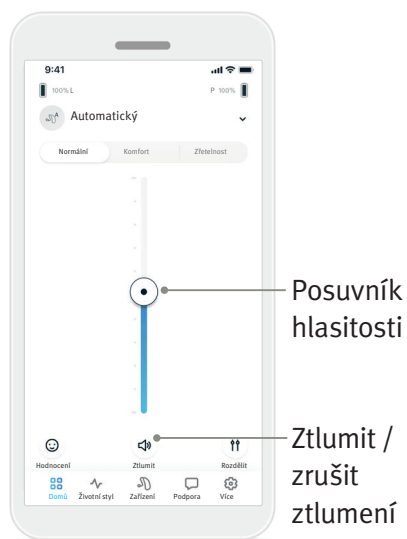

Úprava hlasitosti sluchadla

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti sluchadla na obou stranách posuňte posuvníkem nahoru nebo dolů.


Stiskněte tlačítko (🔇) **Ztlumit** pod posuvníkem, chcete-li ztlumit nebo zrušit ztlumení sluchadel.

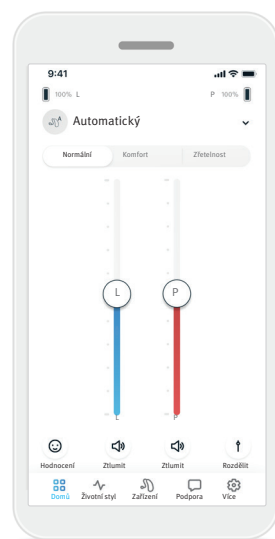

Rozdělit hlasitost

Stisknutím tlačítka (🔊) **Rozdělit hlasitost** budete ovládat hlasitost na každém sluchadle samostatně.


Pro změnu hlasitosti použijte posuvníky hlasitosti. Stisknutím tlačítka (🔊) **Spojit hlasitost** sloučíte posuvníky hlasitosti.

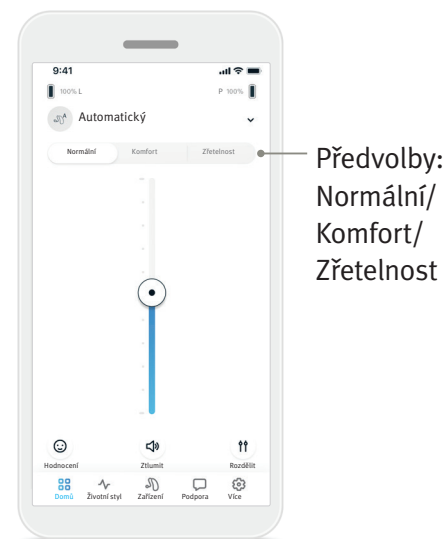

Aktivace předvoleb – komfort a zřetelnost*

V programu Automatický si můžete vybrat z možností **Zřetelnost**, **Komfort** nebo **Normální**. **Zřetelnost** je k dispozici pro zvýraznění řeči, zatímco **Komfort** se používá pro zmírnění hluku za účelem celkového komfortu poslechu. Možnosti **Zřetelnost** a **Komfort** se vzájemně vylučují, a nemohou být v zapnutém stavu současně. **Normální** je výchozí nastavení.

*Tato funkce není podporována u všech modelů sluchadel.

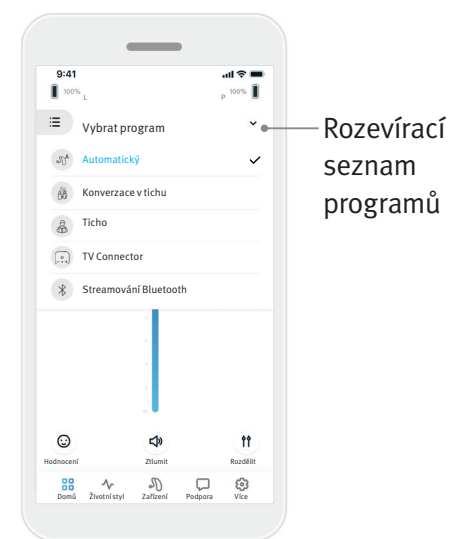


Změna programů na sluchadle/sluchadlech


Klepnutím na **šipku** vedle aktuálního programu zobrazíte všechny dostupné programy. Vyberte požadovaný program (např. TV Connector).

Hodnocení


Když je služba Přehledy aktivována a služba Hodnocení povolena, můžete s lékařem sdílet zpětnou vazbu o svých zkušenostech s poslechem. Pokud jste ji aktivovali, uvidíte smajlík ve spodní části obrazovky Domů.

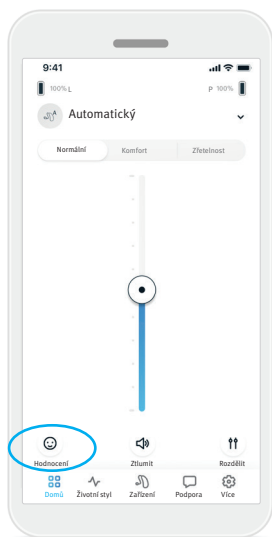


1. Klikněte na ikonu smajlíka (😊).

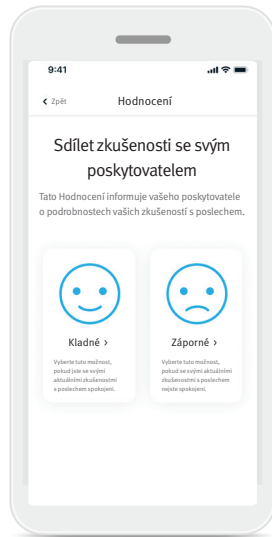

2. Vyberte kladné, jste-li spokojeni, nebo záporné, jste-li nespokojeni.

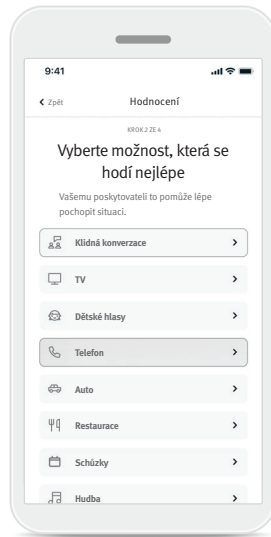

3. Vyberte situaci, která co nejlépe odpovídá té, v níž se právě nacházíte.

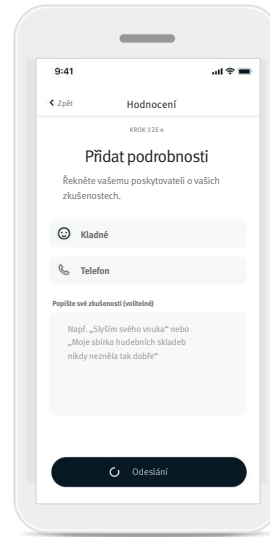


4. Zobrazte si svou zpětnou vazbu a zadejte další komentáře (volitelně). Klepnutím na tlačítko „Odeslat“ odešlete svou zpětnou vazbu svému poskytovateli sluchadel.

Karta Životní styl



Informace obsažené v této části jsou určeny pouze pro vzdělávací a informativní účely. Informace zobrazené v části Životní styl byste neměli používat jako náhradu, ani nejsou míněny jako náhrada odborné lékařské rady. Máte-li jakékoli otázky týkající se vašeho zdraví nebo před zahájením programu cvičení, měli byste vždy konzultovat se svým lékařem nebo jiným zdravotníkem.

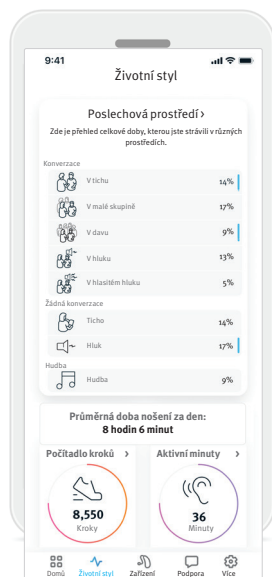


Karta **Životní styl** vám zobrazí obrazovku s posuvníkem, kde jsou zobrazeny údaje o vašem životním stylu, jak je zaznamenala vaše sluchadla. Můžete si zobrazit vaši dobu nošení sluchadla, informace o vašem poslechovém prostředí i další údaje o fyzické aktivitě.

- **Poslechová prostředí**
Tato část poskytuje přehled doby, kterou jste strávili v různých prostředích, která byla detekována vaším sluchadlem / vašimi sluchadly.
- **Průměrná doba nošení**
Jedná se o průměrnou dobu, po kterou jste nosili sluchadlo/sluchadla každý den.
- **Počítadlo kroků**
Počítadlo kroků* zobrazuje počet kroků, které jste ušli za den podle měření akcelerometru ve vašem sluchadle / vašich sluchadlech.
- **Aktivní minuty**
Aktivní minuty představují počet minut, které jste během dne strávili fyzickou aktivitou, např. chůze, běh nebo jakákoli podobná fyzicky středně náročná až náročná činnost s nasazeným sluchadlem / nasazenými sluchadly.

*Tato funkce není podporována u všech modelů sluchadel.

Karta Zařízení




Karta Zařízení je místo, kde můžete upravit nastavení svého sluchadla / svých sluchadel.

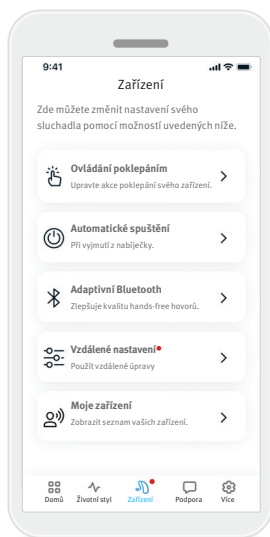

- **Ovládání poklepáním**
Některá sluchadla mají zabudovaný snímač, který umožňuje ovládat některé z funkcí sluchadla ovládáním poklepáním. Další informace najdete na straně 14.
- **Automatické spuštění**
Můžete si vybrat, zda se vaše sluchadlo bude / vaše sluchadla budou zapínat automaticky, když je vyjmete z nabíječky.
- **Adaptivní Bluetooth®**
Máte-li problémy s kvalitou zvuku během hovorů, deaktivace této funkce může vaše zkušenosti zlepšit.
- **Vzdálené nastavení**
Pokud je služba Přehledy aktivována, budete moci dostávat push oznámení, která obsahují úpravy vašich sluchadel odesílané vaším poskytovatelem sluchadel.
- **Moje zařízení**
Pokud máte problémy s připojením k aplikaci, můžete si vybrat **Zapomenout zařízení** a zkusit je znovu spárovat. Pokud chcete připojit k aplikaci jiný pár sluchadel, nejprve musíte zapomenout aktuálně připojené sluchadlo / připojená sluchadla. Poté můžete spárovat nová zařízení. **POZNÁMKA:** Zapomenutí zařízení odebere spojení mezi vaším sluchadlem / vašimi sluchadly a aplikací.

Ovládání poklepáním

Pokud je vaše sluchadlo vybaveno / jsou vaše sluchadla vybavena funkcí ovládání poklepáním, můžete si upravit způsob, jakým bude vaše sluchadlo / budou vaše sluchadla reagovat na dvojí poklepání. V některých sluchadlech je vestavěn senzor umožňující ovládání některých funkcí sluchadla poklepáním. Akci a citlivost poklepání lze upravit následovně:

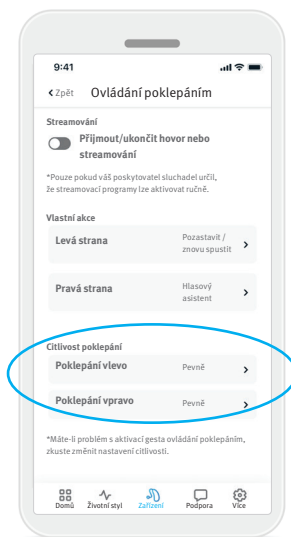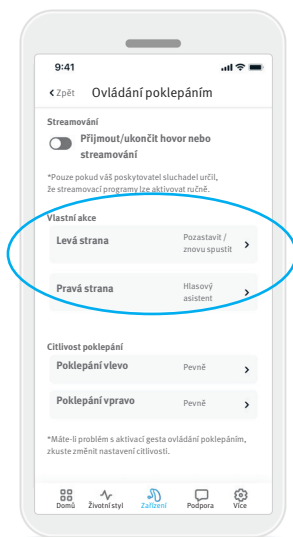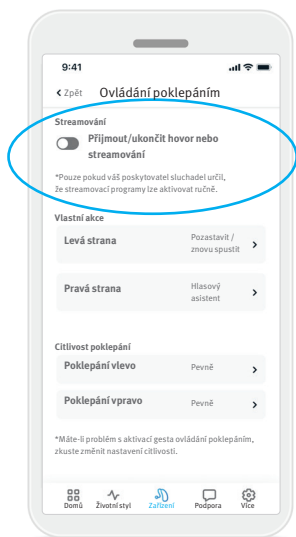

Streamování

Přijetí/ukončení hovoru nebo streamování – aktivuje/deaktivuje schopnost přijmout/ukončit hovor nebo připojit se ke streamovacímu zařízení (např. TV Connector) dvojitým poklepáním. Ovládání poklepáním pro připojení ke streamovacímu zařízení můžete používat, pouze pokud poskytovatel sluchadel nakonfiguroval vaše sluchadla pro manuální připojení.

Vlastní akce

(nakonfigurované zvlášť pro levé a pravé sluchadlo):

- Pozastavení/opětovné spuštění médií – dvojí poklepání spustí médium při streamování.
- Hlasový asistent – dvojí poklepání bude aktivovat hlasového asistenta na vašem chytrém telefonu.
- Vypnout – dvojí poklepání nepovede k provedení akce.


Citlivost poklepání

(nakonfigurované zvlášť pro levé a pravé sluchadlo):

- Jemně – nejcitlivější.
- Běžně – výchozí nastavení citlivosti.
- Pevně – nejméně citlivě.

Vzdálené nastavení


Pokud je služba Přehledy aktivována, budete moci dostávat push oznámení, která obsahují úpravy vašich sluchadel odesílané vaším poskytovatelem sluchadel.

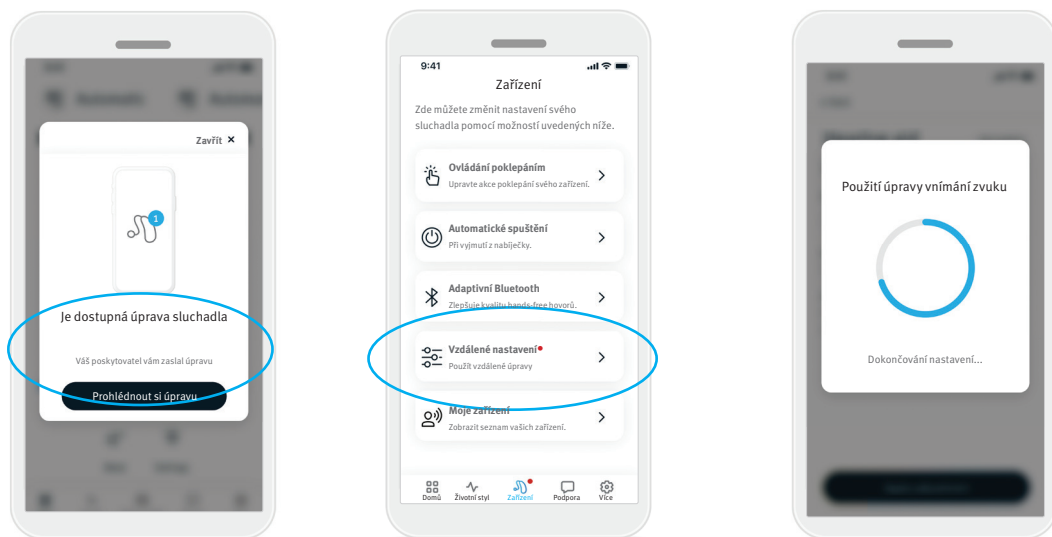

1. Přijměte personalizovanou zprávu od svého poskytovatele sluchadel. Kliknutím na [Prohlédnout si úpravu](#) získáte přístup k úpravě.
2. Nebo otevřete aplikaci Remote Plus a přejděte do nabídky [Zařízení](#) > [Vzdálené nastavení](#).
3. Vyberte úpravu, klikněte na [Použít úpravu](#) a použijte změny podle pokynů.
4. Nyní probíhá použití úpravy u vašich sluchadel. Pokud upřednostňujete jiné nastavení, můžete vybrat dostupnou úpravu a použít ji u svých sluchadel.

Karta Podpora


Na kartě [Podpora](#) můžete najít informace o svých sluchadlech.

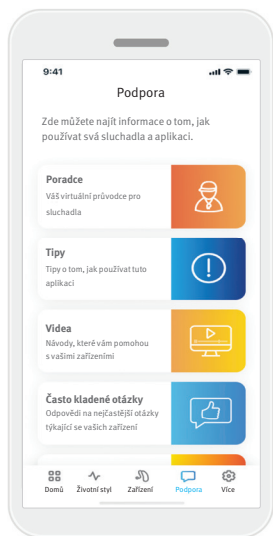

- Přístup ke zprávám Poradce
- Najít tipy pro používání aplikace Remote Plus
- Sledovat videa s návodem, která vám pomohou s vašimi zařízeními
- Procházet často kladené dotazy, kde jsou odpovědi na nejčastější otázky týkající se vašich zařízení
- Zjistit informace o dalších službách, které můžete používat se svými zařízeními

Karta Více

Karta **Více** je místo, kde můžete najít další nastavení aplikace a právní informace související s aplikací.

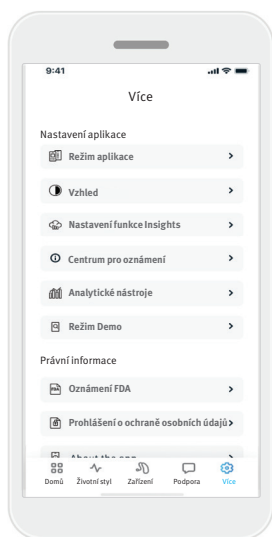

Režim aplikace

Přepněte mezi dvěma režimy aplikace na obrazovce **Domů**: režimem Pokročilý a režimem Klasický. **Pokročilý** režim je ideální pro uživatele, kteří chtějí získat přístup k pokročilým funkcím a možnostem úpravy. **Klasický** režim je ideální pro uživatele, kteří chtějí získat přístup k základním funkcím a možnostem. Tento režim se doporučuje uživatelům, kteří preferují jednodušší zážitky.

Nastavení funkce Insights

Ve výchozím nastavení jsou aktivovány všechny funkce služby Přehledy. Jednotlivé funkce můžete povolit nebo zakázat, případně službu Přehledy zcela deaktivovat. Deaktivace odstraní všechna data služby Přehledy dříve nahraná do cloudu Sonova a deaktivuje všechny funkce služby Přehledy, včetně zpráv Poradce a vzdálených úprav

Centrum pro oznámení

Povolit nebo zakázat upozornění služby Poradce. Zprávy od Poradce budou i nadále přístupné na kartě Podpora, i když jsou oznámení deaktivována.

Vzhled

Obrázky programů

Stiskněte přepínač pro výběr mezi obrázky nebo ikonami programů aplikace.

Vyberte obrázky, pokud preferujete dynamičtější a barevnější pohled na obrázky programu.

Vyberte ikony, pokud preferujete méně barevný pohled na ikony programu.

Přizpůsobit vzhled telefonu

Automaticky se přizpůsobí nastavení světlého nebo tmavého režimu telefonu. Deaktivace této funkce vám umožní vybrat režim manuálně.

Analytické nástroje

Aktivujte nebo deaktivujte sdílení dat o používání. Poskytnutím dat o používání nám umožníte učit se a zlepšovat produkty a služby. Nikdy nikomu neprodáme vaše osobní údaje. Je to součástí našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

Režim Demo

Zapnutí nebo vypnutí režimu Demo. Režim Demo vám umožňuje vyzkoušet aplikaci bez připojení ke sluchadlům.

Právní informace

Přístup k právním a regulačním informacím, které souvisejí s aplikací.

POZNÁMKA: Aplikace je k dispozici v různých jazycích. Automaticky zvolí jazyk podle jazyka operačního systému telefonu. Pokud jazyk telefonu není podporován, výchozím jazykem je angličtina.

Informace o shodě s platnými předpisy

Prohlášení o shodě

Společnost Sonova AG tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje požadavky nařízení o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745.

Uživatelská příručka ve všech příslušných jazycích v elektronické podobě je dostupná prostřednictvím internetové stránky www.unitron.com/appguide.

Alternativně lze uživatelskou příručku otevřít přímo z aplikace tak, že přejdete do sekce „Více“, vyberete „O aplikaci“ a poté klepnutím na odkaz ve spodní části přejdete k Nápoovědě a podpoře v okně externího prohlížeče. Odtud můžete přejít do části Podpora / Uživatelské příručky a posunout se dolů do sekce aplikace.

Popis symbolů



Označením CE společnost Sonova AG potvrzuje, že tento produkt splňuje požadavky nařízení o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745. Čísla za označením CE odpovídají kódu certifikovaných institucí, s nimiž bylo konzultováno v souladu s požadavky nařízení uvedeného výše.



Název, adresa

Označuje výrobce zdravotnického prostředku, jak je definován v nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích



Označuje, že zařízení je zdravotnickým prostředkem.



Označuje zplnomocněného zástupce v Evropském společenství. Zástupce pro ES je také dovozce do Evropské unie.



Označuje katalogové číslo výrobce, podle kterého lze určit zdravotnický prostředek.



Tento symbol označuje, že je důležité, aby si uživatel přečetl a zohlednil příslušné informace uvedené v této uživatelské příručce.



Označení, že je k dispozici návod k použití v elektronické podobě.



Tento symbol znamená, že je důležité, aby se uživatel řídil relevantními upozorněními uvedenými v této uživatelské příručce.



Důležité informace pro manipulaci a bezpečnost výrobku.



Slovní ochranná známka Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek je v rámci licence společnosti Sonova AG. Jiné ochranné známky a obchodní názvy náležejí příslušným vlastníkům.



Symbol autorských práv.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím aplikace si prosím přečtěte relevantní bezpečnostní informace na následujících stranách.

Určený účel použití

Určeným použitím aplikace je výběr, úprava a uložení stávajících funkcí sluchadla, přístup k informacím o stavu a komunikace mezi koncovým uživatelem a poskytovatelem sluchadel bezdrátovým a vizualizovaným způsobem.

Určená populace pacientů

Určenou populací pacientů pro toto řešení jsou koncoví uživatelé (laici) s jednostrannou nebo oboustrannou, mírnou až těžkou ztrátou sluchu, kteří nosí kompatibilní sluchadlo a vyhovuje jim možnost ovládat svá sluchadla pomocí svého chytrého telefonu. Aplikace je určena pro uživatele, kteří dovršili věk 17 let. Softwarová funkce pro tinnitus je určena pro pacienty s chronickým tinnitem, kteří dovršili věk 18 let.

Určený uživatel

Určený uživatel je osoba se ztrátou sluchu, která používá kompatibilní zařízení.

Indikace

Vezměte prosím na vědomí, že indikace nejsou odvozeny od aplikace, ale od kompatibilních sluchadel. Obecné klinické indikace pro použití sluchadel a softwarové funkce pro tinnitus:

- Přítomnost ztráty sluchu
 - Jednostranná nebo oboustranná
 - Převodní, percepční nebo smíšená.
 - Mírná až hluboká.

- Přítomnost chronického tinnitu (platí pouze pro zařízení se softwarovou funkcí pro tinnitus)

Kontraindikace

Vezměte prosím na vědomí, že kontraindikace nejsou odvozeny od aplikace, ale od kompatibilních sluchadel. Obecné klinické kontraindikace pro použití sluchadel, nabíječky a funkce Ekvalizace tinnitu jsou:

- Ztráta sluchu není v rozsahu nastavení sluchadla (např. zesílení, frekvenční odezva).
- Akutní tinnitus.
- Deformita ucha (např. uzavřený zvukovod, chybějící ušní boltec).
- Neurální porucha sluchu (retrochleární patologie, např. chybějící nebo nefunkční sluchový nerv).

Primární kritéria pro odeslání pacienta k vyšetření či léčbě u lékaře nebo jiného specialisty jsou tato:

- Viditelná vrozená nebo traumatická deformita ucha.
- Aktivní drenáž z ucha v předchozích 90 dnech.
- Náhlá nebo rychle progredující ztráta sluchu v jednom nebo obou uších během předchozích 90 dnů.
- Akutní nebo chronické závratě.
- Audiometrický rozdíl vedení vzduch-kost je roven nebo větší než 15 dB při frekvenci 500 Hz, 1 000 Hz a 2 000 Hz.
- Viditelné nahromadění významného množství ušního mazu nebo cizí těleso ve zvukovodu.
- Bolest nebo nepříjemné pocity v uchu.

- Abnormální vzhled ušního bubínku a zvukovodu, například:
 - Zánět vnějšího zvukovodu
 - Perforovaný ušní bubínek
 - Jiné abnormality, které podle názoru poskytovatele sluchadel představují zdravotní problém

Poskytovatel sluchadel může rozhodnout, že odeslání pacienta není vhodné nebo není v nejlepším zájmu pacienta v těchto případech:

- Je-li dostatečně prokázáno, že specializovaný lékař stav důkladně vyšetřil a byla poskytnuta veškerá možná léčba
- Stav se od předchozího vyšetření a/nebo léčby významně nezhoršil ani nezměnil
- Jestliže se pacient informovaně a kompetentně rozhodl nevyhledat radu lékaře, je přípustné přistoupit k doporučení vhodných poslechových systémů s přihlédnutím k následujícímu:
 - Doporučení nesmí mít žádné nežádoucí účinky na zdravotní stav či celkový pocit pohody pacienta
 - Ze záznamů vyplývá, že vše bylo zváženo v nejlepším zájmu pacienta

Pokud to vyžadují zákonné předpisy, pacient podepsal prohlášení potvrzující, že nesouhlasí s odesláním k jinému specialistovi a že se jedná o informované rozhodnutí.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím aplikace si prosím přečtěte relevantní bezpečnostní informace na následujících stranách.

Klinický přínos

Aplikace sama o sobě neposkytuje přímý klinický přínos koncovému uživateli, ale jiné přínosy, které souvisejí především s použitelností. Klinické přínosy jsou poskytovány pouze sluchadly. Aplikace poskytuje následující přínosy určeným uživatelům:

- Poskytnutí možnosti upravit a uložit nastavení sluchadla podle individuálních potřeb v omezeném rozsahu definovaném počátečním sestavením např. přizpůsobením specifickým potřebám. Tento přístup by mohl pomoci zvýšit komfort poslechu a spokojenost se sluchadly v konkrétních poslechových situacích (např. snížením hlasitosti v hlučných poslechových prostředích).

Vedlejší účinky

Vezměte prosím na vědomí, že vedlejší účinky nejsou odvozeny od aplikace, ale od kompatibilních sluchadel. Fyzické vedlejší účinky sluchadel jako např. tinnitus, závratě, tvorba ušního mazu, příliš vysoký tlak, pocení nebo vlhká kůže, puchýře, svědění a/nebo vyrážka, pocit ucpanosti nebo plnosti a jejich následky jako bolesti hlavy a/nebo bolest v uších může odstranit nebo zmírnit váš poskytovatel sluchadel.

Konvenční sluchadla mohou pacienty vystavit působení vyšších hladin zvuku, což může vést k posunutí prahových hodnot frekvenčního rozsahu dotčeného akustickým traumatem.

Omezení použití

Použití aplikace je omezeno na funkce kompatibilního zařízení / kompatibilních zařízení.

Jakákoli závažná událost, která se vyskytla v souvislosti s aplikací, by měla být nahlášena zástupci výrobce a příslušnému orgánu ve státě bydliště. Závažná událost je popsána jako jakákoli událost, která přímo nebo nepřímo vedla, mohla vést anebo může vést k některé z následujících situací:

- a. úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- b. dočasné nebo trvalé závažné zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby,
- c. vážné ohrožení veřejného zdraví.

Chcete-li ohlásit neočekávanou operaci nebo událost, kontaktujte výrobce nebo jeho zástupce.

Důležité bezpečnostní informace

Před použitím aplikace si prosím přečtěte relevantní bezpečnostní informace na následujících stranách.

Bezpečnostní upozornění

Údaje pacienta jsou osobní údaje a jejich ochrana je důležitá:

- Zkontrolujte, že chytré telefony jsou aktuální, včetně nejnovějších bezpečnostních aktualizací operačního systému. Aktivujte automatické aktualizace.
- Zkontrolujte, že vaše nainstalovaná verze aplikace je aktuální.
- Se svými sluchadly používejte pouze originální aplikace Sonova z oficiálních zdrojů.
- Používejte silná hesla a udržujte své přihlašovací údaje v tajnosti.
- Uzamkněte telefon kódem PIN, případně pomocí biometrických údajů (například otisk prstu, obličeje) a nastavte telefon, aby se automaticky zamykal po několika minutách nečinnosti.
- Zkontrolujte, že nainstalované aplikace mají pouze ta oprávnění, která potřebují.
- Nevytvářejte párování Bluetooth® se svými sluchadly na veřejných místech. Vyhněte se tak nechtěnému rušení 3. osobami. Doporučujeme provádět párování Bluetooth® doma.
- NEPOUŽÍVEJTE telefon s použitým nástrojem jailbreak nebo root. Zajistěte za všech okolností bezpečnost svých dat. Vezměte prosím na vědomí, že výčet těchto opatření není úplný.
- Při přenosu dat nezabezpečenými kanály pošlejte buď anonymní data, nebo data šifrujte.
- Chraňte svůj chytrý telefon zálohováním dat nejen z důvodu ztráty dat, ale také jako ochranu proti krádeži.
- Ze svého chytrého telefonu, který již nepoužíváte nebo jej chcete zlikvidovat, odstraňte všechna data.

Údržba softwaru

Neustále monitorujeme zpětnou vazbu z trhu. Pokud budete mít problémy s nejnovější verzí aplikace, obraťte se prosím na svého místního zástupce výrobce, případně poskytněte zpětnou vazbu prostřednictvím App Store nebo Google Play Store.

⚠ Změna nastavení, např. snížení hlasitosti, ztlumení sluchadel nebo zvýšení intenzity funkce “Snížit hluk”, může vést k nebezpečí, že například neuslyšíte varovné signály příchozí dopravy.

ⓘ Pokud sluchadla nereagují na zařízení z důvodu neobvyklého rušení způsobeného elektromagnetickými poli, přemístěte je z dosahu těchto elektromagnetických polí. Aktivujte své Bluetooth. Funkce Bluetooth musí být aktivována pro připojení vašich sluchadel. Pokud vaše sluchadla nereagují, zkontrolujte prosím, zda jsou sluchadla zapnutá a zda baterie není vybitá.

ⓘ Pokyny jsou k dispozici na internetové stránce: unitron.com/appguide ve formátu Adobe® Acrobat® PDF. Pro jejich zobrazení musíte mít nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader. Navštivte Adobe.com pro jeho stažení.

ⓘ Chcete-li získat bezplatně tištěnou kopii návodu, obraťte se prosím na svého místního zástupce společnosti Unitron. Kopie bude odeslána do 7 dnů.



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Švýcarsko



Dovozce pro Evropskou unii:
Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen, Německo