


# Unitron Remote Plus app


Οδηγός χρήσης - Remote Plus 5.2

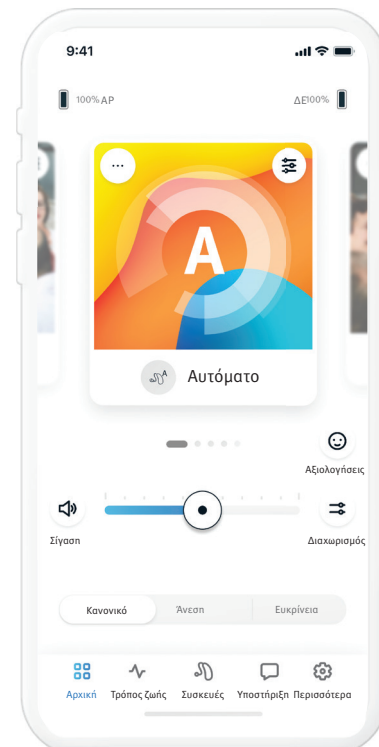

## Περιεχόμενα

<b>Επισκόπηση εφαρμογής</b> .....	3	Διαχωρισμός εντάσεων .....	10
<b>Ας Ξεκινήσουμε</b> .....	3	Ενεργοποίηση προεπιλογών –	
<b>Πληροφορίες συμβατότητας</b> .....	3	Άνεση και Ευκρίνεια .....	10
<b>Εισαγωγικές ενέργειες</b> .....	4	Αλλαγή προγραμμάτων στα ακουστικά	
Αποδοχή της δήλωσης απορρήτου		βοηθήματα .....	10
της εφαρμογής .....	4	Αξιολογήσεις .....	11
Σύζευξη με ακουστικά βοηθήματα .....	4	<b>Καρτέλα Τρόπος ζωής</b> .....	12
Ενεργοποίηση Insights .....	4	Περιβάλλοντα ακρόασης .....	12
Επιλογή λειτουργίας εφαρμογής .....	4	Μέσος χρόνος χρήσης .....	12
<b>Καρτέλα Αρχική – Προηγμένη λειτουργία</b> .....	5	Μετρητής βημάτων .....	12
Ρύθμιση έντασης ακουστικών βοηθημάτων .....	5	Λεπτά σωματικής δραστηριότητας .....	12
Διαχωρισμός εντάσεων .....	5	<b>Καρτέλα Συσκευές</b> .....	13
Ενεργοποίηση προεπιλογών –		Έλεγχος αφής .....	13
Άνεση και Ευκρίνεια .....	5	Αυτόματη ενεργοποίηση .....	13
Αλλαγή προγραμμάτων στα ακουστικά		Προσαρμοστικό Bluetooth® .....	13
βοηθήματα .....	5	Οι συσκευές μου .....	13
Αξιολογήσεις .....	6	Απομακρυσμένη προσαρμογή .....	15
Προαιρετικά προγράμματα .....	7	<b>Καρτέλα Υποστήριξη</b> .....	16
Ρυθμίσεις προγράμματος .....	8	<b>Καρτέλα Περισσότερα</b> .....	17
Συσκευή ανακούφισης από εμβοές		Λειτουργία εφαρμογής .....	17
(tinnitus masker) .....	8	Εμφάνιση .....	17
Ρυθμίσεις ήχου .....	8	Ρυθμίσεις Insights .....	17
Μικρόφωνο εστίασης .....	8	Κέντρο ειδοποιήσεων .....	17
Βελτίωση ομιλίας .....	8	Στατιστικά στοιχεία .....	17
Μείωση θορύβου .....	8	Λειτουργία επίδειξης .....	17
Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή (equalizer) .....	8	Νομικές πληροφορίες .....	17
Εξατομίκευση προγράμματος .....	9	<b>Πληροφορίες συμβατότητας</b> .....	18
<b>Καρτέλα Αρχική – Κλασική λειτουργία</b> .....	10	Δήλωση συμμόρφωσης .....	18
Ρύθμιση ήχου ακουστικών βοηθημάτων .....	10	Περιγραφή συμβόλων .....	18
		Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας .....	19

## Επισκόπηση εφαρμογής

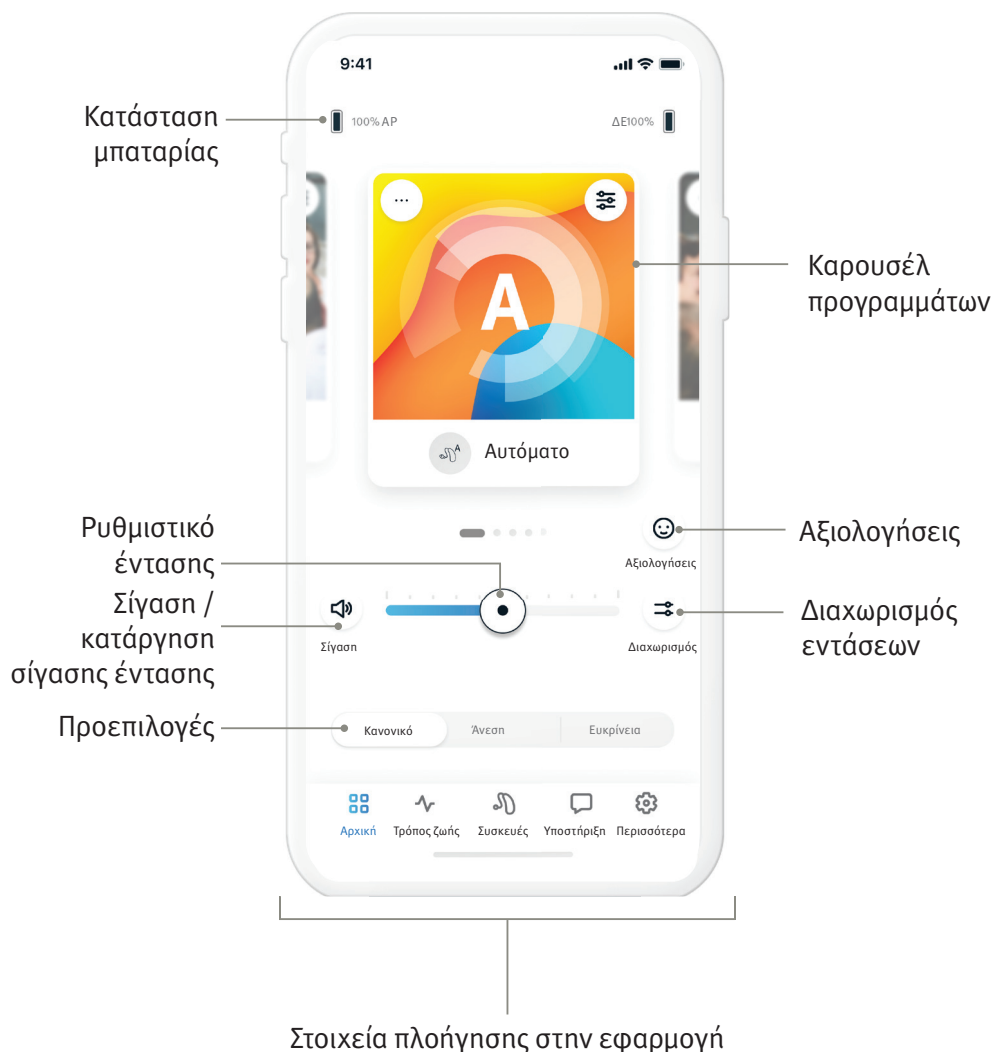

## Ας ξεκινήσουμε

Η εφαρμογή Remote Plus της Unitron είναι μια εφαρμογή που αναπτύχθηκε από τη Sonona, έναν παγκόσμιο ηγέτη στις λύσεις ακοής. Διαβάστε διεξοδικά τις οδηγίες χρήσης ώστε να επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή.

- ❗ Αυτές οι οδηγίες χρήσεως περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής και πώς αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να τα λειτουργήσει ένας χρήστης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, πριν την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής.
- ❗ Δεν χρειάζεται επιπλέον εκπαίδευση για τον χειρισμό της εφαρμογής.


Αυτός ο οδηγός χρήσης ισχύει για την έκδοση 5.2 της εφαρμογής Unitron Remote Plus και μεταγενέστερες εκδόσεις της εφαρμογής. Για προηγούμενες εκδόσεις του οδηγού χρήσης της εφαρμογής επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα [www.unitron.com](http://www.unitron.com).

## Πληροφορίες συμβατότητας

- ⚠️ Ακουστικά βοηθήματα Unitron με ασύρματη σύνδεση Bluetooth® απαιτούνται για τη χρήση της εφαρμογής Unitron Remote Plus. Η εφαρμογή Remote Plus της Unitron μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές με δυνατότητα Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) και είναι συμβατή με iOS έκδοσης 15 ή μεταγενέστερης. Η εφαρμογή Remote Plus της Unitron μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές Android με πιστοποίηση Google Mobile Services (GMS) που υποστηρίζουν Bluetooth® 4.2 και λειτουργικό σύστημα Android OS 8.0 ή μεταγενέστερο.
- ❗ Ορισμένα τηλέφωνα διαθέτουν ήχους αφής ή πλήκτρων, που ενδέχεται να μεταδίδονται στα ακουστικά βοηθήματα. Για να το αποφύγετε αυτό, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, επιλέξτε το μενού ήχων και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ήχοι αφής και ειδοποιήσεων είναι απενεργοποιημένοι.
- ❗ Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά στην εφαρμογή Remote Plus της Unitron ποικίλουν ανάλογα με τα συνδεδεμένα ακουστικά βοηθήματα. Δεν είναι όλα τα χαρακτηριστικά διαθέσιμα για όλα τα ακουστικά βοηθήματα.


Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth® SIG, Inc. Τα Apple, iPhone και iOS, καθώς και το λογότυπο της Apple, αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το App Store αποτελεί σήμα υπηρεσίας της Apple Inc. Τα Android και Google Play, καθώς και το λογότυπο Google Play, αποτελούν εμπορικά σήματα της Google Inc.

# Εισαγωγικές ενέργειες

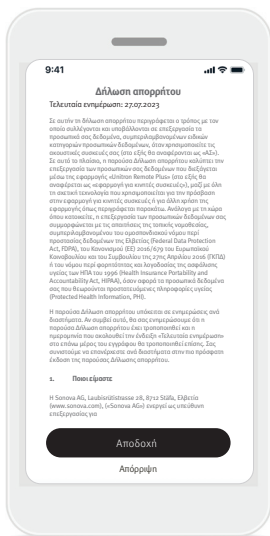

## Αποδοχή δήλωσης απορρήτου εφαρμογής

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Remote Plus της Unitron, πρέπει να αποδεχθείτε τη Δήλωση απορρήτου και την ανάλυση ανώνυμων δεδομένων της χρήσης από την εφαρμογή.

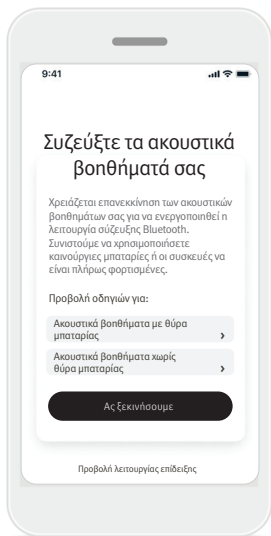

## Σύζευξη με ακουστικά βοηθήματα


Εντοπίστε τα ακουστικά βοηθήματά σας. Αν τα ακουστικά βοηθήματά σας διαθέτουν θύρα μπαταρίας, επανεκκινήστε τα ανοίγοντας και κλείνοντας ξανά τη θύρα μπαταρίας. Αν τα ακουστικά βοηθήματά σας δεν διαθέτουν θύρα μπαταρίας, θα πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε ένα προς ένα τα ακουστικά βοηθήματα πατώντας το κάτω μέρος του κουμπιού μέχρι η λυχνία LED να ανάψει με κόκκινο χρώμα (4 δευτερόλεπτα). Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ένα προς ένα τα ακουστικά βοηθήματά σας πατώντας το ίδιο κουμπί μέχρι η λυχνία LED να ανάψει με πράσινο χρώμα (2 δευτερόλεπτα).

Επιλέξτε «Προβολή λειτουργίας επίδειξης» για να δοκιμάσετε την εφαρμογή χωρίς να συνδέσετε τα ακουστικά βοηθήματά σας. Λάβετε υπόψη ότι καμία λειτουργία τηλεχειρισμού δεν είναι διαθέσιμη σε αυτήν τη λειτουργία.




## Επιλογή των ακουστικών βοηθημάτων σας

Αν έχουν συνδεθεί στην εφαρμογή περισσότερα από ένα σετ συσκευών, πατήστε το κουμπί που βρίσκεται επάνω στο ακουστικό βοήθημά σας και η αντίστοιχη συσκευή θα επισημανθεί στην εφαρμογή.

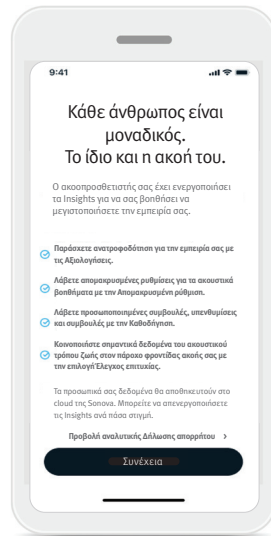


## Ενεργοποίηση Insights

Τα Insights ενεργοποιούνται από τον ακοοπροσθετιστή σας και επιτρέπουν τη χρήση των χαρακτηριστικών Insights, συμπεριλαμβανομένης της Απομακρυσμένης Ρύθμισης και της Καθοδήγησης. Συνιστάται να έχετε ενεργοποιημένες τις ειδοποιήσεις και να επιτρέπεται η πρόσβαση στην τοποθεσία. Αυτά τα χαρακτηριστικά ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται ανά πάσα στιγμή στην καρτέλα **Περισσότερα**, στις ρυθμίσεις Insights.

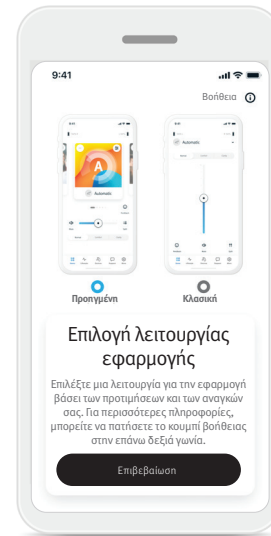

## Επιλογή λειτουργίας εφαρμογής

Η εφαρμογή προσφέρει δύο λειτουργίες για την Αρχική οθόνη: Προηγμένη και Κλασική. Η Προηγμένη λειτουργία είναι ιδανική για όσους θέλουν να έχουν πρόσβαση σε προηγμένα χαρακτηριστικά και επιλογές εξατομίκευσης. Η Κλασική λειτουργία είναι ιδανική για όσους θέλουν να έχουν πρόσβαση σε βασικά χαρακτηριστικά και επιλογές. Αυτή η λειτουργία συνιστάται για όσους προτιμούν μια απλούστερη εμπειρία. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε αυτές τις λειτουργίες από την καρτέλα **Περισσότερα**, κάτω από το μενού Λειτουργία εφαρμογής.

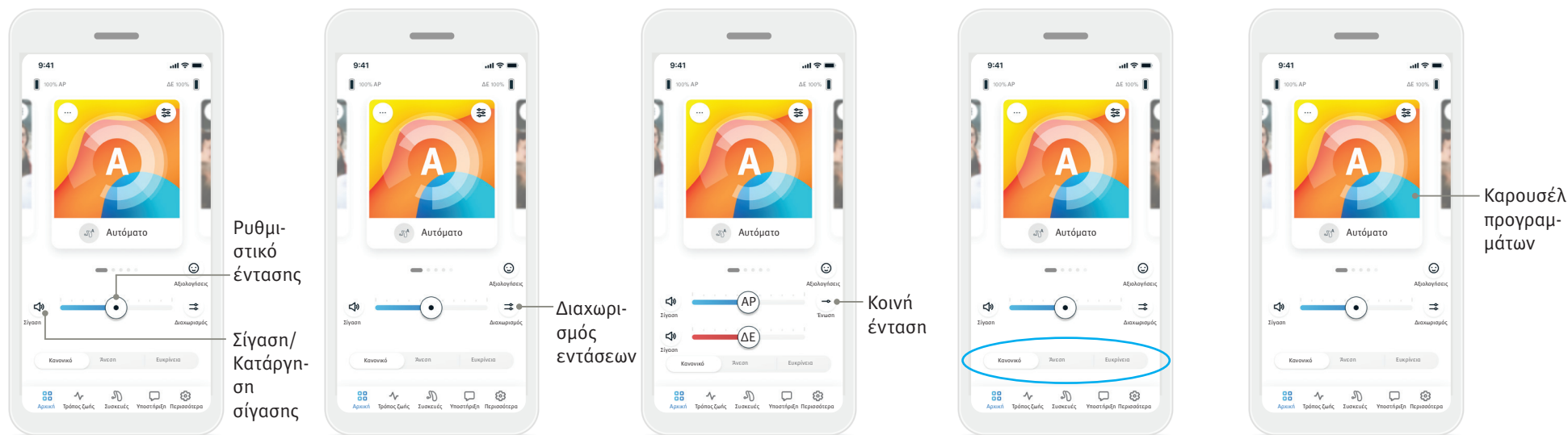

## Ρύθμιση ήχου ακουστικών βοηθημάτων

Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά ή τα αριστερά για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση στο ακουστικό βοήθημα και για τα δύο αυτιά.

Πατήστε το κουμπί **Σίγαση** (🔇) στα αριστερά του ρυθμιστικού για να ενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε τη σίγαση στα ακουστικά βοηθήματα.

## Διαχωρισμός εντάσεων

Πατήστε το κουμπί **Διαχωρισμός εντάσεων** (🔊) αν θέλετε να ελέγχετε την ένταση κάθε ακουστικού βοηθήματος ξεχωριστά.

## Κοινή ένταση

Πατήστε το κουμπί **κοινής έντασης** (→) αν θέλετε να χρησιμοποιείτε το ίδιο ρυθμιστικό και για τα δύο βοηθήματα ταυτόχρονα.

## Ενεργοποίηση προεπιλογών – Άνεση και Ευκρίνεια\*

Για το Αυτόματο πρόγραμμα, μπορείτε να επιλέξετε **Ευκρίνεια**, **Άνεση** ή **Κανονικό**. Η επιλογή **Ευκρίνεια** βελτιώνει την ομιλία, ενώ η επιλογή **Άνεση** μειώνει τον θόρυβο και βελτιώνει τη συνολική άνεση της ακρόασης. Οι επιλογές **Ευκρίνεια** και **Άνεση** δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, άρα και να βρίσκονται ταυτόχρονα σε κατάσταση ενεργοποίησης. Το **Κανονικό** είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.


\* Αυτό το χαρακτηριστικό δεν υποστηρίζεται από όλα τα μοντέλα ακουστικών βοηθημάτων.

## Αλλαγή προγραμμάτων στα ακουστικά βοηθήματα


Σαρώστε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να πλοηγηθείτε στο καρουσέλ προγραμμάτων και να δείτε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα. Όταν σταματήσετε τη σάρωση, το επιλεγμένο πρόγραμμα (π.χ. Εστιατόριο) θα ισχύει πλέον για τα ακουστικά βοηθήματά σας.

## Αξιολογήσεις


Εάν έχετε ενεργοποιήσει το Insights, μπορείτε να μοιραστείτε σχόλια σχετικά με την εμπειρία ακοής σας με τον ιατρό σας. Αν συμμετέχετε, θα δείτε ένα εικονίδιο με χαρούμενο πρόσωπο στη δεξιά πλευρά της αρχικής οθόνης.

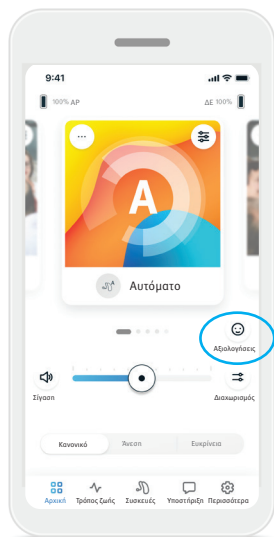


1. Πατήστε στο  χαμογελαστό εικονίδιο.

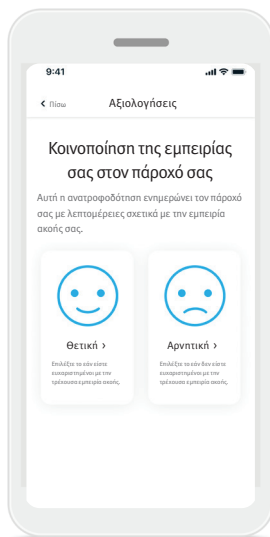

2. Επιλέξτε **θετική** αν είστε ικανοποιημένοι ή **αρνητική** αν δεν είστε ικανοποιημένοι.

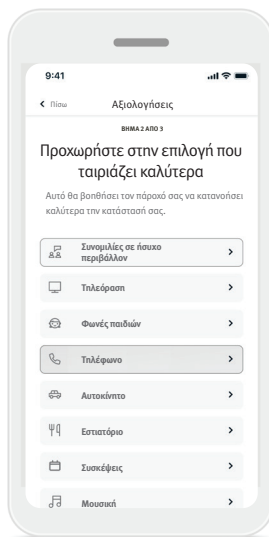

3. Επιλέξτε την κατάσταση που ταιριάζει περισσότερο με αυτή στην οποία βρίσκεστε αυτή τη στιγμή.

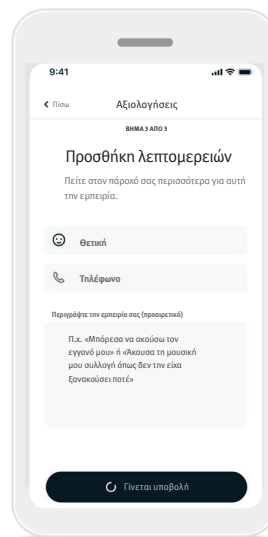


4. Δείτε μια περίληψη των σχολίων σας και γράψτε περισσότερα σχόλια (προαιρετικά). Πατήστε το κουμπί **Υποβολή** για να υποβάλετε τα σχόλιά σας στον ακοοπροθητιστή σας.


## Προαιρετικά προγράμματα

Επιλέξτε μέσα από μια λίστα προκαθορισμένων προγραμμάτων προκειμένου να εξατομικεύσετε τα ακουστικά βοηθήματά σας για συγκεκριμένες καταστάσεις. Τα διαθέσιμα Προαιρετικά προγράμματα ποικίλλουν ανάλογα με το επίπεδο τεχνολογίας των ακουστικών βοηθημάτων σας.

- Εστιατόριο
- Τηλεόραση
- Εξωτερικός χώρος
- Καφέ
- Ζωντανή μουσική
- 36ο αυτοκίνητο / Συγκοινωνίες
- Πάρτι

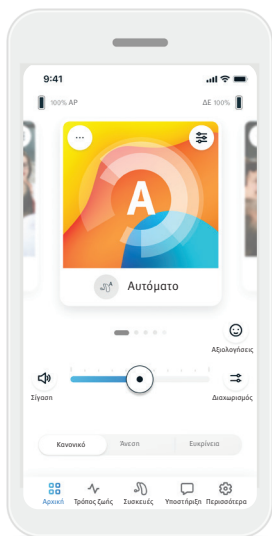

1. Μεταβείτε στην καρτέλα **Αρχική**.

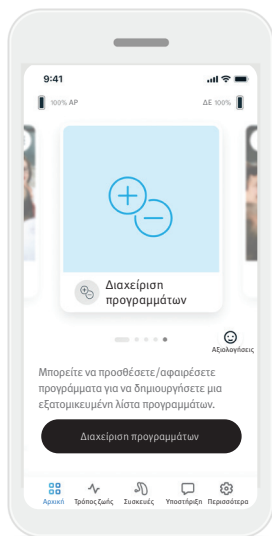

2. Σαρώστε αριστερά ή δεξιά μέχρι να δείτε την εικόνα / το εικονίδιο Διαχείρισης προγραμμάτων. Πατήστε το κουμπί **Διαχείριση προγραμμάτων**.




3. Για γρήγορη προσθήκη ενός προαιρετικού προγράμματος, πατήστε το **σύμβολο συν (+)**.



4. Πατήστε το **σύμβολο μείον (-)** για να αφαιρέσετε το προαιρετικό πρόγραμμα από τη λίστα προγραμμάτων.


5. Πατήστε το **πλακίδιο προγράμματος** για προεπισκόπηση του προγράμματος.

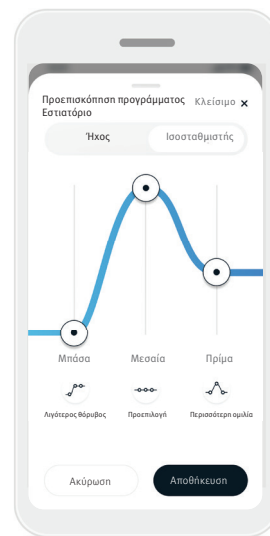

6. Αν πατήσετε το **πλακίδιο προγράμματος**, θα μεταφερθείτε στην οθόνη προεπισκόπησης του προγράμματος. Θα εμφανιστεί η οθόνη προεπισκόπησης προγράμματος. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να πατήσετε **Αποθήκευση** για προσθήκη του προαιρετικού προγράμματος στη λίστα προγραμμάτων.

## Ρυθμίσεις προγράμματος

Μπορεί να υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες προσαρμογές ανάλογα με το τρέχον επιλεγμένο πρόγραμμα, τη διαμόρφωση του ακουστικού βοηθήματός σας και τις συνδεδεμένες πηγές ήχου.

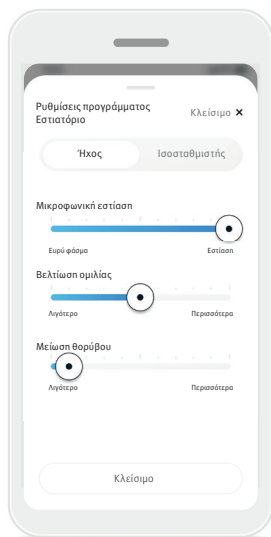


### Συσκευή ανακούφισης από εμβοές (tinnitus masker)

Αν ο ακοοπροθετιστής σας έχει ενεργοποιήσει τη συσκευή ανακούφισης από εμβοές, θα έχετε την επιλογή να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της συσκευής.

### Εξισορρόπηση

Αν χρησιμοποιείτε εξωτερική συσκευή μετάδοσης (π.χ. TV Connector, μουσική), μπορείτε να ρυθμίσετε την εστίαση ώστε να ακούτε περισσότερο το μεταδιδόμενο σήμα ή, αντίθετα, περισσότερο τον ήχο του γύρω περιβάλλοντος.

### Ρυθμίσεις προγραμμάτων

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε επιπλέον ρυθμίσεις απευθείας από την Αρχική οθόνη πατώντας το κουμπί **προηγμένων χαρακτηριστικών** (  ) στην επάνω δεξιά γωνία του πλακιδίου προγράμματος για να δείτε τις πιο προηγμένες ρυθμίσεις.

### Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το στοιχείο ελέγχου **Μικροφωνική εστίαση** ώστε να εστιάζετε περισσότερο σε ήχους που έρχονται από την κατεύθυνση όπου έχετε στραφεί ή να ακούτε εξίσου προς όλες τις κατευθύνσεις.

Το στοιχείο ελέγχου **Βελτίωση ομιλίας** σας επιτρέπει να βελτιώσετε ή να μειώσετε την ομιλία ώστε να επιτύχετε το επιθυμητό επίπεδο άνεσης.


Το στοιχείο ελέγχου **Μείωση θορύβου** σας επιτρέπει να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο θορύβου ώστε να επιτύχετε το επιθυμητό επίπεδο άνεσης.

### Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή (equalizer)


Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του **Ισοσταθμιστή**.

## Εξατομίκευση προγράμματος


Η εφαρμογή Remote Plus σας επιτρέπει να αλλάζετε τα ονόματα των προγραμμάτων, ώστε να σημαίνουν κάτι εξατομικευμένο για εσάς. Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα οποιουδήποτε προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και των προαιρετικών. Για να αλλάξετε όνομα προγράμματος:

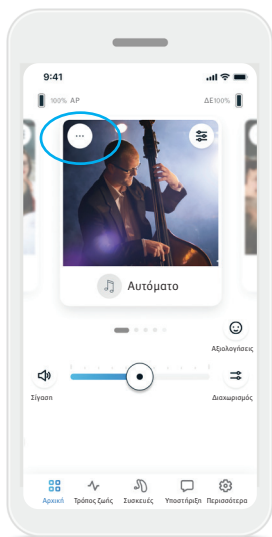

1. Πατήστε τις **ρυθμίσεις προγράμματος (...)**, που βρίσκονται στην επάνω αριστερή γωνία της εικόνας (ή του εικονιδίου) του προγράμματος.

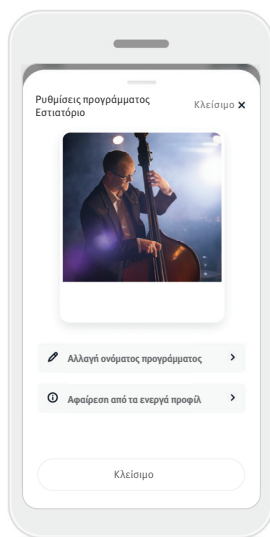


2. Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων προγράμματος.  
3. Πατήστε την επιλογή **Αλλαγή ονόματος προγράμματος**.

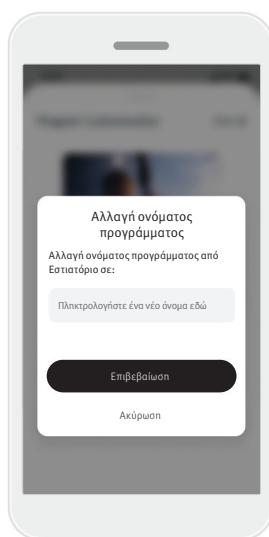

4. Πληκτρολογήστε το επιθυμητό όνομα προγράμματος στο πλαίσιο κειμένου και πατήστε **Επιβεβαίωση**.


## Καρτέλα Αρχική – Κλασική λειτουργία

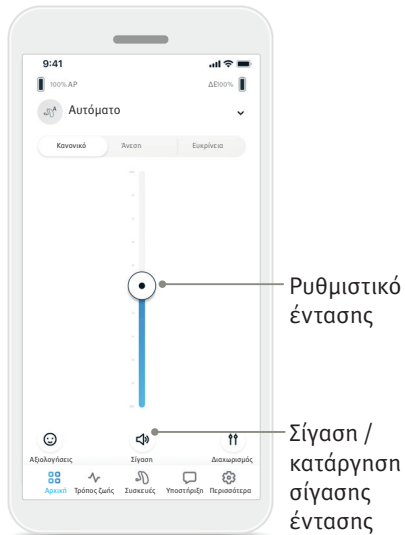

### Ρύθμιση ήχου ακουστικών βοηθημάτων

Μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση στο ακουστικό βοήθημα και για τα δύο αυτιά.


Πατήστε το κουμπί **Σίγαση** (🔇) κάτω από το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε τη σίγαση στα ακουστικά βοηθήματα.

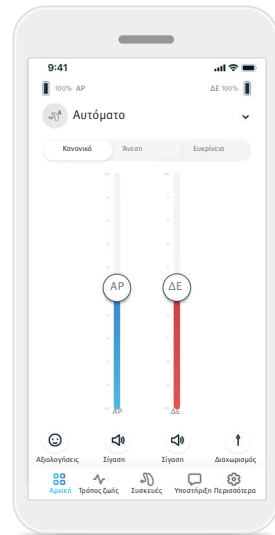

### Διαχωρισμός εντάσεων

Πατήστε το κουμπί **Διαχωρισμός εντάσεων** (🔊) αν θέλετε να ελεγχετε την ένταση κάθε ακουστικού βοηθήματος ξεχωριστά.


Αλλάξτε την ένταση χρησιμοποιώντας τα ρυθμιστικά έντασης. Πατήστε το κουμπί **κοινής έντασης** (🔊) αν θέλετε να χρησιμοποιείτε το ίδιο ρυθμιστικό και για τα δύο βοηθήματα ταυτόχρονα.

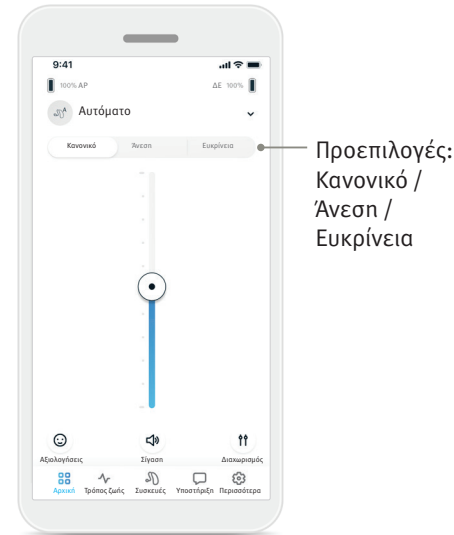

### Ενεργοποίηση προεπιλογών – Άνεση και Ευκρίνεια\*

Για το Αυτόματο πρόγραμμα, μπορείτε να επιλέξετε **Ευκρίνεια**, **Άνεση** ή **Κανονικό**. Η επιλογή **Ευκρίνεια** βελτιώνει την ομιλία, ενώ η επιλογή **Άνεση** μειώνει τον θόρυβο και βελτιώνει τη συνολική άνεση της ακρόασης. Οι επιλογές **Ευκρίνεια** και **Άνεση** δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, άρα και να βρίσκονται ταυτόχρονα σε κατάσταση ενεργοποίησης. Το **Κανονικό** είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

\* Αυτό το χαρακτηριστικό δεν υποστηρίζεται από όλα τα μοντέλα ακουστικών βοηθημάτων.

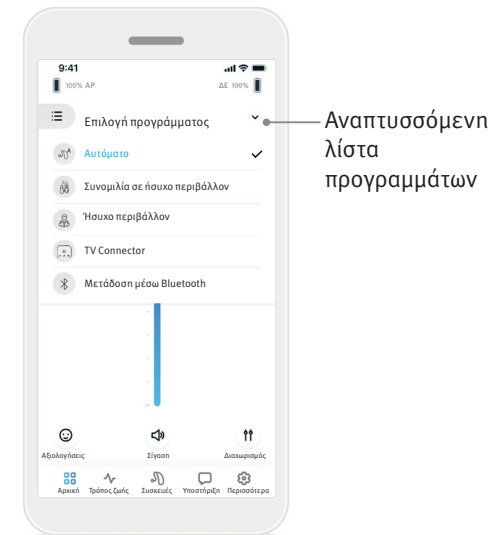


### Αλλαγή προγραμμάτων στα ακουστικά βοηθήματα


Πατήστε το **βέλος** που βρίσκεται δίπλα στο όνομα της τρέχουσας επιλογής προγράμματος για να δείτε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα (π.χ. TV Connector).

## Αξιολογήσεις


Όταν είναι ενεργοποιημένα τα Insights και οι Αξιολογήσεις, μπορείτε να κοινοποιήσετε σχόλια σχετικά με την εμπειρία ακοής σας στον κλινικό σας ιατρό. Όταν τα έχετε ενεργοποιήσει, θα δείτε ένα εικονίδιο με χαρούμενο πρόσωπο στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.

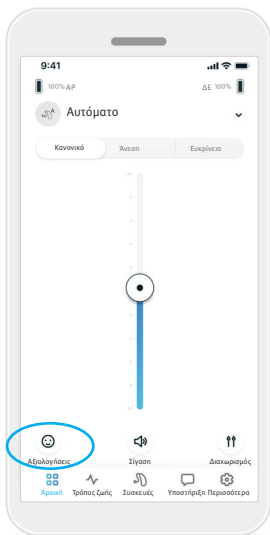


1. Πατήστε το χαμογελαστό εικονίδιο (👍).

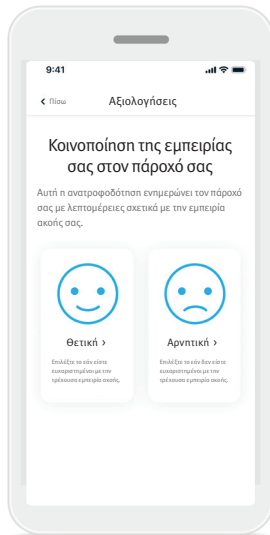

2. Επιλέξτε θετική αν είστε ικανοποιημένοι ή αρνητική αν δεν είστε ικανοποιημένοι.

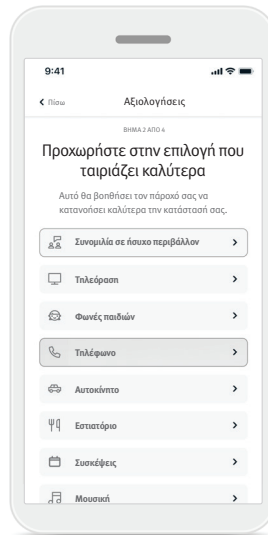


3. Επιλέξτε την κατάσταση που ταιριάζει περισσότερο με αυτή στην οποία βρίσκεστε αυτή τη στιγμή.

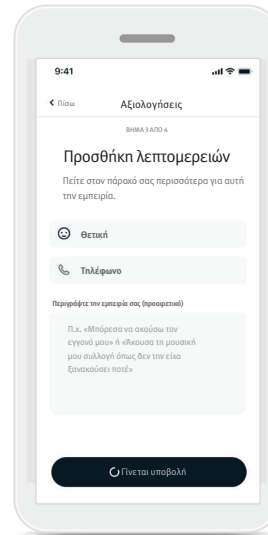

4. Δείτε μια περίληψη των σχολίων σας και γράψτε περισσότερα σχόλια (προαιρετικά). Πατήστε το κουμπί **Υποβολή** για να υποβάλετε τα σχόλιά σας στον ακοοπροθητιστή σας.

## Καρτέλα Τρόπος ζωής

⚠ Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα προορίζονται μόνο για σκοπούς εκπαίδευσης και πληροφόρησης. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην ενότητα Τρόπος ζωής ως υποκατάστατο ή στη θέση επαγγελματικής ιατρικής γνωμάτευσης. Αν έχετε απορίες σχετικά με την υγεία σας ή προτού αρχίσετε πρόγραμμα σωματικής άσκησης, θα πρέπει πάντα να συμβουλευτείτε γιατρό ή άλλον επαγγελματία υγείας.

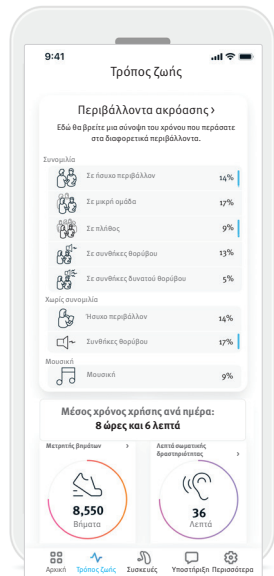


- **Περιβάλλοντα ακρόασης**  
Σε αυτήν την ενότητα, παρέχεται μια σύνοψη του χρόνου που περάσατε στα διάφορα περιβάλλοντα, όπως αυτά ανιχνεύτηκαν από τα ακουστικά βοηθήματά σας.
- **Μέσος χρόνος χρήσης**  
Πρόκειται για το διάστημα που φορέσατε, κατά μέσο όρο, τα ακουστικά βοηθήματά σας κάθε μέρα.
- **Μετρητής βημάτων**  
Ο Μετρητής βημάτων\* εμφανίζει τον αριθμό βημάτων που κάνατε εντός της ημέρας, όπως αυτά μετρήθηκαν από το επιταχυνσιόμετρο που διαθέτουν τα ακουστικά βοηθήματά σας.
- **Λεπτά σωματικής δραστηριότητας**  
Τα λεπτά σωματικής δραστηριότητας είναι τα λεπτά που περάσατε κάνοντας φυσική άσκηση εντός της ημέρας, π.χ. περπάτημα, τρέξιμο ή παρόμοια μέτριας έως μεγάλης έντασης δραστηριότητα, ενώ φορούσατε τα ακουστικά βοηθήματά σας.

Η καρτέλα **Τρόπος ζωής** σας μεταφέρει σε μια οθόνη με δυνατότητα κύλισης, όπου μπορείτε να δείτε τα δεδομένα τρόπου ζωής σας όπως ανιχνεύτηκαν από τα ακουστικά βοηθήματά σας. Μπορείτε να δείτε τον χρόνο χρήση του ακουστικού βοηθήματος, πληροφορίες σχετικά με τα περιβάλλοντα ακρόασης όπου βρεθήκατε, καθώς και δεδομένα που αφορούν τη σωματική άσκηση.

\* Αυτό το χαρακτηριστικό δεν υποστηρίζεται από όλα τα μοντέλα ακουστικών βοηθημάτων.

## Καρτέλα Συσκευές




Στην καρτέλα Συσκευές μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των ακουστικών βοηθημάτων σας.

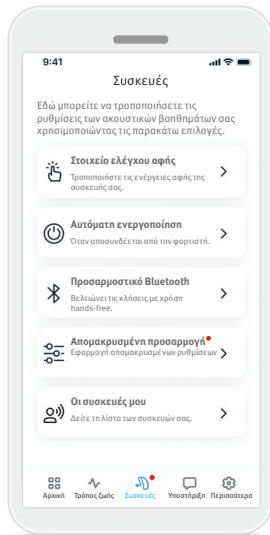

- **Στοιχείο ελέγχου αφής**  
Σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα, υπάρχει ενσωματωμένος αισθητήρας που επιτρέπει τον έλεγχο ορισμένων λειτουργιών του ακουστικού βοηθήματος με κάποιο στοιχείο ελέγχου αφής. Ανατρέξτε στη σελίδα 14.
- **Αυτόματη ενεργοποίηση**  
Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε τα ακουστικά βοηθήματα να ενεργοποιούνται αυτόματα όταν τα αποσυνδέετε από τον φορτιστή.
- **Προσαρμοστικό Bluetooth®**  
Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ποιότητα του ήχου κατά τη διάρκεια κλήσεων, η απενεργοποίηση αυτού του χαρακτηριστικού ίσως βελτιώσει την εμπειρία σας.
- **Απομακρυσμένη προσαρμογή**  
Όταν ενεργοποιούνται τα Insights, θα έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push με ρυθμίσεις για τα ακουστικά βοηθήματά σας, τις οποίες έχει στείλει ο ακοοπροσθετιστής σας.
- **Οι συσκευές μου**  
Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης με την εφαρμογή, μπορείτε να επιλέξετε [Κατάργηση συσκευών](#) και να δοκιμάσετε να τις συζεύξετε ξανά. Αν θέλετε να συνδέσετε ένα άλλο ζευγάρι ακουστικά βοηθήματα με την εφαρμογή, τότε πρέπει πρώτα να καταργήσετε τα ήδη συνδεδεμένα ακουστικά βοηθήματα. Στη συνέχεια, μπορείτε να συζεύξετε τις νέες συσκευές.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η κατάργηση συσκευών καταργεί τη σύνδεση μεταξύ των ακουστικών βοηθημάτων σας και της εφαρμογής.

## Στοιχείο ελέγχου αφής

Εάν τα ακουστικά βοηθήματά σας διαθέτουν στοιχείο ελέγχου αφής, μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο τα ακουστικά βοηθήματά σας ανταποκρίνονται στα διπλά πατήματα. Σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα, υπάρχει ενσωματωμένος αισθητήρας που επιτρέπει τον έλεγχο ορισμένων λειτουργιών του ακουστικού βοηθήματος με κάποιο στοιχείο ελέγχου αφής. Μπορείτε να εξατομικεύσετε την ενέργεια που εκτελείται και την ευαισθησία του στοιχείου ελέγχου αφής ως εξής:

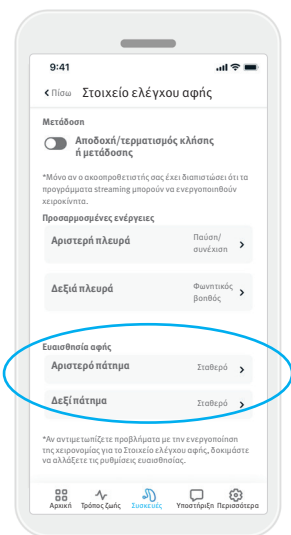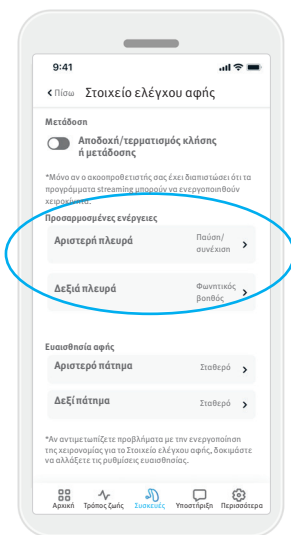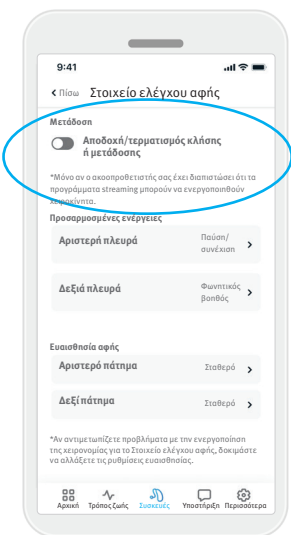

### Μετάδοση

Αποδοχή/τερματισμός κλήσης ή μετάδοσης – ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε τη δυνατότητα αποδοχής/τερματισμού κλήσης ή σύνδεσης με μια συσκευή μετάδοσης (π.χ. TV Connector) με διπλό πάτημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου αφής για να συνδεθείτε σε μια συσκευή μετάδοσης μόνο αν ο ακοοπροθετιστής σας έχει ρυθμίσει τα ακουστικά βοηθήματα για χειροκίνητη σύνδεση.

### Προσαρμοσμένες ενέργειες

(διαμορφωμένες ξεχωριστά για το αριστερό και το δεξί ακουστικό βοήθημα):

- Παύση/συνέχιση πολυμέσων: με διπλό πάτημα, γίνεται παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής πολυμέσων κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.
- Φωνητικός βοηθός: με διπλό πάτημα, ενεργοποιείται ο φωνητικός βοηθός στο smartphone σας.
- Απενεργοποίηση: με το διπλό πάτημα δεν εκτελείται καμία ενέργεια.




### Ευαισθησία αφής

(διαμορφώνεται ξεχωριστά για το αριστερό και το δεξί ακουστικό βοήθημα):

- Ήπια: η πλέον ευαίσθητη ρύθμιση.
- Κανονική: η προεπιλεγμένη ευαισθησία.
- Σταθερή: η λιγότερο ευαίσθητη ρύθμιση.

## Απομακρυσμένη προσαρμογή

Όταν ενεργοποιούνται τα Insights, θα έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push με ρυθμίσεις για τα ακουστικά βοηθήματά σας, τις οποίες έχει στείλει ο ακοοπροσθετιστής σας.

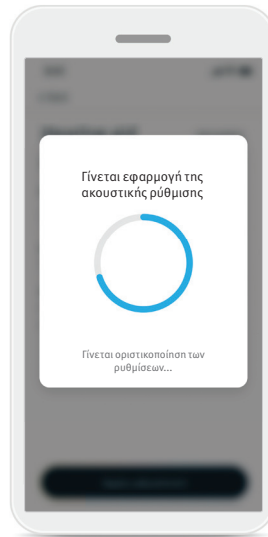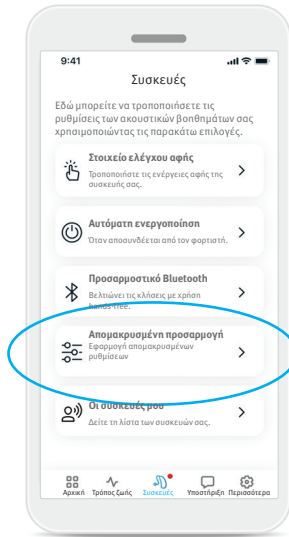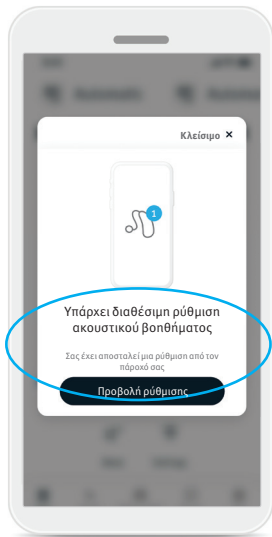

1. Λαμβάνετε ένα προσωποποιημένο μήνυμα από τον ακοοπροσθετιστή σας. Πατήστε **Προβολή ρύθμισης** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση.


2. Ή ανοίξετε την εφαρμογή Remote Plus και μεταβείτε στο **Συσκευές > Απομακρυσμένη προσαρμογή**.

3. Επιλέξτε τη ρύθμιση, πατήστε **Εφαρμογή ρύθμισης** και ακολουθήστε τις οδηγίες για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.

4. Οι ρυθμίσεις πλέον εφαρμόζονται στα ακουστικά βοηθήματά σας. Εάν προτιμάτε μια άλλη ρύθμιση, μπορείτε να επιλέξετε τη διαθέσιμη ρύθμιση και να την εφαρμόσετε στα ακουστικά βοηθήματά σας.

## Καρτέλα Υποστήριξη


Στην καρτέλα **Υποστήριξη** βρίσκετε πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά βοηθήματά σας.

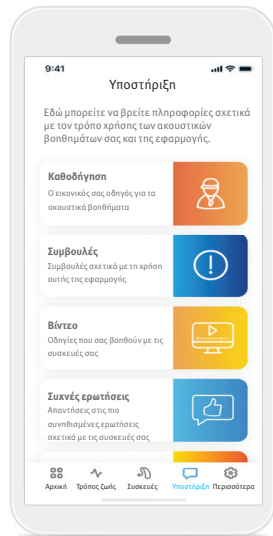

- Πρόσβαση στα μηνύματα Καθοδήγησης
- Εύρεση συμβουλών για χρήση της εφαρμογής Remote Plus
- Παρακολούθηση βίντεο οδηγιών για να σας βοηθήσουν με τις συσκευές σας
- Περιήγηση στις Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για απαντήσεις στις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις σχετικά με τις συσκευές σας
- Μάθετε σχετικά με άλλες υπηρεσίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τις συσκευές σας

## Καρτέλα Περισσότερα

Στην καρτέλα **Περισσότερα** μπορείτε να βρείτε επιπλέον ρυθμίσεις για την εφαρμογή, καθώς και τις νομικές πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή.

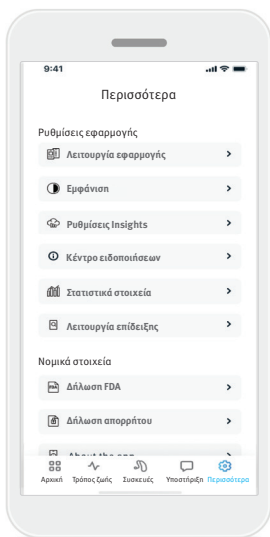

### Λειτουργία εφαρμογής

Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ των δύο λειτουργιών της **Αρχικής** οθόνης της εφαρμογής: Προηγμένη λειτουργία και Κλασική λειτουργία. Η **Προηγμένη** λειτουργία είναι ιδανική για χρήστες που θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε προηγμένα χαρακτηριστικά και επιλογές προσαρμογής. Η **Κλασική** λειτουργία είναι ιδανική για χρήστες που επιθυμούν πρόσβαση σε βασικά χαρακτηριστικά και επιλογές. Αυτή η λειτουργία συνιστάται για χρήστες που προτιμούν μια απλούστερη εμπειρία.

### Ρυθμίσεις Insights

Όλα τα χαρακτηριστικά Insights είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή. Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μεμονωμένα χαρακτηριστικά ή να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε εξ ολοκλήρου τα Insights. Η απενεργοποίηση θα διαγράψει όλα τα δεδομένα Insights που μεταφορτώθηκαν προηγουμένως στο cloud της Sonona και θα απενεργοποιήσει όλα τα χαρακτηριστικά Insights, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων και των απομακρυσμένων ρυθμίσεων Καθοδήγησης.

### Κέντρο ειδοποιήσεων

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την Καθοδήγηση. Τα μηνύματα Καθοδήγησης θα παραμείνουν προσβάσιμα από την καρτέλα Υποστήριξης όταν οι ειδοποιήσεις είναι απενεργοποιημένες.

### Εμφάνιση

#### Εικόνες προγραμμάτων

Πατήστε το κουμπί εναλλαγής για να επιλέξετε μεταξύ εικόνων ή εικονιδίων των προγραμμάτων της εφαρμογής.

Επιλέξτε εικόνες αν προτιμάτε την πιο ζωντανή και πολύχρωμη προβολή των εικόνων των προγραμμάτων.

Επιλέξτε εικονίδια αν προτιμάτε τη λιγότερο πολύχρωμη προβολή των εικονιδίων των προγραμμάτων.

#### Συνεργασία με την Εμφάνιση Τηλεφώνου

Αντιστοιχίστε αυτόματα τη ρύθμιση φωτεινής ή σκοτεινής λειτουργίας του τηλεφώνου σας.

Η απενεργοποίηση αυτού σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χειροκίνητα.

### Στατιστικά στοιχεία

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την κοινοποίηση των δεδομένων χρήσης. Παρέχοντας δεδομένα χρήσης, μας δίνετε τη δυνατότητα να μαθαίνουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να πουλήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους. Αυτό αναφέρεται και στη Δήλωση απορρήτου μας.

### Λειτουργία επίδειξης

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία επίδειξης. Η λειτουργία επίδειξης σας επιτρέπει να δοκιμάσετε την εφαρμογή χωρίς σύνδεση με ακουστικές συσκευές.

### Νομικές πληροφορίες

Αποκτήστε πρόσβαση σε νομικές και ρυθμιστικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες. Θα εμφανίζεται αυτόματα στη γλώσσα του λειτουργικού συστήματος του τηλεφώνου. Εάν η γλώσσα του τηλεφώνου δεν υποστηρίζεται, η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι τα αγγλικά.

## Πληροφορίες συμμόρφωσης

### Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν η Sonona AG δηλώνει ότι αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Οι οδηγίες χρήσεως σε όλες τις εφαρμόσιμες γλώσσες σε ηλεκτρονική μορφή είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας [www.unitron.com/appguide](http://www.unitron.com/appguide).

Εναλλακτικά, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις οδηγίες χρήσεως απευθείας από την εφαρμογή κινούμενοι στο τμήμα «Περισσότερα», επιλέγοντας «Σχετικά με την εφαρμογή», και πατώντας πάνω στον σύνδεσμο στο κάτω μέρος για να φτάσετε στο Βοήθεια και Υποστήριξη σε εξωτερικό παράθυρο φυλλομετρητή. Από εκεί μπορείτε να κινηθείτε στο Υποστήριξη / Οδηγίες Χρήσεως και κυλίσετε προς τα κάτω στο τμήμα για τη Εφαρμογή.

### Περιγραφή συμβόλων



Με το σύμβολο CE, η Sonona AG δηλώνει ότι αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Οι αριθμοί που ακολουθούν το σύμβολο CE αντιστοιχούν στον κωδικό των πιστοποιημένων ιδρυμάτων που συμμετείχαν στη διαβούλευση σύμφωνα με τον προαναφερόμενο κανονισμό.



Όνομα, διεύθυνση

Υποδεικνύει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, όπως ορίζεται στον Κανονισμό για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΕΕ) 2017/745.



Υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν.



Υποδεικνύει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η EC REP είναι επίσης ο εισαγωγέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Υποδεικνύει τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή, ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί το ιατροτεχνολογικό προϊόν.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι είναι σημαντικό ο χρήστης να διαβάσει και να λάβει υπόψη του τις σχετικές πληροφορίες του παρόντος οδηγού χρήσης.



Ένδειξη ότι διατίθενται οδηγίες χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι είναι σημαντικό ο χρήστης να δώσει προσοχή στις σχετικές προειδοποιητικές επισημάνσεις του παρόντος οδηγού χρήσης.



Σημαντικές πληροφορίες για τον χειρισμό και την ασφάλεια του προϊόντος.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth® SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από τη Sonona AG γίνεται κατόπιν άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.



Σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων.

## Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Διαβάστε τις σχετικές πληροφορίες ασφαλείας στις ακόλουθες σελίδες πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.

### Προβλεπόμενη χρήση

Η προβλεπόμενη χρήση της εφαρμογής είναι η επιλογή, ρύθμιση και αποθήκευση των υφιστάμενων λειτουργιών του ακουστικού βοηθήματος, η πρόσβαση σε πληροφορίες κατάστασης και η επικοινωνία μεταξύ του τελικού χρήστη και του ακοοπροθετιστή, ασύρματα και με οπτικοποιημένο τρόπο.

### Προβλεπόμενος πληθυσμός ασθενών

Ο προοριζόμενος πληθυσμός ασθενών για αυτή τη λύση είναι οι τελικοί χρήστες (απλοί χρήστες) με μονόπλευρη και αμφοτερόπλευρη, ήπια έως βαθιά απώλεια ακοής, που φορούν συμβατό ακουστικό βοήθημα και που εκτιμούν την ευκολία, όπως τη δυνατότητα να ελέγχουν τα ακουστικά τους βοηθήματα από τα smartphone τους. Η εφαρμογή προορίζεται για χρήστες 17 ετών και άνω. Το χαρακτηριστικό ανακούφισης εμβοών προορίζεται για ασθενείς με χρόνιες εμβοές ηλικίας από 18 ετών.

### Προβλεπόμενος χρήστης

Προβλεπόμενος χρήστης είναι ένα άτομο με απώλεια ακοής που χρησιμοποιεί συμβατή συσκευή.

### Ενδείξεις

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι ενδείξεις δεν προέρχονται από την εφαρμογή, αλλά από τα συμβατά ακουστικά βοηθήματα. Οι γενικές κλινικές ενδείξεις για τη χρήση ακουστικών βοηθημάτων και το χαρακτηριστικό ανακούφισης εμβοών είναι οι εξής:

- Απώλεια ακοής
  - Μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη
  - Αγωγιμότητας, νευροαισθητήρια ή μικτή
  - Ήπια έως σοβαρή

- Παρουσία χρόνιων εμβοών (ισχύει μόνο για συσκευές που παρέχουν το χαρακτηριστικό Εμβοές)

### Αντενδείξεις

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι αντενδείξεις δεν προέρχονται από την εφαρμογή, αλλά από τα συμβατά ακουστικά βοηθήματα. Οι γενικές κλινικές αντενδείξεις για τη χρήση ακουστικών βοηθημάτων και το χαρακτηριστικό ανακούφισης εμβοών είναι οι εξής:

- Η απώλεια ακοής δεν βρίσκεται στο εύρος προσαρμογής του ακουστικού βοηθήματος (δηλ. απολαβή, απόκριση συχνότητας)
- Οξείες εμβοές
- Παραμόρφωση του αυτιού (δηλ., κλειστός ακουστικός πόρος, απουσία του ωτίου)
- Νευρική απώλεια ακοής (ρετρο-κοχλιακές παθολογίες, όπως απουσία ακουστικού νεύρου/μη βιώσιμο ακουστικό νεύρο)

Τα κύρια κριτήρια για την παραπομπή ενός ασθενούς για ιατρική ή άλλη εξειδικευμένη γνώμη ή/και θεραπεία είναι τα ακόλουθα:

- Ορατή συγγενής ή τραυματική παραμόρφωση του αυτιού,
- Ιστορικό ενεργού παροχέτευσης από το αυτί εντός των προηγούμενων 90 ημερών,
- Ιστορικό αιφνίδιας ή ταχέως εξελισσόμενης απώλειας ακοής στο ένα ή και στα δύο αυτιά εντός των προηγούμενων 90 ημερών,
- Οξεία ή χρόνια ζάλη,
- Ηχομετρική διαφορά αέρινης-οστέινης αγωγής ίση με ή μεγαλύτερη από 15 dB στα 500 Hz, 1.000 Hz και 2.000 Hz,
- Ορατή ένδειξη σημαντικής συσσώρευσης κυψελίδας ή ξένου σώματος στον ακουστικό πόρο,

- Πόνος ή δυσφορία στο αυτί,
- Μη φυσιολογική εμφάνιση του τυμπάνου και του ακουστικού πόρου όπως:
  - Φλεγμονή του εξωτερικού ακουστικού πόρου
  - Διάτρηση τυμπάνου
  - Άλλες ανωμαλίες που ο ακοοπροθετιστής πιστεύει ότι προκαλούν ιατρική ανησυχία

Ο ακοοπροθετιστής μπορεί να αποφασίσει ότι η παραπομπή δεν είναι κατάλληλη ή προς το συμφέρον του ασθενούς όταν ισχύουν τα εξής:

- Όταν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι η κατάσταση έχει διερευνηθεί πλήρως από ειδικό ιατρό και έχει παρασχεθεί οποιαδήποτε πιθανή θεραπεία.
- Η κατάσταση δεν έχει επιδεινωθεί ή αλλάξει σημαντικά από την προηγούμενη έρευνα ή/και θεραπεία.
- Εάν ο ασθενής έχει δώσει την τεκμηριωμένη και επαρκή απόφασή του να μην αποδεχθεί τη συμβουλή να ζητήσει ιατρική γνώμηση, επιτρέπεται να προχωρήσει στη σύσταση κατάλληλων συστημάτων ακουστικών βοηθημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
  - Η σύσταση δεν θα έχει δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία ή τη γενική ευημερία του ασθενούς.
  - Τα αρχεία επιβεβαιώνουν ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εκτιμήσεις σχετικά με το βέλτιστο συμφέρον του ασθενούς.

Εάν απαιτείται από τον νόμο, ο ασθενής υπογράφει δήλωση αποποίησης ευθυνών για να επιβεβαιώσει ότι η συμβουλή παραπομπής δεν έγινε αποδεκτή και ότι πρόκειται για τεκμηριωμένη απόφαση.

## Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε τις σχετικές πληροφορίες ασφαλείας στις ακόλουθες σελίδες πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.

### Κλινικό όφελος

Η ίδια η εφαρμογή δεν παρέχει άμεσο κλινικό όφελος στον τελικό χρήστη, παρέχει όμως άλλα οφέλη, τα οποία αφορούν κυρίως την ευκολία χρήσης. Τα κλινικά οφέλη παρέχονται αποκλειστικά από τα ακουστικά βοηθήματα. Η εφαρμογή παρέχει τα ακόλουθα οφέλη στους προβλεπόμενους χρήστες:

- Παροχή της δυνατότητας προσαρμογής και αποθήκευσης των ρυθμίσεων του ακουστικού βοηθήματος στις ατομικές ανάγκες, σε ένα περιορισμένο εύρος, όπως ορίζεται από την αρχική προσαρμογή, π.χ. για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ακουστικής άνεσης και της ικανοποίησης από τα ακουστικά βοηθήματα σε συγκεκριμένες καταστάσεις ακρόασης (π.χ. μειώνοντας την ένταση σε θορυβώδη περιβάλλοντα ακρόασης).

### Παρενέργειες

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι παρενέργειες δεν προέρχονται από την εφαρμογή, αλλά από τα συμβατά ακουστικά βοηθήματα. Φυσιολογικές παρενέργειες των ακουστικών βοηθημάτων, όπως εμβοές, ζάλνη, συσσώρευση κυψελίδας, υπερβολική πίεση, εφίδρωση ή υγρασία, φουσκάλες, φαγούρα ή/και εξανθήματα, απόφραξη ή πληρότητα, καθώς και οι συνέπειές τους, όπως πονοκέφαλος ή/και πόνος στο αυτί, μπορεί να επιλυθούν ή να μειωθούν από τον ακοοπροθετιστή σας.

Τα συμβατικά ακουστικά βοηθήματα έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν τους ασθενείς σε υψηλότερα επίπεδα έκθεσης στον ήχο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μετατοπίσεις του ορίου στο εύρος συχνοτήτων που επηρεάζεται από το ακουστικό τραύμα.

### Περιορισμοί χρήσης

Η χρήση της εφαρμογής περιορίζεται στις δυνατότητες των συμβατών συσκευών.

Κάθε σοβαρό περιστατικό που συνέβη σε σχέση με την εφαρμογή θα πρέπει να αναφέρεται στον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους διαμονής. Ως σοβαρό περιστατικό περιγράφεται οποιοδήποτε περιστατικό που οδήγησε, άμεσα ή έμμεσα, θα μπορούσε να έχει οδηγήσει ή μπορεί να οδηγήσει σε οποιοδήποτε από τα εξής:

- α. θάνατος ασθενούς, χρήστη ή άλλου προσώπου
  - β. προσωρινή ή μόνιμη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας ενός ασθενούς, χρήστη ή άλλου ατόμου
  - γ. σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία
- Για να αναφέρετε μια απροσδόκητη λειτουργία ή συμβάν, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή με έναν αντιπρόσωπο.

## Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε τις σχετικές πληροφορίες ασφαλείας στις ακόλουθες σελίδες πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.

### Ειδοποίηση ασφαλείας


Τα δεδομένα ασθενών είναι προσωπικά δεδομένα και η προστασία τους είναι σημαντική:


- Βεβαιωθείτε ότι τα smartphone είναι ενημερωμένα με τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος.
- Ενεργοποιήστε την αυτόματη ενημέρωση.
- Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση της εφαρμογής που έχετε εγκαταστήσει είναι ενημερωμένη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες εφαρμογές Sonova από επίσημα καταστήματα με τα ακουστικά βοηθήματά σας.
- Φροντίζετε να χρησιμοποιείτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και να κρατάτε τα διαπιστευτήρια μυστικά.
- Κλειδώνετε το τηλέφωνο με PIN ή/και βιομετρικά στοιχεία (π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα, πρόσωπο) και ρυθμίστε το τηλέφωνο να κλειδώνει αυτόματα μετά από μερικά λεπτά αδράνειας.
- Βεβαιωθείτε ότι οι εγκατεστημένες εφαρμογές έχουν μόνο τα δικαιώματα που χρειάζονται.
- Αποφύγετε τη δημιουργία ζεύξης Bluetooth® με τα ακουστικά βοηθήματά σας σε δημόσιο χώρο. Αυτό οφείλεται στον κίνδυνο ανεπιθύμητων παρεμβάσεων από τρίτους. Σας συνιστούμε να δημιουργήσετε αυτήν τη σύζευξη Bluetooth® στο σπίτι.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τηλέφωνο με σπασμένο λειτουργικό σύστημα.  
Φροντίζετε να διατηρείτε τα δεδομένα ασφαλή ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι αυτή η λίστα είναι ενδεικτική.


- Κατά τη μεταφορά δεδομένων μέσω μη ασφαλών καναλιών, θα πρέπει να αποστέλλετε τα δεδομένα ανώνυμα ή κρυπτογραφημένα.
- Προστατεύετε τα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του smartphone σας όχι μόνο από την απώλεια δεδομένων αλλά και από κλοπή.
- Διαγράψτε όλα τα δεδομένα από ένα smartphone το οποίο δεν χρησιμοποιείται πλέον από εσάς ή πρόκειται να απορριφθεί.


### Συντήρηση λογισμικού

Παρακολουθούμε συνεχώς τα σχόλια από την αγορά. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την τελευταία έκδοση της εφαρμογής, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο του κατασκευαστή σας και/ή γράψτε σχόλια στο App Store ή στο Google Play Store.

-  Η αλλαγή ρύθμισης, π.χ. μείωση της έντασης, σίγαση των ακουστικών σας βοηθημάτων ή αύξηση της «Μείωσης θορύβου», μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους, όπως παραδείγματος χάριν ο θόρυβος στον δρόμο να μην ακούγεται πλέον.

-  Εάν τα ακουστικά βοηθήματα δεν ανταποκρίνονται στη συσκευή λόγω μιας ασυνήθιστης διαταραχής πεδίου, απομακρυνθείτε από το πεδίο διαταραχής. Ενεργοποιήστε το Bluetooth. Το Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για τη σύνδεση με τα ακουστικά βοηθήματά σας. Εάν τα ακουστικά βοηθήματα δεν ανταποκρίνονται, ελέγξτε αν τα ακουστικά βοηθήματα είναι ενεργοποιημένα και εάν η μπαταρία δεν είναι άδεια.

-  Διατίθενται οδηγίες στη διεύθυνση: [unitron.com/appguide](http://unitron.com/appguide) σε μορφή αρχείου PDF του Adobe® Acrobat®. Για να τις δείτε, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Adobe Acrobat Reader. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο [Adobe.com](http://Adobe.com) για λήψη.

-  Για να αποκτήσετε ένα δωρεάν έντυπο αντίγραφο των οδηγιών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Unitron. Το αντίτυπο θα σας αποσταλεί εντός 7 ημερών.



Sonova AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa, Ελβετία



Και εισαγωγέας για την Ευρωπαϊκή Ένωση:  
Sonova Deutschland GmbH  
Max-Eyth-Str. 20  
70736 Fellbach-Oeffingen, Γερμανία