

Unitron TrueFit 5.6

Uputstvo za upotrebu



Unitron TrueFit 5.6 softver za podešavanje će se u daljem tekstu navoditi kao „Unitron TrueFit“ ili kao „softver za podešavanje“.

A Sonova Brand

unitronTM

Sadržaj

Struktura i navigacija	3
Priprema slušnih instrumenata	5
Meni Client (Klijent)	5
Meni Instruments (Aparati)	6
Meni Fitting (Podešavanje)	8
Meni End Fitting (Kraj podešavanja)	10
Meni Insights (Uvidi)	12
Opcije prikaza krive	13
Glavni meni	13
Važne bezbednosne informacije	14
Informacije o usklađenosti i opis simbola	17
Sistemske zahteve	19

Struktura i navigacija

Navigacija softvera za podešavanje obično ide odozgo nadole i sleva nadesno.

Opcije glavnog menija

File (Datoteka).....	Import Client (Uvezi klijenta) Export Client (Izvezi klijenta) Print (Štampaj) Send Getting Started Email (Pošalji e-poruku s prvim koracima)	Software Updates (Ažuriranja softvera) Save (Sačuvaj) Close Session (Zatvori sesiju) Close Unitron TrueFit (Zatvori Unitron TrueFit)
Forms (Obrasci).....	Repair Form (Obrazac za popravku) Remake Form (Obrazac za prepravku) Loss & Damage Form (Obrazac za gubitak i oštećenje)	Online Order Forms (Onlajn obrasci za porudžbine) Online Repair Forms (Onlajn obrasci za popravku)
Hearing Instrument (Slušni aparat).....	Save (Sačuvaj) Test Mode (Režim testiranja) Verification Mode (Režim verifikacije) HI Update (Ažuriranje slušnog aparata) HI Repair / Reset (Popravka/resetovanje slušnog aparata)	Transfer Fitting (Prenos podešavanja) Delete Wireless Pairing (Izbriši bežično uparivanje)
Options (Opcije).....	Preferences (Željene postavke) iCube Configuration (iCube konfiguracija)	Accessory Firmware Update (Ažuriranje firmvera dodatka) Change uDirect 2 Language Pack (Promeni uDirect 2 jezički paket)
Help (Pomoć).....	Online Help & Support (Onlajn pomoć i podrška) User Guide (Uputstvo za upotrebu) Training Session (Sesija za obuku) Contact Us (Obratite nam se)	Unitron Website (Unitron veb-sajt) Support (Podrška) FDA Software Labeling (Označavanje softvera prema FDA (Samo SAD)) About DSL v5 (Informacije o DSL v5) About Unitron TrueFit (Informacije o sredstvu Unitron TrueFit)

Traka s alatkama

Traka s alatkama se nalazi u gornjem desnom uglu aplikacije. Funkcije ikona su prikazane u nastavku:



Okno za brzi prikaz

Okno za brzi prikaz se nalazi u gornjem desnom uglu i prikazuje informacije o statusu podešavanja slušnog aparata. Svaka kartica sadrži dodatne informacije o specifičnom odeljku i može se proširiti klikom na znak plus.


	Kartica Client (Klijent)	Pregled ključnih informacija o klijentu
	Kartica Connection (Povezivanje)	Status povezivanja slušnih instrumenata
	Kartica Alerts (Upozorenja)	Navodi sve poruke pomoći i upozorenja do kojih je došlo tokom trenutnog podešavanja.
	Kartica Client View (Prikaz klijenta)	Omogućava prikaz ekrana za klijente na drugom monitoru tokom upotrebe softvera za podešavanje

myUnitron Setup (myUnitron podešavanje)

Levo od trake s alatkama na glavnom meniju se nalazi veza koja vam omogućava da se prijavite na vaš myUnitron nalog. Kada se prijavite, vaše korisničko ime će se prikazati. Kliknite da biste se prijavili (softver će zapamtiti vaše korisničko ime).

Recalculate (Izračunaj ponovo)

Kliknite na dugme Recalculate (Izračunaj ponovo) u gornjem desnom uglu ekrana da biste videli sve promene na čekanju i opcije za ponovno izračunavanje. Podešavanje će se ponovo izračunati na osnovu podataka kao što su trenutni audiogram, formula podešavanja i akustika slušnog aparata. Podrazumevane opcije ponovnog izračunavanja se razlikuju u zavisnosti od promena na čekanju.

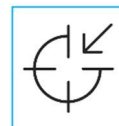

Dugme Recalculate (Izračunaj ponovo) će biti istaknuto kada je ponovno izračunavanje preporučeno tokom podešavanja.

Privremeno isključi/uključuje zvuk

Označava trenutni status slušnih instrumenata: privremeno



isključen ili uključen zvuk. Privremeno isključivanje/uključivanje zvuka se može izabrati pojedinačno za svako medicinsko sredstvo ili binauralno klikom na središnji deo dugmeta. Središnji deo dugmeta takođe prikazuje trenutno aktivno okruženje za slušne aparate.

Režim podešavanja

Režim podešavanja se može promeniti klikom na dugme i biranjem željenog podešavanja iz opadajućeg polja. Kada se unesu informacije i ako je starost 18 godina ili manje, softver za podešavanje će od vas automatski zatražiti da izaberete odgovarajuću opciju režima podešavanja u iskaćućem prozoru.

Podrazumevane postavke režima podešavanja se mogu podesiti u [Options](#) (Opcije) > [Preferences](#) (Željene postavke) > [Fitting Session](#) (Sesija podešavanja) > [Pediatric Modes](#) (Pedijatrijski režimi).

Priprema slušnih instrumenata

Noahlink Wireless™

Uključite slušne aparate tako što ćete ubaciti baterije i zatvoriti vrata odeljka za bateriju ili, ako su slušni aparati punjivi, pritisnite i držite donji deo dugmeta na svakom slušnom aparatu 3 sekunde dok se indikatorska lampica ne promeni u postojanu zelenu boju. Ovo će takođe prebaciti jedinice u režim uparivanja koji traje oko 3 minuta.

Ako se povezujete sa slušnim aparatima koji nisu sačuvani za trenutnu sesiju, slušni aparati moraju biti u režimu uparivanja. Ako se povezujete sa slušnim aparatima koji su već sačuvani za trenutnu sesiju, slušni aparati ne moraju biti u režimu uparivanja.

NOAHlink™ / HI-PRO®

BTE/RIC: Otvorite vrata odeljka za bateriju i ubacite kabl za programiranje u port za programiranje. Povežite drugi kraj kabla sa NOAHlink ili HI-PRO.

ITE: Skinite vrata odeljka za bateriju i ubacite kabl za programiranje. Povežite drugi kraj kabla sa NOAHlink ili HI-PRO.

iCube II

Kada prvi put koristite iCube II, moraćete da konfigurišete uređaj za podešavanje. Izaberite [Options](#) (Opcije) > [iCube Configuration](#) (iCube konfiguracija) i sledite uputstva na ekranu. Ubacite baterije u slušne aparate i zatvorite vrata odeljka za bateriju. Postavite slušne aparate u iCube okovratnik na stolu ili postavite iCube II oko vrata vašeg klijenta i postavite slušne aparate na uši vašeg klijenta.

Meni Client (Klijent)

Informacije

Ovaj ekran prikazuje Client Summary (Sažetak klijenta), Session Summary (Sažetak sesije) i Accessories (Dodaci).

Audiogram

Kliknite na grafikon da biste dodali granične vrednosti audiogramu ili kliknite desnim tasterom za dodatne opcije. Pretvarač za audiometriju se može izabrati iz padajućeg menija. Pored toga, izmerene informacije o podudaranju tinitusa se mogu uneti u donjem delu ekrana Audiogram.

RECD

Ovaj ekran pruža opciju za unos vrednosti razlike između real-ear i spojnice (RECD) ili uvoz ovih vrednosti ako već postoje. Ako RECD vrednosti nisu izmerene, koristiće se prosečne vrednosti za starost koje će

generisati izabrana formula podešavanja. Kliknite na dugme **Enter RECD** (Unesi RECD) da biste uneli RECD vrednosti.

REUG

Ovaj ekran pruža opciju za unos vrednosti pojačanja real-ear bez pomagala (REUG) ili uvoz ovih vrednosti ako već postoje. Ako REUG vrednosti nisu izmerene, koristiće se prosečne vrednosti za starost koje će generisati izabrana formula podešavanja. Da biste popunili ekran REUG, unesite podatke za odgovarajuće uvo klikom na grafikon. Klikom desnim tasterom miša na grafikon se pruža opcija za uređivanje tačaka. Izaberite opciju **Use Entered** (Koristi uneto) da biste koristili REUG podatke koji su uneti u grafikon za ciljeve formule za izračunavanje ili **Use Average** (Koristi prosečne vrednosti) da biste koristili odgovarajuće prosečne REUG vrednosti.

Meni Instruments (Aparati)

Selection (Izbor)

Selection (Izbor) pruža opciju za detekciju ili simulaciju slušnih instrumenata. Za detekciju:

1. Izaberite željeni interfejs programiranja iz padajućeg menija.
2. Kliknite na dugme Detect (Detektuj) da biste izvršili detekciju. Postarajte se da slušni aparati budu pripremljeni za detekciju prema odeljku „Priprema slušnih aparata“ u ovom uputstvu.
3. U slučajevima kada se podaci u slušnom aparatu razlikuju od podataka koji su uskladišteni u softveru za podešavanje, sledite upite da biste izabrali podešavanja koja biste želeli da koristite.

First Fit (Prvo podešavanje)

Radni tok First Fit (Prvo podešavanje) se opcino prikazuje kada:

- Novi slušni aparati se podešavaju za novog klijenta prvi put
- Izaberete opciju Create New Fitting (Kreiraj novo podešavanje) na kraju sekvence detekcije.

Kada se tok posla pokrene, postoji do pet koraka kroz koje možete da prođete.

1. **Potvrđivanje tehnološkog nivoa (samo FLEX:TRIAL sredstva)**: Pregledajte razlike u funkcijama između trenutnog i drugih dostupnih tehnoloških nivoa. Kliknite na **Next** (Sledeće) da biste održali trenutni nivo. Ako želite da izvršite promenu, klikom na **Apply** (Primeni) ćete pokrenuti radni tok Change Technology Level (Promeni tehnološki nivo).
2. **Potvrđivanje informacija o klijentu**: Pregledajte datum rođenja, audiogram i iskustvo klijenta sa slušnim aparatom, tj. korišćenje prvi put ili dugoročni korisnik. Ako je potrebno da promenite datum rođenja ili informacije o audiogramu, izaberite **Cancel** (Otkazi) da biste izvršili te promene. Ovo će dovesti do isključivanja slušnih instrumenata i, nakon naknadne **detekcije**, radni tok First Fit (Prvo podešavanje) će ponovo biti pokrenut.
3. **Potvrđivanje akustike medicinskog sredstva**: Potvrdite podešavanja akustike medicinskog sredstva uz opciju promene vrednosti ako je potrebno.
4. **Potvrđivanje First Fit (Prvo podešavanje)**: Prvo podešavanje je izračunato i zvuk će automatski biti uključen na slušnim aparatima (postoji opcija za ponovno ručno privremeno isključivanja zvuka). Imate opciju da izaberete Fitting Formula (Formulu za podešavanje), podesite

Adaptation Manager (Menadžer adaptacije) i pokrenete radni tok Feedback Optimization (Optimizacija mikrofonijske).

5. **First Fit (Prvo podešavanje) završena:** Pruža brze veze za najčešće naknadne radnje u softveru za podešavanje.

Technology Change (Promena tehnologije)

Ovaj ekran pruža pristup funkciji FLEX™. Klikom na jednom od dugmadi za tehnološki nivo se pokreće radni tok Change Technology Level (Promeni tehnološki nivo). Sledite uputstva na ekranu da biste promenili tehnološki nivo povezanih slušnih instrumenata. Tok posla će pružiti sledeće opcije:

- **Prenos podešavanja:** Prenosi strukturu programa, frekventni opseg, akustiku, status automatskog menadžera adaptacijom i dodataka za slušne aparate u trenutnoj sesiji klijenta.
- **Kreiranje novog podešavanja:** Resetuje slušne aparate na preporučena podrazumevana podešavanja. Izaberite željenu opciju i nastavite korake u radnom toku.

Zapis podataka (data logging) u slušnim aparatima će biti izgubljen tokom ovog procesa.

Akustika

Konfigurirate stavke kao što su: spojnica, vent, zavojnica, cevčica, slušalica i tip zvučnika.

BTE i RIC slušni aparati

- Ako ste naručili olivu ili cShell sa IntelliVent, unesite kôd i softver za podešavanje će automatski koristiti optimalnu ventilaciju
- Za **BTE** izaberite Regular Tube (Standardna cevčica), Slim Tube (Tanka cevčica) ili Power Slim Tube (ako je primenljivo):
 - Za BTE sa Regular Tube (Standardna cevčica) (zavojnica), izaberite Ear Piece (Slušalica) i Vent size (Veličina otvora).
 - Za BTE sa Slim Tube (Tanka cevčica) ili Power Slim Tube (Power tanka cevčica) izaberite Ear Piece (Slušalica), Vent size (Veličina otvora) i Tubing Length (Dužina creva).
- Za **RIC** izaberite Receiver (Zvučnik), Ear Piece (Slušalica), Wire Length (Dužina žice) (opciono) i Dome Size (Veličina kupolice) (opciono)
 - Kod nekih proizvoda, softver za podešavanje automatski detektuje zvučnik tokom procesa detekcije. Pritisnite dugme Check (Provera) da biste ručno proverili da li je montirani zvučnik isti kao i onaj koji ste izabrali u softveru za podešavanje.

Custom - Slušni aparati po meri uva

Za slušne aparate po meri uva možete konfigurisati otvor (vent). Ako ste naručili proizvode rađene po meri uva sa IntelliVent, softver za podešavanje će automatski očitati kôd i koristiti optimalnu ventilaciju. Sa simuliranim podešavanjima možete izabrati tip školjke i zvučnika.

Accessories (Dodaci)

Ovaj ekran prikazuje dodatke koji su kompatibilni sa podešenim slušnim aparatima. Izaberite dodatak i kliknite na dugme **include in fitting** (Uključi u podešavanje) da biste uključili dodatak u podešavanje.

Pre-Fitting (Inicijalno podešavanje)

Super / Ultra Power predlošci podešavanja (ako je primenljivo)	Classic (Klasično): malo ili nimalo obrade signala i bez usmeravanja. Conventional (Konvencionalno): umerena obrada signala i određeno usmeravanje. Current (Trenutno): napredna obrada signala i usmeravanje.
Fitting Formula (Formula za podešavanje)	Izaberite željenu formulu podešavanja: DSL v5 Adult (Odrasli), DSL v5 Pediatric (Pedijatrijski), NAL-NL1, NAL-NL2 i NAL-NL2 Tonal Language (Tonalni jezik).
Strategija obrade	Sa DSL v5 Adult (Odrasli) ili DSL v5 Pediatric (Pedijatrijski), izaberitevašu željenu strategiju obrade: WDRC ili Linear (Linearno). Biranje drugih formula za podešavanje pruža samo opciju WDRC obrade.
Tinitus Masker strategija	Izaberite važu željenu strategiju signala tinitus maskera. Buka tinitus maskera se može pregledati i podesiti u okviru s alatkama Fitting (Podešavanje) > Tuning (Fino podešavanje) > Tinnitus Masker (Tinitus masker).
Strategija frekventne kompresije	Izaberite da li da izračunate strategiju frekventne kompresije nezavisno za leve i desne slušne aparate.

In Situ

Koristite ekran In Situ da biste procenili nivo osetljivosti sluha i neprijatne buke putem signala koje generišu slušni aparati. Rezultati In Situ merenja se mogu koristiti za definisanje ciljeva formule podešavanja.

Kliknite na dugme [Start In Situ](#) (Pokreni In Situ) za uvo koje želite procenite. Sledite radni tok In Situ da biste se kretali kroz test.

Meni Fitting (Podešavanje)

Tuning (Fino podešavanje)

Na ekranu Tuning (Fino podešavanje), opcija All Programs (Svi programi) je uvek podrazumevano izabrana; tako se osigurava održavanje relativnih razlika u svim programima kada se vrše promene.

Podešavanja se mogu prilagoditi klikom na odgovarajući okvir s alatkama.

Adaptation Manager (Menadžer adaptacije)	Funkcija Automatic Adaptation Manager (Automatski Menadžer adaptacije) se aktivira kada je polje za potvrdu izabrano. Softver za podešavaje koristi izračunavanje za utvrđivanje početnih podešavanja menadžera adaptacije i stope adaptacije za podešavanje.
Occlusion Manager (Menadžer začepljenosti)	Izaberite željeno podešavanje začepljenja da biste rešili svaku žalbu u vezi sa začepljenjem. Ova funkcija podrazumevano utiče na sve

	programe, osim muzičkog programa. Izaberite polje za potvrdu da biste omogućili menadžer začepljenosti za muzičke programe.
Bass Enhancer (Pojačavač basa) (ako je dostupno)	Izaberite željeno podešavanje da biste povećali pojačanje niske frekvencije i MPO (naglašavanje ispod ~ 1 kHz).
Komande Soft (Meko) / Mod (Srednje) / Loud (Glasno)	Izaberite frekventne regije i ulazni nivo koje je potrebno promeniti. Više vrednosti za podešavanje se može izabrati biranjem određenog ulaza, grupisanjem kanala ili biranjem opcije All (Sve). Da biste izabali više regija frekvencije za podešavanje, možete kliknuti i prevući preko tabele. Traka za pomeranje duž donjeg dela tabele vam omogućava da pregledate regije frekvencija koje su izvan vidljivog dela.
Komande MPO / Gain (Pojaćanje) / CR	Izaberite frekventne regije i tip parametra koje je potrebno promeniti. Ako je dostupno, TK tihi govor se može koristiti za podešavanje dobijka niskih zvukova (ova funkcija mora da bude omogućena u željenim postavkama da bi podešavanje bilo moguće). Da biste izabali više regija frekvencije za podešavanje, možete kliknuti i prevući preko tabele. Traka za pomeranje duž donjeg dela tabele vam omogućava da pregledate regije frekvencija koje su izvan vidljivog dela.
App Equalizer (Aplikacijski Ekvilajzer)	Prilikom sledećih podešavanja, biranje programa će prikazati podešavanja koja je klijent primenio tom programu putem aplikacije.
Frequency Compression (Frekventna kompresija)	Kliknite na polje za potvrdu Enable Frequency Compression (Omogući frekventnu kompresiju) da biste aktivirali ovu funkciju. U zavisnosti od proizvoda, možete podesiti frekventnu kompresiju u skladu sa željenim podešavanjima pomoću dugmadi More (Više) ili Less (Manje) ili podešavanjem klizača Audibility (Čujnost) / Distinction (Razlikovanje) / Consonant Clarity (Jasnoća suglasnika) / Vowel Quality (Kvalitet samoglasnika).
Fitting Advice (Savet za podešavanje)	Izaberite specifičnu situaciju i problem za preporučena podešavanja.
Tinnitus masker	Kliknite na polje za potvrdu Enable Tinnitus Masker (Omogući tinitus masker) da biste omogućili ovu funkciju. Kliknite na polje za potvrdu Use client control to adjust noise level (Koristi kontrolu klijenta za podešavanje nivoa buke) da biste omogućili klijentu da podesi nivo buke tinitusa pomoću komandi slušnog aparata. Da biste izabali više regija frekvencije za podešavanje, možete kliknuti i prevući preko tabele. Traka za pomeranje duž donjeg dela tabele vam omogućava da pregledate regije frekvencija koje su izvan vidljivog dela.
Daljinsko podešavanje	Kliknite na Start a Remote Adjust session (Pokreni sesiju daljinskog podešavanja) da biste pokrenuli radni tok Remote Adjust (Daljinsko podešavanje). Takođe možete pregledati vrednosti za kompenzovanje pojaćanja za svaku od promena koju podržavaju slušni aparati. Ove vrednosti su samo za čitanje.

Configure Features (Konfiguracija funkcija)

Izaberite ekran Configure Features (Konfiguracija funkcija) da biste podesili adaptive parametre na slušnim aparatima. Izaberite programe da biste pregledali i izmenili vrednosti adaptivnih parametara.

Program Manager (Menadžer programa)

Ovaj ekran vam omogućava da dodajete ili uklanjate manuelne programe, kopirate programe, preimenujete programe, menjate redosled programa i dodeljujete easy-t / easy-DAI pristup (kada je primenljivo). Da biste ručno dodali program, kliknite na strelicu pored odgovarajućeg programa u odeljku Available Programs (Dostupni programi).

Feedback Optimization (Optimizacija mikrofonijske)

Izaberite ekran Feedback Optimization (Optimizacija mikrofonijske) da biste obavili test mikrofonijske. U slučajevima kada postoji mogućnost uticaja okruženja na test (npr. prisustvo prekomerne buke), rezultati obuhvataju kombinaciju izmerenih vrednosti i predviđenih graničnih vrednosti mikrofonijske; status je tada Incomplete (Nezavršeno). Ponavljanje testa će zameniti sve predviđene vrednosti izmerenim vrednostima ako mogu pouzdano da se dobiju u trenutnom testnom okruženju. Kada se završi test mikrofonijske, pojačanje slušnog aparata je ograničeno kao što je prikazano na grafikonu pri čemu:

- Crna linija = granična vrednost mikrofonijske
- Siva linija = ograničenje dobitka slušnog aparata
- Zelena linija = ciljni dobitak za ulazni čisti ton od 50 dB
- Crvena ili plava linija = dodatni dobitak od 50 dB za ulazni čisti ton

Automatic REM (Automatski REM)

Automatic REM je automatizovani sistem navođenja za merenja u stvarnom uhu (REM). Vodi vas kroz tok rada korak po korak od postavljanja cevčice sonde, dobijanja REM i automatskog usklađivanja cilja.

Automatic REM je dostupan kada se koristi softver za ugradnju unutar Noah.

Kliknite na [R] / [Pokreni oba] / [L] da pokrene Automatic REM. Tok posla će vas zatim voditi kroz niz koraka.

Meni End Fitting (Kraj podešavanja)

HI Setup (Podešavanje slušnog aparata)

Izaberite ekran HI Setup (Podešavanje slušnog aparata) da biste konfigurisali funkciju korisničkih komandi slušnih aparata. Pored toga, HI Setup (Podešavanje slušnog aparata) pruža pristup drugim parametrima sredstva putem okvira s alatima duž donjeg dela ekrana:

Bluetooth

Uredite naziv slušnih instrumenata koji vide drugi Bluetooth uređaji, omogućite/onemogućite funkciju Adaptive Bandwidth (Adaptivni propusni opseg) i izaberite primerno uvo koje se koristi za Bluetooth.

TV Connector	Konfigurirajte kako se slušni aparati ponašaju kada su u dometu TV Connector.
Volume Settings (Podešavanje jačine zvuka)	Izaberite željeni korak povećanja/smanjenja kontrole jačine zvuka.
Startup Settings (Podešavanje pokretanja)	Izaberite željeni Startup Program (Program za pokretanje) i Startup Delay (Odlaganje pokretanja). Omogućite/onemogućite automatsko ponašanje za uključivanje punjivih slušnih instrumenata kada se skinu sa punjača (ako je primenljivo).
Data Logging (Zapis podataka)	Izaberite željeno ponašanje za Data Logging (zapis podataka).
Program Toggle Exceptions (uključivanja/isključivanja izuzimanja programa)	Izaberite programe koje treba isključiti iz sekvence uključivanja/isključivanja.
Tap Control Sensitivity (Osetljivost tap kontrole)	Ako je primenljivo, konfigurirajte koliko čvrsto klijent treba da dodirne slušne aparate za aktiviranje tap kontrole.

Beeps (Zvučni signali)

Demonstrirajte i konfigurirajte zvučne signale za obaveštenja korisnika na slušnom aparatu.

Beep Setup (Podešavanje zvučnih signala)	Izaberite intenzitet i frekvenciju zvučnih signala za svako uvo.
Beep Enabling (Omogućavanje zvučnih signala)	Poništite tipove obaveštenja zvučnim signalima da biste ih deaktivirali za klijenta.
Trial Duration (Trajanje probnog perioda) (ako je primenljivo)	Prikazuje vreme pre generisanja zvučnih signala „End of trial period“ (Kraj probnog perioda) na slušnim aparatima.

Insights Setup (Podešavanje uvida)

Ekran Insights Setup (Podešavanje uvida) pruža jednostavan način za omogućavanje uvida za vas i vaše klijente. Prvi koraci su jednokratne aktivnosti za prijavljivanje/kreiranje naloga i za omogućavanje uvida.

Nakon detekcije, slušni aparati automatski omogućavaju aktiviranje uvida. Kada sačuvate slušne aparate, klijenti mogu da završe proces podešavanja tako što će izabrati „Activate Insights“ (Aktiviraj uvide) prilikom podešavanja **Remote Plus aplikacije** (dostupno za slušne aparate na kojima je omogućena funkcija Bluetooth). Sledeći put kada otvorite sesiju za tog klijenta, videćete potvrdu da je aktivacija završena i da se mogu omogućiti funkcije **Success Check** (Provera uspeha), **Remote Adjust** (Daljinsko podešavanje), **Coach** (Obuka) i **Ratings (Ocene)**.

Fitting Summary (Sažetak podešavanja)

Ekran Fitting Summary (Sažetak podešavanja) pruža pregled primarnih stavki povezanih sa podešavanjem za slušne aparate. Tabela pruža mogućnost konačne provere podešavanja i opšteg status pre završetka sesije. Po želji, dodatni detalji se mogu pregledati klikom na dugme [More Info](#) (Još informacija).

Ovaj ekran takođe sadrži opcije za [Send Email](#) (Slanje e-poruke) (automatski generiše e-poruku sa materijalima za početne korake za klijenta), [Print](#) (Štampanje), [Save](#) (Čuvanje) ili [Close Session](#) (Zatvaranje sesije).

Meni Insights (Uvidi)

Overview (Pregled)

Ovaj ekran pruža pregled visokog nivoa upotrebe, načina života i iskustva klijenata sa slušnim aparatima. Leva tabla ekrana prikazuje [Success Check](#) (Provjera uspjeha) (omogućava vam da vidite trenutne podatke Insights-a bez povezivanja na slušne aparate), [History](#) (Istoriju) (omogućava vam pregled istorije iz prethodnih sesija), [Quick Links](#) (Brze veze) (dugmići sa vezama sa često korišćenim funkcijama za naknadna podešavanja) i [Difficult Situation Predictions](#) (Predviđanja teških situacija) (predviđanje komplikovanih tipova zvukova kojima klijent može da bude izložen).

Usage (Data Logging) (Upotreba (Zapis podataka))

Ovaj ekran pruža uvide u to kako klijent koristi slušne aparate. Grafikon u centru ekrana prikazuje procenat provedenog vremena u automatskim i manuelnim programima. Tabela pruža informacije povezane s prosečnom upotrebom i podešavanjima kontrole jačine zvuka u svim programima. Na ovom ekranu se takođe prikazuje istorija iz prethodnih sesija, trajanje upotrebe od strane klijenta i sve ocene.

Log It All

Ovaj ekran pruža pregled načina života klijenta u vezi sa slušanjem. Sve vreme provedeno u akustičnim realnim situacijama slušanja se klasifikuju na slušnim aparatima i mapiraju prema definisanim okruženjima slušanjima.

[Success Check \(Provjera uspjeha\)](#)

Pogledajte trenutne Log It All podatke bez povezivanja na slušne aparate.

[History \(Istorija\)](#)

Pregled Log It All istorije iz prethodnih sesija.

[Technology Level Comparison \(Upoređivanje tehnološkog nivoa\)](#)

Prikazuje trenutni tehnološki nivo i alternativne nivoe koji su dostupni.

[Scores \(Rezultati\)](#)

Svaki tehnološki nivo ima dva rezultata – jedan za pokrivenost i jedan za performanse.

Ekran Coverage (Pokrivenost)	Prikazuje podatke sa slušnih instrumenata o tome koliko je dobro optimizovan tehnološki nivo za okruženja slušanja u kojima klijent provodi svoje vreme. Polja ispod traka prikazuju procenat vremena koje je klijent proveo u svakom okruženju slušanja.
Ekran Performance (Performanse)	Izaberite opciju High (Visoko) ili Low (Nisko) u opciji Listening Complexity (Kompleksnost slušanja). U okruženjima visoke kompleksnosti slušanja, Speech Direction (Smer govora) prikazuje koliko dobro tehnološki nivo može da upravlja govorom iz različitih smerova na osnovu ličnog načina života klijenta, vezano za slušanje. U okruženjima niske kompleksnosti, Sound Awareness (Svest o zvuku) prikazuje koliko dobro tehnološki nivo pruža svest o govoru i drugim zvucima u okruženju klijenta.
Feature List (Lista funkcija)	Prikazuje dijalog Feature Comparison (Upoređivanje funkcija) koji vam omogućava da vidite direktno upoređivanje funkcija.
Ikona Ratings (Ocene)	Prikazuje se pored svakog okruženja ili programa koji ima povezane ocene. Kliknite na ikonu da biste pregledali ocene.

Ratings (Ocene)

Ova funkcija vam omogućava da pregledate ocene i komentare koje su klijenti uneli putem aplikacije. [Timeline View](#) (Prikaz vremenske linije) prikazuje pregled pozitivnih i negativnih ocena klijenata kroz vreme. Prikaz [Moment Ratings](#) (Moment ocene) prikazuje ocene istog klijenta grupisane prema situaciji koju je klijent izabrao za svaku ocenu.

Opcije prikaza krive

Sve krive koje su prikazane u softveru za podešavanje, izuzev grafikona Feedback Optimization (Optimizacija mikrofonijske), su zasnovane na ciljnim vrednostima koje su generisane sa pretpostavkom ulaznog govora. Na bilo kom ekranu na kom se prikazuje grafikon promenite prikaz tako što ćete kliknuti na ikonu za prikaz krive iznad grafikona u gornjem desnom uglu. Podešavanja koja se izvrše ovde se primenjuju na grafikone i levo i desno.

U zavisnosti od odeljka softvera za podešavanje, dostupne su različite opcije za izbor.

Glavni meni

Opcije glavnog menija su navedene u odeljku Struktura i navigacija u ovom uputstvu. U nastavku su navedeni detalji o nekim stavkama menija.

Verification Mode (Režim verifikacije)

Verification Mode (Režim verifikacije) se može pronaći u [Hearing Instrument](#) (Slušni aparat) > [Verification Mode](#) (Režim verifikacije). Ovim se slušni aparat prebacuje u režim verifikacije kako bi se omogućilo testiranje bez ometanja adaptivnih funkcija. Postoje 3 opcije:

- Adaptivne funkcije aktivne: podrazumevano stanje
- Real Ear Verification (Verifikacija stvarnog uva): sve funkcije su onemogućene osim Natural Sound Balance (Balans prirodnog zvuka) i izbora ulaza.
- 2cc Coupler Verification (Verifikacija 2cc spojnice): sve adaptive funkcije i izbor ulaza su onemogućene

Transfer Fitting (Prenos podešavanja)

Radnom toku Transfer Fitting (Prenos podešavanja) se pristupa putem [Hearing Instrument](#) (Slušni aparat) > [Transfer Fitting \(Prenos podešavanja\)](#). Funkcija Transfer Fitting (Prenos podešavanja) pomaže u prenosu podešavanja na drugi slušni aparat ili sa drugog slušnog aparata.

Training Session (Sesija za obuku)

Training Mode (Režim obuke) se koristi za demonstraciju kompletnih funkcija svakog ekrana kao da su slušni instrumenti povezani. Training Sessions (Sesije obuke) su dostupne na glavnom meniju pod [Help](#) (Pomoć) > [Training Session](#) (Sesija obuke). Možete izabrati neki od više scenarija obuke koji obuhvataju slobodne scenarije i scenarije s unapred definisanim podacima.

Izaberite klijenta i zatim kreirajte sesiju obuke. Možete simulirati kompletan radi tok detekcije slušnih instrumenata i testove kao što je test Feedback Optimization (Optimizacija mikrofonijske). Možete simulirati i informacije Data Logging (Zapis podataka), uključujući Log It All, ako je primenljivo. Sesije obuke se ne mogu sačuvati.

Važne bezbednosne informacije

Unitron TrueFit softver za podešavanje je medicinsko sredstvo. Stoga upotreba ovog proizvoda uključuje neke rizike od povrede i zato je važno da isključivo specijalisti za slušna pomagala koji imaju odgovarajuće kvalifikacije koriste Unitron TrueFit softver za podešavanje u skladu s ovim korisničkim vodičem i da razumeju i poštuju upozorenja koja su navedena u ovom korisničkom vodiču.

Namena:

Samostalni softver za podešavanje je predviđen za upotrebu od strane kvalifikovanih specijalista za slušna pomagala za konfigurisanje, programiranje i podešavanje slušnih aparata u skladu sa specifičnim zahtevima pojedinačnog pacijenta.

Ovaj korisnički vodič pruža detaljan uvod u podešavanje slušnog aparata uz Unitron TrueFit. Elektronska verzija je dostupna na adresi unitron.com/instr.

Predviđeni korisnik:

Kvalifikovani specijalisti za slušna pomagala.

Predviđena populacija pacijenata:

Softver je predviđen za pacijente sa unilateralnim i bilateralnim, blagim do ozbiljnim gubitkom sluha ili u kombinaciji sa hroničnim tinitusom kojima je potrebno podešavanje slušnog aparata. Tinitus masker je predviđen za upotrebu kod pacijenata starijih od 18 godina.

Indikacije:

Imajte u vidu da indikacije ne proističu iz softvera za podešavanje, već iz kompatibilnih slušnih pomagala. Generalne kliničke indikacije za upotrebu slušnih pomagala i tinitus maskera su:

- Postojanje gubitka sluha
 - Unilateralno ili bilateralno
 - Konduktivno, senzorineuralno ili mešovito
 - Blago do ozbiljno
- Postojanje hroničnog tinitusa (samo sa slušna pomagala koja pružaju tinitus masker)

Kontraindikacije:

Imajte u vidu da kontraindikacije ne proističu iz softvera za podešavanje, već iz kompatibilnih slušnih pomagala. Generalne kliničke kontraindikacije za upotrebu slušnih pomagala i tinitus maskera su:

- Gubitak sluha nije u opsegu podešavanja slušnog aparata (npr. dobitak, frekventni odziv)
- Akutni tinitus
- Deformitet uva (npr. zatvoreni ušni kanal, nedostatak ušne školjke).
- Neuralni gubitak sluha (retrokohlearne patologije kao što su nepostojeći/nefunkcionalni slušni nerv)

Primarni kriterijumi za upućivanje pacijenta na mišljenje medicinskog ili drugog specijalista i/ili lečenje su sledeći:

- Vidljiv urođeni ili traumatski deformitet uva
- Istorija aktivnog curenja iz uva u prethodnih 90 dana
- Istorija naglog ili ubrzanog gubitka sluha u jednom uvu ili u oba uva u prethodnih 90 dana
- Akutna ili hronična vrtoglavica
- Audiometrijska razlika između vazdušne i koštane provodljivosti jednaka ili veća od 15 dB na 500 Hz, 1000 Hz i 2000 Hz
- Vidljivo prisustvo nagomilane ušne masti ili stranog tela u ušnom kanalu
- Bol ili osećaj nelagodnosti u uvu
- Abnormalni izgled bubne opne i ušnog kanala kao što je:
 - Zapaljenje eksternog slušnog kanala
 - Perforirana bubna opna
 - Druge abnormalnosti za koje specijalista za slušna pomagala smatra zdravstvenim problemom

Specijalista za slušna pomagala može da donese odluku o tome da upućivanje nije odgovarajuće ili nije u najboljem interesu pacijenta u sledećim slučajevima:

- Kada postoji dovoljno dokaza da je lekar specijalista u potpunosti ispitao stanje i da su sve moguće terapije pružene.

- Stanje se nije pogoršalo ili značajno promenilo od prethodnog pregleda i/ili terapije.
- Ako je pacijent dao svoju informisanu i kompetentnu odluku da ne prihvata savete da traži lekarsko mišljenje, dozvoljeno je preporučiti odgovarajuće sisteme slušnih aparata pod sledećim uslovima:
 - Preporuka neće imati nikakve štetne posledice na zdravlje ili opštu dobrobit pacijenta
 - Zapisi potvrđuju da su sva potrebna pitanja o najboljim interesima pacijenta proverena. Ako to predstavlja zakonski zahtev, pacijent je potpisao izjavu o odricanju odgovornosti kojom se potvrđuje da upućivanje nije prihvaćeno i da je to informisana odluka.

Ograničenje upotrebe:

Upotreba softvera za podešavanje Unitron TrueFit je ograničena na postavljanje i podešavanje kompatibilnih medicinskih sredstava. Softver za podešavanje Unitron TrueFit nije predviđen za upotrebu u dijagnostičke svrhe.

Kompatibilna slušna pomagala:

Platforma	Faktori oblika
Vivante	Svi objavljeni faktori oblika
Blu	Svi objavljeni faktori oblika
Discover Next	Svi objavljeni faktori oblika
Discover	Svi objavljeni faktori oblika
Tempus	Svi objavljeni faktori oblika
North	Svi objavljeni faktori oblika
Era	Svi objavljeni faktori oblika
Shine Rev+	Svi objavljeni faktori oblika
Shine Rev	Svi objavljeni faktori oblika

Neželjena dejstva:

Imajte u vidu da neželjena dejstva ne proističu iz softvera za podešavanje, već iz kompatibilnih slušnih pomagala.

Fiziološka neželjena dejstva slušnih pomagala kao što su tinitus, vrtoglavica, nagomilavanje ušne masti, preveliki pritisak, znojenje ili vlaga, žuljevi, svrab i/ili osip, začepjenja ili ispunjenosti i posledice kao što su glavobolja i/ili bol u uvu može rešiti ili smanjiti vaš specijalista za slušna pomagala. Konvencionalna slušna pomagala imaju potencijal da izlože pacijente višim nivoima izloženosti zvuku i to može dovesti do promena graničnih vrednosti u frekventnom opsegu na koji utiče akustična trauma.

Klinička korist:

Korist za pacijenta je u tome što softver za podešavanja pruža mogućnost podešavanja slušnog aparata u skladu sa individualnim potrebama i čuvanje podešavanja na slušnom pomagalu. Korist za specijalistu za slušna pomagala je povezana s upravljanjem pacijentom.

Rizici:

Kod ovog softvera za podešavanje ovi rizici se manifestuju putem slušnih pomagala koja softver treba da programira. Odnosno, sam softver za podešavanje ne može direktno da izazove štetu ni kod korisnika (specijaliste za slušna pomagala) niti za lice koje nosi slušna pomagala, ali njegova upotreba (ili pogrešna upotreba) može dovesti do sledećeg:

- davanje pogrešno programiranih slušnih pomagala pacijentima i/ili
- emitovanje štetnih jakih zvukova putem slušnih pomagala pacijentima tokom sesija podešavanja/demonstracije.

Ovi rizici su veoma mali, ali i specijalisti za slušna pomagala i lica koja nose slušna pomagala u svakom slučaju treba da ih imaju u vidu.



High MPO (Visoka vrednost MPO)

Ukupna vrednost MPO slušnog aparata je veća od 132 dB (simulator uva)



High Tinnitus Masker noise level (Visok nivo buke tinitus maskera)

Nivo generisanja buke na oba slušna aparata je viši od 80 dB(A). Budite pažljivi kod navedenih programa.



Problem sa zvučnikom

Povezani i izabrani zvučnik nisu identični. Izaberite odgovarajući zvučnik.



Pogrešne informacije o strani

Slušni instrument je konfigurisan za suprotnu stranu. Omogućite promenu strane.



Testirajte podešavanja

Izvadite slušne aparate iz ušiju klijenta. Podaci o podešavanju se mogu vratiti na kraju procesa.

Informacije o usklađenosti i opis simbola

Informacije o usaglašenosti

Evropa: Deklaracija o usglašenosti

Informacije o usaglašenosti u Evropi: Deklaracija o usaglašenosti – Kompanija Sonova AG izjavljuje da ovaj proizvod ispunjava zahteve Uredbe o medicinskim sredstvima (EU) 2017/745

Ovaj korisnički vodič je dostupan putem funkcije [Help] (Pomoć) u softveru za podešavanje. Korisnički vodič za sve verzije softvera za podešavanje na svim primenljivim jezicima u elektronskom obliku je dostupan na veb-sajtu: <https://www.unitron.com/instr>

Besplatan štampani primerak uputstva za upotrebu zatražite od vašeg lokalnog predstavnika proizvođača. Primerak će biti poslat za najkasnije 7 dana.

Svaki ozbiljan incident do kog dođe u vezi s ovim proizvodom je potrebno prijaviti predstavniku proizvođača i nadležnom organu u zemlji prebivališta. Ozbiljan incident se opisuje kao svaki incident koji neposredno ili posredno jeste doveo, mogao je da dovede ili može da dovede do sledećeg:

- smrti pacijenta, korisnika ili drugog lica
- privremenog ili trajnog ozbiljnog pogoršanja zdravstvenog stanja pacijenta, korisnika ili drugog lica
- ozbiljne pretnje po javno zdravlje

Obaveštenje o bezbednosti

Podaci pacijenata su privatni podaci i njihova zaštita je važna:

- Postarajte se da vaš operativni sistem bude ažuriran
- Postarajte se da vaša instalirana verzija softvera za podešavanje bude ažurirana
- Postarajte se da prijava korisnika na sistemu Windows bude aktivirana, koristite snažne lozinke i čuvajte tajnost akreditiva
- Koristite odgovarajuću i ažuriranu zaštitu od malvera i virusa

U zavisnosti od nacionalnih zakona, možda ćete morati da enkriptujete sve podatke o pacijentima kako ne biste snosili odgovornost u slučaju gubitka i/ili krađe podataka. Možete koristiti enkripciju disk jedinice (npr. besplatni Microsoft BitLocker) da biste zaštitili sve podatke na vašem računaru. Ako koristite Noah, razmotrite upotrebu enkriptovanja Noah baze podataka.

Postarajte se da svi podaci budu bezbedni u svakom trenutku. Imajte u vidu da ova lista nije konačna.

- Kada prenosite podatke nebezbednim kanalima, šaljite anonimizovane ili enkriptovane podatke.
- Zaštite rezervne kopije podataka ne samo od gubitka podataka, već i od krađe.
- Izbrišite sve podatke sa medijuma za podatke koji se više ne koristi ili koji ćete odložiti u otpad.

Održavanje softvera

Neprekidno pratimo povratne informacije sa tržišta. Ako dođe do bilo kakvih problema sa poslednjom verzijom softvera za podešavanje, obratite se vašem lokalnom predstavniku proizvođača.

Opis simbola

	Kompanija Sonova AG CE simbolom potvrđuje da ovaj proizvod ispunjava zahteve Uredbe o medicinskim sredstvima (EU) 2017/745. Brojevi nakon CE simbola odgovaraju kodu sertifikovane institucije koja je konsultovana pod gore navedenom uredbom.
 Ime, adresa, datum	Kombinovani simbol „proizvođač medicinskog sredstva“ i „datum proizvodnje“ prema EU uredbi (EU) 2017/745.
EC REP	Označava Ovlašćenog predstavnika u Evropskoj zajednici. Predstavnik u Evropskoj zajednici je istovremeno i uvoznik za Evropsku uniju.
MD	Označava da je ovaj uređaj medicinski uređaj.

	Označava kataloški broj proizvođača za identifikaciju medicinskog sredstva.
	Znači da se elektronsko uputstvo za upotrebu može preuzeti.
	Ovaj simbol označava da je važno da korisnik pročita i uzme u obzir relevantne informacije u ovim korisničkim vodičima.
	Pružila dodatno objašnjenje funkcije.
	Ukazuje na ograničenje u funkcionalnosti ili ističe važne informacije koje zahtevaju vašu pažnju.
	Označava da je došlo do problema koji je potrebno rešiti da bi rad mogao da se nastavi.
	HIMSA sertifikacioni pečat NOAHSEAL

Sistemske zahteve

Operativni sistem	- Windows 11, Home / Pro / Enterprise / Education - Windows 10, Home / Pro / Enterprise / Education
Procesor	Intel Core ili jače performanse
RAM	8 GB ili više
Prostor na čvrstom disku	4 GB ili više
Rezolucija ekrana	1280 x 1024 piksela
Rezolucija sekundarnog ekrana za pacijenta	1366 x 768 piksela
Grafička kartica	Ekran od 16 miliona (24bit) boja ili više
Disk jedinica za ručnu instalaciju softvera	- DVD - USB
Serijski COM port	Jedan za HI-PRO ako se koristi putem serijskog COM porta
USB portovi	- Bluetooth adapter - Programiranje dodatka - HI-PRO USB / HI-PRO 2 / iCube II / Noahlink Wireless
Jedan za svaku svrhu	
Interfejsi za programiranje	- iCube II - NOAHlink / Noahlink Wireless - HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2
Noahlink upravljački program	Najnovija dostupna verzija

Noahlink Wireless upravljački program	Najnovija dostupna verzija
Veza s internetom	Preporučuje se
Zvučna kartica	Stereo
Sistem za reprodukciju	20 Hz – 14 kHz
NOAH verzija	Najnovija verzija (NOAH 4.4.2280 ili novija) Proverite ograničenja NOAH za operativni sistem Windows na veb-sajtu http://www.himsa.com
Automatic REM (Automatski REM)	Noah verzija 4.4.2280 ili novija Natus® Otosuite 4.81.00 ili novija Auditdata Primus verzija 4.1-5.2 Interacoustics Affinity Suite verzija 2.19-2.24 Signia Unity verzija 5.9-6.2

Naziv i logotipi Bluetooth® su registrovani žigovi kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija Sonova AG ih koristi pod licencom.

Sponzor za Australiju:
Sonova Australia Pty Ltd
12 Inglewood Place,
Norwest NSW 2153
Australija

Ovaj korisnički vodič je primenljiv kod TrueFit 5.6 i novijih podverzija softvera za podešavanje Unitron TrueFit 5.6. Obratite se lokalnom predstavniku kompanije Unitron za prethodne verzije korisničkog vodiča za softver za podešavanje.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28 ·
CH-8712 Stäfa · Švajcarska



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Nemačka



058-5178-056
Unitron TrueFit 5.6
058-5268-056
Unitron TrueFit 5.6 USB memorija



028-6716-23V4.0/2024-04/ZT ©2024 Sonova AG. All rights reserved