

Anbefalede systemkrav

Systemkomponent	Anbefaling
Processor	Pentium IV, 2 GHz eller hurtigere
RAM	2 GB eller mere
Harddiskplads	2 GB eller mere
Operativsystem	• Windows XP, 32 bit, SP3 og nyere • Windows Vista, 32 bit/64 bit, nyeste SP • Windows 7, 32 bit/64 bit, nyeste SP • Windows 8, 32 bit/64 bit, nyeste SP
Skærmopløsning	1024 x 1024 pixels
Sekundær skærm	1280 x 1024 pixels
Grafikkort	16 millioner (24 bit) skærmfarver eller derover
Drev	DVD-ROM eller CD-ROM
Seriel COM-port	Én til HI-PRO ved anvendelse via seriel COM-port

Systemkomponent	Anbefaling
USB-porte	Én til hver af følgende formål: • Bluetooth-adapter • Tilbehørsprogrammering • HI-PRO USB / HI-PRO 2
Programmeringsgrænseflader	• iCube • NOAHlink • HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2
NOAHlink-driver	NOAHlink-egenskaber og NOAHlink-kerne: nyeste tilgængelige version
Internetforbindelse	Anbefales kraftigt
Browser	• Internet Explorer® 7 eller nyere • Mozilla® Firefox® 6 eller nyere • Google® Chrome™ 18 eller nyere
Lydkort	Stereo
Afspilningssystem	20 Hz - 14 kHz
NOAH-version	NOAH 4.4 (NOAH 3.7.1 eller nyere kræves)

unitron TrueFit™ software

Tilpasninger med succes. Forenklet.

Unitron TrueFit v2.4
Installationsguide

Installation af Unitron TrueFit software

1. Indsæt Unitron Disc 1 i dit CD-ROM drev eller Unitron TrueFit DVD'en i dit DVD-ROM drev. Installationsprogrammet starter automatisk. Hvis det ikke er tilfældet, prøv en af følgende:

Vælg Windows Start, vælg Kør... skriv filinformationen.
(fx. D :\setup.exe, hvor D: er betegnelsen for dit CD/DVD drev) og klik på OK.


ELLER

Brug Windows Explorer (min computer), find filen **setup.exe** på dit CD/DVD-ROM drev og dobbeltklik på filnavnet.

2. Vælg det foretrukne installationssprog: Engelsk, Fransk, Tysk eller Hollandsk (kun til installationsproceduren).



3. Når Unitron TrueFit installationsvinduet åbner, følg instruktionerne på skærmen, som fx at vælge foretrukken installationstype: NOAH eller Standalone.

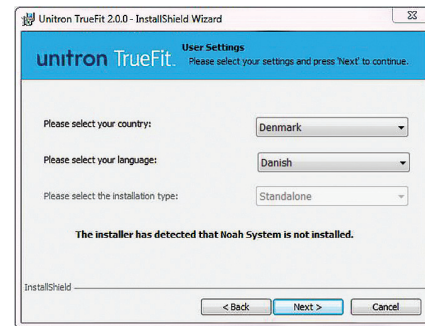

OBS: du kan blive bedt om at indsætte Unitron Disc 2 under installationen hvis du har bedt om mediefiler eller supportmateriale.

-  Vejledningen findes på www.unitron.com/instr i Adobe® Acrobat® PDF format. For at se disse skal du have **Adobe Acrobat Reader** installeret. Download på Adobe.com.
-  Hvis du ønsker en gratis printet installationsguide bedes du kontakte Unitron i hht. kontaktoplysningerne i denne guide. Materiale fremsendes indenfor 7 dage.

Har du brug for hjælp?

Australien - 1800 212 313
Belgien - +32 (0) 2 468 19 81
Canada - 1 800 265 8255
Colombia - +57 1 2149045
Danmark - +45 64 41 78 87
Frankrig - 0821 02 9000
Holland - +31 88 600 88 10
Indien - +91-22-26871151
Kina - +86 21 61205533
New Zealand - 0800 864 8766
Norge - +47 22 47 76 30

Østrig - +49 711 658538 0
Rusland - +7 495 788 02 04
Schweiz - 0800 928 801
Spanien - +34 902 494 960
Storbritannien - +44 (0) 1925 247810
Sverige - +46 (0) 8 546 20 960
Syd Korea - +82 2 859 4902
Sydafrika - (011) 467 7662/52
Tyskland & Europæisk
repræsentant - +49 711 658538 0
USA - 1 800 888 8882

Lande som ikke er på listen - +1 519 895 0100



Unitron Hearing
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

