

Configuration recommandée

Composantes du système	Recommandations
Processeur	Pentium IV, 2 GHz ou plus
Mémoire vive	2 Go ou plus
Capacité du disque dur	2 Go ou plus
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">• Windows XP, 32 bits, SP3 et ultérieur• Windows Vista, 32 bits/64 bits, dernier SP• Windows 7, 32 bits/64 bits, dernier SP• Windows 8, 32 bits/64 bits, dernier SP
Résolution d'affichage	1024 x 1024 pixels
Résolution d'affichage secondaire du client	1280 x 1024 pixels
Carte vidéo	Écran 16 millions (24 bits) de couleurs ou plus
Lecteur	DVD-ROM ou CD-ROM
Port série de communication	Un pour HI-PRO si branché sur port série de communication

Composantes du système	Recommandations
Ports USB	Un pour chacun des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none">• Adaptateur Bluetooth• Programmation des accessoires• HI-PRO si branché sur port USB / HI-PRO 2
Interfaces de programmation	<ul style="list-style-type: none">• iCube• NOAHlink• HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2
Lecteur NOAHlink	Propriétés et noyau NOAHlink : dernière version disponible
Connexion Internet	Hautement recommandée
Navigateur	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer® 7 ou plus récent• Mozilla® Firefox® 6 ou plus récent• Google® Chrome^{MC} 18 ou plus récent
Carte de son	Stéréo
Système de lecture	20 Hz – 14 kHz
Version NOAH	NOAH 4.4 (NOAH 3.7.1 ou plus récent requis)

unitron TrueFit^{MC} software

Des appareillages réussis. Tout simplement.

Unitron TrueFit v2.4
Guide d'installation

Installation du logiciel TrueFit d'Unitron

1. Insérer le disque 1 d'Unitron ou le DVD de TrueFit d'Unitron dans votre lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM. Le programme d'installation devrait démarrer automatiquement grâce à votre système d'exploitation.


Si ce n'est pas le cas :

Aller sur : Démarrer Windows, sélectionner Exécuter... entrer l'information sur le fichier (soit d:**setup.exe**, à l'endroit où d: représente la lettre de votre lecteur CD/DVD-ROM) et cliquer sur **OK**.


OU

À l'aide de Windows Explorer (Ordinateur), localiser le fichier **setup.exe** sur votre lecteur de CD/DVD-ROM et double-cliquer sur le nom du fichier.


2. Choisir la langue d'installation : anglais, français, allemand ou néerlandais (ne concerne que la procédure d'installation).

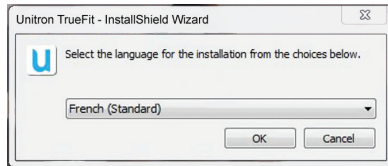


3. Lorsque la fenêtre d'installation de TrueFit d'Unitron apparaît, suivre les instructions à l'écran, comme en sélectionnant votre type d'installation préféré : NOAH ou Standalone.

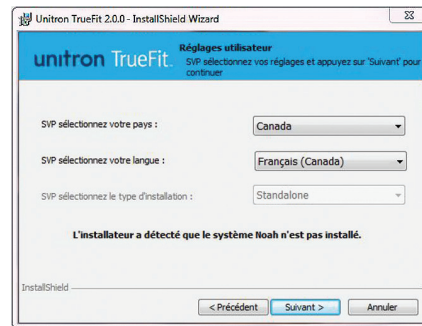

Note: vous serez peut-être invité à insérer le disque 2 d'Unitron pendant le processus d'installation si vous avez demandé des fichiers média ou du matériel de soutien.

 Des instructions sont disponibles au www.unitron.com/instr en format PDF Adobe® Acrobat®. Pour y accéder, vous devez avoir préalablement installé Adobe Acrobat Reader. Visitez Adobe.com pour le télécharger.

 Pour obtenir un exemplaire papier des instructions, veuillez communiquer avec Unitron au moyen des adresses et numéros de téléphone contenus dans ce guide. L'exemplaire sera envoyé au cours des 7 jours suivants.

Besoin d'aide?

Afrique du Sud : (011) 467 7662/52
Allemagne et représentant européen : + 49 711 658538 0
Australie : 1800 212 313
Autriche - +49 711 658538 0
Belgique : +32 (0) 2 468 19 81
Canada : 1 800 265 8255
Chine : +86 21 61205533
Colombie : +57 1 2149045
Corée du Sud : +82 2 859 4902
Danemark : +45 64 41 78 87

É.-U. : 1 800 888 8882
Espagne : +34 902 494 960
France : 0821 02 9000
Inde : +91-22-26871151
Norvège : +47 22 47 76 30
Nouvelle-Zélande : 0800 864 8766
Pays-Bas : +31 88 600 88 10
R.-U. : +44 (0) 1925 247810
Russie : +7 495 788 02 04
Suède : +46 (0) 8 546 20 960
Suisse : 0800 928 801

Pour les pays non listés : +1 519 895 0100

 Unitron Hearing
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada


0543

G/14-046 029-5861-36