

Configuration système recommandée

Composant système	Recommandation
Processeur	Pentium IV, 2 GHz ou plus rapide
RAM	2 Go ou plus
Espace libre sur le disque dur	2 Go ou plus
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none">• Windows XP, 32 bits, SP3 et versions ultérieures• Windows Vista, 32 bits / 64 bits, dernier SP• Windows 7, 32 bits / 64 bits, dernier SP• Windows 8, 32 bits / 64 bits, dernier SP
Résolution écran	1024 x 1024 pixels
Résolution écran patient	1280 x 1024 pixels
Carte graphique	16 millions de couleurs (24 bits) ou plus
Lecteur	DVD-ROM ou CD-ROM
Port COM série	Un pour HI-PRO s'il est connecté via le port COM série

Composant système	Recommandation
Ports USB	Un pour chaque usage : <ul style="list-style-type: none">• Adaptateur Bluetooth• Programmation des accessoires• HI-PRO USB / HI-PRO 2
Interfaces de programmation	<ul style="list-style-type: none">• iCube• NOAHlink• HI-PRO/ HI-PRO USB / HI-PRO 2
Pilote NOAHlink	Propriétés de NOAHlink et logiciel d'évaluation de NOAHlink : dernière version disponible
Connexion Internet	Hautement recommandée
Navigateur	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer® 7 ou version plus récente• Mozilla® Firefox® 6 ou version plus récente• Google® Chrome™ 18 ou version plus récente
Carte son	Stéréo
Système de lecture	20 Hz – 14 kHz
Version de NOAH	NOAH 4.4 (NOAH 3.7.1 ou plus récent requis)

unitron TrueFit™ software

Des appareillages réussis. Simplifiés.

Unitron TrueFit v2.4
Guide d'installation

Installation du logiciel Unitron TrueFit


1. Insérez le CD1 Unitron dans votre lecteur CD/DVD. Le programme d'installation du logiciel Unitron TrueFit devrait se lancer automatiquement.
Si ce n'est pas le cas :

Allez dans le menu de démarrage de Windows et sélectionnez Exécuter puis saisissez les informations fichier. (ex : d:**setup.exe**, où d: représente la lettre de votre lecteur CD/DVD) puis cliquez sur **OK**.


OU

En utilisant l'Explorateur Windows (poste de travail), localisez le fichier **setup.exe** dans votre lecteur CD/DVD et double cliquez dessus.

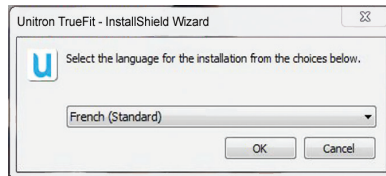

2. Sélectionnez la langue d'installation par défaut : Anglais, Français, Allemand ou Néerlandais (pour la procédure d'installation uniquement).

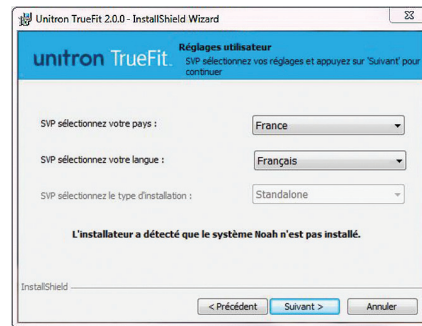

3. Lorsque la fenêtre d'installation du logiciel Unitron TrueFit s'ouvre, suivez les instructions à l'écran, vous pourrez alors choisir vos options d'installation : sous NOAH ou en Standalone.



Note : si vous avez sollicité des fichiers media ou des outils de support, l'assistant d'installation vous demandera d'insérer le disque 2 du logiciel Unitron TrueFit.

-  Les instructions sont disponibles sous www.unitron.com/instr au format Adobe® Acrobat® PDF. Pour les visualiser, vous devez avoir installé Adobe Acrobat Reader. Allez sur le site adobe.com pour le télécharger.
-  Pour obtenir une version papier des instructions sans frais, contactez Unitron aux coordonnées figurant au dos de ce guide. Une copie vous sera adressée sous 7 jours.

Besoin d'aide ?

Afrique du Sud - (011) 467 7662/52
Allemagne et représentant européen -
+49 711 658538 0
Australie - 1800 212 313
Autriche - +49 711 658538 0
Belgique - +32 (0) 2 468 19 81
Canada - 1 800 265 8255
Chine - +86 21 61205533
Colombie - +57 1 2149045
Corée du Sud - +82 2 859 4902
Danemark - +45 64 41 78 87

Espagne - +34 902 494 960
États-Unis - 1 800 888 8882
France - 0821 02 9000
Inde - +91-22-26871151
Norvège - +47 22 47 76 30
Nouvelle-Zélande - 0800 864 8766
Pays-Bas - +31 88 600 88 10
Royaume-Uni - +44 (0) 1925 247810
Russie - +7 495 788 02 04
Suède - +46 (0) 8 546 20 960
Suisse - 0800 928 801

Pour les pays non présents sur la liste - +1 519 895 0100

 Unitron Hearing
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada


0543