

Sistemas recomendados

Componentes do sistema	Recomendação
Processador	Pentium i5, 3GHz ou mais rápido
RAM	8 GB ou mais
Espaço no disco rígido	4 GB ou mais
Sistemas operacionais suportados	<ul style="list-style-type: none">• Windows Vista, 32 bit/64 bit, SP mais recente• Windows 7, 32 bit/64 bit, SP mais recente• Windows 8, 32 bit/64 bit, SP mais recente• Windows 8.1, 32 bit/64 bit, SP mais recente• Windows 10, 32 bit/64 bit, SP mais recente
Resolução da tela	1280 x 1024 píxeis
Resolução da tela secundária para o paciente	1366 x 768 píxeis
Placa gráfica	16 Milhões (24 bit) de cores de tela ou mais
Drive	DVD-ROM
Serial port COM	Uma para o HI-PRO se usa via Serial port COM

Componentes do sistema	Recomendação
Entrada USB	Uma para cada finalidade: <ul style="list-style-type: none">• Adaptador Bluetooth• Programação de acessórios• HI-PRO USB / HI-PRO 2 / iCube II
Interfaces de programação	<ul style="list-style-type: none">• iCube / iCube II• NOAHlink• HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2
Driver NOAHlink	Propriedades do NOAHlink e Kernel NOAHlink: última versão disponível
Conexão de Internet	Altamente recomendada
Browser	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer® última versão• Mozilla® Firefox® última versão• Google® Chrome™ última versão• Microsoft Edge® última versão
Placa de som	Stereo
Sistema de reprodução	20 Hz – 14 kHz
Versão do NOAH	NOAH 4.5 (NOAH 3.7.1 ou versão superior)

unitron TrueFit™ software

Adaptações bem sucedidas. Simplificado.

Unitron TrueFit v3.3
Manual de instalação

A Sonova brand

Instalação do software Unitron TrueFit

1. Insira o DVD Unitron TrueFit em seu leitor de DVD. O programa de instalação deverá ser iniciado automaticamente pelo seu sistema operacional.


Se tal não acontecer:

Vá em: Iniciar o Windows, escolha Executar... Introduza o nome da pasta. (Ou seja, d:\setup.exe, em que d: representa a letra da unidade de DVD-ROM) e clique em OK.

OU

Use o Windows Explorer (Meu computador), localize a pasta setup.exe na sua unidade de DVD-ROM e de um duplo clique no nome da pasta.

2. Selecione o idioma de instalação preferido: Inglês, Francês, Alemão, Holandês (apenas para o processo de instalação).

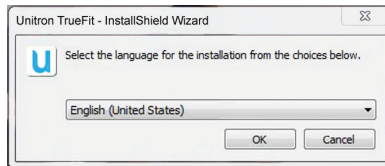

3. Quando a janela de instalação do Unitron TrueFit aparecer, siga as instruções na tela, como a seleção do tipo de instalação preferido: NOAH ou Standalone.



Instruções disponíveis em www.unitron.com/instr, em formato PDF Adobe® Acrobat® Para ver as mesmas, tem que ter o Adobe Acrobat Reader instalado. Visite o site Adobe.com para efetuar o download.



Para obter uma cópia das instruções, entre em contato com a Unitron através dos números de telefone incluídos neste manual.

Precisa de ajuda?

África do Sul - (011) 467 7662/52
Alemanha - +49 711 658538 0
Austrália - 1800 212 313
Áustria - +49 711 658538 0
Bélgica - +31 88 600 88 10
Brasil - +55 11 3748 0960
Canadá - 1 800 265 8255
China - +86 21 61205533
Colômbia - +57 1214 9847
Coreia do Sul - +82 2 859 4902
Dinamarca - +45 64 41 78 87
E.U.A - 1 800 888 8882

Espanha - +34 902 494 960
Europa Representante
- +41 58 928 01 01
França - 04 26 23 22 00
Holanda - +31 88 600 88 10
Índia - +91-22-26871151
Noruega - +47 22 47 76 30
Nova Zelândia - 0800 864 8766
Reino Unido - +44 (0) 1925 247810
Rússia - +7 495 788 02 04
Suécia - +46 (0) 8 546 20 960
Suíça - 0800 928 800

Para países não listados - +1 519 895 0100

customerservice.brasil@unitron.com



Unitron Hearing, a division of
National Hearing Services Inc.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada



sonova
HEAR THE WORLD