

Anbefalet system

Systemkomponent	Anbefaling
Processor	Pentium i5, 3 GHz eller hurtigere
RAM	8 GB eller mere
Harddiskplads	4 GB eller mere
Understøttet operativsystem	• Windows Vista, 32 bit/64 bit, seneste SP • Windows 7, 32 bit/64 bit, seneste SP • Windows 8, 32 bit/64 bit, seneste SP • Windows 8.1, 32 bit/64 bit, seneste SP • Windows 10, 32 bit/64 bit, seneste SP
Skærmopløsning	1280 x 1024 pixels
Sekundær skærm	1366 x 768 pixels
Grafikkort	16 millioner (24 bit) skærmfarver eller derover
Drev	DVD-ROM
Seriell COM-port	Én til HI-PRO ved anvendelse via seriell COM-port

Systemkomponent	Anbefaling
USB-porte	Én til hver af følgende formål: • Bluetooth-adapter • Tilbehørsprogrammering • HI-PRO USB / HI-PRO 2 / iCube II
Programmeringsgrænseflader	• iCube / iCube II • NOAHlink • HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2
NOAHlink-driver	NOAHlink-egenskaber og NOAHlink-kerne: nyeste tilgængelige version
Internetforbindelse	Anbefales kraftigt
Browser	• Internet Explorer® seneste version • Mozilla® Firefox® seneste version • Google® Chrome™ seneste version • Microsoft Edge® seneste version
Lydkort	Stereo
Afspilningssystem	20 Hz - 14 kHz
NOAH-version	NOAH 4.5 (NOAH 3.7.1 eller nyere kræves)

unitron TrueFit™ software

Tilpasninger med succes. Forenklet.

Unitron TrueFit v3.3
Installationsguide

A Sonova brand

Installation af Unitron TrueFit software

1. Isæt Unitron TrueFit DVD i dit DVD-ROM drev. Installationsprogrammet starter automatisk. Hvis det ikke er tilfældet, prøv en af følgende:

Vælg Windows Start, vælg Kør... skriv filinformationen.
(fx. D:\setup.exe, hvor D: er betegnelsen for dit DVD drev) og klik på OK.


ELLER

Brug Windows Explorer (min computer), find filen setup.exe på dit DVD-ROM drev og dobbeltklik på filnavnet.

2. Vælg det foretrukne installationssprog: Engelsk, Fransk, Tysk eller Hollandsk (kun til installationsproceduren).



3. Når Unitron TrueFit installationsvinduet åbner, følg instruktionerne på skærmen, som fx at vælge foretrukken installationstype: NOAH eller Standalone.

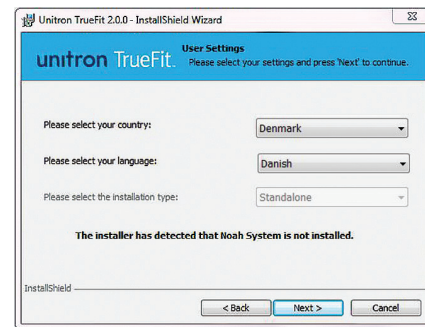

 Vejledningen findes på www.unitron.com/instr i Adobe® Acrobat® PDF format. For at se disse skal du have Adobe Acrobat Reader installeret. Download på Adobe.com.

 Hvis du ønsker en gratis printet installationsguide bedes du kontakte Unitron i hht. kontaktoplysningerne i denne guide. Materiale fremsendes indenfor 7 dage.

Har du brug for hjælp?

Australien - 1800 212 313
Belgien - +31 88 600 88 10
Brasilien - +55 11 3748 0960
Canada - 1 800 265 8255
Colombia - +57 1 2149045
Danmark - +45 64 41 78 87
Europæisk repræsentant
- +41 58 928 01 01
Frankrig - 04 26 23 22 00
Holland - +31 88 600 88 10
Indien - +91-22-26871151
Kina - +86 21 61205533

New Zealand - 0800 864 8766
Norge - +47 22 47 76 30
Østrig - +49 711 658538 0
Rusland - +7 495 788 02 04
Schweiz - 0800 928 800
Spanien - +34 902 494 960
Storbritannien - +44 (0) 1925 247810
Sverige - +46 (0) 8 546 20 960
Syd Korea - +82 2 859 4902
Sydafrika - (011) 467 7662/52
Tyskland - +49 711 658538 0
USA - 1 800 888 8882

Lande som ikke er på listen - +1 519 895 0100



Unitron Hearing, a division of
National Hearing Services Inc.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada



sonova
HEAR THE WORLD