

Rekommenderade systemkrav

Systemkomponent	Rekommenderat
Processor	Pentium i5, 3 GHz eller snabbare
RAM	8 GB eller mer
Hårddiskutrymme	4 GB eller mer
Operativsystem som stöds	• Windows Vista, 32- eller 64-bitars, senaste SP • Windows 7, 32- eller 64-bitars, senaste SP • Windows 8, 32- eller 64-bitars, senaste SP • Windows 8.1, 32- eller 64-bitars, senaste SP • Windows 10, 32- eller 64-bitars, senaste SP
Skärmapplösning	1280 x 1024 pixlar
Andra bildskärmen för brukaren	1366 x 768 pixlar
Grafikkort	16 miljoner (24-bitars) färger eller fler
Läsare	DVD-ROM
Seriell COM-port	En för HI-PRO om ansluten via seriell COM-port

Systemkomponent	Rekommenderat
USB-portar	En för varje användningssyfte: • Bluetooth-adapter • Programmering av tillbehör • HI-PRO USB / HI-PRO 2 / iCube II
Programmeringsgränssnitt	• iCube / iCube II • NOAHlink • HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2
Drivrutin för NOAHlink	NOAHlink properties och NOAHlink kernel: senaste tillgängliga version
Internetanslutning	Rekommenderas
Webbläsare	• Internet Explorer® senaste version • Mozilla® Firefox® senaste version • Google® Chrome™ senaste version • Microsoft Edge® senaste version
Ljudkort	Stereo
Uppspelning	20 Hz – 14 kHz
NOAH-version	NOAH 4.5 (NOAH 3.7.1 eller senare krävs)

unitron TrueFit™ software

Framgångsrika utprovningar. Enklare.

Unitron TrueFit v3.3
Installationsguide

A Sonova brand

Installera Unitron TrueFit programvara

1. Mata in Unitron TrueFit DVD i DVD-ROM enheten. Installationsprogrammet bör startas automatiskt av ditt operativsystem. Om inte, gör något av följande:

Gå till: Windows Start, välj Kör... och ange filinformationen.
(t.ex. d:\setup.exe, där d: är DVD-ROM enhetsbeteckning) och klicka på OK.


ELLER

Öppna Utforskaren i Windows (Den här datorn) och lokalisera filen setup.exe på din DVD-ROM-enhet och dubbelklicka sedan på filnamnet.

2. Välj installationsspråk: Engelska, Franska, Tyska eller Nederländska (endast under installationen).



3. När installationsfönstret för Unitron TrueFit visas följer du instruktionerna på skärmen och väljer bland annat installationstyp: NOAH eller Standalone.

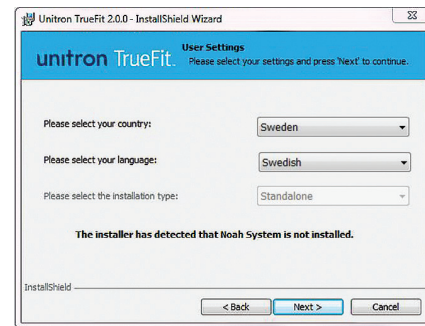

 Instruktioner finns tillgängliga på www.unitron.com/instr i Adobe® Acrobat® PDF format. För att ladda ner dem behöver du ha Adobe Acrobat Reader installerat. Besök Adobe.com för att ladda ner.

 För att få ett gratis exemplar av instruktionerna, vänligen kontakta Unitron genom att använda telefonnumren eller adresserna i denna guide. Ett exemplar kommer att skickas inom 7 dagar.

Behöver du hjälp?

Australien - 1800 212 313
Belgien - +31 88 600 88 10
Brasilien - +55 11 3748 0960
Colombia - +57 1 2149045
Danmark - +45 64 41 78 87
Europeisk representant - +41 58 928 01 01
Frankrike - 04 26 23 22 00
Holland - +31 88 600 88 10
Indien - +91-22-26871151
Kanada - 1 800 265 8255
Kina - +86 21 61205533
Norge - +47 22 47 76 30

Nya Zeeland - 0800 864 8766
Österrike - +49 711 658538 0
Ryssland - +7 495 788 02 04
Schweiz - 0800 928 800
Spanien - +34 902 494 960
Storbritannien - +44 (0) 1925 247810
Sverige - +46 (0) 8 546 20 960
Sydafrika - (011) 467 7662/52
Sydkorea - +82 2 859 4902
Tyskland - +49 711 658538 0
USA - 1 800 888 8882

För andra länder - +1 519 895 0100



Unitron Hearing, a division of
National Hearing Services Inc.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada



sonova
HEAR THE WORLD