

Systèmes recommandés

Composant système	Recommandation
Processeur	Pentium i5, 3 GHz ou plus rapide
RAM	8 Go ou plus
Espace libre sur le disque dur	4 Go ou plus
Systèmes d'exploitation compatibles	<ul style="list-style-type: none">• Windows Vista, 32 bits / 64 bits, dernier SP• Windows 7, 32 bits / 64 bits, dernier SP• Windows 8, 32 bits / 64 bits, dernier SP• Windows 8.1, 32 bits / 64 bits, dernier SP• Windows 10, 32 bits / 64 bits, dernier SP
Résolution écran	1280 x 1024 pixels
Résolution écran patient	1366 x 768 pixels
Carte graphique	16 millions de couleurs (24 bits) ou plus
Lecteur	DVD-ROM
Port COM série	Un pour HI-PRO s'il est connecté via le port COM série

Composant système	Recommandation
Ports USB	Un pour chaque usage : <ul style="list-style-type: none">• Adaptateur Bluetooth• Programmation des accessoires• HI-PRO USB / HI-PRO 2 / iCube II
Interfaces de programmation	<ul style="list-style-type: none">• iCube / iCube II• NOAHlink• HI-PRO/ HI-PRO USB / HI-PRO 2
Pilote NOAHlink	Propriétés de NOAHlink et logiciel d'évaluation de NOAHlink : dernière version disponible
Connexion Internet	Hautement recommandée
Navigateur	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer® dernière version• Mozilla® Firefox® dernière version• Google® Chrome™ dernière version• Microsoft Edge® dernière version
Carte son	Stéréo
Système de lecture	20 Hz – 14 kHz
Version de NOAH	NOAH 4.7 (NOAH 3.7.1 ou plus récent requis)

unitron TrueFit™ software

Des appareillages réussis. Simplifiés.

Unitron TrueFit v3.5
Guide d'installation

A Sonova brand

Installation du logiciel Unitron TrueFit

1. Insérez le DVD Unitron TrueFit dans votre lecteur DVD. Le programme d'installation du logiciel Unitron TrueFit devrait se lancer automatiquement.


Si ce n'est pas le cas :

Allez dans le menu de démarrage de Windows et sélectionnez Exécuter puis saisissez les informations fichier. (ex : d:\setup.exe, où d: représente la lettre de votre lecteur DVD) puis cliquez sur OK.


OU


En utilisant l'Explorateur Windows (poste de travail), localisez le fichier setup.exe dans votre lecteur DVD et double cliquez dessus.


2. Sélectionnez la langue d'installation par défaut : Anglais, Français, Allemand ou Néerlandais (pour la procédure d'installation uniquement).

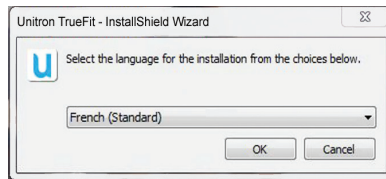

3. Lorsque la fenêtre d'installation du logiciel Unitron TrueFit s'ouvre, suivez les instructions à l'écran, vous pourrez alors choisir vos options d'installation : sous NOAH ou en Standalone.

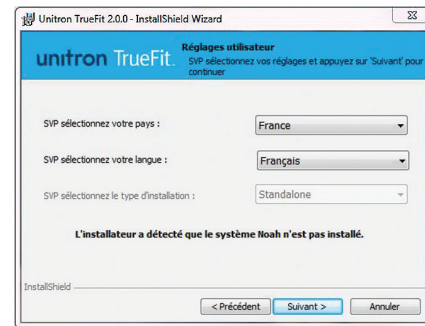

 Les instructions sont disponibles sous www.unitron.com/instr au format Adobe® Acrobat® PDF. Pour les visualiser, vous devez avoir installé Adobe Acrobat Reader. Allez sur le site adobe.com pour le télécharger.

 Pour obtenir une version papier des instructions sans frais, contactez Unitron aux coordonnées figurant au dos de ce guide. Une copie vous sera adressée sous 7 jours.

Besoin d'aide ?

Afrique du Sud - (011) 467 7662/52
Allemagne - +49 711 658538 0
Australie - 1800 212 313
Autriche - +49 711 658538 0
Belgique - +31 88 600 88 10
Brésil - +55 11 3748 0960
Canada - 1 800 265 8255
Chine - +86 21 61205533
Corée du Sud - +82 2 859 4902
Danemark - +45 64 41 78 87
Espagne - +34 902 494 960
États-Unis - 1 800 888 8882

France - 04 26 23 22 00
Inde - +91-22-26871151
Norvège - +47 22 47 76 30
Nouvelle-Zélande - 0800 864 8766
Pays-Bas - +31 88 600 88 10
Représentant européen
- +41 58 928 01 01
Royaume-Uni - +44 (0) 1925 247810
Russie - +7 495 788 02 04
Suède - +46 (0) 8 546 20 960
Suisse - 0800 928 800

Pour les pays non présents sur la liste - +1 519 895 0100



Unitron Hearing, a division of
National Hearing Services Inc.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada



sonova
HEAR THE WORLD