



写真のサイズは実際のサイズではありません。



## パワフルな生活に妥協なし

360+ は毎日、一日中、妥協することなく必要なパワーを提供します。これにより周りでの何が起きているかを把握しつつ、快適性を維持しながら会話を理解することが可能になります。またどんな行動をしても大丈夫な耐久性があります。この補聴器はまた360eもあり、確実な性能を提供します。

360 性能早見表	360+	360e
<b>性能特長</b>		
難聴度	120 dB まで	120 dB まで
高度から重度難聴に適応	あり	あり
チャンネル	8	4
バンド	8	8
電池	675	675
<b>特長のある機能</b>		
新型ハウリングマネージャー	あり	あり
自動プログラム	あり	—
マルチバンド環境適応型指向性	あり	—
スピーチ明瞭度強化 SP	あり	—
アンチショック	あり*	あり
ベースエンハンスメント	あり	—
ノイズリダクション	あり*	あり
<b>機能</b>		
手動聴き取りプログラム	あり	あり
風切音マネージャー	あり	—
自動電話対応	あり	あり
自動FM対応	あり	—
データロギング	あり	あり
<b>オプションアクセサリ</b>		
リモコン	あり	—
直接オーディオ入力ユニット	あり	あり
ミニイヤーフック	あり	あり
いたずら防止電池ドア	あり	あり
いたずら防止音量調節カバー	あり	あり

\* 対応可能



途切れのない人生





妥協のないパワー、  
途切れのない人生、  
それが360™の違いです

毎日の生活は常に変化しています。また音は全ての方向からやって来ます。だからこそ真実に革新的であり高度から重度の難聴のために作られたスーパーパワー補聴器360+が必要です。360+は120dBまでの難聴に対応し、必要なパワーを提供し、毎日の生活の中でのもっともタフなニーズに対応するための耐久性を備えています。360+は人生を楽しむためのすべての活動を通して、周りの世界と常にコンタクトしていることを可能にします。




## 目的を持って作られました: 高度から重度難聴者のための最新機能

360+ は他の難聴レベルの補聴器に使われて成功が証明されている技術を使用しています。これらの技術を高度から重度難聴者に必要なユニークなニーズに合わせました。

### 言葉をはっきりさせる：スピーチ明瞭度強化SP

360+ は会話を的確に検知することによって、背景音を快適なレベルに抑えながら、過去に可能だったものより更なる会話の聴き取り度を向上しました。このユニークな技術は会話を楽しむ、テレビを見る、車の中で話しをする等の毎日の聴き取り状況をアップさせる可能性を提供します。

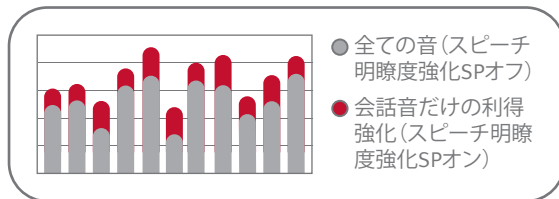

### 変更に対応する：自動プログラム

毎日の生活は一つの音量だけでは機能しません。360+は二つの異なる環境音において最適化された聴き取りを自動に対応します：静かな状況、多人数/パーティーノイズ。オートプロ2として知られているこの機能は、指向性マイクを使い、周りで起こっている音に妥協することなく、また必要な手動プログラムを邪魔することなく、環境音の変化に的確にスムーズに対応します。



### 音量を上げる：ハウリングマネージャーシステム

360+には最新のハウリングマネージャーが搭載されています。このシステムは音質に影響を与えずに、ハウリングを瞬時に検知し抑制します。このため、ハウリング音を出して恥ずかしい思いをすることを心配せず、安心して音量を上げることが可能です。

### 快適に過ごしてください：アンチショック

ドアがバタンと閉まる音、フォークとナイフが食器とぶつかる音等の衝撃音は非常に不快です。360+は最新の衝撃音抑制技術、アンチショックを搭載した補聴器です。アンチショックは周りの会話音と環境音を維持し、何が起きているかを把握しつつ、鍵が落ちる音や、ハイヒールで歩く音、子供のおもちゃの音等の不快な衝撃音を瞬時に抑え快適性を保ちます。

### 注意が散漫する原因を削減： ノイズリダクション

360+は会話音や周りで何が起きているのか把握することを妨げずに的確に背景ノイズを削減し、聴き取りの快適性を強化します。



## あなたの生活のために作られました



人の生活には独自のリズムとペースがあります。360+は、ほこりテスト、湿度テスト、耐汗テストで証明された毎日の使用に最適な精密なデザインの耳かけ式でどんなライフスタイルにも対応できます。

実生活でのストレス	360 性能表
<b>発汗</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ジョギング</li> <li>園芸</li> <li>湿度の高い気候での休暇</li> </ul>	耐汗テスト:長時間汗をかいた状況をテストするために、アマゾンの熱帯雨林に匹敵する湿度と塩分がある状況に500時間放置した。 結果:360の音響性能に全く影響がないことを確認。
<b>ほこりとちり、及び汗</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>砂場で遊ぶ</li> <li>農業</li> <li>工事現場で働く</li> </ul>	ほこりテスト:長時間細かいほこりがたつ中に放置。 結果:360内にほこりの浸入がなかったことを確認。
<b>装用と破損</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>プログラムボタンを押す</li> <li>音量調節をする</li> <li>電池を取り替える</li> </ul>	耐久テスト:音量調節とプログラムボタンを8万回押す。7300回電池ドアを開閉。 結果:すべてのメカニック機器は完全に正常で、360はまだまだ持つことを確認。
<b>耐衝撃</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>スポーツを楽しむ</li> <li>360を落としてしまう</li> <li>360が机やキッチンカウンターから落ちる</li> </ul>	衝撃テスト:異なった角度から360を落とす。高さは6フィート(約180センチ)。 結果:360の音響に何の影響もないことを確認。



## 毎日の生活のための最新の対策

360+ は毎日の生活でスーパーパワーの補聴器を装用する上で実際に起こる問題に対応するための様々な対策を提供します。

### 外部オーディオ入力

- 1-直接オーディオ入力(DAI)ユニット (オプション) - FMシステム、MP3プレイヤーなど様々なタイプの聴取支援装置と外部オーディオ入力に互換性あり。
- 2-気ままにDAI - 補聴器にふさわしいDAI設定に自動に変更。手動プログラムの変更の必要がない。

### スマートコントロール (オプション)

360+ には次の機能の調節を人目につかずに行え、柔軟性が高まりました:

- 音量調節
- プログラム変更ボタン
- 電話プログラム
- 誤作動防止(オン-オフ)
- 起動時のプログラムに戻すホームボタン

