

Indigo™ Intras

AutoPro4™


16 canaux, 16 bandes, directionnalité adaptative multibande

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL AUDITIF

- AutoPro4 analyse intelligemment le signal d'entrée et s'adapte rapidement à l'une des quatre destinations sonores distinctes. Les fonctions adaptatives peuvent être réglées et personnalisées pour optimiser la qualité sonore et le confort.
- Le système de micros directionnels adaptatifs multibandes suit et supprime jusqu'à 16 sources de bruit en mouvement différentes, tout en se concentrant sur les sons émis devant l'utilisateur.
- La fonction antiShock réduit instantanément le niveau de bruits impulsionnels (p. ex., une porte qui claque), tout en préservant la qualité sonore et l'intelligibilité de la parole.
- La fonction 'amélioration de la parole avec dépendance du niveau' analyse les signaux d'entrée, pouvant identifier et accentuer la parole, et ce, de façon indépendante dans chacune des 16 bandes. Le degré d'amplification dépendra du niveau d'entrée de la parole.
- L'Annulation de Phase assure le suivi continu de l'appareil auditif, décèle le larsen et calcule avec précision le contre-signal nécessaire pour l'annuler.
- La fonction myMusic™ permet une écoute améliorée de la musique en faisant ressortir les sons pleins et riches.
- Le réducteur de bruit analyse les entrées et réduit les signaux de bruit automatiquement et indépendamment sur chacune des 16 bandes.
- La gestion bruit de vent se déclenche intuitivement en cas de vent modéré ou fort.
- L'indicateur du volume idéal émet un signal sonore lorsque le gain correct est atteint avec le contrôle du volume.
- La fonction d'enregistrement des données Data Logging enregistre avec précision l'utilisation de l'appareil auditif, les modifications du volume et l'utilisation des programmes manuels.
- 16 canaux offrant un traitement du signal haute résolution.
- Trois programmes manuels supplémentaires permettent une adaptation sur mesure aux besoins et préférences de chacun.
- Indicateur de pile faible.
- Mise en marche retardée.
- Pour arrêter l'appareil, il suffit d'ouvrir le tiroir pile.
- Indigo peut être programmé à l'aide du logiciel d'appareillage U:fit compatible NOAH ou avec la version U:fit Standalone.

OPTIONS

- Le bouton de commande multifonctionnel onBoard™ permet, à la convenance de l'utilisateur, de sélectionner les programmes d'écoute ou de régler le volume des appareils.
- Le mode bobine téléphonique (T) ou micro/bobine téléphonique (MT) peut être choisi comme l'un des trois programmes indépendants.
- Easy-t peut être réglé pour assurer la commutation automatique vers un programme spécialisé pour le téléphone.

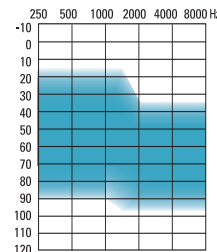


Plage d'Appareillage



122/60

Conque Power

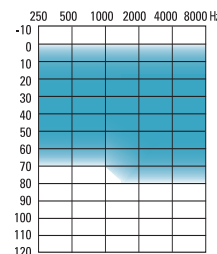


Plage d'Appareillage



115/50

Conque

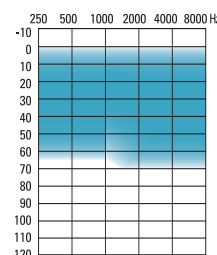


Plage d'Appareillage



113/48

Canal/Demi Conque

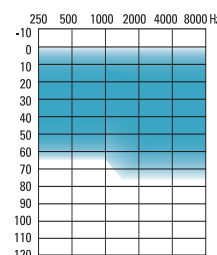

Plage d'Appareillage



112/40

Mini-canal / CIC

L'intra auriculaire Indigo permet d'appareiller des pertes auditives légères à profondes à configuration d'audiogramme allant de la pente inversée à la pente abrupte.

