

Derrière l'oreille

En haut de la courbe



Voici le nouveau Stride P


Vos patients vont adorer Stride P. Le design inspiré de ce contour d'oreille sans fil intègre un bouton poussoir et un contrôle du volume intuitifs pour un plus grand confort du bout des doigts.

Stride en un coup d'œil

	Pro	800	700	600	500
Canaux	20	20	16	10	6
Fonctions distinctives	Descriptif				
SpeechZone 2	Dans les situations bruyantes, cette fonction adopte une stratégie de microphone optimale qui permet de cibler la parole depuis n'importe quelle direction	SpeechZone 2	SpeechZone		
Traitement spatial binaural	Les aides auditives fonctionnent conjointement afin de localiser la provenance de la parole	•	•		
SoundNav	Programme automatique qui identifie et effectue discrètement la transition entre les environnements, avec une attention particulière portée sur les conversations	7 environnements	6 environnements	5 environnements	2 environnements
Sound Conductor	Équilibre les fonctions appropriées de manière dynamique, offrant intelligibilité de la parole et confort tout en conservant une qualité sonore naturelle	•	•	•	•
Log It All	Enregistre le temps passé dans chacun des sept environnements de SoundNav pour appuyer les recommandations de technologie	•	•	•	•
MyMusic	Fonction permettant d'améliorer les sonorités musicales (réglage par l'audioprothésiste)	Automatique binaural	Automatique binaural	•	•
Programme téléphonique binaural	Transmet la conversation de l'oreille du téléphone à l'oreille opposée sans accessoire supplémentaire	•	•	•	•
Gestionnaire d'Adaptation Automatique	Permet aux patients de bénéficier d'une transition intelligente en douceur vers l'amplification souhaitée, pour une compréhension optimale de la parole sur le long terme depuis l'acceptation du premier appareillage	•	•	•	•
Caractéristiques					
Directivité adaptative	Stratégie directionnelle qui identifie les multiples sources de bruit de fond et les supprime	Multibande	Multibande	Multibande	Multibande
Compression fréquentielle	Comprime et décale les sons hautes fréquences inaudibles vers la zone d'audition résiduelle du patient	•	•	•	•
AntiShock	Élimine la gêne occasionnée par les bruits impulsionnels, brefs et soudains	•	•	•	•

Pour tous les niveaux de technologie :

- Effet Pavillon
- Équilibre Sonore Naturel
- Data logging
- Anti Larsen
- Gestion du vent
- Masqueur d'acouphènes
- Programmes manuels
- Programmes de transmission
- DuoLink
- Easy-t
- Easy-DAI
- Technologie IntelliVent pour les options d'appareillage sur-mesure
- Revêtement plasma
- IP67 pour Stride Pet Stride P Dura
- Bobine téléphonique
- Traitement WDRC avec NAL-NL1, NAL-NL2 et DSL v5
- Traitement linéaire avec DSL v5

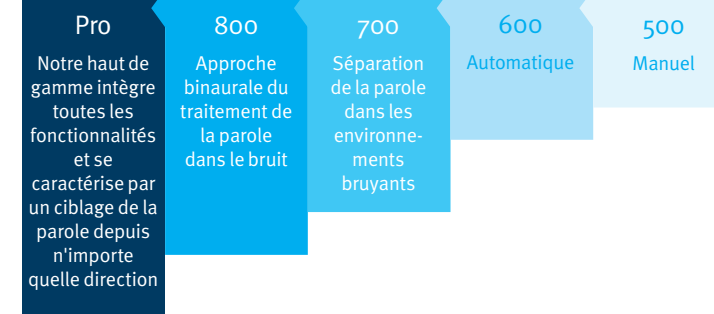

La compatibilité peut être limitée selon le type de produit
Grâce à de nombreux accessoires disponibles pour tous les niveaux de technologie, vous disposez de moyens supplémentaires pour apporter une réponse optimale aux besoins de vos patients.

unitron.com/fr

© 2015 Unitron. All rights reserved. 15-030 028-6176-04

Stride™

Powered by North



unitron. Hearing matters



Aidez chaque patient à trouver le bon Stride

Stride™ ouvre la voie en matière de conception axée sur le patient. Cette nouvelle gamme de styles de contours d'oreille (BTE) et d'intra-auriculaires (ITE) impressionne par son esthétique et son confort d'appareillage, et séduit les patients par ses contrôles intuitifs qui offrent des choix adaptés à tous les besoins. Reposant sur la plateforme North, qui marque le début d'une nouvelle ère en matière de qualité sonore naturelle, Stride regorge de technologies pour véritablement permettre à vos patients de cibler les conversations dans tous leurs environnements d'écoute. Aider vos patients à trouver une solution adaptée n'a jamais été aussi simple grâce à Stride.



Contours d'oreille Stride

Le nouveau contour d'oreille sans fil Stride P est doté d'une pile de type 13 et allie un design élégant à des contrôles doubles, tandis que le modèle Stride P Dura est conçu pour résister à l'eau et offrir une grande robustesse.



Intra-auriculaires Stride

La toute nouvelle gamme d'intra-auriculaires Stride est entièrement repensée, dedans comme dehors, offrant des produits personnalisés d'une grande diversité, des contrôles intuitifs, une robustesse supérieure et un confort optimal.

Joignez-vous aux conversations en toute confiance

Notre nouveau programme automatique SoundNav offre une classification précise de sept environnements, parmi lesquels quatre sont tout particulièrement axés sur les conversations. Fonctionnant de concert avec d'autres technologies novatrices (Sound Conductor et SpeechZone™ 2), SoundNav permet aux patients de prendre part aux conversations, automatiquement et sans effort, comme jamais auparavant. Ils redécouvrent aussi le confort de la perception dans des environnements calmes et bruyants et peuvent apprécier la pureté du son de la musique.

