

# Moxi™ Kiss E

312 BTE receiver in canal (RIC)

## Særlige funktioner

6 kanaler

SmartFocus

Findes i alle manuelle programmer - tilpasseren indstiller programmet til komfort eller klarhed

Naturlig Lydbalance

Adaptiv funktion til minimering af artefakter, der kan opstå, når forstærket lyd kombineres med direkte lyd i øregangen. Naturlig Lydbalance overvåger kontinuerligt disse lyde og foretager nøjagtige justeringer for at bevare et klart, balanceret signal

Automatisk Adaptations Manager

Giver klienten en periode med automatisk og jævn tilpasning; den bedst mulige pasform ved første brug, kombineret med maksimalt udbytte af taleforståelse på lang sigt

Feedback manager

Giver maksimal brugbar forstærkning ved at undertrykke feedback-transienter, inden de bliver hørbare

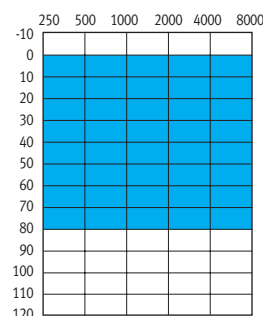
Trådløs teknologi

DuoLink – tilpasninger, der er lavet på ét høreapparat bliver automatisk overført til det andet øre


## Øvrige funktioner

- 4 manuelle programmer
- Selvjusterende retningsbestemt mikrofon
- AntiShock™
- MyMusic™
- Vindstøj manager
- Taleforbedring LD
- Støjreduktion
- Tinnitus-masker
- Data loggin
- Easy-t
- Valgfri Unitron fjernebetjening
- Valgfri trådløs programmering med iCube
- IntelliVent teknologi er tilgængelig ved individuelle ørepropper


## Tilpasningsvejledning



Moxi Kiss E (XS)

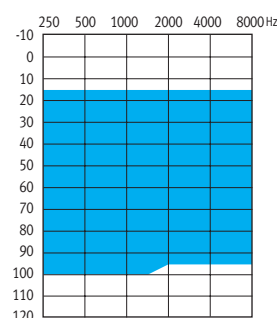

Moxi Kiss E power (xP)

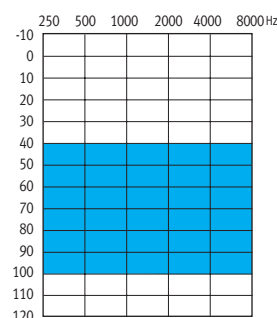

Moxi Kiss E super power (xSP)

Moxi Kiss E er velegnet fra milde til svære hørenedsættelser og kan tilpasses audiogrammer i området mellem omvendt kurve og stejlt nedadgående kurve.




# Moxi Kiss E RIC

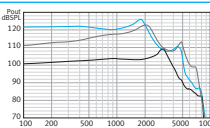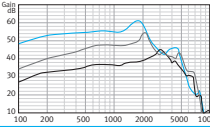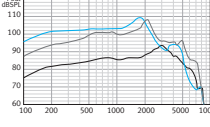Moxi Kiss E  
standard  
(xS receiver)




Moxi Kiss E  
power  
(xP receiver)

Moxi Kiss E  
super power  
(xSP receiver)

## ANSI 3.22 2009/IEC 118-7 2005 2cc coupler teknisk data

|                                                                                  |  |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Referencetestfrekvens – IEC 118-7 (kHz)                                          |  | 1.6         | 1.6         | 1.6         |
|  |  |             |             |             |
| <b>OSPL90</b>                                                                    |  |             |             |             |
| Maksimum (dB SPL)                                                                |  | 112         | 126         | 129         |
| Nominel (dB SPL)                                                                 |  | 109         | 123         | 126         |
| HFA-OSPL90 (dB SPL)                                                              |  | 105         | 118         | 120         |
| ved RTF (dB SPL)                                                                 |  | 104         | 120         | 124         |
|  |  |             |             |             |
| <b>Fuld forstærkning (indgang 50 dB SPL)</b>                                     |  |             |             |             |
| Maksimum (dB)                                                                    |  | 45          | 55          | 61          |
| HFA-FOG (dB)                                                                     |  | 39          | 48          | 55          |
| ved RTF (dB)                                                                     |  | 38          | 49          | 60          |
|  |  |             |             |             |
| <b>Reference testindstillinger</b>                                               |  |             |             |             |
| Frekvensområde (Hz)                                                              |  | <100-8300   | <100-7300   | <100-5500   |
| Reference test gain (dB)                                                         |  | 28          | 41          | 43          |
| Nuværende på RTS (mA)                                                            |  | 1.15        | 1.25        | 1.2         |
| Typisk batterilevetid (t)                                                        |  | 141         | 130         | 135         |
| Ekvivalent input støj på RTS (dB SPL)                                            |  | 19          | 18          | 19          |
| Total harmonisk klirforvrængning ved 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)                   |  | 1.0/1.0/1.0 | 1.5/1.0/0.5 | 0.5/0.5/0.5 |
| <b>Elektromagnetisk kompatibelt</b>                                              |  |             |             |             |
| EMC-immunitet i henhold til ANSI C63.19-2001 EMC, omni                           |  | M4          | M4          | M4          |

## 118-o OES coupler teknisk data
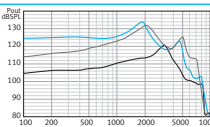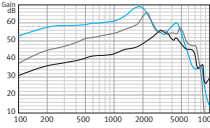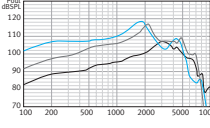
|                                                                                                                    |  |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Referencetestfrekvens - IEC 118-o (kHz)                                                                            |  | 1.6         | 1.6         | 1.6         |
|                                   |  |             |             |             |
| <b>OSPL90</b>                                                                                                      |  |             |             |             |
| Maksimum (dB SPL)                                                                                                  |  | 121         | 132         | 133         |
| ved RTF (dB SPL)                                                                                                   |  | 113         | 129         | 132         |
|                                  |  |             |             |             |
| <b>Fuld forstærkning (indgang 50 dB SPL)</b>                                                                       |  |             |             |             |
| Maksimum (dB)                                                                                                      |  | 56          | 65          | 69          |
| ved RTF (dB)                                                                                                       |  | 46          | 58          | 68          |
|                                  |  |             |             |             |
| <b>Reference testindstillinger</b>                                                                                 |  |             |             |             |
| Frekvensområde (DIN 45605) (Hz)                                                                                    |  | <100-8600   | <100-7500   | <100-5800   |
| Reference test gain (dB)                                                                                           |  | 39          | 51          | 57          |
| Nuværende på RTS (mA)                                                                                              |  | 1.15        | 1.2         | 1.2         |
| Typisk batterilevetid (t)                                                                                          |  | 141         | 135         | 135         |
| Ekvivalent input støj på RTG (dB SPL)                                                                              |  | 19          | 18          | 19          |
| Total harmonisk klirforvrængning ved 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)                                                     |  | 1.0/1.5/1.5 | 1.5/1.5/1.0 | 1.0/1.0/0.5 |
| <b>Elektromagnetisk kompatibelt</b>                                                                                |  |             |             |             |
| EMC-immunitet i henhold til IEC 60118-13, feltstyrke 90/50/35 V/m, omni<br>IRIL lav/medium/høj båndbredde (dB SPL) |  | 37/25/47    | 37/25/47    | 37/25/47    |

## Signaturforklaring Testforhold

— Moxi Kiss E xS  
— Moxi Kiss E xP  
— Moxi Kiss E xSP

Batteristørrelse: 312; Kilde:spænding 1,3 V.  
Målingerne er foretaget med lukket konfiguration ved hjælp af en HA-1 kobler (ANSI-3.7-1995) eller en okkluderet øresimulator (EN 60711, kobleranordning i henhold til fig. 4 i teststandarden). Høreapparatet er sat til Unitron True Fit testindstillingerne. Lydkupler bør aldrig benyttes til patienter med perforerede trommehinder, blotlagte mellemører, eller kirurgisk ændrede øregange. I tilfælde af sådanne forhold, anbefaler vi at bruge en specialfremstillet øreprop. Lydtryksniveauet for disse høreapparater overstiger 132 dB SPL. Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationsdata uden varsel ved introduktion af forbedringer.