

Moxi™ Kiss Pro

312 BTE receiver in canal (RIC)

Særlige funktioner

20 kanaler

SpeechZone ved brug af binaural spatial behandling

SpeechZone™ lader automatisk brugerne nyde samtaler - selv i de sværeste lyttesituationer. SpeechZone, som benyttes ved binaural spatial behandling, aktiveres når høreapparaterne opfatter tale forfra i et støjende miljø – så vil begge høreapparater fokusere på talen

Automatiske programmer med SmartFocus

Klienterne kan opleve den bedste automatiske ydeevne med optimal balance mellem tre lyttemiljøer plus en unik, specialiseret behandling af musik. Desuden forbedrer integrationen af SmartFocus™ yderligere taleforståelsen i støj og giver automatisk optimal komfort

Naturlig Lydbalance

Adaptiv funktion til minimering af artefakter, der kan opstå, når forstærket lyd kombineres med direkte lyd i øregangen. Naturlig Lydbalance overvåger kontinuerligt disse lyde og foretager nøjagtige justeringer for at bevare et klart, balanceret signal

Automatisk Adaptations Manager

Giver klienten en periode med automatisk og jævn tilpasning; den bedst mulige pasform ved første brug, kombineret med maksimalt udbytte af taleforståelse på lang sigt

Pinna-effekt

Denne funktion bruger sofistikerede beregninger til at genskabe naturlig direktionalitet

Feedback manager

Giver maksimal brugbar forstærkning ved at undertrykke feedback-transienter, inden de bliver hørbare

Trådløs teknologi

Binaural telefon – streamer lyd til det modsatte øre af telefonøret, så der er binaural hørelse, mens telefonen bruges

DuoLink – justeringer af program, lydstyrke og SmartFocus udføres på ét høreapparat og overføres automatisk til det andet øre

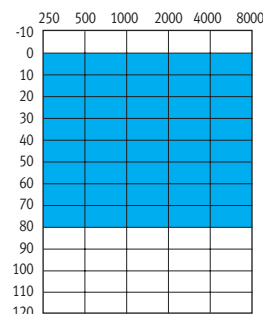
uDirect™ 2 (valgfrit) – trådløs grænseflade mellem høreapparater og Bluetooth® aktiverede enheder (f.eks. mobiltelefoner)

uTV™ 2 (valgfrit) – streamer lyd fra et tv eller en lydkilde til uDirect 2


Øvrige funktioner

- Retningsbestemt adaptiv Multiband mikrofon
- 3 manuelle + 3 trådløse streamingprogrammer
- AntiShock™
- Selvlæring
- MyMusic™
- Vindstøj manager
- IntelliVent teknologi er tilgængelig ved individuelle ørepropper
- Taleforbedring LD
- Støjreduktion
- Tinnitus-masker
- Data logging
- Easy-t
- DAI via uDirect/uDirect 2
- Mulige fjernbetjening
- Valgfri trådløs programmering med iCube


Tilpasningsvejledning



Moxi Kiss Pro (XS)

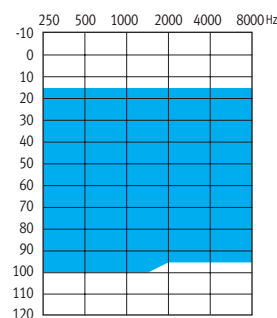

Moxi Kiss Pro power (xP)

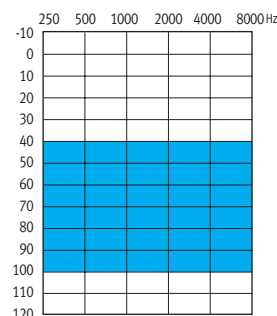

Moxi Kiss Pro super power (xSP)

Moxi Kiss Pro er velegnet fra milde til svære hørenedsættelser og kan tilpasses audiogrammer i området mellem omvendt kurve og stejlt nedadgående kurve.




Moxi Kiss Pro RIC

Moxi Kiss Pro
standard
(xS receiver)




Moxi Kiss Pro
power
(xP receiver)

Moxi Kiss Pro
super power
(xSP receiver)

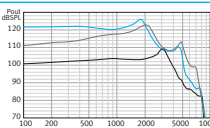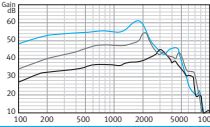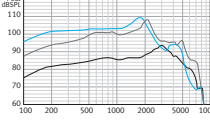ANSI 3.22 2009/IEC 118-7 2005 2cc coupler teknisk data

Referencetestfrekvens – IEC 118-7 (kHz)		1.6	1.6	1.6
				
OSPL90				
Maksimum (dB SPL)		112	126	129
Nominel (dB SPL)		109	123	126
HFA-OSPL90 (dB SPL)		105	118	120
ved RTF (dB SPL)		104	120	124
				
Fuld forstærkning (indgang 50 dB SPL)				
Maksimum (dB)		45	55	61
HFA-FOG (dB)		39	48	55
ved RTF (dB)		38	49	60
				
Reference testindstillinger				
Frekvensområde (Hz)		<100-8300	<100-7300	<100-5500
Reference test gain (dB)		28	41	43
Nuværende på RTS (mA)		1.15	1.25	1.2
Typisk batterilevetid (t)		141	130	135
Ekivalent input støj på RTS (dB SPL)		19	18	19
Total harmonisk klirforvrængning ved 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)		1.0/1.0/1.0	1.5/1.0/0.5	0.5/0.5/0.5
Elektromagnetisk kompatibelt				
EMC-immunitet i henhold til ANSI C63.19-2001 EMC, omni		M4	M4	M4

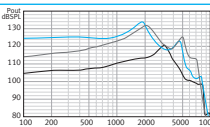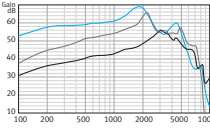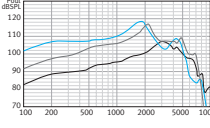118-o OES coupler teknisk data

Referencetestfrekvens - IEC 118-o (kHz)		1.6	1.6	1.6
				
OSPL90				
Maksimum (dB SPL)		121	132	133
ved RTF (dB SPL)		113	129	132
				
Fuld forstærkning (indgang 50 dB SPL)				
Maksimum (dB)		56	65	69
ved RTF (dB)		46	58	68
				
Reference testindstillinger				
Frekvensområde (DIN 45605) (Hz)		<100-8600	<100-7500	<100-5800
Reference test gain (dB)		39	51	57
Nuværende på RTS (mA)		1.15	1.2	1.2
Typisk batterilevetid (t)		141	135	135
Ekivalent input støj på RTG (dB SPL)		19	18	19
Total harmonisk klirforvrængning ved 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)		1.0/1.5/1.5	1.5/1.5/1.0	1.0/1.0/0.5
Elektromagnetisk kompatibelt				
EMC-immunitet i henhold til IEC 60118-13, feltstyrke 90/50/35 V/m, omni IRIL lav/medium/høj båndbredde (dB SPL)		37/25/47	37/25/47	37/25/47

Signaturforklaring Testforhold

— Moxi Kiss Pro xS
— Moxi Kiss Pro xP
— Moxi Kiss Pro xSP

Batteristørrelse: 312; Kilde:spænding 1,3 V.
Målingerne er foretaget med lukket konfiguration ved hjælp af en HA-1 kobler (ANSI-3.7-1995) eller en okkluderet øresimulator (EN 60711, kobleranordning i henhold til fig. 4 i teststandarden). Høreapparatet er sat til Unitron True Fit testindstillingerne. Lydkupler bør aldrig benyttes til patienter med perforerede trommehinder, blotlagte mellemører, eller kirurgisk ændrede øregange. I tilfælde af sådanne forhold, anbefaler vi at bruge en specialfremstillet øreprop. Lydtryksniveauet for disse høreapparater overstiger 132 dB SPL. Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationsdata uden varsel ved introduktion af forbedringer.