

Quantum™ 6

13 BTE serien

Særlige funktioner

6 kanaler

Næste generations automatik med SmartFocus

Klienterne kan opleve den bedste automatiske ydeevne med optimal balance mellem to lyttemiljøer. Desuden forbedrer integrationen af SmartFocus™ yderligere taleforståelsen i støj og giver automatisk optimal komfort

Naturlig Lyd Balance

Adaptiv funktion til minimering af artefakter, der kan opstå, når forstærket lyd kombineres med direkte lyd i øregangen. Naturlig Lyd Balance overvåger kontinuerligt disse lyde og foretager nøjagtige justeringer for at bevare et klart, balanceret signal

Automatisk Adaptations Manager

Giver klienten en periode med automatisk og jævn tilpasning; den bedst mulige pasform ved første brug, kombineret med maksimalt udbytte af taleforståelse på lang sigt

Næste generations feedbacksystem

Næste generations feedbacksystem udnytter styrken fra Unitrons nye Era™ platform og tilbyder maksimal brugbar forstærkning ved at undertrykke feedbacktransienter, før de er hørbare

Trådløs teknologi

DuoLink – justeringer af program, lydstyrke og SmartFocus udføres på ét høreapparat og overføres automatisk til det andet øre

uDirect (valgfrit) – trådløs grænseflade mellem høreapparater og Bluetooth® aktiverede enheder (f.eks. mobiltelefoner)

uTV™ (valgfrit) – streamer lyd fra et tv eller en lydkilde til uDirect

Fjernbetjening (valgfrit)

Vælg mellem fjernbetjening til de vigtigste funktioner eller til alle funktioner.

- Unitron fjernbetjening
- Smart Control


Smart Alert System (valgfrit)

Unik løsning, der gør opmærksom på alarmer i hjemmet


Øvrige funktioner

- 3 manuelle + 3 trådløse streamingprogrammer
- IntelliVent teknologi fås til ørepropper og sleeve-ørepropper
- Retningsbestemt adaptiv Multiband mikrofon
- AntiShock™
- MyMusic™
- Taleforbedring LD
- Støjreduktion
- Vindstøj manager
- Data logging
- Easy-t
- Easy-DAI
- Valgfri trådløs programmering med iCube

Tilpasnings vejledning

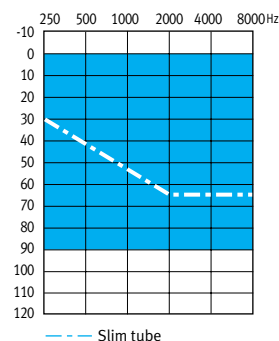

Quantum 6 S
(standard)

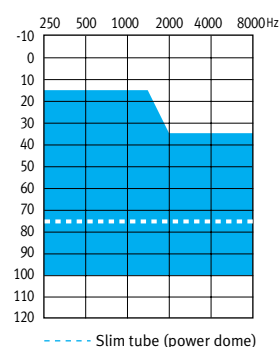

Quantum 6 HP
(high power)

Quantum 6 er velegnet til milde til svære høretab og kan tilpasses audiogrammer i området mellem omvendt kurve og stejlt nedadgående kurve.

Quantum 6 13 BTE serien

Quantum 6 S
tynd slange
(valgfri)






Quantum 6 S
(standard)

Quantum 6 HP
(high power)

Quantum 6 HP
tynd slange
(valgfri)





ANSI 3.22 2003/IEC 118-7 2CC TEKNISKE DATA FOR KOBLER

Referencetestfrekvens – IEC 118-7 (kHz)	2,5	1,6	1,6	2,5
OSPL₉₀				
Maksimum (dB SPL)	124	129	133	130
Nominel (dB SPL)	122	126	130	127
ANSI HFA (dB SPL)	109	119	125	112
ved RTF (dB SPL)	105	121	123	109
Fuld forstærkning (indgang 50 dB SPL)				
Maksimum (dB)	53	60	70	65
ANSI HFA (dB)	40	51	64	50
ved RTF (dB)	36	53	60	47
Basisfrekvensrespons (ANSI 2003)				
Frekvensområde (Hz)	100-6700	100-6700	100-6000	100-6900
Referencetestforstærkning – RTG (dB)	32	42	47	35
Strømforbrug ved RTG (mA)	1,3	1,3	1,3	1,3
Typisk batterilevetid (t)	240	240	240	240
Ækvivalent inputstøj ved RTG (dB SPL)	20	19	19	20
Total harmonisk klirforvrængning ved 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	1/1/1	2/2/1	3/1,5/1	1/1/1
Induktionsspolefølsomhed (ANSI 2003, 31,6 mA/m)				
HFA SPLITS/STS-RSETS (dB SPL/dB)	90/0	103/0	107/0	93/0
EMC-immunitet i henhold til ANSI c63.19-2001 EMC, omni/telespole	M4/T4	M4/T4	M4/T4	M4/T4

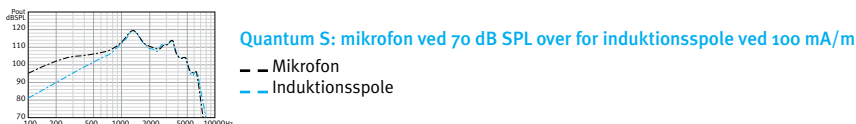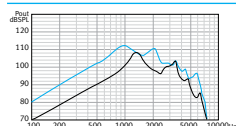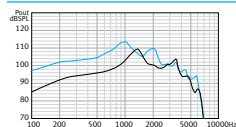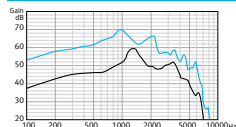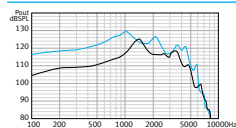

IEC 118-0 OES TEKNISKE DATA FOR KOBLER

Referencetestfrekvens – IEC 118-0 (kHz)	2,5	1,6	1,6	2,5
OSPL₉₀				
Maksimum (dB SPL)	126	131	135	131
ved 500 Hz (dB SPL)	119	116	125	131
ved RTF (dB SPL)	119	130	130	124
Fuld forstærkning (indgang 50 dB SPL)				
Maksimum (dB)	58	64	75	70
ved RTF (dB)	50	63	67	60
Basisfrekvensrespons				
Frekvensområde (DIN 45605) (Hz)	100-5300	100-7000	100-6200	100-6700
Referencetestforstærkning – RTG (dB)	44	55	55	49
Strømforbrug ved RTG (mA)	1,3	1,3	1,3	1,3
Typisk batterilevetid (t)	240	240	240	240
Ækvivalent inputstøj ved RTG (dB SPL)	12	19	19	12
Total harmonisk klirforvrængning ved 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	2/2/1	3/3/1	4/2,5/1,5	2/2/1
Induktionsspolefølsomhed				
ved RTF (graf vist for 31,6 mA/m ved RTG) (dB SPL)	105	114	116	108
Maks. (1 mA/m ved fuld forstærkning) (dB SPL)	86	95	104	99
ved RTF (1 mA/m ved fuld forstærkning) (dB SPL)	81	94	99	91
EMC-immunitet i henhold til IEC 60118-13, feltstyrke 75/50 V/m, omni IRIL lavt/højt bånd (dB SPL)	26/45	26/45	26/52	26/52

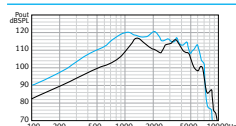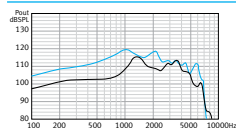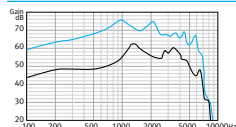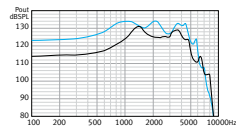

Signaturforklaring

— Quantum 6 S
— Quantum 6 HP

TESTFORHOLD

Hook: med filter; Batteristørrelse: 13; Kilde:spænding 1,3 V. Slange: længde 25 mm, indre diameter 1,93 mm
Måledataene blev opnået med høreapparatet indstillet på lineær, omnistand med alle adaptive funktioner deaktiveret.

Lydakupler bør aldrig benyttes til patienter med perforerede trommehinder, blotlagte mellemører, eller kirurgisk ændrede øregange.
I tilfælde af sådanne forhold, anbefaler vi at bruge en specialfremstillet øreprop.
Lydtryksniveauet for disse høreapparater overstiger 132 dB SPL.
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationsdata uden varsel ved introduktion af forbedringer.