

# Moxi™ Kiss 6

## Pile 312 – Ecouteur intra canal (RIC)

### Fonctions distinctives

6 canaux

#### Programme Automatique avec SmartFocus

Les clients peuvent bénéficier d'une performance supérieure en matière d'automatisme grâce à une combinaison optimale de deux environnements sonores et d'un traitement unique de la musique. De plus, l'intégration de la technologie SmartFocus™ améliore la clarté de la parole dans les environnements bruyants et offre automatiquement un confort optimal

#### Équilibre sonore naturel

Fonction adaptative permettant de minimiser les artéfacts acoustiques pouvant survenir lorsqu'un son amplifié se mêle à un son direct dans le conduit auditif. La fonction Équilibre sonore naturel contrôle ces sons et effectue des réglages de précision afin de conserver la clarté et l'équilibre du signal

#### Gestionnaire d'adaptation automatique

Permet une période de réglage automatique en douceur pour le client, offre la meilleure acceptation spontanée possible pour un premier appareillage avec un bénéfice maximum en matière d'intelligibilité de la parole à long terme

#### Anti Larsen

Offre un gain maximum en supprimant le larsen avant qu'il ne devienne audible

#### Technologie wireless

DuoLink – les réglages du programme, du volume et de la fonction SmartFocus sont effectués sur un appareil auditif et automatiquement transférés à l'autre oreille

uDirect™ 2 (optionnel) – interface wireless entre les aides auditives et les dispositifs Bluetooth® (ex. téléphones portables)

uTV™ 2 (en option) – transmet le son d'une télévision ou d'une source audio au dispositif uDirect 2

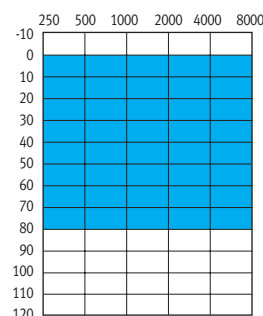
#### Télécommande (option)

Permet des fonctionnalités essentielles


### Fonctions supplémentaires

- Microphone directionnel adaptatif multibandes
- 3 programmes de transmission manuels + 3 programmes wireless
- AntiShock™
- MyMusic™
- Système de gestion du bruit du vent
- Amélioration de la qualité de la parole avec dépendance de niveau
- Réduction du bruit
- Masqueur d'acouphène
- Enregistrement des données – data logging
- Easy-t
- DAI via uDirect/uDirect 2
- Programmation sans câble avec iCube
- La technologie IntelliVent est disponible sur les micro embouts sur mesure


### Plages d'appareillage



Moxi Kiss 6  
(XS)

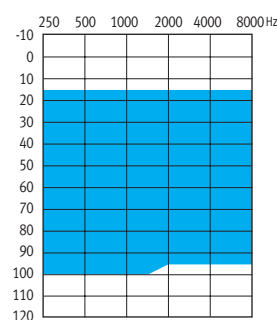

Moxi Kiss 6  
puissant (XP)

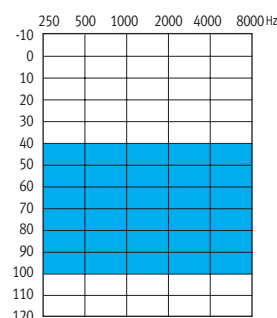

Moxi Kiss 6  
super puissant (XSP)

Le modèle Moxi Kiss 6 convient pour les pertes auditives légères à sévères et à des configurations d'audiogrammes allant de courbes inversées à des courbes à pente marquée.




# Moxi Kiss 6 RIC

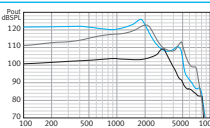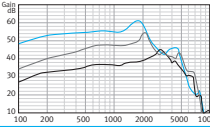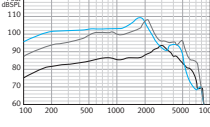Moxi Kiss 6  
standard  
(écouteur xS)




Moxi Kiss 6  
puissant  
(écouteur xP)

Moxi Kiss 6  
super puissant  
(écouteur xSP)

## Données techniques coupleur 2cc ANSI 3.22 2009/IEC 118-7 2005

| Fréquence référence de test – IEC 118-7 (kHz)                                    |                                                          | 1.6         | 1.6         | 1.6         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | OSPL90                                                   |             |             |             |
|                                                                                  | Maximum (dB SPL)                                         | 112         | 126         | 129         |
|                                                                                  | Nominal (dB SPL)                                         | 109         | 123         | 126         |
|                                                                                  | HFA-OSPL90 (dB SPL)                                      | 105         | 118         | 120         |
| à la RTF (dB SPL)                                                                |                                                          | 104         | 120         | 124         |
|  | Gain maximum (Entrée 50 dB SPL)                          |             |             |             |
|                                                                                  | Maximum (dB)                                             | 45          | 55          | 61          |
|                                                                                  | HFA-FOG (dB)                                             | 39          | 48          | 55          |
|                                                                                  | à la RTF (dB)                                            | 38          | 49          | 60          |
|  | Réglages test références -RTS                            |             |             |             |
|                                                                                  | Plage de fréquence (Hz)                                  | <100-8300   | <100-7300   | <100-5500   |
|                                                                                  | Gain test référence - RTG (dB)                           | 28          | 41          | 43          |
|                                                                                  | Consommation au RTS (mA)                                 | 1.15        | 1.25        | 1.2         |
|                                                                                  | Durée moyenne de la pile (h)                             | 141         | 130         | 135         |
|                                                                                  | Bruit d'entrée équivalent au RTS (dB SPL)                | 19          | 18          | 19          |
|                                                                                  | Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%) | 1.0/1.0/1.0 | 1.5/1.0/0.5 | 0.5/0.5/0.5 |
|                                                                                  | Compatibilité électromagnétique                          |             |             |             |
| Immunité EMC par ANSI C63.19-2001 EMC, omnidirectionnelle                        |                                                          | M4          | M4          | M4          |

## Données techniques coupleur OES IEC 118-o
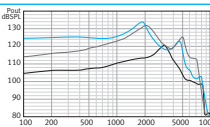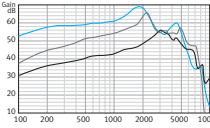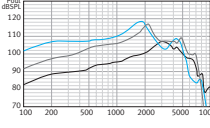
| Fréquence référence de test (RTF) – IEC 118-o (kHz)                                                                             |                                                          | 1.6         | 1.6         | 1.6         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                | OSPL90                                                   |             |             |             |
|                                                                                                                                 | Maximum (dB SPL)                                         | 121         | 132         | 133         |
|                                                                                                                                 | à la RTF (dB SPL)                                        | 113         | 129         | 132         |
|                                               | Gain maximum (Entrée 50 dB SPL)                          |             |             |             |
|                                                                                                                                 | Maximum (dB)                                             | 56          | 65          | 69          |
|                                                                                                                                 | à la RTF (dB)                                            | 46          | 58          | 68          |
|                                               | Réponse en fréquence de base                             |             |             |             |
|                                                                                                                                 | Plage de fréquence (DIN 45605) (Hz)                      | <100-8600   | <100-7500   | <100-5800   |
|                                                                                                                                 | Gain test référence – RTG (dB)                           | 39          | 51          | 57          |
|                                                                                                                                 | Consommation au RTG (mA)                                 | 1.15        | 1.2         | 1.2         |
|                                                                                                                                 | Durée moyenne de la pile (h)                             | 141         | 135         | 135         |
|                                                                                                                                 | Bruit d'entrée équivalent au RTG (dB SPL)                | 19          | 18          | 19          |
|                                                                                                                                 | Distorsion harmonique totale à 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%) | 1.0/1.5/1.5 | 1.5/1.5/1.0 | 1.0/1.0/0.5 |
|                                                                                                                                 | Compatibilité électromagnétique                          |             |             |             |
| Immunité EMC par IEC 60118-13, puissance du champ 90/50/35 V/m, omni-directionnelle IRIL bande basse / moyenne / haute (dB SPL) |                                                          | 37/25/47    | 37/25/47    | 37/25/47    |

## Légende

— Moxi Kiss 6 xS  
— Moxi Kiss 6 xP  
— Moxi Kiss 6 xSP

## Conditions de test

Type de pile : 312 ; Source : tension 1,3 V ;

Les mesures ont été obtenues en configuration fermée et avec un coupleur HA-1 (ANSI-3,7-1995) ou un stimulateur d'oreille obstruée (EN 60711, couplage suivant fig. 4 du test standard). L'aide auditive est paramétrée aux réglages test de TrueFit.

Les dômes ne doivent jamais être installés sur des patients aux tympans perforés, aux caisses de tympan exposées ou aux conduits auditifs altérés par chirurgie. Dans le cas de telles affections, nous recommandons l'utilisation d'un embout auriculaire sur mesure.

Le niveau de pression sonore de ces aides auditives dépasse 132 dB SPL.

Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis lorsque des améliorations sont apportées.