



T Insera Pro, T Insera 800, T Insera 700, T Insera 600, T Insera 500 ITE høreapparat produktserier



SoundCore

		T Pro	T 800	T 700	T 600	T 500
SoundNav	Musik	•	•			
	Støj	•	•	•		
	Samtale i en forsamling	•	•	•		
	Samtale i en lille gruppe	•	•	•		
	Samtale i stilhed	•	•	•	•	
	Samtale i støjende miljø	•	•	•	•	
	Stille	•	•	•	•	
	Alle miljøer	7	7	6	3	AutoMic
SpeechPro	SpeechPro	•	SpeechZone 2	SpeechZone		
	Tale lokalisering	•	•	•		
	Tale fokus	•				
	Dynamisk Spatial awareness	•				
Sound Conductor	Talefremhævelse	•	•	•	•	•
	Støjreduktion	•	•	•	•	•
	Adaptiv direktionalitet	Multibånd	Multibånd	Multibånd	Multibånd	•
Spatial Awareness	Spatial Awareness	Dynamisk	Brugertilpasset	•		
	Pinna Effekt	•	•	•	•	•

Lydstabilisering

	AntiShock 2	•	•	•	•	•
	Vindkontrol	•	•	•	•	•
	Feedbackoptimering	•	•	•	•	•
	Naturlig Lydbalance	•	•	•	•	•

Fornyelser

Klient indsigt	Log It All	•	•	•	•	•
	Klient vurderinger	•	•	•	•	•
	Datalogging	•	•	•	•	•
Flex	Flex:upgrade		•	•	•	•


Klient fordele

	DuoLink	•	•	•	•	•
	Telespole og easy-t	•	•	•	•	•
	Binaural telefon	•	•	•	•	


Tilpasning

	Automatisk Tilvænningsmanager	•	•	•	•	•
	MyMusic	Binaural	Binaural	•	•	•
	Frekvenskomprimering	•	•	•	•	•
	Tinnitus-masker	•	•	•	•	•
	IntelliVent	•	•	•	•	•
	Streaming programmer	•	•	•	•	•
	Manuelle programmer	•	•	•	•	•
	NAL-NL2/NL1 og DSLv5	•	•	•	•	•
	Tilpasningskanaler	20	20	16	10	6


Tilpasningsvejledning

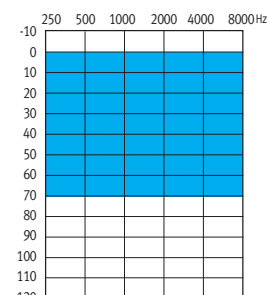


Moderat power

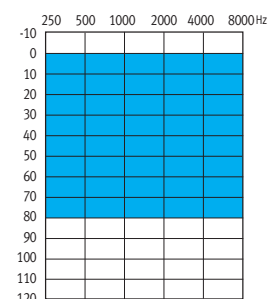

Power

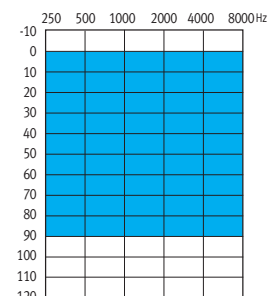

High power

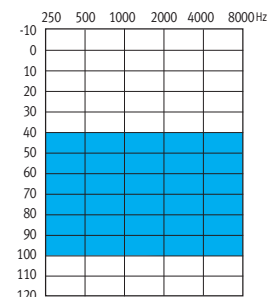


Super power

Batteristørrelse	Mikrofon	Trådløst
13	Direktionel	Ja
312	Direktionel	Ja
312	Omni	Ikke tilgængelig
10A	Direktionel	Ja
10A	Omni	Valgfrit

Nogle features findes kun i de direktionelle ITE produkter.




ANSI 3.22 2014/IEC 60118-o: 2015 2 cc kobling, tekniske data

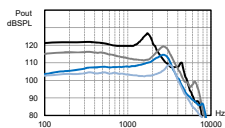


OSPL90

Maksimum (dB SPL)	109	115	119	127
HFA - OSPL90 (dB SPL)	103	111	114	120

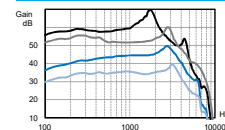


Fuld forstærkning (indgang 50 dB SPL)

Maksimum (dB)	40	50	60	70
HFA - FOG (dB)	35	46	54	62

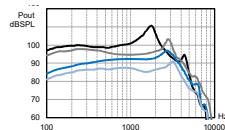


Referencetestindstilling (RTS)

Frekvensområde (Hz)	<100 - 7000	<100 - 6700	<100 - 7000	<100 - 5200
Referencetestforstærkning (dB)	26	34	37	43
Strømforbrug ved RTS (ma) (Trådløst)	1.2	1.2	1.2	1.1
Typisk batterilevetid (t) 10A/312/13 (Trådløst)	80/150/260	80/150/260	80/150/260	--/160/280
Strømforbrug ved RTS (ma) (Ikke trådløs)	0.95	1.0	0.95	N/A
Typisk batterilevetid (t) 10A/312/13 (Ikke trådløs)	110/190/--	100/180/--	110/190/--	N/A
Ækvivalent inputstøj ved RTS (dB SPL)	19	19	19	19
Total harmonisk forvrængning ved 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	1.0/1.5/1.0	1.0/1.0/1.0	1.0/1.0/1.0	1.0/1.0/1.0

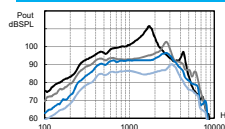

Induktionsspølesensitivitet (31.6 mA/m)

HFA SPLITS/STS-RSETS (dB SPL/dB)	86/0	94/0	96/-1	103/0
----------------------------------	------	------	-------	-------

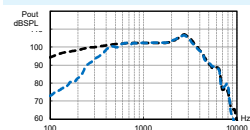

Standard: mikrofon ved 70 dB SPL over for induktionsspole ved mA/m


--- Mikrofon
 --- Induktionsspole

Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-immunitet i henhold til ANSI c63.19-2011 EMC, omni/telespole	M4/T4	M4/T4	M4/T4	M4/T4
--	-------	-------	-------	-------


IEC 60118-o: 1994 OES kobling, tekniske data

Referencetestfrekvens - IEC 60118-o (kHz)	1.6	1.6	1.6	1.6
---	-----	-----	-----	-----

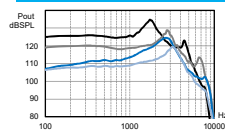


OSPL90

Maksimum (dB SPL)	120	125	129	135
ved RTF (dB SPL)	111	118	120	133

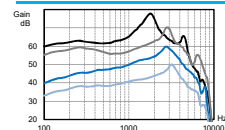


Fuld forstærkning (indgang 50 dB SPL)

Maksimum (dB)	50	60	70	78
ved RTF (dB)	43	53	61	76

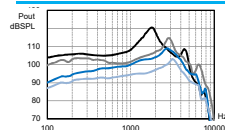

Basisfrekvensrespons

Frekvensområde (DIN 45605) (Hz)	<100 - 8000	<100 - 6800	<100 - 7700	<100 - 5000
Referencetestforstærkning (dB)	36	43	45	58
Strømforbrug ved RTG (ma) (Trådløst)	1.2	1.1	1.2	1.2
Typisk batterilevetid (t) 10A/312/13 (Trådløst)	80/150/260	90/160/280	80/150/260	--/150/260
Strømforbrug ved RTG (ma) (Ikke trådløs)	0.95	0.95	0.95	N/A
Typisk batterilevetid (t) 10A/312/13 (Ikke trådløs)	110/190/--	110/190/--	110/190/--	N/A
Ækvivalent inputstøj ved RTG (dB SPL)	19	19	19	19
Total harmonisk forvrængning ved 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	2.0/2.5/2.0	1.0/2.0/1.0	1.0/1.5/1.0	1.0/1.5/1.0

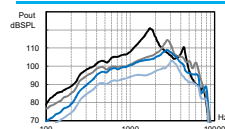

Induktionsspølesensitivitet

ved RTF (graf vist for 31,6 mA/m ved RTG) (dB SPL)	95	103	105	119
Maks. (1 mA/m ved fuld forstærkning) (dB SPL)	80	89	100	108
ved RTF (1 mA/m ved fuld forstærkning) (dB SPL)	73	83	91	106

Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-immunitet iht. IEC 60118-13, 2011 feltstyrke	34/36/34	29/26/35	33/38/36	32/31/32
90/50/35 V/m, omni. IRL lavt/medium/højt bånd (dB SPL)				

Signaturforklaring Testforhold

- Super Power
- High Power
- Power
- Moderat Power

Batteristørrelse: 10A/312/13; Kilde: spænding 1,3 V Ventilation: lukket i kanalenden.
 Slange 5 mm (2 cc/OES kobling) – Alle forstærkningsniveauer.
 Høreapparater indstillet til Unitron TrueFit-testindstillinger. LLE tilføjes ved et niveau omkring 35 dB SPL.
 Lydtrykniveauet for disse høreapparater overstiger 132 dB SPL.
 Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationsdata uden varsel ved introduktion af forbedringer.