



T Moxi Kiss Pro, T Moxi Kiss 800, T Moxi Kiss 700, T Moxi Kiss 600, T Moxi Kiss 500
312 receiver i kanal (RIC) produktserier af høreapparater



Moxi Kiss

SoundCore

		T Pro	T 800	T 700	T 600	T 500
SoundNav	Musik	•	•			
	Støj	•	•	•		
	Samtale i en forsamling	•	•	•		
	Samtale i en lille gruppe	•	•	•		
	Samtale i stilhed	•	•	•	•	
	Samtale i støjende miljø	•	•	•	•	
	Stille	•	•	•	•	
	Alle miljøer	7	7	6	3	AutoMic
SpeechPro	SpeechPro	•	SpeechZone 2	SpeechZone		
	Tale lokalisering	•	•	•		
	Tale fokus	•				
	Dynamisk Rumlig lydopfattelse	•				
Sound Conductor	Talefremhævelse	•	•	•	•	•
	Støjreduktion	•	•	•	•	•
	Adaptiv direktionalitet	Multibånd	Multibånd	Multibånd	Multibånd	•
Den rumlige lydopfattelse	Den rumlige lydopfattelse	Dynamisk	Brugertilpasset	•		
	Pinna Effekt				•	•

Lydstabilisering

	AntiShock 2	•	•	•	•	•
	Vindkontrol	•	•	•	•	•
	Feedbackstyring	•	•	•	•	•
	Naturlig Lydbalance	•	•	•	•	•

Oplev fornyelse

Klient overblik	Log It All	•	•	•	•	•
	Klient ratings	•	•	•	•	•
	Datalogging	•	•	•	•	•
Flex	Flex:trial	•	•	•	•	•
	Flex:upgrade		•	•	•	•

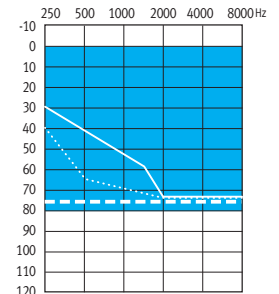
Behagelighed

	DuoLink	•	•	•	•	•
	Easy-t	•	•	•	•	•
	Binaural telefon	•	•	•	•	

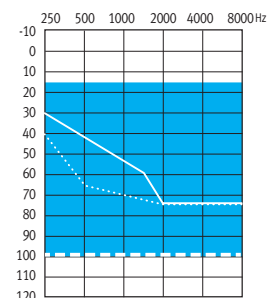
Tilpasning

	Automatisk Tilpasnings-Manager	•	•	•	•	•
	MyMusic	Binaural	Binaural	•	•	•
	Frekvenskomprimering	•	•	•	•	•
	Tinnitus-masker	•	•	•	•	•
	IntelliVent	•	•	•	•	•
	Streaming programmer	•	•	•	•	•
	Manuelle programmer	•	•	•	•	•
	NAL-NL2/NL1 og DSLv5	•	•	•	•	•
	Tilpasningskanaler	20	20	16	10	6

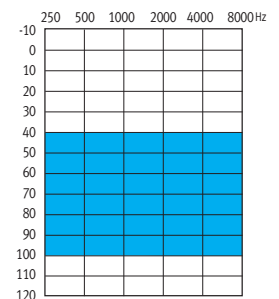
Tilpasningsvejledning



Standard receiver (xS)



Power receiver (xP)

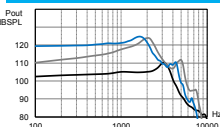


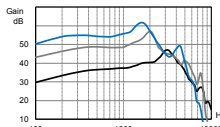
Super power receiver (xSP)

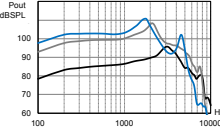
— Åben lydkuppel
 Lukket lydkuppel
 — Power lydkuppel or Sleeve prop

Moxi Kiss har IP 57

ANSI 3.22 2014/IEC 60118-7 2005 2 cc kobling, tekniske data

	Referencetestfrekvens – IEC 60118-7 (kHz)	1.6	1.6	1.6
	OSPL ₉₀			
	Maksimum (dB SPL)	111	124	125
	HFA - OSPL ₉₀ (dB SPL)	106	119	120
	ved RTF (dB SPL)	105	121	125

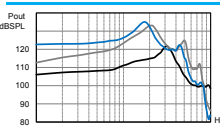
	Fuld forstærkning (indgang 50 dB SPL)			
	Maksimum (dB)	47	57	62
	HFA - FOG (dB)	40	50	56
	ved RTF (dB)	40	52	62

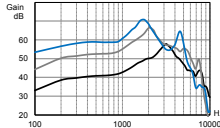
	Referencetestindstilling (RTS)			
	Frekvensområde (Hz)	<100 - 8500	<100 - 7300	<100 - 5500
	Referencetestforstærkning – RTG (dB)	29	42	43
	Aktuelt strømforbrug ved RTS (mA)	1.15	1.25	1.2
	Typisk batterilevetid (t)	160	140	150
	Ækvivalent inputstøj ved RTS (dB SPL)	19	18	19
	Total harmonisk klirforvrængning ved 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	1.0/1.0/1.0	1.5/1.0/0.5	0.5/0.5/0.5

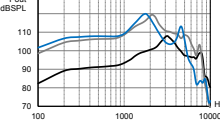
Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-immunitet i henhold til ANSI C63.19-2011 EMC, omni	M4	M4	M4
--	----	----	----

IEC 60118-o OES kobling, tekniske data

	Referencetestfrekvens – IEC 60118-o (kHz)	1.6	1.6	1.6
	OSPL ₉₀			
	Maksimum (dB SPL)	122	133	135
	ved RTF (dB SPL)	114	130	134

	Fuld forstærkning (indgang 50 dB SPL)			
	Maksimum (dB)	58	67	71
	ved RTF (dB)	48	62	70

	Basisfrekvensrespons			
	Frekvensområde (DIN 45605) (Hz)	<100 - 9500	<100 - 6700	<100 - 5100
	Referencetestforstærkning – RTG (dB)	39	55	59
	Strømforbrug ved RTG (mA)	1.15	1.2	1.2
	Typisk batterilevetid (t)	160	150	150
	Ækvivalent inputstøj ved RTG (dB SPL)	19	19	19
	Total harmonisk klirforvrængning ved 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	1.0/1.5/1.5	1.5/1.5/1.0	1.0/1.0/0.5

Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-immunitet iht. IEC 60118-13, 2011 feltstyrke	22/22/22	20/27/30	30/15/18
90/50/35 V/m, omni IRIL lavt/medium/højt bånd (dB SPL)			

Signaturforklaring Testforhold

 xS receiver
 xP receiver
 xSP receiver

Batteristørrelse: 312; Kilde: spænding 1,3 VxP

Målingerne er foretaget med lukket konfiguration ved hjælp af en HA-1 kobler (ANSI-3.7-1995) eller en okkluderet øresimulator (EN 60711, kobleranordning i henhold til fig. 4 i teststandarden).

Høreapparater indstillet til Unitron TrueFit-testindstillinger. LLE tilføjes ved et niveau omkring 35 dB SPL.

Lydkupler bør aldrig benyttes til patienter med perforerede trommehinder, blotlagte mellemører, eller kirurgisk ændrede øregange. I tilfælde af sådanne forhold anbefaler vi at bruge en specialfremstillet øreprop.

Lydtryksniveauet for disse høreapparater overstiger 132 dB SPL.

Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationsdata uden varsel ved introduktion af forbedringer.