



T Moxi Now Pro, T Moxi Now 800, T Moxi Now 700, T Moxi Now 600, T Moxi Now 500
10A RIC (Receiver in canal) hörapparatserie



Moxi Now

SoundCore

		T Pro	T 800	T 700	T 600	T 500
SoundNav	Musik	•	•			
	Buller	•	•	•		
	Konversation i folksamling	•	•	•		
	Konversation i liten grupp	•	•	•		
	Konversation i lugn miljö	•	•	•	•	
	Konversation i buller	•	•	•	•	
	Tyst	•	•	•	•	
SpeechPro	Antal miljöer	7	7	6	3	AutoMic
	SpeechPro	•	SpeechZone 2	SpeechZone		
	Speech Locator	•	•	•		
	Speech Focus	•				
Sound Conductor	Dynamic Spatial Awareness	•				
	Förbättrad taluppfattning	•	•	•	•	•
	Brusreducering	•	•	•	•	•
	Adaptiv riktverkan	Multiband	Multiband	Multiband	Multiband	•
Spatial Awareness	Spatial Awareness	Dynamic	Personalized	•		
	Pinna Effect	•	•	•	•	•

Sound Stabilization

	AntiShock 2	•	•	•	•	•
	Vindkontroll	•	•	•	•	•
	Återkopplingshanterare	•	•	•	•	•
	Natural Sound Balance	•	•	•	•	•

Upplev innovationer

Patientinsikter	Log It All	•	•	•	•	•
	Patientbetyg	•	•	•	•	•
	Datalogging	•	•	•	•	•
Flex	Flex:upgrade		•	•	•	•

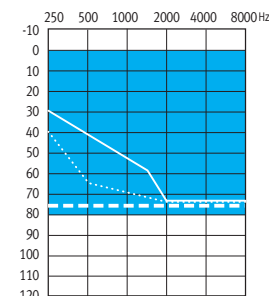
Bekvämlighet

	DuoLink	•	•	•	•	•
	Easy-t	•	•	•	•	•
	Binaural Telefon	•	•	•	•	

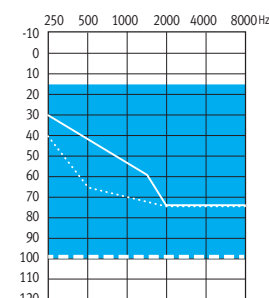
Anpassa

	Automatisk tillvänningshanterare	•	•	•	•	•
	MyMusic	Binaural	Binaural	•	•	•
	Frekvenskompression	•	•	•	•	•
	Tinnitusmasker	•	•	•	•	•
	IntelliVent	•	•	•	•	•
	Streamingprogram	•	•	•	•	•
	Manuella program	•	•	•	•	•
	NAL-NL2/NL1 och DSLv5	•	•	•	•	•
	Justerbara band	20	20	16	10	6

Anpassningsområde



Standard hörteltelefon (xS)

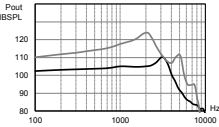
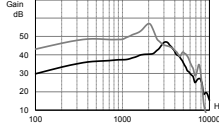
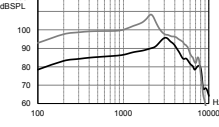


Power hörteltelefon (xP)

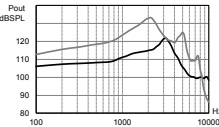
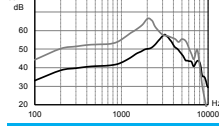
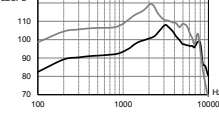
— Öppen dome
 Tätt dome
 - - - Power dome eller g-juten dome

Moxi Now har IP 68

ANSI 3.22 2014/IEC 60118-7 2005 2 cc-koppling, teknisk data

	Referenstestfrekvens – IEC 60118-7 (kHz)	1.6	1.6
	OSPL90		
	Maximal (dB SPL)	111	124
	HFA - OSPL90 (dB SPL)	106	119
	Maxförstärkning (innivå 50 dB SPL)		
	Maximal (dB)	47	57
	HFA - FOG (dB)	40	50
	vid RTF (dB)	40	52
	Referenstestsinställningar (RTS)		
	Frekvensomfång (Hz)	<100 - 8500	<100 - 7300
	Referenstestförstärkning (dB)	29	42
	Strömförbrukning vid RTS (mA)	1.15	1.25
	Typisk batterilivslängd (h)	90	80
	Ekvivalent ingångsbrus vid RTS (dB SPL)	19	18
	Total harmonisk distorsion vid 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	1.0/1.0/1.0	1.5/1.0/0.5
	Elektromagnetisk kompatibilitet		
	EMC-immunitet från ANSI c63.19-2011 EMC, omni	M4	M4

IEC 60118-o OES-koppling, teknisk data

	Referenstestfrekvens - IEC 60118-o (kHz)	1.6	1.6
	OSPL90		
	Maximal (dB SPL)	122	133
	vid RTF (dB SPL)	114	130
	Maxförstärkning (innivå 50 dB SPL)		
	Maximal (dB)	58	67
	vid RTF (dB)	48	62
	Frekvenssvar		
	Frekvensomfång (DIN 45605) (Hz)	<100 - 9500	<100 - 6700
	Referenstestförstärkning (dB)	39	55
	Strömförbrukning vid RTG (mA)	1.15	1.2
	Typisk batterilivslängd (h)	90	80
	Ekvivalent innivå för brus vid RTG (dB SPL)	19	19
	Total harmonisk distorsion vid 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)	1.0/1.5/1.5	1.5/1.5/1.0
	Elektromagnetisk kompatibilitet		
	EMC-immunitet vid IEC 60118-13, 2011 fältstyrka 90/50/35 V/m, omni IRL låg/medelhög/hög band (dB SPL)	26/24/25	14/16/19

Förklaring

— xS hörtelefon
— xP hörtelefon

Testförhållanden

Batteristorlek: 10; Källa: spänning 1.3 V
Mätvärden har erhållits med stängd konfiguration med en HA-1 coupler (ANSI-3.7-1995) eller ockluderad öronsimulator (EN 60711, coupling enligt figur 4 i teststandarden). Hörapparaten inställd på Unitrons TrueFit-testinställningar. LLE appliceras på en ungefärlig nivå om 35 dB SPL. Dömer ska aldrig användas till personer med perforerad trumhinna, exponerad mellanörekavitet eller opererad hörselgång. För sådana fall rekommenderar vi en personligt utformad insats. Ljudtrycksnivån i dessa hörapparater överskrider 132 dB SPL.
Vi reserverar oss rätten att ändra specifikationsdata utan meddelande då förbättringar av produkten införs.